



Technische gebruikershandleiding

Omnipod DASH® Handboek



PDM-model PDM-INT2-D001-MM

Serienummer _____

Startdatum Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem _____

Zorgverlener

Naam _____

Adres _____

Telefoon _____

E-mail _____

Verpleegkundige/Begeleider

Naam _____

Adres _____

Telefoon _____

E-mail _____

Zorgverzekering

Naam _____

Adres _____

Telefoon _____

Polisnummer _____

Apotheek

Naam _____

Adres _____

Telefoon _____

E-mail _____



Australia

 omnipodAUS@insulet.com
 1800954074
 +61-272084352

België / Belgique / Belgien

 omnipod-BE@insulet.com
 0800 17682
 +32 289 62 983

Canada

 omnipodcanada@insulet.ca
 1-855-POD-INFO
(1-855-763-4636)
 +1 513-562-6446

Danmark

 omnipod-DK@insulet.com
 80 25 36 09
 +45 70 28 10 24

Deutschland

 omnipod-DE@insulet.com
 0800 182 1629
 +49 8995 467389

Ellada / Ελλάδα

 omnipod-GR@insulet.com
 00800 128 542
 +30-217-000-9999

France

 omnipod-FR@insulet.com
 0800 918442
 +33 1 85 65 37 47

Hrvatska

 omnipod-HR@insulet.com
 0800 806 259
 +385 91 2358040

Ísland

 sykursyki@fastus.is
 +354 580 3900
 (+354) 580 3900

Israel / إسرائيل / ישראל

 omnipod-IL@insulet.com
 1 809 216 160
 +972 369 00300

Italia

 omnipod-IT@insulet.com
 800 587 270
 +39 0524 587 334

Kingdom of Saudi Arabia / المملكة

ةيدوعسلا ةيدوعسلا
 omnipod-SA@insulet.com
 00966558491266

Kuwait / الكويت

 omnipod@sultan.com.kw

 +965 97297678

 +965 66134426

Lëtzebuerg / Luxemburg / Luxembourg

 omnipod-LU@insulet.com

 800 24368

 +352 27871306

Nederland

 omnipod-NL@insulet.com

 0800 022 9512

 +31 20 798 9337

Norge / Noreg

 omnipod-NO@insulet.com

 800 22 612

 +47 22 20 60 00

Österreich

 omnipod-AT@insulet.com

 0800 281 248

 +43 72 088 3504

Qaṭar / قطر

 Customer@aldanahmedical.com

 + 974 5039 5048

Schweiz / Suisse / Svizzera

 omnipod-CH@insulet.com

 0800 89 76 18

 +41 44 585 9019

Suomi / Finland

 omnipod-FIN@insulet.com

 0800 91 2942

 +358 985 653 300

Sverige

 omnipod-SE@insulet.com

 020 033 6809

 +46 8 601 24 40

Türkiye

 omnipod-TR@insulet.com

 00800 142 030 007

 +90 850 480 53 00

United Arab of Emirates /

دولة الامارات العربية المتحدة

 omnipod-AE@insulet.com

 800 018 7092

United Kingdom

 omnipod-GB@insulet.com

 0800 011 6132

 +44 20 3887 1709

© 2019-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, het Omnipod-logo, DASH, het DASH-logo en Podder zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden. Alle rechten voorbehouden. Het Bluetooth®-woordmerk en Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Insulet Corporation is conform de voorwaarden van de licentie. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van handelsmerken van derden vormt geen onderschrijving en duidt niet op een relatie of andere band. Informatie over octrooien op www.insulet.com/patents.

Inhoud

Inleiding	xi
Over deze technische gebruikershandleiding	xi
Indicaties en contra-indicaties	xii
Algemene waarschuwingen.....	xiii
Samenwerken met uw zorgverlener	xiv
Veiligheidskenmerken	xv

Aan de slag

1 Uw Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem.....	1
Welkom	1
De Pod en de PDM	2
Door schermen navigeren en gegevens invoeren	4
Basisinstructies voor het touchscreen	4
Getallen en tekst invoeren	5
Items selecteren, toevoegen en verwijderen	7
Navigatiepictogrammen en verkorte navigatie	7
De statusbalk.....	9
Het vergrendelscherm en PIN-scherm van de PDM.....	10
Het Home-scherm van de PDM	11
Dashboard (tabblad)	12
Het tabblad Basaal / Tijdelijke basaalsnelheid	13
Pod-info (tabblad)	14
Het gedeelte met de laatste BG	15
Het gedeelte met de laatste bolus	16
De bolusknop	17
Het menu op de beginpagina	17
PDM-berichten voor u	19
Alarmen	19
Kennisgevingen	19
Bevestigingsberichten	20
2 PDM voor de eerste keer instellen	21
Voorbereiden voor uw training.....	21
Algemene PDM-instellingen.....	23
De PDM inschakelen en aan uw persoonlijke wensen aanpassen	23
Een PIN invoeren	25

De tijdzone en tijd instellen	25
De datum instellen	26
Instellingen voor de basale insuline	27
Maximale basaalsnelheid	27
Een basaalprogramma maken	27
Configuratie van tijdelijke basaalsnelheid	30
Bloedglucose-instellingen	31
Boven- en ondergrens voor BG-doelbereik	31
Instellingen voor de boluscalculator	32
De boluscalculator in- of uitschakelen	32
Streefwaarde voor BG en waarden voor Corrigeren boven	32
Minimale BG voor berekeningen	33
Insuline-KH-verhouding	34
Correctiefactor	34
Tegenovergestelde correctie	35
Duur van de insulineactie	35
Andere bolusinstellingen	36
Maximale bolus	36
Instelling verlengde bolus	36
Instellen PDM gereed	36

Technische gebruikershandleiding

3 Uw Pod vervangen37

Beginnen met het vervangen van de Pod	37
Een Pod voor de eerste keer activeren	38
Een actieve Pod deactiveren	38
Geen actieve Pod	39
Vorbereidende stappen voor het vervangen van een Pod	40
De spuit met insuline vullen	41
De Pod vullen, koppelen en aanbrengen	42
De Pod met insuline vullen	42
De PDM en de Pod koppelen	43
De plaats voor de Pod gereedmaken	44
De naalddop van de Pod verwijderen	47
De Pod aanbrengen	48
Insulinetoediening starten	49
De infusieplaats controleren	50
Voorkomen dat de infusieplaats ontstoken raakt	51
Meer informatie over het gebruik van de Pod	52

4 Bloedglucosewaarden invoeren.....53

Over het testen van uw bloedglucose	53
---	----

Uw bloedglucosewaarde invoeren	53
Labelen van uw bloedglucosewaarde	55
Hoe bloedglucosewaarden worden weergegeven	56
5 Een bolus insuline toedienen.....	59
Bolusberekening met de boluscalculator	59
Uw maaltijdinformatie invoeren	60
Uw bloedglucosewaarde invoeren	61
Een onmiddellijke of verlengde bolus toedienen	62
Handmatig berekende bolus	65
De voortgang van een bolus volgen	67
Toediening bolus wijzigen	69
6 Toediening basale insuline wijzigen.....	71
Tijdelijke basaalsnelheden gebruiken	71
Een tijdelijke basaalsnelheid activeren.....	72
Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren.....	74
Een tijdelijke basaalsnelheid annuleren	74
Overschakelen op een ander basaalprogramma	75
Toediening van insuline onderbreken en hervatten	76
7 Programma's en voorinstellingen beheren.....	79
Basaalprogramma's	79
Een nieuw basaalprogramma maken.....	79
Alle basaalprogramma's controleren	80
Een basaalprogramma bewerken of de naam ervan wijzigen	81
Een basaalprogramma verwijderen	83
Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden	83
Een nieuwe vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid maken	83
Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid bewerken of de naam ervan wijzigen.....	84
Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid verwijderen.....	85
Vooringestelde bolussen	85
Een nieuwe vooringestelde bolus maken	86
Een vooringestelde bolus bewerken of de ervan naam wijzigen	87
Een vooringestelde bolus verwijderen	87
8 Uw PDM-gegevens doorbladeren.....	89
De schermen Mededelingen en Alarmen	89
Overzicht van de schermen Insuline en BG-historie	91
Datum kiezen	92
Samenvattingsgedeelte	93
Gedeelte met de gegevens.....	95
Gegevens van de bloedglucose	96
Bolusgegevens	96

KH-gegevens	98
Gegevens van de basaalsnelheid	98
Podgegevens	99
Gegevens over het onderbreken en hervatten van de insulinetoediening	99
Gegevens over tijdwijziging	100
Gegevens over datumwijziging	100
9 Instellingen aanpassen	101
Instellingen voor het PDM-apparaat	101
Netwerkverbinding	101
Schermweergave	102
Vergrendelscherm	102
Datum en tijd, en taal	103
Diagnostiek	105
De instelling Pod-plaatsen	107
Instellingen voor herinneringen	107
Uiterste gebruiksdatum Pod	107
Reservoir bijna leeg	108
Pod automatisch uitschakelen	108
Herinneringen voor BG controleren na bolus	109
Herinneringen voor gemiste bolus	109
Bevestigingsherinneringen	111
Programmaherinneringen	111
Aangepaste herinneringen	111
Instellingen bloedglucose - Bereik BG-doel	113
Instellingen basaalprogramma en tijdelijke basaalsnelheden	114
Maximale basaalsnelheid	114
Tijdelijke basaalsnelheid	114
Instellingen bolustoediening	115
Maximale bolus	115
Verlengde bolus	115
Instellingen voor de boluscalculator	115

Referentie

10 Alarmen, kennisgevingen en communicatiefouten ..	119
Overzicht	119
Reageren op alarmen	120
Reageren op kennisgevingen	120
Prioriteit en voorspelbaarheid van alarmen en kennisgevingen	122
Geluiden en trillingen	122
Lijst met gevarenalarmen	124
Lijst met waarschuwingsalarmen	126

Lijst met kennisgevingen	128
Lijst met informatiesignalen	129
Communicatiefouten	130
Fout bij annuleren van bolus	131
Fout bij verzenden van insuline-instructies naar de Pod	131
Fout bij activeren van een Pod	132
Fout bij deactiveren van een Pod	132
Een niet-opgelost alarm uitschakelen	133
Pod-alarm	133
PDM-alarm	134
11 Zorgdragen voor uw PDM en Pod	135
Zorgdragen voor uw Pod en insuline	135
Pod en insuline bewaren	135
Pods en de omgeving	136
Uw Pod schoonmaken	136
Zorgdragen voor de PDM	137
PDM bewaren	137
PDM en de omgeving	137
Uw PDM schoonmaken	139
Als u de PDM laat vallen	139
Gebruik van de PDM-batterij	140
Veilig gebruik van de PDM-batterij	140
Meldingen van de PDM-batterij die u mogelijk ziet	142
De PDM-batterij opladen	142
De PDM-batterij plaatsen:	143
12 Uitleg werking PDM en Pod	145
Wisselwerking tussen PDM en Pod	145
Pod-acties die door de PDM worden aangestuurd	145
Wat de Pod kan doen tussen twee PDM-instructies in	148
Auto-uit	148
Toediening basale insuline	149
Basaalprogramma's	149
Tijdelijke basaalsnelheden	151
Methoden om tijdelijk de insulinetoediening te stoppen	154
Onmiddellijke en verlengde bolussen	155
Over handmatig berekende bolussen	156
De boluscalculator	156
Bolussen door boluscalculator	156
Wanneer de boluscalculator niet werkt	157
Gebruikte factoren bij berekeningen door de boluscalculator	158
Insuline 'on board' (IOB)	160
Vergelijkingen boluscalculator	162
Regels boluscalculator	164

Overzicht van het scherm BEREKENINGEN van de boluscalculator . . .	165
Voorbeelden boluscalculator	167
Berekeningen voor overzichten van de historie.	172
Overzichten bloedglucose	172
Overzichten insulinetoediening	173
13 Leven met diabetes	175
Dagelijkse activiteiten.	175
Infusieplaats controles	175
Controleer uw bloedglucose regelmatig	176
Voorbereiding op noodgevallen	177
Reizen en vakanties	178
Houd benodigdheden bij de hand	178
Plannen voor andere tijdzones.	179
Luchthavens en vliegen	179
Te lage en te hoge bloedglucose en DKA voorkomen	180
Algemene voorzorgsmaatregelen	180
Hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel).	181
Hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel)	184
Diabetische ketoacidose (DKA)	188
Omgaan met bijzondere situaties	189
Ziekte dagen	189
Lichaamsbeweging, sporten of zwaar werk	190
Röntgenonderzoek, MRI-scans en CT-scans	190
Chirurgie of ziekenhuisopname	190
Bijlage	191
Probleemoplossing opstarten PDM	191
Overzicht van de instellingen en opties	192
Specificaties van de Pod	194
Specificaties van de PDM	195
Bescherming tegen te veel insuline of te weinig insuline	196
Labelsymbolen van het Omnipod DASH®-systeem.	197
Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen.	199
Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).	199
Klachten over Apparaten	199
Gegevens wettelijke vertegenwoordiger in de EU	200
Kennisgeving over storing door het Omnipod DASH®-systeem.	200
Elektromagnetische compatibiliteit	201
Garantie voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem	
Persoonlijke Diabetesmanager and Pods (alle landen behalve	
Canada en de Verenigde Staten).	203
Verklarende woordenlijst	207
Index.	213

Inleiding

Over deze technische gebruikershandleiding

Voorzichtig: Deze *technische gebruikershandleiding* is uitsluitend bedoeld voor gebruik met Personal Diabetes Manager (PDM) model PDM-INT2-D001-MM. Op de achterkant van uw PDM kunt u zien welke versie u hebt. Als u op de achterkant van de PDM 'PDM-INT2-D001-MM' ziet staan, is dit de juiste *technische gebruikershandleiding*. Bel de klantenservice als u het modelnummer niet kunt vinden.

Opmerking: De schermafbeeldingen in deze *technische gebruikershandleiding* zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en zijn geen suggesties voor gebruikersinstellingen. Overleg altijd met uw zorgverlener om de juiste instellingen voor u te bepalen.

Gezondheidszorg en behandeling zijn complexe onderwerpen waarbij de diensten van gekwalificeerde zorgverleners essentieel zijn. Deze *technische gebruikershandleiding* is uitsluitend bestemd ter informatie en is niet bedoeld als medisch of zorgadvies of aanbevelingen voor diagnose, behandeling of andere persoonlijke behoeften. Deze *technische gebruikershandleiding* is geen vervanging voor medisch of zorgadvies en aanbevelingen en/of diensten van een gekwalificeerd zorgverlener. U dient deze *technische gebruikershandleiding* op geen enkele manier te gebruiken als informatiebron met betrekking tot uw persoonlijke gezondheidszorg, daarbij behorende beslissingen en behandeling. Al dergelijke besluiten en behandelingen moeten worden besproken met een gekwalificeerde zorgverlener die uw persoonlijke behoeften kent.

Deze *technische gebruikershandleiding* wordt regelmatig bijgewerkt. Ga naar www.omnipod.com om te zien wat de meest recente versie is en voor andere nuttige informatie. Zie omnipod.com om deze *technische gebruikershandleiding* in een andere taal te lezen.

Term	Betekenis
Waarschuwing	Wijst u op het risico op letsel, overlijden of andere ernstige ongewenste reacties als gevolg van het normale of verkeerde gebruik van het apparaat.
Voorzichtig	Wijst u erop dat er een probleem met het apparaat kan optreden als gevolg van het normale of verkeerde gebruik. Dergelijke problemen zijn onder andere slecht functioneren of uitvallen van het apparaat, schade aan het apparaat of schade aan andere voorwerpen.
Opmerking	Geeft nuttige informatie.
Tip	Geeft een suggestie voor een geslaagd gebruik van het apparaat.

Indicaties en contra-indicaties

Indicaties voor gebruik

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is bedoeld voor subcutane (onderhuidse) toediening van insuline met een vaste of variabele snelheid voor de behandeling van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben.

Het beoogde klinische voordeel van het Omnipod DASH-systeem is verbeterde glycemiecontrole bij mensen met diabetes die insuline nodig hebben.

Contra-indicaties

Behandeling met een insulinepomp wordt NIET aanbevolen voor mensen die:

- niet in staat zijn om hun bloedglucosespiegel te controleren zoals aanbevolen door hun zorgverlener;
- niet in contact kunnen blijven met hun zorgverlener;
- het Omnipod DASH®-systeem niet volgens de instructies kunnen gebruiken.

Algemene waarschuwingen

Waarschuwing:

Snelwerkende U-100-insuline: het Omnipod DASH®-systeem is ontwikkeld voor de toediening van snelwerkende U-100-insuline. De volgende snelwerkende U-100-insulineanalogen zijn getest en veilig bevonden voor gebruik in de Pod: NovoLog®/NovoRapid® (insuline aspart), Fiasp® (insuline aspart), Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® (insuline aspart), Kirsty® (insuline aspart), Humalog® (insuline lispro), Lyumjev® (insuline lispro-aabc), Admelog®/Insulin lispro Sanofi® (insuline lispro) en Apidra® (insuline glulisine). NovoLog/NovoRapid, Fiasp, Trurapi/Insulin aspart Sanofi, Kirsty, Humalog, Lyumjev en Admelog/Insulin lispro Sanofi zijn compatibel met het Omnipod DASH®-systeem voor gebruik gedurende maximaal 72 uur (3 dagen). Apidra is compatibel met het Omnipod DASH®-systeem voor gebruik gedurende maximaal 48 uur (2 dagen). Lees het etiket van de insuline en raadpleeg uw zorgverlener voordat u andere insuline gaat gebruiken bij het Omnipod DASH®-systeem. Raadpleeg de etikettering van de insuline en volg de instructies van uw zorgverlener over hoe vaak u de Pod moet vervangen. Fiasp en Lyumjev hebben een sneller initieel absorptievermogen dan andere snelwerkende insulines U-100-insulines. Overleg altijd met uw zorgverlener en lees het insuline-etiket voor gebruik.

Lees alle instructies in deze technische gebruikershandleiding voordat u het Omnipod DASH®-systeem gaat gebruiken. Houd uw bloedglucosespiegel in de gaten met hulp van uw zorgverlener. Niet-ontdekte hyper- of hypoglykemie kan optreden als u uw bloedglucosespiegel niet goed in de gaten houdt.

Niet aanbevolen voor personen met gehoorverlies. Controleer altijd of u de alarmen en kennisgevingen van de Pod/PDM kunt horen.

Als u het Omnipod DASH®-systeem niet volgens de instructies kunt gebruiken, kan dit een risico opleveren voor uw gezondheid en veiligheid. Overleg met uw zorgverlener als u vragen hebt of zich zorgen maakt over het juiste gebruik van het Omnipod DASH®-systeem.

Na gebruik worden delen van het apparaat als biologisch gevaarlijk beschouwd en kunnen deze mogelijk infectieziekten overbrengen.

Probeer het Omnipod DASH®-systeem, of de onderdelen ervan, niet aan te passen, te modificeren of uit elkaar te halen. Dit kan uw gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Waarschuwing:

Neem contact op met uw zorgverlener als u symptomen hebt die niet passen bij de resultaten van uw bloedglucosetests en u alle instructies in deze technische gebruikershandleiding hebt opgevolgd..

Het Omnipod DASH®-systeem dient NIET te worden gebruikt bij een lage atmosferische druk (lager dan 700 hPA). Een dergelijke lage atmosferische druk is aanwezig op grote hoogte, bijvoorbeeld als u gaat bergbeklimmen of op een hoogte van meer dan 3000 meter woont.

Het Omnipod DASH®-systeem dient NIET te worden gebruikt in zuurstofrijke omgevingen (meer dan 25% zuurstof) of bij een hoge atmosferische druk (hoger dan 1060 hPA). Beide omstandigheden treden op in een hyperbarische kamer. Een hyperbarische kamer, ook hogedrukkamer genoemd, wordt soms gebruikt om de genezing van diabetische ulcera te stimuleren of om koolmonoxidevergiftiging, bepaalde bot- en weefselinfecties en decompressieziekte te behandelen.

Samenwerken met uw zorgverlener

Voor insulinepomptherapie is veel inzet van de verzorger nodig, vooral bij kinderen. Werk samen met uw zorgverlener om richtlijnen voor de behandeling van diabetes en instellingen vast te stellen die het best aansluiten op uw behoeften of die van uw kind. Dit kan onder andere zijn:

De insuline-tot-koolhydraat (I/KH)-verhouding: het aantal gram koolhydraten dat wordt opgevangen door één eenheid insuline. Als uw insuline-tot-koolhydraatverhouding bijvoorbeeld 1:15 is, moet u één eenheid insuline toedienen voor elke 15 gram koolhydraten die u eet.

De correctie- (of gevoeligheids)-factor: hoeveel één eenheid insuline uw bloedglucosespiegel verlaagt. Als uw correctiefactor bijvoorbeeld 2,8 is, verlaagt één eenheid insuline uw bloedglucosespiegel met 2,8 mmol/L.

De doelbloedglucose (streefwaarde voor BG): de bloedglucosespiegel die u wilt bereiken. U kunt er bijvoorbeeld naar streven om uw bloedglucosespiegel op 5,6 mmol/L te houden.

De duur van de insulineactie: de duur dat insuline actief en beschikbaar blijft in het lichaam na een correctie- of maaltijdbolus.

Uw zorgverlener is een belangrijke bron van hulp. U kunt bij hem of haar terecht voor essentiële informatie over uw Omnipod DASH®-systeem, met name in de eerste weken en maanden. Aarzel niet om uw vragen over

uw diabetesbehandeling met uw zorgverlener te bespreken nadat u het Omnipod DASH®-systeem bent gaan gebruiken.

Voor technische vragen over het instellen of gebruik van uw Omnipod DASH®-systeem, of om producten en accessoires voor het Omnipod DASH®-systeem te bestellen, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de klantenservice. U vindt de contactgegevens voor de klantenservice op de eerste pagina van deze *technische gebruikershandleiding*.

Uw zorgverlener geeft u alle benodigde hulpmiddelen en training om het Omnipod DASH®-systeem met succes te gebruiken. Als u actief betrokken bent bij uw eigen diabetesbehandeling, kunt u de controle, vrijheid en flexibiliteit die het Omnipod DASH®-systeem biedt, volledig benutten.

Actief betrokken zijn betekent dat u uw bloedglucosespiegel vaak controleert, leert hoe u uw Omnipod DASH®-systeem moet gebruiken, oefent met de juiste technieken en regelmatig een afspraak hebt met uw zorgverlener.

Veiligheidskenmerken

Het Omnipod DASH®-systeem heeft onder andere de volgende veiligheidsfuncties:

Automatisch voorvullen, veiligheidscontroles en inbrengen worden automatisch uitgevoerd

Wanneer u een nieuwe Pod activeert, wordt deze automatisch voorgevuld en vinden er automatisch veiligheidscontroles van de Pod door het Omnipod DASH®-systeem plaats. Vervolgens wordt de canule (een klein, dun buisje) ingebracht en voorgevuld. Deze veiligheidscontroles duren slechts enkele seconden.

Ook voert het Omnipod DASH®-systeem veiligheidscontroles van de Personal Diabetes Manager (PDM) uit zodra de PDM uit de slaapstand komt. Als er problemen worden gedetecteerd in de PDM of de Pod of met de communicatie tussen beide, waarschuwt het systeem u met trillingen of pieptonen en schermberichten.

Alarmen en kennisgevingen

Voor uw veiligheid geeft het Omnipod DASH®-systeem verschillende alarmen en kennisgevingen om u te laten weten dat u iets moet doen of om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Zie "Alarmen, kennisgevingen en communicatiefouten" op pagina 119 voor een beschrijving van de alarmen en kennisgevingen van de PDM.

Opmerking: Er verschijnen korte alarm- en kennisgevingsberichten op het vergrendelde scherm. U moet het scherm ontgrendelen en uw persoonlijke identificatienummer (PIN) invoeren om de volledige alarmberichten te kunnen bekijken.

Opmerking: Haal uw PDM regelmatig uit de slaapstand om te controleren of er geen kennisgevingen of alarmen zijn waarop u moet reageren.

Waarschuwing: Probeer NIET om het Omnipod DASH®-systeem te gebruiken voordat u hiervoor training hebt gekregen. Onvoldoende training kan uw gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

HOOFDSTUK 1

Uw Omnipod DASH®- insulinetoedieningssysteem

Welkom

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem is een innovatief systeem voor het continu toedienen van insuline en biedt alle voordelen van de CSII-behandeling (Continue subcutane insuline-infusie).

Het Omnipod DASH®-systeem heeft onder andere de volgende veiligheidsfuncties:

Geen slangetjes: Er hoeft geen slangetje te worden aangesloten tussen de Pod en de Personal Diabetes Manager (PDM, Persoonlijke Diabetesmanager). U kunt de Pod onder uw kleding dragen en de PDM ergens anders. U kunt met de Pod zwemmen en de PDM op de kant laten liggen. De Pod is gedurende 60 minuten (IP28) waterdicht tot een diepte van 7,6 meter.

Boluscalculator: Als uw bloedglucose hoog is of u wilt gaan eten, kan op basis van uw persoonlijke instellingen door de boluscalculator van de PDM een bolusdosering worden berekend.

Glucosewaarden: U kunt uw bloedglucosewaarden van elke bloedglucosemeter handmatig in de PDM invoeren. U kunt ook glucosewaarden van een CGM voor de insulinedosering invoeren.

Gegevens bijhouden: Op de PDM worden de gegevens van maximaal 90 dagen weergegeven, waaronder basaalsnelheden, bolusdoses, koolhydraten, alarmen en bloedglucosevermeldingen.

In het gedeelte *Aan de slag* van dit handboek worden de basiswerking en de basisinstellingen van het Omnipod DASH®-systeem uitgelegd. In het gedeelte technische gebruikershandleiding staan de stapsgewijze instructies voor het gebruik van het Omnipod DASH®-systeem. In het gedeelte *Referentie* wordt de werking van het Omnipod DASH®-systeem uitgelegd.

Termen en conventies die in deze technische gebruikershandleiding worden gebruikt

Scherf	Het gedeelte van de PDM waar menu's, instructies en berichten worden weergegeven.
Menu	Lijst met de schermopties.
Pictogram	Een afbeelding op het scherm waarmee een menuoptie of een stukje informatie wordt weergegeven.

1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

Knop	Een fysieke knop op de PDM, zoals de knop Aan/Uit. Tevens ook de gedeelten van het scherm waarop u kunt tikken om een handeling uit te voeren.
Veld	Het gedeelte van het scherm waarin u gegevens kunt invoeren.

De Pod en de PDM


Het Omnipod DASH®-systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de Pod, waarmee insuline wordt ingebracht in uw lichaam, en de Personal Diabetes Manager (PDM, Persoonlijke Diabetesmanager), waarmee u de Pod kunt bedienen.

De Pod

De Pod is een licht apparaat dat u vult met insuline en rechtstreeks op uw lichaam draagt. De Pod krijgt de instructies voor het toedienen van insuline van de PDM. De Pod brengt vervolgens de insuline via een klein, flexibel slangetje, de canule genaamd, in uw lichaam.

De Pod wordt met een kleefstrip, vergelijkbaar met zelfklevend verband, op uw lichaam bevestigd.

De Pod die bij het Omnipod DASH®-systeem wordt gebruikt, heeft een naalddop.

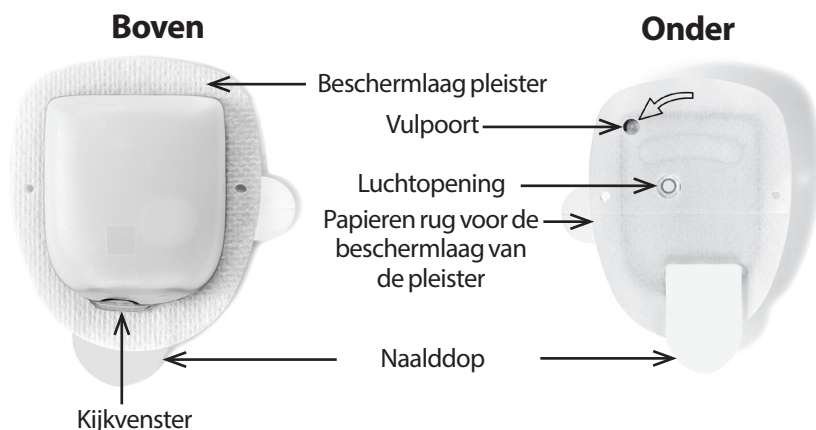

De Personal Diabetes Manager (PDM, Persoonlijke Diabetesmanager)

De PDM is een handheld-apparaat dat de werking van de Pod met behulp van draadloze technologie bestuurt en bewaakt.



Door schermen navigeren en gegevens invoeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het touchscreen gebruikt, hoe u getallen of tekst in de PDM invoert en hoe in deze *technische gebruikershandleiding* wordt beschreven op welke manier u tussen PDM-schermen navigeert.

Basisinstructies voor het touchscreen

Door de PDM worden berichten en opties op het touchscreen weergegeven. U communiceert met de PDM door met uw vinger op het touchscreen te tikken of erover te vegen.

Tikken en vegen

De basisinstructies voor interactie met het touchscreen worden hier uitgelegd.

	Tikken	Het scherm kort aanraken met uw vinger.
	Vegen	Het scherm ergens aanraken en vervolgens met uw vinger op het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts vegen. Opmerking: Scrollen en vegen zijn verwante acties. Wanneer u omhoog veegt, gaat het scherm omhoog en worden de items weergegeven die op dat moment niet op het scherm konden worden weergegeven.

Opmerking: Een schermbeschermmer maakt het scherm waarschijnlijk minder gevoelig.

Time-out en helderheid van het scherm

Als het PDM-scherm enige tijd niet is gebruikt, wordt het zwart, timing-out genoemd. Zie "Schermweergave" op pagina 102 voor het aanpassen van de instellingen voor de time-out en de helderheid van het scherm. Het PDM-scherm wordt na 6 tot 10 seconden gedimd en daarna zwart. Als het scherm wordt gedimd, raakt u het kort aan als u niet wilt dat het wordt uitgeschakeld.

Getallen en tekst invoeren

In velden tikken om gegevens in te voeren

In velden kunt u waarden opgeven die door de PDM moeten worden gebruikt. Als u op een bewerkbaar veld tikt (dat is omkaderd of is onderstreept), wordt een toetsenblok, numeriek toetsenblok of bladerwielte weergegeven. Tik op de letters of cijfers of gebruik het bladerwielte om gegevens in velden in te voeren.


 g ← Bewerkbare velden zijn onderstreept of omkaderd.

 ← Niet-bewerkbare velden zijn niet onderstreept of niet omkaderd.

Als u op blauwe en onderstreepte tekst tikt, wordt er een scherm geopend waarop u uitleg kunt bekijken of gegevens kunt invoeren.

Het toetsenblok gebruiken

Als u op een bewerkbaar veld tikt, wordt er een toetsenblok weergegeven. U opent een ander toetsenblok door te tikken op ?123, ABC of =< rechtsonder op een toetsenblok.

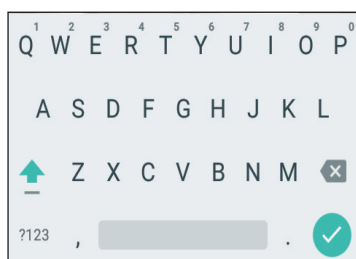

Tik op een teken om dat toe te voegen aan het tekstveld.

Raak een letter op de bovenste rij kort aan om andere opties weer te geven, zoals een getal of een letter met een accent, bijvoorbeeld een é.



Tik op de pijl omhoog (↑) om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen. Tik twee keer snel achter elkaar op de pijl omhoog als u alleen hoofdletters wilt typen. Als u weer op deze pijl tikt, wordt de modus voor alleen hoofdletters gesloten.

Tik op het spatiebalkpictogram () om een spatie in te voeren.

Tik op het backspace-pictogram (x) om het laatst ingevoerde teken uit het invoerveld te verwijderen.

Tik op het groene vinkje (✓) om het toetsenblok te sluiten wanneer u klaar bent met het invoeren van uw tekst.

Opmerking: Op de PDM wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Voor de PDM is er dus geen onderscheid tussen "mijn Weekend" en "mijn weekend".

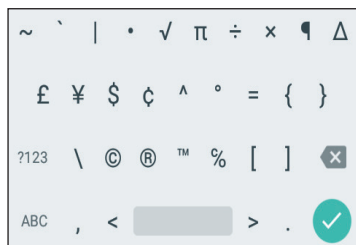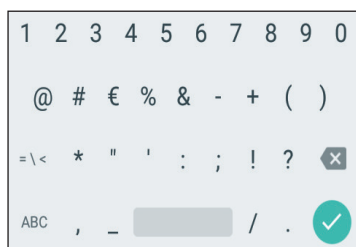

1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

Het numerieke toetsenblok gebruiken

1	2	3	-
4	5	6	,
7	8	9	✕
.	0	—	✓

Tik op een getal om dat toe te voegen aan het tekstveld.

Tik op de komma (,) om een komma toe te voegen.

Tik op het backspace-pictogram (✕) om het laatst ingevoerde teken uit het invoerveld te verwijderen. De decimale punt (.), het verbindingstreepje (-) en het onderstrepingsteken (—) worden niet gebruikt.

Tik op het groene vinkje (✓) om het ingevoerde getal te accepteren. U kunt het ingevoerde getal ook accepteren door buiten het numerieke toetsenblok te tikken.

Het bladerwielte gebruiken


0,85 E/u
0,80 E/u
0,75 E/u
0,70 E/u
0,65 E/u

Plaats uw vinger op het bladerwielte. Veeg met uw vinger omhoog om een kleiner getal te selecteren en omlaag om een groter getal te selecteren. Hoe sneller u dat doet, des te sneller draait het bladerwielte.

Wanneer het gewenste getal in het midden van het bladerwielte wordt weergegeven, selecteert u dat getal door erop te tikken of door buiten het bladerwielte te tikken.

Een schuifknop gebruiken

Gebruik schuifknoppen om een waarde op een schaal te selecteren. Plaats uw vinger op het open cirkeltje en schuif dat cirkeltje tot het gewenste getal wordt weergegeven. Afhankelijk van de afbeelding op het scherm gaat u met uw vinger omhoog of omlaag of in een cirkel om de schuifknop te verplaatsen. Ga voor een groter getal met uw vinger omhoog of met de wijzers van de klok mee en voor een kleiner getal met uw vinger omlaag of tegen de wijzers van de klok in. Haal uw vinger van het scherm wanneer het gewenste getal wordt weergegeven.

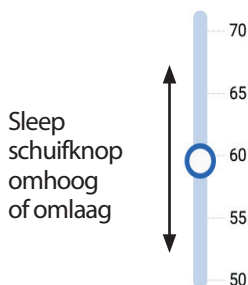

Sleep schuifknop over de cirkel




Items selecteren, toevoegen en verwijderen

Wisselknoppen

-  Tik op een wisselknop om een van beide mogelijkheden te selecteren.
-  Met een wisselknop kunt u tussen twee opties kiezen of een functie in- of uitschakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld of de optie is geselecteerd, staat de wisselknop rechts en is die blauw. Staat de wisselknop links en is die grijs, dan is de functie uitgeschakeld of de optie niet geselecteerd.

Selectievakjes, keuzerondjes en vervolgkeuzelijsten

- ☒ Een selectievakje is een klein vierkantje. Door op een selectievakje te tikken, wordt die in- of uitgeschakeld. U kunt meerdere selectievakjes in een lijst in- en uitschakelen.
-  Een keuzerondje is een klein cirkeltje. Door op een keuzerondje te tikken, wordt dat geselecteerd. Een geselecteerd keuzerondje is gevuld. U kunt per keer maar één keuzerondje selecteren. U deselecteert een keuzerondje door op het keuzerondje naast een andere optie te tikken.

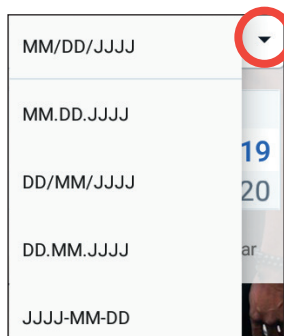

Een vervolgkeuzelijst is te herkennen aan een pijl-omlaag of een pijl-omhoog naast een item. De geselecteerde instelling staat links van de vervolgkeuzepijl. U selecteert een andere optie door op de pijl-omlaag te tikken om de vervolgkeuzelijst met opties weer te geven. U vervangt de geselecteerde optie bovenaan in de lijst door in de vervolgkeuzelijst op een andere optie te tikken.

Tik op de pijl-omhoog om de lijst met opties te verbergen.

-  Een plusteken in een cirkel wil zeggen dat u een item aan een lijst kunt toevoegen. Tik op dat plusteken om het item aan de lijst toe te voegen.
-  Een rode x in een cirkel wil zeggen dat u een item uit een lijst kunt verwijderen. U verwijdert het item door op de rode x te tikken.

Navigatiepictogrammen en verkorte navigatie

Onder het scherm van de PDM zitten knoppen waarmee kan worden genavigeerd. Ook kan er met enkele scherm-pictogrammen worden genavigeerd.

Pijl-terug en knop-terug

Op veel schermen staat er linksboven een pijlpictogram "terug". Wanneer u op die pijl tikt, gaat u naar het vorige scherm.



U kunt ook naar het vorige scherm teruggaan door te tikken op de linkerknop onder het PDM-scherf.



1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

Opmerking: De middelste knop en de rechterknop onder het PDM-scherm hebben geen functie.

Het Optiepictogram



Het Optiepictogram (☰) staat rechts van bepaalde lijsten. Als u op dit pictogram tikt, verschijnt er een lijst met opties die relevant zijn voor het item in die rij.

Navigatie in het kort

In de *technische gebruikershandleiding* wordt het symbool ">" gebruikt om het navigeren van het ene naar het andere scherm aan te geven. Zie als voorbeeld de volgende notatie:

- Menupictogram (☰) > Pod > POD VERVANGEN

Dit betekent:

1. Tik op het Menupictogram (☰) linksboven op het Home-scherm.
2. Tik op Pod om het Pod-scherm te openen.
3. Tik op POD VERVANGEN.

- Menupictogram (☰) > Historie: Insuline & BG-historie

Dit betekent:

1. Tik op het Menupictogram (☰) linksboven op het Home-scherm.
2. Vouw de historiegegevens uit als die zijn samengevouwen, door ergens in de rij met het woord "Historie" te tikken.

Wanneer die gegevens zijn uitgevouwen, verschijnen er selecties voor het historiescherm Mededelingen & Alarmen en voor het scherm Insuline & BG-historie.

3. Tik op Insuline & BG-historie.

- Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Vervaldatum Pod


Dit betekent:

1. Tik op het Instellingenpictogram (⚙️) rechtsboven op het Home-scherm.
2. Tik op Herinneringen.
3. Tik op Vervaldatum Pod.

De statusbalk

In de meeste schermen staat een statusbalk waarop het volgende wordt weergegeven:

- De Pod-status, inclusief hoeveel insuline er nog in een actieve Pod zit
- Al dan niet sprake van een tijdelijke basaalsnelheid
- Of de PDM al dan niet trilt bij bepaalde kennisgevingen
- Het Bluetooth®-pictogram
- De status van de batterij in de PDM
- De huidige tijd

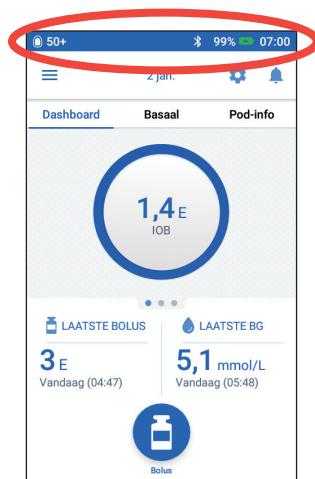

Betekenis van de pictogrammen op de statusbalk:



Meer dan 50 eenheden in de Pod



Vliegtuigmodus aan



Tussen 50 en 26 eenheden in de Pod



Trilmodus aan



Tussen 25 en 5 eenheden in de Pod



Bluetooth®-instelling aan



Minder dan 5 eenheden in de Pod



Tijdelijke basaalsnelheid actief



PDM kan niet communiceren met Pod; eenheden in PO getoond als "-" als er geen communicatie is



Geen actieve Pod

De batterijpictogrammen voor de PDM tijdens normaal gebruik en tijdens opladen zijn:



100% tot 31% opgeladen



30% tot 16% opgeladen



15% tot 0% opgeladen

Zie "De batterij opladen" op pagina 22 voor oplaadinstructies.


Het vergrendelscherm en PIN-scherm van de PDM

Nadat u uw PDM hebt ingesteld, worden het vergrendelscherm en PIN-scherm weergegeven wanneer u uw PDM uit de slaapstand haalt. Met deze schermen kunt u controleren of u de juiste PDM gebruikt.

Het vergrendelscherm wordt geopend:

- Uw geselecteerde achtergrondafbeelding
- Uw aangepaste bericht
- De hoeveelheid insuline 'on board' als de boluscalculator is ingeschakeld
- De datum van vandaag
- Eventuele alarm- of kennisgevingsberichten

Waarschuwing: Controleer altijd of de PDM van u is voordat u die gaat gebruiken. Als u de PDM van iemand anders gebruikt, kan het zijn dat beiden niet de juiste hoeveelheid insuline krijgen toegediend.

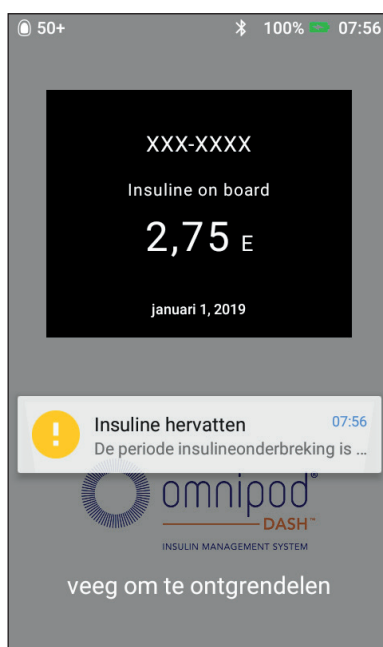

Uw PDM ontgrendelen

In het restant van deze *technische gebruikershandleiding* wordt uitgelegd wat u moet doen bij het "wakker maken" of "ontgrendelen" van de PDM:

1. Druk kort op de knop Aan/Uit. Zie de PDM-afbeelding op pagina 3 voor de plaats van de knop Aan/Uit.
2. Ontgrendel het vergrendelscherm door van links naar rechts of van onder naar boven te vegen. Het PIN-scherm wordt weergegeven.
3. Voer uw 4-cijferige PIN-code in.
4. Tik op het vinkje. Het Home-scherm verschijnt of het scherm dat u het laatst had geopend.

Opmerking: Het alarmbericht verschijnt als er een gevarenalarm of een waarschuwingsalarm wordt gegeven.

Uw PDM vergrendelen

Vergrendel uw PDM als u die niet meer hoeft te gebruiken:

1. Druk kort op de knop Aan/Uit. Hiermee wordt de PDM vergrendeld door die in de slaapstand te zetten.

2. Bewaar uw PDM op een veilige, toegankelijke plaats.

Voorzichtig: Druk alleen kort op de knop Aan/Uit. Als op de PDM wordt gevraagd of u die wilt uitschakelen, tik dan buiten het bericht om de instructie te annuleren. Schakel uw PDM niet uit wanneer u die bent gaan gebruiken. De PDM kan alleen een alarmsignaal afgeven als die is ingeschakeld.

Bent u uw PIN-code vergeten?


U kunt de laatste vier cijfers van het serienummer van de PDM als alternatieve PIN-code gebruiken:

1. U vindt het serienummer naast het pictogram **SN** op de achterzijde van uw PDM.
2. Onthoud de laatste vier cijfers van het serienummer.
3. Voer die vier cijfers op het PIN-scherm in en tik op het vinkje.

Bel de klantenservice als u problemen hebt met uw PIN.

Het Home-scherm van de PDM

Op het Home-scherm staat informatie over recente bolussen, de bloedglucosewaarden, de actieve basaalsnelheid en de actieve Pod. Ook hebt u vanuit dit scherm toegang tot de PDM-functies, informatie over alarmen en instellingen. Op het Home-scherm staat tevens een bolusknop waarmee u snel het bolusscherm kunt openen.

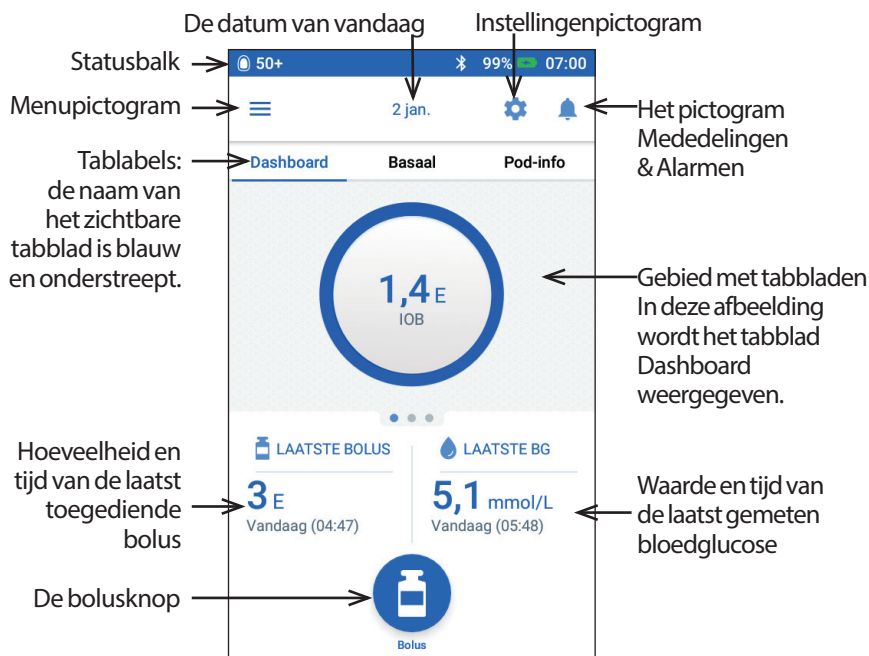

1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

In het Home-schermbord kan bolus informatie op het tabblad Dashboard, informatie over basaal op het tabblad Basaal en informatie over de Pod op het tabblad Pod-info worden weergegeven. U stelt als volgt in welke informatie er moet worden weergegeven:

- Tik op Dashboard, Basaal of Pod-info om het desbetreffende tabblad te openen.
- U kunt in dit scherm de tabbladen ook openen door in het midden van het scherm naar rechts of naar links te vegen.

Opmerking: Als een onmiddellijke bolus wordt toegediend, wordt er op het Home-schermbord een voortgangsbalk over het toedienen van die bolus weergegeven. De bolusknop en de drie tabbladen zijn in dat geval niet zichtbaar (zie "Voortgang van een onmiddellijke bolus" op pagina 67). Er is wel een knop Annuleren waarmee u de bolustoediening kunt annuleren.

Dashboard (tabblad)

Het tabblad Dashboard is beschikbaar wanneer de boluscalculator is ingeschakeld en doorgaans niet beschikbaar als de boluscalculator is uitgeschakeld.

De boluscalculator is ingeschakeld


Wanneer de boluscalculator is ingeschakeld, wordt het tabblad Dashboard weergegeven:

- IOB (insuline 'on board') wanneer IOB beschikbaar is.
- IOB is niet beschikbaar wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld. Tik op het pictogram  voor een aantal redenen waarom de boluscalculator is uitgeschakeld.

Er verschijnt een voortgangsbalk wanneer er een bolus wordt toegediend (zie "De voortgang van een bolus volgen" op pagina 67).

De boluscalculator is uitgeschakeld

Wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld, zijn er doorgaans slechts twee tabbladen beschikbaar: Basaal en Pod-info. Het tabblad Dashboard wordt alleen weergegeven wanneer er een verlengde bolus wordt toegediend (zie "De voortgang van een bolus volgen" op pagina 67).

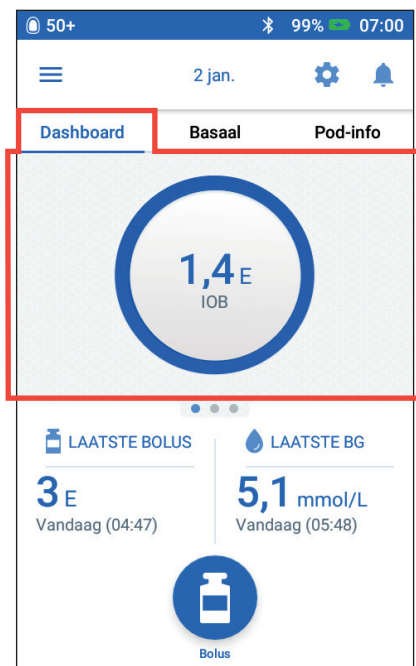

Het tabblad Basaal / Tijdelijke basaalsnelheid

Dit tabblad is het tabblad Basaal of Tijdelijke basaalsnelheid, afhankelijk van het feit of er een basaalprogramma of een tijdelijke basaalsnelheid actief is.

Basaalprogramma

Standaard worden op het tabblad Basaal de naam en de grafiek van het actieve basaalprogramma weergegeven.

Een label onder de naam van het basaalprogramma geeft de status van het vermelde basaalprogramma aan:

- Actief: het programma wordt uitgevoerd op de actieve Pod.
- Onderbroken: dit programma wordt hervat wanneer u de insulinetoediening hervat.
- Huidig: er is geen actieve Pod. Dit programma wordt tijdens de activering naar de volgende Pod verzonden.


Wanneer er een actief basaalprogramma is, wordt de huidige tijd door een groene lijn aangegeven. De getallen boven de grafiek geven de basaalsnelheid voor elk tijdsegment aan.

Onder de grafiek staat de totale dagelijkse hoeveelheid basaalinsuline. Dit totaal is de hoeveelheid basaalinsuline die door het actieve basaalprogramma binnen 24 uur moet worden toegediend. Dit totaal telt niet mee voor tijdelijke basaalsnelheden of bolussen. Zie "Overzicht van de schermen Insuline en BG-historie" op pagina 91 voor de totale hoeveelheid insuline die daadwerkelijk door uw Pod is toegediend, inclusief tijdelijke basaalsnelheden en bolussen.

Tik op **WEERGEVEN** voor gegevens over andere basaalprogramma's (zie pagina 79).

Tijdelijke basaalsnelheid

Als er een tijdelijke basaalsnelheid actief is, is het tabblad Basaal het tabblad Tijdelijke basaalsnelheid en is dat groen gemarkeerd. Op dit tabblad wordt de grafiek van de tijdelijke basaalsnelheid weergegeven en kunt u de tijdelijke basaalsnelheid annuleren.

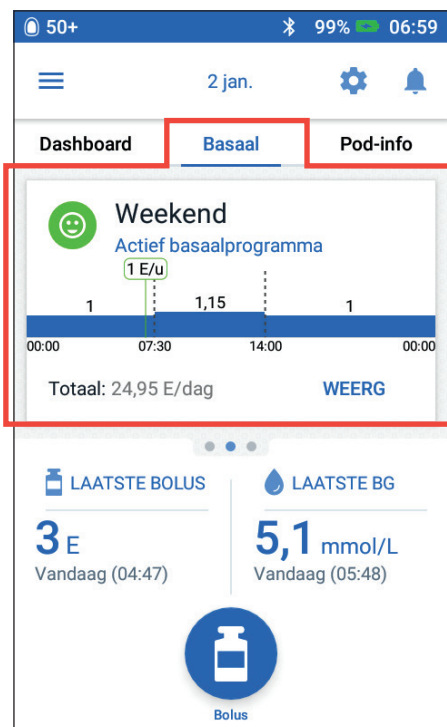

1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

Pod-info (tabblad)

Op het tabblad Pod-info wordt aangegeven of er een actieve Pod is, en als er een actieve Pod is, hoeveel insuline er nog in de Pod zit en wanneer de Pod moet worden vervangen.

Als de PDM niet met een actieve Pod kan communiceren, wordt op het tabblad Pod-info het bericht "Geen communicatie Pod" weergegeven. Tik op het pictogram  voor een aantal redenen waarom de PDM niet met de Pod kan communiceren.

Opmerking: Zelfs als er geen communicatie is, blijft de Pod insuline toedienen volgens de instructies die de Pod heeft ontvangen. Zie "Wat de Pod kan doen tussen twee PDM-instructies in" op pagina 148 voor meer informatie.



Tip: Doorgaans kan de communicatie snel worden hersteld door de PDM en de actieve Pod binnen 1,5 meter van elkaar te brengen.

Als er geen actieve Pod is, wordt op het tabblad Pod-info het bericht "Geen actieve Pod" weergegeven. Zie "Uw Pod vervangen" op pagina 37 voor het instellen van een nieuwe Pod.

Tik als er een actieve Pod is, op **POD-GEGEVENS BEKIJKEN** om een scherm te openen waarin u uw Pod kunt deactiveren of vervangen.

Op het scherm **POD-GEGEVENS BEKIJKEN** wordt het volgende weergegeven:

- Hoeveelheid insuline in de Pod
- Tijdstip van de laatste communicatie tussen PDM en Pod
- Datum en tijd van de uiterste gebruiksdatum van de Pod

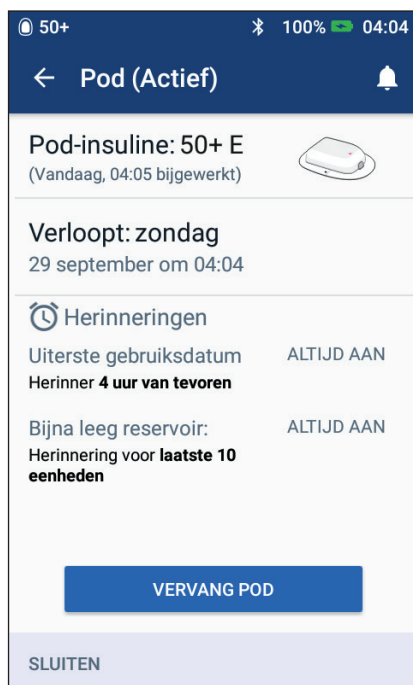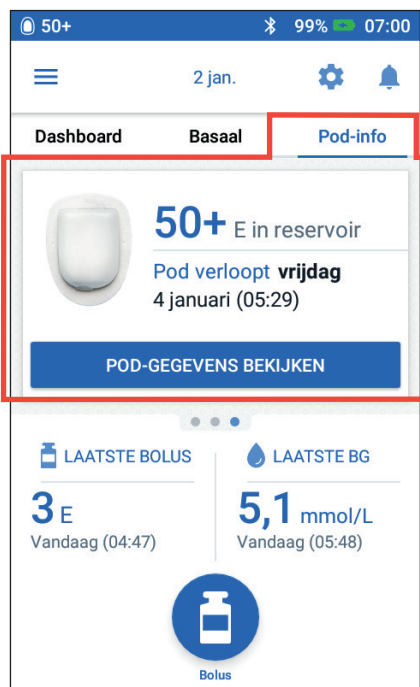

- Eventuele actieve herinneringen
- Een knop VERVANG POD

Tip: U kunt dit scherm ook openen door te tikken op het Menupictogram (☰) > Pod.

Wanneer de gebruiksduur van uw Pod bijna is verstreken, wordt er op het tabblad Pod-info een gele banner met de tekst Vervang Pod binnenkort weergegeven. Deze gele banner wordt 12 uur vóór de vervaldatum van de Pod weergegeven of op het moment dat u eraan wordt herinnerd dat de Pod binnenkort moet worden vervangen, welke van de twee zich het eerst voordoet.



Zes uur vóór de vervaldatum van de Pod verschijnt er op het tabblad Pod-info een rode banner met de tekst vervang Pod.



Op het tabblad Pod-info wordt een rode banner met de tekst Bijna leeg reservoir weergegeven wanneer er minder dan vijf eenheden insuline in de Pod zitten. Als de Pod binnenkort moet worden vervangen en er zitten minder dan vijf eenheden insuline in de Pod, wordt er een rode banner met de tekst Bijna leeg reservoir weergegeven.



Opmerking: Als u de datum of tijd wijzigt, worden de vervaldatum en -tijd van de Pod aangepast aan de nieuwe datum en tijd.

Het gedeelte met de laatste BG

Rechtsonder op het Home-scherm worden de waarde en de tijd van de laatste meting van uw bloedglucose weergegeven.



1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

Het gedeelte met de laatste bolus


Linksonder op het Home-scherm wordt informatie over de bolus weergegeven.

Tussen bolussen

Wanneer een bolus niet wordt toegediend, wordt het label LAATSTE BOLUS aan het gedeelte toegevoegd en worden de hoeveelheid en tijd van de meest recente bolus weergegeven.

Tijdens een bolus wanneer de boluscalculator is ingeschakeld

Wanneer een bolus wordt toegediend en de boluscalculator is ingeschakeld, wordt de laatste bolusinformatie vervangen door een schatting van de insuline 'on board' (IOB):

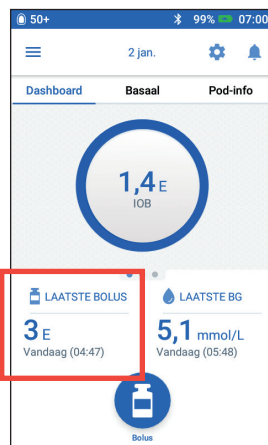

- Tijdens het toedienen van een onmiddellijke bolus wordt de IOB-schatting om de tien seconden bijgewerkt.
- Tijdens het toedienen van een verlengde bolus is de IOB-schatting, inclusief de IOB van vorige bolussen, een schatting van de hoeveelheid die reeds van de lopende bolus is toegediend, en de hoeveelheid die naar verwachting zal worden toegediend binnen de tijdsduur die u hebt opgegeven in de instelling voor de duur van de insulineactie.

Tijdens een bolus wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld

Wanneer een bolus wordt toegediend en de boluscalculator is uitgeschakeld, wordt linksonder op het scherm de hoeveelheid van de vorige bolus weergegeven (niet de bolus die op dat moment wordt toegediend).

Bolus-informatie als de PDM niet kan communiceren met de Pod

Als de afstand tussen de Pod en de PDM te groot is en de recente bolushoeveelheid kan niet door de PDM worden bevestigd, wordt een geschatte bolushoeveelheid weergegeven. Zodra de Pod weer binnen het bereik van de PDM is en de bolustoediening is bevestigd, wordt de bevestigde bolushoeveelheid weergegeven.

Geschatte en niet-bevestigde bolushoeveelheden

De PDM schat de bolushoeveelheden tijdens het toedienen van een bolus en wanneer de afstand tussen de Pod en de PDM te groot is. Een grijs pictogram (!) geeft geschatte bolushoeveelheden aan. Een geel pictogram (!) geeft niet-bevestigde bolushoeveelheden aan (zie "Wanneer de toediening van een bolus niet door de Pod is bevestigd" op pagina 98).

De bolusknop

Met de bolusknop onder op het Home-scherf kunt u het bolusscherf openen. De bolusknop is niet beschikbaar wanneer er een onmiddellijke bolus wordt toegediend of wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld en er geen actieve Pod is.



Het menu op de beginpagina

In het menu op de beginpagina staan de meeste functies van de PDM. Het menu openen:

- Tik op het Menupictogram (≡) linksboven op het Home-scherf.
- Plaats uw vinger helemaal links op het scherf van de PDM en veeg naar rechts over het scherf. Veeg naar links om het menu te verbergen.

Tik op een optie in het menu om het desbetreffende scherf te openen.

Tip: Het menu loopt aan de onderkant van het scherf door. Veeg omhoog of omlaag om alle opties in het menu te kunnen bekijken.

Taken die vaak worden gebruikt

In het eerste gedeelte van het menu staan de taken die u vaak zult gebruiken: het activeren van een tijdelijke basaalsnelheid, het vervangen van de Pod, het invoeren van een gemeten bloedglucosewaarde en het onderbreken of hervatten van het toedienen van insuline.

Bijzondere situaties:

- De optie Tijdelijke basaalsnelheid instellen wordt grijs weergegeven (niet beschikbaar) als er geen actieve Pod is, de insulinetoediening is onderbroken of als er al een tijdelijke basaalsnelheid in werking is.
- De optie Tijdelijke basaalsnelheid instellen wordt niet weergegeven als de instelling voor de tijdelijke basaalsnelheid is uitgeschakeld.
- Insuline onderbreken wordt Insuline hervatten als de insulinetoediening is onderbroken.

	Tijdelijke basaalsnelheid instellen
	Pod
	BG invoeren
	Insuline onderbreken
PROGRAMMA'S & VOORINSTELLINGEN BEHEREN	
	Basaalprogramma's
	Voorinst. tijd. bas.snelh.
	Voorinstelde bolussen
	Historie ^
	Mededelingen & Alarmen
	Insuline & BG-historie
	Instellingen ^
	PDM-apparaat
	Herinneringen
	Bloedglucose
	Basaal & tijd.bas.snelh.
	Bolus
	Info

1 Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem

- Insuline onderbreken wordt grijs weergegeven (niet beschikbaar) als er geen actieve Pod is.

Programma's en voorinstellingen beheren

In het volgende gedeelte van het menu staan opties voor het maken of activeren van basaalprogramma's, voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden en vooringestelde bolussen (zie "Programma's en voorinstellingen beheren" op pagina 79).

Bijzondere situaties:

- De optie Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden staat alleen in dit menu als de instelling voor tijdelijke basaalsnelheid is ingeschakeld.
- De optie Vooringestelde bolussen staat alleen in dit menu als de instelling voor de boluscalculator is uitgeschakeld.

Het menu Historie

Tik op de pijl-omlaag (v) naast Historie om de volgende submenu's te openen:

- Mededelingen & Alarmen (zie pagina 89)
- Insuline & BG-historie (zie pagina 91)

Tip: Tik op het belpictogram (🔔 of 🔔⁴) rechtsboven op het scherm om het historiescherm Mededelingen & Alarmen te openen.

Het menu Instellingen

Tik op de pijl-omlaag (v) naast Instellingen om de volgende submenu's te openen:

- PDM-apparaat
- Pod-plaatsen
- Herinneringen
- Bloedglucose
- Basaal & Tijdelijke basaalsnelheid
- Bolus

Tip: Tik op het Instellingenpictogram (⚙️) boven aan het Home-scherm om het submenu Instellingen te openen.

Met deze instellingen kunt u de tijd en datum wijzigen, herinneringen instellen of verwijderen, de boluscalculator in- of uitschakelen, enzovoort. Zie "Instellingen aanpassen" op pagina 101 voor meer informatie.

Infoscherm

Op het scherm Over worden gegevens weergegeven over uw PDM, zoals het revisienummer van de software, het serienummer van de PDM, het versienummer van de Pod, het tijdstip van de laatste communicatie tussen de PDM en de Pod en andere apparaatgegevens en juridische informatie.

Opmerking: Het serienummer van de PDM staat ook naast het pictogram  op de achterzijde van uw PDM.

PDM-berichten voor u

De PDM kan alarmmeldingen, berichten en bevestigingsberichten geven.

Alarmen

Bij gevarenalarmen en waarschuwingsalarmen moet u onmiddellijk actie ondernemen (zie "Alarmen, kennisgevingen en communicatiefouten" op pagina 119). Als u een alarm negeert, kunt u hypoglykemie of hyperglykemie krijgen.

Gevarenalarmen () gaan vergezeld van een continue trilling of geluidssignaal en onderbreken al het andere dat de PDM doet, behalve een ander gevarenalarm. Er gaat bijvoorbeeld een gevarenalarm af als er geen insuline meer in de Pod zit.

Waarschuwingsalarmen () zijn alarmen die u attent maken op een of ander aspect van de PDM of Pod waar u op korte termijn iets aan moet doen. Als er bijvoorbeeld nog maar weinig insuline in uw Pod zit, wordt er door de PDM een waarschuwingsalarm afgegeven.

Kennisgevingen


Kennisgevingen () herinneren u aan handelingen die u mogelijk wilt uitvoeren (zie "Lijst met kennisgevingen" op pagina 128). U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen om u eraan te helpen herinneren dat u na een bepaalde tijd uw bloedglucose moet meten.

Bevestigingsberichten

Een groene banner met een bevestigingsbericht op de PDM betekent dat een instructie goed is uitgevoerd. Dat bericht verdwijnt na enkele seconden.

Tip: Veeg naar rechts over het bericht als u dat eerder wilt verwijderen.

Als een instructie niet kon worden uitgevoerd, wordt er op de PDM een communicatiefoutmelding weergegeven (zie "Communicatiefouten" op pagina 130).

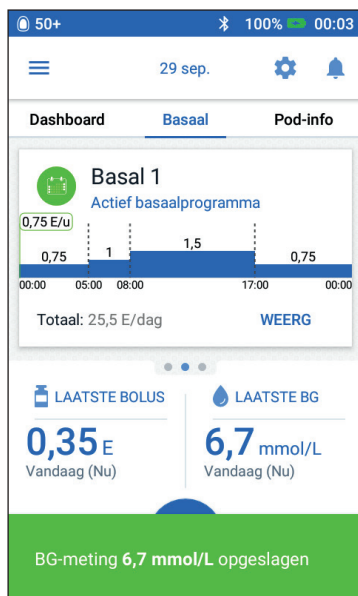

HOOFDSTUK 2

PDM voor de eerste keer instellen

Dit hoofdstuk gaat over het instellen van uw eerste PDM of een vervangende PDM.

Ga voor het instellen van een vervangende PDM naar "De batterij opladen" in het volgende gedeelte.

Voorbereiden voor uw training

Als het Omnipod DASH®-systeem nieuw voor u is, hebt u voor het instellen van uw Personal Diabetes Manager (PDM) en eerste Pod uw verpleegkundige/begeleider nodig.

Als u het Omnipod®-insulinetoedieningssysteem al eerder hebt gebruikt en u gaat upgraden naar het Omnipod DASH®-systeem, bekijk dan de trainingsmodule voordat u uw nieuwe systeem gaat instellen.

Als aanloop op het volgen van de cursus over het Omnipod DASH®-systeem neemt u eerst deze *technische gebruikershandleiding* en "Inleiding" op pagina xi, "Uw Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem" op pagina 1 en "Zorgdragen voor uw PDM en Pod" op pagina 135 door.

Waarschuwing:

Gebruik het Omnipod DASH®-systeem pas als u precies weet hoe het moet. Onvoldoende training kan uw gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Volg de instructies van uw zorgverlener voor het initialiseren van de PDM. Een verkeerde instelling van de PDM kan uw gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Opmerking: Houd te allen tijde een noodset bij de hand voor het geval u snel moet reageren op een noodsituatie in verband met uw diabetes (zie "Voorbereiding op noodgevallen" op pagina 177).

2 PDM voor de eerste keer instellen

De batterij opladen

Het is belangrijk om de batterij van de PDM eerst op te laden voordat u uw Omnipod DASH®-systeem gaat instellen:

1. Plaats de oplaadbare batterij indien nodig in de PDM (zie "De PDM-batterij plaatsen tijdens de eerste keer instellen" op pagina 132).
2. Steek de USB-stekker van de oplaadkabel type A in de stroomadapter van de lader.

Voorzichtig: Gebruik ALLEEN de door Insulet geleverde micro-USB-oplader om uw PDM op te laden. Het gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels kan leiden tot schade aan of het ontploffen van de PDM en kan de garantie ongeldig maken.

3. Steek de oplader in een stopcontact. Selecteer een stopcontact waar u makkelijk bij kunt en de stekker indien nodig zonder moeite uit kunt trekken.
4. Steek de USB Micro-B-stekker van de oplaadkabel in de Micro-B USB-poort van de PDM.
5. Laad de PDM op totdat wordt aangegeven dat de batterij helemaal (100%) is opgeladen (zie "De statusbalk" op pagina 9).
6. Trek de stekker van de oplaadkabel uit de PDM en de oplader uit het stopcontact.

Voorzichtig: Gebruik ALLEEN de oplaadbare batterij die bij uw PDM is geleverd. Neem bij vragen contact op met het Klantenserviceteam.

De items die u nodig hebt wanneer u samen zit met uw verpleegkundige/begeleider

- Uw PDM
- Twee Pods
- Gebruiksaanwijzingen Omnipod DASH
- Een bloedglucosemeter
- Teststrips en een prikapparaatje (bij een groot aantal apothekers verkrijgbaar)
- Een flacon met snelwerkende U-100-insuline
- Alcoholdoekjes
- Instructies van uw zorgverlener over de PDM-instellingen die moeten worden afgestemd op uw behoeften. Deze instellingen zijn onder andere basaalprogramma, I/KH-verhouding, correctiefactor, streefwaarden voor BG en duur van de insulineactie.

Algemene PDM-instellingen

Alhoewel de PDM eenvoudig is in te stellen, hebt u hierbij toch de hulp van uw verpleegkundige/begeleider nodig als u het systeem nog nooit hebt gebruikt. U kunt die instellingen naderhand zo nodig wijzigen.

Tip: Gebruik de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding om uw instellingen te noteren. Deze lijst kunt u altijd weer gebruiken wanneer u uw PDM moet resetten of vervangen.

Opmerking: Als u op deze pijl () tikt, gaat u naar het vorige scherm. Tikt u echter tijdens het instellen op de knop ANNULEREN, dan gaat u terug naar het eerste scherm van elk gedeelte en worden alle vermeldingen in dat gedeelte gewist. Er verschijnt een pop-upschermd met de waarschuwing dat u deze gegevens kunt verliezen.

De PDM inschakelen en aan uw persoonlijke wensen aanpassen

1. Schakel de PDM in door de knop Aan/Uit aan de rechterkant ingedrukt te houden totdat het Omnipod®-logo verschijnt. Tijdens het inschakelen doorloopt de PDM een reeks controles.

Voorzichtig: Schakel de PDM niet uit. De PDM moet zijn ingeschakeld om een alarmsignaal te kunnen laten afgaan. Als u de knop Aan/Uit van de PDM te lang ingedrukt houdt, wordt er een menu geopend met daarin de optie voor het uitschakelen van de PDM. Tik niet op die optie. Tik buiten het menu om dat te sluiten en de PDM te laten aanstaan.

Opmerking: Als u kort op de knop Aan/Uit drukt, schakelt u tussen de waak- en de slaapstand. Een alarm van het Omnipod DASH®-systeem haalt de PDM uit de slaapstand.

2. Wanneer er een scherm met het Omnipod DASH®-logo wordt weergegeven, veegt u met uw vinger van links naar rechts over het scherm.

Opmerking: Zie "Probleemoplossing opstarten PDM" op pagina 191 als u een ander scherm dan het scherm met het Omnipod DASH®-logo ziet.

3. Tik op uw taal om dat te selecteren voor de PDM-schermen. Tik vervolgens op deze pijl (>).
4. Tik op Kies 1 voor de lijst met landen. Selecteer uw land en tik vervolgens op DOORGAAN.

2 PDM voor de eerste keer instellen

5. De algemene voorwaarden bekijken, waaronder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), de garantie en de juridische kennisgevingen:
 - a. Tik op de koppeling EULA, garantie en juridische kennisgevingen voor de juridische kennisgevingen van het Omnipod DASH®-systeem. Tik vervolgens op AKKOORD.
 - b. Tik op het vakje om een vinkje te plaatsen.
 - c. Tik op DOORGAAN.

Opmerking: Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je ouder of voogd akkoord gaan met die voorwaarden.

6. Tik op BEGINNEN MET INSTELLEN.
7. Tik op de letters van het toetsenblok om een eigen schermbericht in te voeren (zie "Items selecteren, toevoegen en verwijderen" op pagina 7). Tik vervolgens op het vinkje.

Opmerking: U moet minimaal één teken invoeren.


Tip: Voeg ook het telefoonnummer van een contactpersoon in het bericht in, omdat u dan gemakkelijker een zoekgeraakte PDM kunt terugvinden.

8. Tik op DOORGAAN.

Er verschijnt een scherm met verschillende achtergrondaftelingen.

9. Veeg naar rechts of links voor meer afbeeldingen. Tik op de gewenste afbeelding en tik vervolgens op DOORGAAN.

Opmerking: Wanneer u uw PDM uit de slaapstand haalt, worden uw eigen schermbericht en die achtergrondafteling weergegeven. Controleer altijd of de PDM van u is voordat u die gaat gebruiken.

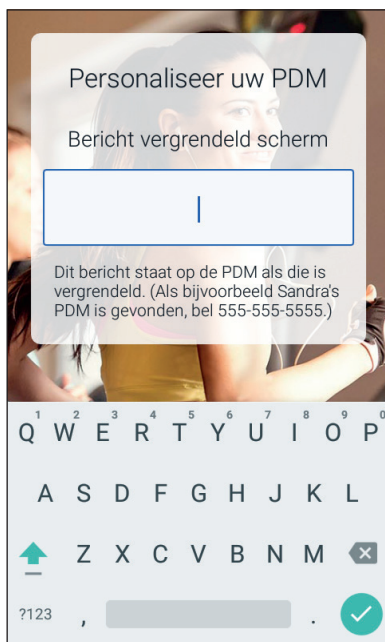

Een PIN invoeren

Als u wilt voorkomen dat het scherm per ongeluk wordt aangeraakt, moet u een viercijferig persoonlijk identificatienummer (PIN) maken.

1. Kies de vier cijfers voor uw PIN. U moet tekens deze PIN invoeren wanneer u uw PDM uit de slaapstand haalt. Bewaar die PIN op een veilige plaats.

Tip: U kunt de PIN laten weergeven door op het oogpictogram rechts van de velden voor het invoeren van de PIN te tikken. U verbergt de PIN door nogmaals op het oogpictogram te tikken.

2. Tik op het toetsenblok op de cijfers voor uw PIN. Tik vervolgens op het vinkje.

3. Voer ter controle diezelfde vier cijfers nogmaals in. Tik op het vinkje.

Als u de tweede keer niet de juiste cijfers hebt uitgevoerd, moet u bovenstaande stappen opnieuw uitvoeren.

Bescherm uw PDM

Stel PIN in

Met een 4-cijferige PIN ontgrendelt u de PDM en voorkomt u onbevoegd gebruik.

1 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ
✕ 0 + ✓

De tijdzone en tijd instellen

De huidige tijdzone en tijd instellen:

1. Tik op Kies 1 voor de lijst met tijdzones.
2. Tik op uw tijdzone. Mogelijk moet u omhoog of omlaag vegen om uw tijdzone te kunnen selecteren.
3. Tik op DOORGAAN.
4. Tik op 12 u of 24 u voor de gewenste tijdnootatie. Zes uur 's avonds wordt dan weergegeven als:
 - 18:00 in de 24-uursnotatie
 - 6:00 PM in de 12-uursnotatie

Stel huidige tijd in

12 u 24 u

03 59
04 : 00
05 01

Uur Minuut

DOORGAAN

TERUG

2 PDM voor de eerste keer instellen

5. Plaats uw vinger op het bladerwielje Uur. Veeg met uw vinger omhoog of omlaag totdat u bij het gewenste uur bent. Stop met bladeren totdat dat uur in het midden van het bladwielje staat.
6. Veeg het bladerwielje Minuut omhoog of omlaag totdat de gewenste minuut wordt weergegeven.
7. Als u de 12-uursnotatie wilt gebruiken, selecteert u AM of PM.
8. Controleer de tijd en tik op DOORGAAN.

Voorzichtig: Controleer of u de juiste tijd hebt ingesteld. De ingesteld tijd is belangrijk voor diverse functies van het Omnipod DASH®-systeem en kan van invloed zijn op de toediening van uw insuline.

De datum instellen

Doe het volgende op het scherm Stel huidige datum in:

1. Tik op DD/MM/JJJJ voor een lijst met datumnotaties. Tik op de gewenste datumnotatie.
2. Stel met de desbetreffende bladerwieljes de velden Dag, Maand en Jaar in.
3. Controleer de datum- en datumnotatie en tik op DOORGAAN.
4. Controleer op het scherm Tijd/ datum bevestigen de tijdzone, tijd en datum. Tik op DOORGAAN als die correct zijn.

Stel huidige datum in

DD/MM/JJJJ

25	8	
26	9	2019
27	10	2020

Dag Maand Jaar

DOORGAAN

< TERUG

Instellingen voor de basale insuline

Maximale basaalsnelheid


De maximale basaalsnelheid is de bovengrens voor elke basaalinlinesnelheid die u kunt gebruiken.

1. Tik op PROFIEL INSTELLEN.
2. Bekijk de beschrijving van de basaalinuline en tik vervolgens op deze pijl (>).
3. Tik op het veld Max. basaalsnelheid.
4. Blader naar de gewenste maximale basaalsnelheid. Wanneer de gewenste snelheid in het bladerwielje staat, tikt u op dat getal om het te selecteren.

Tip: U kunt ook buiten het bladerwielje tikken waarna het getal in het midden van het bladerwielje wordt geselecteerd.

5. Tik op VOLGENDE.

Indien nodig kunt u naderhand de maximale basaalsnelheid anders instellen.

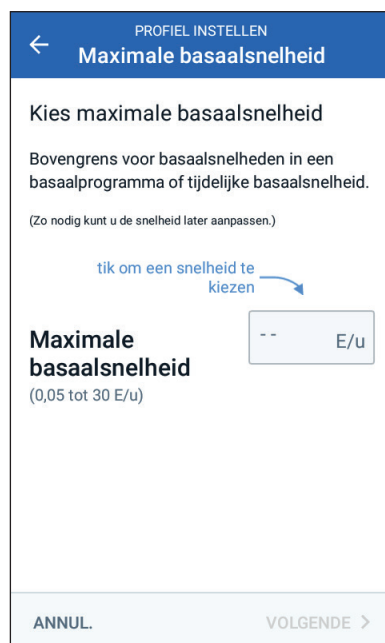

Een basaalprogramma maken

De volgende stap is het definiëren van een basaalprogramma. Zie "Toediening basale insuline" op pagina 149 voor een beschrijving van basaalsnelheden, basaalsegmenten en basaalprogramma's.

Het basaalprogramma benoemen en labelen

1. Bekijk de beschrijving van de basaalprogramma's en tik vervolgens op VOLGENDE.
2. De standaardnaam voor het basaalprogramma is Basaal 1. U wijzigt de naam door op het veld Programmanaam te tikken, de nieuwe naam in te voeren (zie "Items selecteren, toevoegen en verwijderen" op pagina 7) en vervolgens te tikken op het vinkje.
3. U kunt eventueel een visueel pictogram aan uw basaalprogramma toevoegen door te tikken op een van de labels. U deselecteert het label door nogmaals op dat label te tikken.
4. Tik op VOLGENDE.

2 PDM voor de eerste keer instellen

Het eerste segment definiëren

1. De starttijd voor het eerste segment is altijd middernacht. Tik op het veld Eindtijd en blader naar de gewenste eindtijd om dat te selecteren.
2. Tik op het veld Basaalsnelheid en blader naar de gewenste basaalsnelheid voor het segment.

PROFIEL INSTELLEN
Basaalprogramma

Basal 1: Segment 1 Grafiek: E/u

00:00 00:00

Starttijd 00:00 - Eindtijd --

Nacht Nacht

Basaalsnelheid -- E/u (tot 3 E/u)

ANNUL. VOLGENDE >

PROFIEL INSTELLEN
Basaalprogramma

Basal 1: Segment 1 Grafiek: E/u

0,75 00:00 05:00 00:00

Starttijd 00:00 - Eindtijd 05:00

Nacht Nacht

Basaalsnelheid 0,75 E/u (tot 3 E/u)

ANNUL. VOLGENDE >

De maximale basaalsnelheid die u eerder hebt ingevoerd, wordt onder de tekst Basaalsnelheid weergegeven. U kunt geen basaalsnelheid invoeren die hoger is dan dit getal.

Opmerking: De twee verticale blauwe lijnen op de grafiek aan de bovenkant van het scherm geven de start- en eindtijd voor het basalsegment aan. De geselecteerde basaalsnelheid voor het segment staat tussen de twee verticale lijnen.

3. Controleer de waarden van uw start- en eindtijd en de basaalsnelheid. Tik vervolgens op VOLGENDE.

Extra segmenten definiëren

Als het basaalprogramma niet genoeg is voor 24 uur, moet u extra segmenten toevoegen:

1. Tik op het veld Eindtijd en selecteer de duur van het volgende segment.
2. Tik op het veld Basaalsnelheid en selecteer de basaalsnelheid voor het segment.
3. Bekijk de segmentgegevens en de grafiek.

4. Tik op VOLGENDE om naar het volgende segment te gaan.
5. Herhaal indien nodig deze stappen totdat uw laatste segment om middernacht eindigt.

Uw basaalprogramma is compleet als u een basaalsnelheid voor het laatste segment hebt opgegeven.

Het basaalprogramma controleren


In het volgende scherm staat een overzicht van de start- en eindtijden, de duur en de basaalsnelheid voor elk segment van het basaalprogramma.

1. Tik op DOORGAAN om uw basaalprogramma te controleren.

2. Controleer of de grafiek en de afzonderlijke segmentenwaarden correct zijn.

Onder de grafiek staat de totale dagelijkse hoeveelheid basaalsnelheid die door dit basaalprogramma moet worden toegediend.

3. Een eindtijd of basaalsnelheid voor een segment wijzigen:
 - a. Tik op de rij met het segment dat u wilt wijzigen.
 - b. Tik op het veld Eindtijd en voer de nieuwe eindtijd voor het segment in.
 - c. Tik op het veld Basaalsnelheid en voer de gewenste basaalsnelheid in.

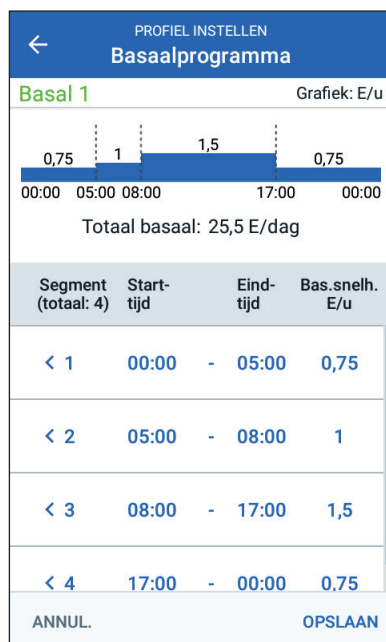

- d. Tik op VOLGENDE.
- e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.
4. Een nieuw segment toevoegen:
 - a. Tik op de rij met de starttijd van het nieuwe segment.
 - b. Tik op het veld Eindtijd en voer de starttijd van het nieuwe segment als de eindtijd voor dit segment in.
 - c. Wijzig indien nodig de basaalsnelheid.
 - d. Tik op VOLGENDE.
 - e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.

2 PDM voor de eerste keer instellen

5. Een segment verwijderen:
 - a. Let op de eindtijd van het segment dat u wilt verwijderen.
 - b. Tik op het segment dat voorafgaat aan het segment dat u wilt verwijderen.
 - c. Tik op het veld Eindtijd en voer de eindtijd in van het segment dat u wilt verwijderen. Hiermee wordt het segment overschreven dat u wilt verwijderen.
 - d. Tik op VOLGENDE.
 - e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.
6. Tik op OPSLAAN als het basaalprogramma correct is.

Opmerking: Als de basale hoeveelheid voor een segment 0 E/u is, wordt dit op de PDM gemeld. Tik op OK als de snelheid 0 E/u correct is. Als dat niet zo is, tikt u op ANNULEREN en stelt u het segment op de snelheid 0 E/u in.

Opmerking: Zie pagina 79 voor het maken van nog een basaalprogramma als de instellingen zijn opgegeven.

Configuratie van tijdelijke basaalsnelheid

Zie pagina 151 voor een beschrijving van de tijdelijke basaalsnelheden.

1. Als u tijdelijke basaalsnelheden wilt gebruiken, schakelt u de wisselknop in. De wisselknop is ingeschakeld als die rechts staat en blauw is.

Als tijdelijke basaalsnelheden zijn ingeschakeld, worden standaard percentages gebruikt. Zie "Tijdelijke basaalsnelheid" op pagina 114 voor het instellen van tijdelijke basaalsnelheden als vaste snelheden (E/u).

2. Tik op VOLGENDE.

Bloedglucose-instellingen

De bloedglucose-instellingen geven aan welke bloedglucosewaarden nog binnen het bereik vallen.


Boven- en ondergrens voor BG-doelbereik

U kunt de boven- en ondergrens van uw BG-doelbereik als volgt instellen met het numerieke toetsenblok of de schuifknop:

1. Bekijk de beschrijving van de bloedglucosespiegels en tik vervolgens op deze pijl (>).
2. U definieert de ondergrens door te tikken op het veld Ondergrens en vervolgens met het numerieke toetsenblok het gewenste getal in te voeren.

Tip: U kunt ook met uw vinger de onderste (rode) cirkel aanraken en deze omhoog of omlaag schuiven.

3. U definieert de bovengrens door te tikken op het veld Bovengrens of door de bovenste (gele) cirkel te verschuiven.
4. Controleer de boven- en ondergrens en tik op VOLGENDE om ze op te slaan.

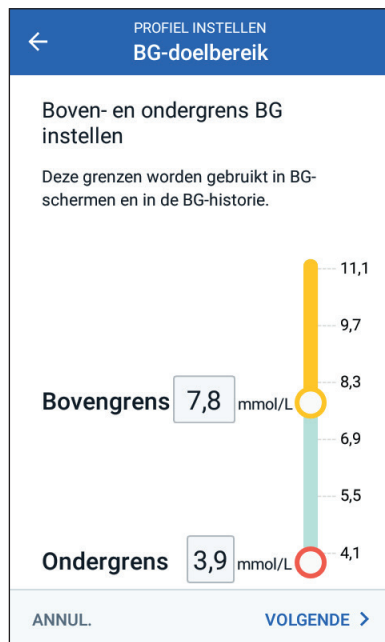

2 PDM voor de eerste keer instellen

Instellingen voor de boluscalculator

De boluscalculator kan bolussen berekenen op basis van de huidige waarde van uw bloedglucose en het voedsel dat u gaat nuttigen (zie "De boluscalculator" op pagina 156).

De boluscalculator in- of uitschakelen

1. Bekijk de beschrijving van insulinebolussen en tik vervolgens op deze pijl (>).
2. De boluscalculator in- of uitschakelen:
 - Selecteer Aan (blauw en rechts) als u de boluscalculator bolussen wilt laten berekenen.
 - Selecteer Uit (grijs en links) als u de boluscalculator wilt uitschakelen. U zult in dat geval zelf uw bolushoeveelheden moeten berekenen.
3. Tik op VOLGENDE.
4. Ga naar "Andere bolusinstellingen" op pagina 36 als u de boluscalculator hebt uitgeschakeld.

Streefwaarde voor BG en waarden voor Corrigeren boven

Bij het berekenen van een correctiebolus is het doel van de boluscalculator om uw bloedglucose op uw streefwaarde voor BG te krijgen als uw bloedglucosespiegel hoger is dan de waarde voor Corrigeren boven. U kunt voor verschillende momenten van de dag acht verschillende streefwaarden voor uw bloedglucose opgeven.

De segmenten definiëren

Bij het instellen van waarden voor elk segment wordt hetzelfde patroon gevolgd als u gebruikte bij het maken van uw basaalprogramma:

1. Bekijk de beschrijving van uw streefwaarde voor BG en Corrigeren boven en tik vervolgens op VOLGENDE.
2. Tik op het veld Eindtijd en voer een eindtijd voor het segment in.
3. Tik op het veld Doel-BG en geef voor dat segment de streefwaarde voor uw BG op.

The screenshot shows the 'PROFIEL INSTELLEN' (Profile Settings) screen for 'Doel-BG & Corr. boven'. It is for 'Segment 1'. The 'Starttijd' (Start time) is set to '00:00' and 'Nacht'. The 'Eindtijd' (End time) is currently blank. Below, 'Doel-BG' (Target BG) is set to '(3,9 tot 11,1 mmol/L)' with a corresponding input field showing '-- mmol/L'. 'Corrigeren boven' (Correct above) is set to '(Doel-BG tot 11,1 mmol/L)' with a corresponding input field showing '-- mmol/L'. At the bottom are 'ANNUL.' and 'VOLGENDE >' buttons.

4. Tik op het veld Corrigeren boven en geef voor dat segment de waarde voor Corrigeren boven op.
5. Tik op VOLGENDE.
6. Herhaal indien nodig deze stappen totdat u waarden hebt opgegeven voor het segment dat om middernacht eindigt.

De streefwaarde voor BG en de waarden voor Corrigeren boven controleren

1. Controleer de segmenten voor het profiel van de volledige 24 uur.
2. Ingevoerde gegevens wijzigen:
 - a. Tik op de regel met de gegevens die moeten worden gewijzigd, en voer de gecorrigeerde waarde in.
 - b. Controleer resterende segmenten en corrigeer waar nodig.
3. Tik op OPSLAAN wanneer de segmenten en waarden juist zijn.

<
PROFIEL INSTELLEN
Doel-BG & Corr. boven

Controleer de voor elk tijdsegment ingevoerde waarden.

Start-tijd	Eind-tijd	Doel-BG mmol/L	Corrigeren boven mmol/L
< 00:00	- 18:00	5,6	6,1
< 18:00	- 00:00	5,8	6,4

ANNUL.
OPSLAAN

Minimale BG voor berekeningen

De boluscalculator wordt uitgeschakeld wanneer uw bloedglucosespiegel lager is dan de minimale BG voor berekeningen die u hebt opgegeven (zie "De boluscalculator" op pagina 156).

1. U voert uw minimale BG voor berekeningen in door te tikken op het veld Min. BG voor berekeningen en het getal via het numeriek toetsenblok in te voeren.

Tip: U kunt ook de blauwe cirkel aanraken en deze naar het gewenste getal schuiven.

2. Tik op VOLGENDE.

<
PROFIEL INSTELLEN
Min. BG voor bereken.

Min. BG voor berekeningen inst.

Als uw bloedglucose lager is dan uw minimale BG voor berekeningen, wordt de boluscalculator uitgeschakeld en stelt geen bolus voor.

Min. BG voor bereken. 3,9 mmol/L

(2,8 tot 3,9 mmol/L)

ANNUL.
VOLGENDE >

2 PDM voor de eerste keer instellen

Insuline-KH-verhouding

Uw koolhydraat-insulineratio (I/KH-verhouding) bepaalt voor hoeveel koolhydraten één eenheid insuline nodig is. De boluscalculator gebruikt de I/KH-verhouding om de maaltijdportie van een voorgestelde bolus te berekenen. U kunt per dag acht blokken met een I/KH-verhouding maken.

1. Bekijk de beschrijving van de I/KH-verhouding en tik vervolgens op **VOLGENDE**.
2. Voer de eindtijd in.
3. Voer de waarde voor de I/KH-verhouding in het veld 1 insuline-eenheid voor in.
4. Tik op **VOLGENDE**.
5. Voeg zo nodig extra segmenten toe totdat de eindtijd middernacht is.
6. Controleer de segmenten I/KH-verhouding voor 24 uur. Tik op een vermelding om die te corrigeren.
7. Tik op **OPSLAAN** wanneer de segmenten en waarden juist zijn.

PROFIEL INSTELLEN
Insuline/KH-verhouding

Segment 1

Starttijd 00:00 - Eindtijd --

Nacht

1 insuline-eenheid voor -- g
(1 tot 150 g KH)

ANNUL. VOLGENDE >

Correctiefactor

Uw correctiefactor bepaalt hoeveel uw bloedglucosespiegel kan dalen door één eenheid insuline. De boluscalculator gebruikt de correctiefactor om het correctiedeel van een voorgestelde bolus te berekenen. U kunt per dag acht blokken met een correctiefactor maken.

1. Bekijk de beschrijving van de correctiefactor en tik vervolgens op **VOLGENDE**.
2. Voer de eindtijd in.
3. Voer de correctiefactor in het veld 1 insuline-eenheid doet BG dalen met in.
4. Tik op **VOLGENDE**.

PROFIEL INSTELLEN
Correctiefactor

Segment 1

Starttijd 00:00 - Eindtijd 00:00

Nacht Nacht

1 insuline-eenheid doet BG dalen met 2,2 mmol/L
(0,1 tot 22,2 mmol/L)

ANNUL. VOLGENDE >

5. Voeg zo nodig extra segmenten toe totdat de eindtijd middernacht is.
6. Controleer de segmenten voor de correctiefactor. Tik op een vermelding om die te corrigeren.
7. Tik op OPSLAAN wanneer de segmenten en waarden juist zijn.

Tegenovergestelde correctie

Er zullen momenten zijn dat u wilt gaan eten en dat uw bloedglucosespiegel lager is dan de streefwaarde voor BG. Als Tegenovergestelde correctie is ingeschakeld, verlaagt de boluscalculator een voorgestelde maaltijdbolus om iets te doen aan uw gemeten lage bloedglucose.

1. De knop Tegenovergestelde correctie in- of uitschakelen:
 - Selecteer Aan als u de boluscalculator de voorgestelde maaltijdbolus wil laten verlagen wanneer uw bloedglucose lager is dan de streefwaarde voor BG.
 - Selecteer Uit als u de boluscalculator de voorgestelde maaltijdbolus niet wil laten aanpassen op basis van een lage bloedglucosewaarde.
2. Tik op VOLGENDE.

Duur van de insulineactie

De duur van de insulineactie is de tijd die de insuline werkzaam in uw lichaam is. De boluscalculator gebruikt deze instelling om te bepalen hoeveel insuline er in uw lichaam van vorige bolussen (insuline 'on board' of IOB genaamd) achterblijft.

1. Tik op het veld Duur van de insulineactie en gebruik het bladerwielje om de duur van de insulinewerking op te geven.
2. Tik op VOLGENDE.

2 PDM voor de eerste keer instellen

Andere bolusinstellingen

De overige bolusinstellingen worden gebruikt, ongeacht of de boluscalculator is in- of uitgeschakeld.

Maximale bolus

U kunt op de PDM geen bolus aanvragen die hoger is dan de ingestelde maximale bolus. Er wordt een bericht weergegeven als de boluscalculator een hogere bolus berekent.

1. Tik op het veld Max. bolus en gebruik de numerieke toetsen om uw maximale bolus op te geven. Tik op het vinkje om het numerieke blok te sluiten.
2. Tik op VOLGENDE.

Instelling verlengde bolus

Het verlengen van een bolus betekent dat een maaltijdbolus gedurende een langere tijd kan worden toegediend. Zie pagina 155 voor een beschrijving van de functie voor verlengde bolus.

1. Met de knop Verlengde bolus kunt u de functie voor verlengde bolus in- en uitschakelen.
2. Tik op KLAAR.
De PDM start opnieuw op.

Instellen PDM gereed

U kunt uw PDM nu gaan gebruiken. Ga naar "Een Pod voor de eerste keer activeren" op pagina 38 wanneer u zover bent om uw eerste Pod te activeren.

Tip: Zie "Schermweergave" op pagina 102 voor het aanpassen van de time-out of de helderheid van het PDM-scherm.

Opmerking: De bevestigings- en programmaherinneringen zijn standaard ingeschakeld. Deze herinneringen zorgen ervoor dat de PDM of Pod een pieptoon aan het begin en het einde van bolussen en tijdelijke basaalsnelheden laat horen, en ook één keer per uur tijdens een langdurige bolus of tijdelijke basaalsnelheid. Zie "Bevestigingsherinneringen" en "Programmaherinneringen" op pagina 111 voor meer informatie.

HOOFDSTUK 3

Uw Pod vervangen

Beginnen met het vervangen van de Pod

Het vervangen van uw Pod bestaat uit het deactiveren van uw huidige Pod en het activeren van een nieuwe Pod.

Uw Pod moet om de 48 tot 72 uur (2 tot 3 dagen) of na het toedienen van 200 eenheden insuline worden vervangen. Overleg dit met uw zorgverlener of raadpleeg het insulinelabel om na te gaan of u de Pod vaker moet vervangen.

Waarschuwing:

Gebruik geen Pod als u allergisch bent voor acrylpleister of een tere of gemakkelijk te beschadigen huid hebt.

Omdat bij de Pod alleen snelwerkende U-100 insuline wordt gebruikt, loopt u een groter risico op het krijgen van hyperglykemie als het toedienen van de insuline wordt onderbroken. Ernstige hyperglykemie kan leiden tot diabetische ketoacidose (DKA). DKA kan symptomen veroorzaken zoals buikpijn, misselijkheid, braken, ademhalingsmoeilijkheden, shock en coma en kan leiden tot de dood. Als de toediening van insuline om de een of andere reden wordt onderbroken, moet u het tekort aan insuline opheffen. Vraag uw zorgverlener om instructies over hoe te handelen bij een onderbreking van de insulinetoediening, waaronder het injecteren van snelwerkende insuline.

De Pod en de bijbehorende accessoires, zoals de naalddop, bevatten kleine onderdelen die kleine kinderen kunnen inslikken. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen.

De stappen voor het deactiveren of activeren van een Pod zijn afhankelijk van het feit of u wel of geen actieve Pod hebt:

- Ga naar "Een Pod voor de eerste keer activeren" op pagina 38 wanneer u voor de eerste keer een Pod gaat activeren.
- Ga naar "Een actieve Pod deactiveren" op pagina 38 als u op dit moment een actieve Pod hebt.
- Ga naar "Geen actieve Pod" op pagina 39 als u uw laatst gebruikte Pod reeds hebt gedeactiveerd.

3 Uw Pod vervangen

Een Pod voor de eerste keer activeren

Uw verpleegkundige/begeleider zal u helpen bij het instellen van uw eerste Pod.

Nadat u de PDM hebt ingesteld, wordt in het Home-scherm het bericht "Geen actieve Pod" weergegeven.

1. Tik op NIEUWE POD INSTELLEN.
2. Ga naar "Vorbereidende stappen voor het vervangen van een Pod" op pagina 40.

Een actieve Pod deactiveren

Een actieve Pod deactiveren en verwijderen:

1. Ga naar het scherm voor het vervangen van Pods:

Home > tabblad Pod-info >
POD-GEGEVENS BEKIJKEN

of


Menupictogram (☰) > Pod

2. Tik op POD VERVANGEN en vervolgens op POD DEACTIVEREN.

Als er een tijdelijke basaalsnelheid of verlengde bolus bezig was, wordt die nu geannuleerd.

Zie "Fout bij deactiveren van een Pod" op pagina 132 als u een communicatiefoutbericht te zien krijgt.


Waarschuwing: Breng geen nieuwe Pod aan zolang u de oude Pod niet hebt gedeactiveerd en verwijderd. Een Pod die niet op de juiste manier is gedeactiveerd, blijft insuline toedienen zoals geprogrammeerd. U loopt dan het risico dat u te veel insuline krijgt toegediend wat mogelijk hypoglykemie kan veroorzaken.

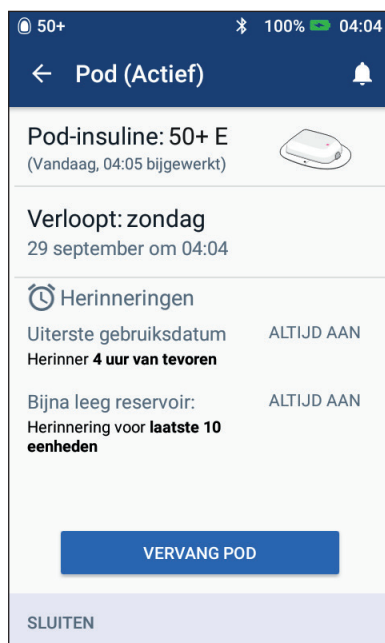

3. Wanneer in de groene banner wordt aangegeven dat u de Pod moet vervangen, verwijder dan de gedeactiveerde Pod van uw lichaam:

- a. Trek de randen van de hechtstrip voorzichtig los van uw huid en verwijder de gehele Pod.

Tip: Trek de Pod voorzichtig los van uw huid om mogelijke irritatie van uw huid te voorkomen.

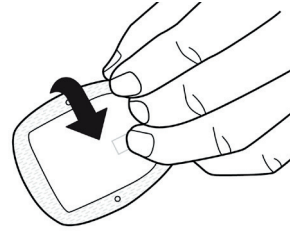


- b. Verwijder eventueel achterblijven kleefstof met water en zeep van uw huid of gebruik indien nodig een speciale remover.
 - c. Controleer of de infusieplaats niet is ontstoken (zie "Voorkomen dat de infusieplaats ontstoken raakt" op pagina 51).
 - d. Gooi de gebruikte Pod weg volgens de plaatselijke regels voor afvalverwerking.
4. U activeert een nieuwe Pod door op NIEUWE POD INSTELLEN te tikken.
 5. Ga naar "Vorbereidende stappen voor het vervangen van een Pod" op pagina 40.

Geen actieve Pod

Doe het volgende als u geen actieve Pod hebt en u een nieuwe Pod kunt gaan activeren:

1. Ga naar het scherm voor het vervangen van Pods:
Home > tabblad Pod-info > NIEUWE POD INSTELLEN
of
Menupictogram (☰) > Pod > NIEUWE POD INSTELLEN
2. Ga naar "Vorbereidende stappen voor het vervangen van een Pod" op pagina 40.

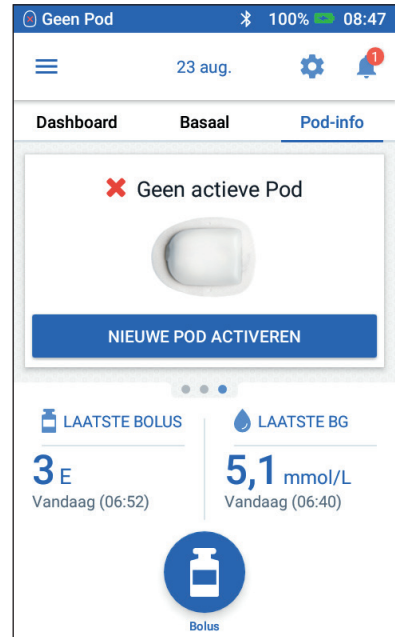

Voorbereidende stappen voor het vervangen van een Pod

Waarschuwing:

Gebruik NOOIT insuline die er troebel uitziet, omdat troebele insuline oud is of niet meer werkt. Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de insuline. Uw gezondheid loopt gevaar als u geen snelwerkende U-100 insuline gebruikt of als u insuline na de uiterste gebruiksdatum of niet-werkende insuline gebruikt.

Gebruik geen Pod waarvan de steriele verpakking is geopend of is beschadigd of als u de Pod na het openen van de verpakking hebt laten vallen, omdat dit de kans op infectie verhoogt. Pods zijn steriel zolang de verpakking niet is geopend of niet is beschadigd.

Gebruik geen Pod die is beschadigd. Een beschadigde Pod dient de insuline mogelijk niet nauwkeurig toe of werkt anderszins niet goed.

Gebruik geen Pod als de uiterste gebruiksdatum op de verpakking is verstreken.

Om de mogelijkheid van infectie op de plaats waar de Pod wordt aangebracht, tot een minimum te beperken, moet u de Pod pas na het volgen van de aseptische techniek aanbrengen. Dit houdt het volgende in:

- Was uw handen.
- Veeg de insulineflacon schoon met een alcoholdoekje.
- Maak de infusieplaats schoon met water en zeep of gebruik een alcoholdoekje.
- Houd steriele materialen uit de buurt van mogelijke ziektekiemen.

1. Zorg dat u de volgende benodigdheden bij de hand hebt:
 - Een flacon met snelwerkende U-100 insuline die is goedgekeurd voor gebruik in het Omnipod DASH®-systeem
 - Een ongeopende DASH® Pod (bekijk het Omnipod DASH®-logo op het deksel van het Pod-bakje)
 - Alcoholdoekjes
 - Uw Omnipod DASH® PDM
2. Was uw handen voordat u begint en zorg ervoor dat uw handen schoon blijven tijdens het vervangen van de Pod.
3. Controleer volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of de insuline nog goed is.

4. Controleer of de verpakking van de Pod niet is beschadigd. Als de verpakking niet is beschadigd, opent u de verpakking en controleert u de Pod op eventuele beschadigingen.
5. Als de insuline of de Pod kouder is dan 10 °C, laat u de insuline of de Pod eerst opwarmen tot kamertemperatuur voordat u verdergaat.

De spuit met insuline vullen


De volgende stap is het met insuline vullen van de spuit (de "vulspuit") die bij de Pod werd geleverd:

1. Maak de bovenkant van de flacon met insuline schoon met een alcoholdoekje.
2. Draai de vulnaald goed vast op de vulspuit.
3. Trek het dopje van de naald. Bewaar dat dopje omdat u het naderhand weer nodig hebt.
4. Zoek uit hoeveel insuline u in de Pod moet inbrengen. Als u de Pod bijvoorbeeld 72 uur gaat gebruiken, moet u weten hoeveel insuline u de volgende 72 uur nodig hebt. Uw zorgverlener kan u daarbij helpen.



Opmerking: De Pod werkt alleen bij een minimum van 85 eenheden snelwerkende U-100 insuline. De Pod kan maximaal 200 eenheden snelwerkende U-100 insuline toedienen.

5. Zuig lucht die overeenkomt met de gewenste hoeveelheid insuline, op in de spuit.
6. Steek de naald in de insulineflacon en injecteer lucht. Door lucht te injecteren, wordt insuline nadien gemakkelijker opgezogen.
7. Draai de flacon met snelwerkende U-100 insuline en de vulspuit om. Trek de zuiger omlaag om de gewenste hoeveelheid insuline vanuit de flacon in de vulspuit op te zuigen.
 - Vul de vulspuit minimaal tot aan MIN.
 - U vult de Pod met voldoende insuline om 200 eenheden toe te dienen door de zuiger naar beneden te trekken totdat die niet verder kan. Dat is onder de 200-markering.

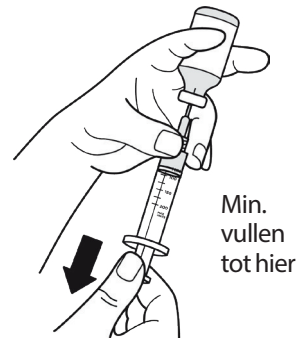

3 Uw Pod vervangen

8. Terwijl de naald nog in de flacon steekt, tikt u met een vinger tegen de zijkant van de vulspuit zodat eventuele luchtbelletjes omhoogkomen in de vulspuit. Duw vervolgens op de zuiger zodat de luchtbelletjes vanuit de vulspuit in de insulineflacon gaan. Trek indien nodig de zuiger weer omlaag om de vulspuit met de gewenste hoeveelheid insuline te vullen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat er geen lucht in de vulspuit zit wanneer u de insuline in de Pod gaat injecteren. Lucht in de insuline in de Pod kan ervoor zorgen dat de toediening van insuline wordt onderbroken.

9. Trek de naald uit de flacon.

De Pod vullen, koppelen en aanbrengen

Waarschuwing: Voordat u een Pod met insuline vult, moet u eerst controleren of er binnen een straal van 1,5 m van uw PDM geen andere Pods zijn geactiveerd.

Voorzichtig: Steek de vulspuit alleen in de vulpoort van de Pod. Steek de vulspuit niet meer dan één keer in de vulpoort. Gebruik alleen de vulspuit en de vulnaald uit de Pod-verpakking. De vulspuit mag maar één keer worden gebruikt en alleen bij het Omnipod DASH®-systeem.


De Pod met insuline vullen

De Pod vullen met insuline (schermstap 1):

1. Let op de pijl aan de onderkant van de Pod. Deze pijl wijst naar de vulpoort voor insuline.

Tip: U kunt de Pod in het bakje laten staan terwijl u Pod vult met insuline en koppelt.

2. Steek de vulspuit recht en niet schuin in de vulpoort.
3. Duw de zuiger langzaam omlaag om de insuline naar de Pod over te brengen.

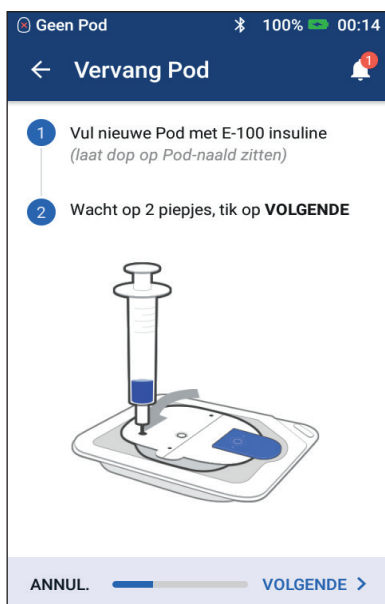

4. Tijdens het vullen van de Pod klinken er twee pieptonen. U moet ervoor zorgen dat de vulspuit helemaal leeg is, ook als u eerder de twee pieptonen hebt gehoord.

Opmerking: De Pod werkt alleen bij een minimum van 85 eenheden insuline. Er klinken twee pieptonen als de Pod met 85 eenheden insuline is gevuld. Wanneer u de Pod met meer dan 85 eenheden hebt gevuld en u hoort de twee pieptonen niet, belt u de klantenservice.

Opmerking: Nadat de Pod is gevuld, gaat u direct door met de volgende stap. Wanneer u langer dan twee uur wacht met het koppelen van de gevulde Pod aan de PDM, kan de Pod niet meer worden gebruikt.

Waarschuwing:

Gebruik NOOIT een Pod als u weerstand voelt wanneer u op de zuiger drukt. Dit kan resulteren in een onderbroken insulinetoeediening.


Spuut NOOIT lucht in de vulpoort. Dit kan resulteren in een onbedoelde of onderbroken insulinetoeediening.

5. Verwijder de naald uit de vulpoort voor insuline. De poort sluit zich automatisch zelf af. Er lekt geen insuline wanneer de naald wordt verwijderd.
6. Plaats de beschermdop terug op de spuitnaald en verwijder de naald van de vulspuit.

De PDM en de Pod koppelen

De PDM en de Pod koppelen (schermstap 2):

1. Plaats de PDM tegen de Pod aan zodat ze elkaar aanraken. De Pod zou hierbij in het plastic bakje moeten zitten.
2. Tik op VOLGENDE.
 - Als er zich meer dan één gevulde DASH Pod binnen het bereik bevindt, wordt dat op de PDM gemeld. Zorg ervoor dat u minimaal 4,5 m (15 feet) van een andere DASH Pod vandaan bent en tik op PROBEER OPNIEUW.
 - Als er zich één Pod binnen het bereik bevindt, voert het Omnipod DASH®-systeem een reeks veiligheidscontroles uit en wordt de Pod automatisch voorgevuld.
3. Luister of u het geluidssignaal van de PDM hoort waarmee wordt aangegeven dat de Pod is gekoppeld aan de PDM, waarna u de Pod kunt aanbrengen.

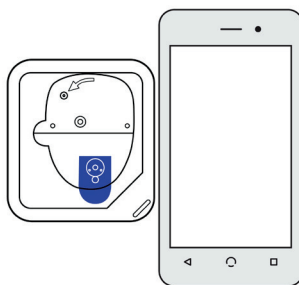

3 Uw Pod vervangen

Opmerking: Na het koppelen zou de PDM moeten kunnen communiceren met een Pod die op maximaal 1,5 m afstand is. Afhankelijk van de locatie kan de PDM soms zelfs over een afstand van 15 meter met een Pod communiceren.

Opmerking: Na het koppelen geeft de Pod om de 5 minuten een geluidssignaal tot u de Pod aanbrengt. Als u de Pod na het koppelen niet binnen 60 minuten aanbrengt, mag u de Pod niet meer gebruiken.

Zie "Communicatiefouten" op pagina 130 als u een bericht over een communicatiefout krijgt terwijl u probeert uw Pod te koppelen.

De plaats voor de Pod gereedmaken

Een plaats voor de Pod selecteren (schermstap 3):


Richtlijnen voor het kiezen van een plaats voor de Pod

Overleg aan de hand van de volgende richtlijnen met uw zorgverlener wat de beste plaats is voor het aanbrengen van de Pod:

- Een ideale plaats is een plaats met vetweefsel.
- Een ideale plaats is de plaats waar u gemakkelijk bij kunt en die u goed kunt bekijken.
- De plaats moet zich op minstens 2,5 cm afstand van de vorige plaats bevinden om huidirritatie te voorkomen.
- De plaats moet zich op minstens 5 cm afstand van uw navel bevinden.




- Breng de Pod niet aan waar die in contact kan komen met een riem of een broekband of rokband of waar knellende kleding tegen de Pod kan schuren of de Pod kan verplaatsen.
- Plaats de Pod niet op plaatsen met huidplooien.
- Plaats de Pod niet op een moedervlek, tatoeage of litteken omdat op die plaatsen de insuline niet altijd goed wordt opgenomen.
- Plaats de Pod niet op huid die is ontstoken.

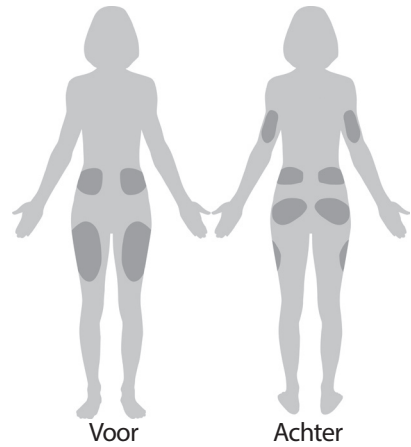

Plaatsoverzicht voor Pod (optioneel)


Het Pod-plaatsoverzicht is een optionele functie waarmee u kunt bijhouden waar u een Pod hebt aangebracht en waar die nu is aangebracht. Deze optie is alleen beschikbaar als de instelling voor Pod-plaatsen is ingeschakeld (zie "De instelling Pod-plaatsen" op pagina 107).

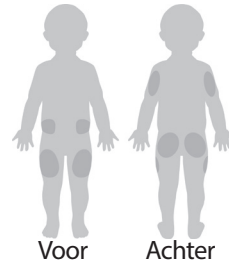

1. Tik op **POD-PLAATSEN NOTEREN** om het gelijknamige scherm te openen.
2. Tik op het tabblad **VOORKANT** of **ACHTERKANT** om een plek op uw lichaam te selecteren voor uw Pod. Om te voorkomen dat u een plaats selecteert waarop u onlangs een Pod hebt aangebracht, worden op het scherm de twee laatste datums weergegeven waarop u een plaats had geselecteerd.

3 Uw Pod vervangen

3. Tik op een cirkel om de plaats op uw lichaam aan te geven waar u uw nieuwe Pod wilt aanbrengen. Binnen de geselecteerde cirkel staat een blauw punt. Tik nogmaals als u die plaats wilt deselecteren.

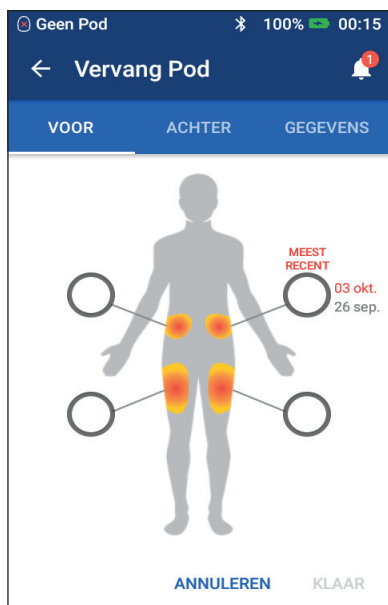

4. Tik op het tabblad GEGEVENS om informatie over de plaatsing van deze Pod toe te voegen. U zou bijvoorbeeld de tekst "Omhoog gericht" of "Omlaag gericht" kunnen toevoegen om de richting van de Pod te beschrijven.
- a. U voegt nieuwe gegevens toe door te tikken op NIEUW TOEVOEGEN en vervolgens de gewenste gegevens in te voeren. Tik op TOEVOEGEN wanneer u daarmee klaar bent. De nieuwe gegevens worden aan de lijst toegevoegd.
- Opmerking:** Op de PDM wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de tekst Omhoog gericht bijvoorbeeld invoeren als "Omhoog gericht", "OMHOOG GERICHT" of "omhoog gericht".
- b. Selecteer gegevens voor de nieuwe Pod door op de cirkel naast die gegevens te tikken. U kunt voor elke Pod slechts één gegeven invoeren. Door nogmaals te tikken, deselecteert u de gegevens.
- Opmerking:** U verwijdert gegevens over de plaats door te tikken op  naast de gegevens.
5. Tik op KLAAR wanneer u daarmee bent om terug te gaan naar het scherm Pod vervangen.

Voorbereiden van de infusieplaats

Het risico op een infectie op de infusieplaats tot een minimum beperken:

1. Was uw handen met water en zeep.
2. Was de infusieplaats voor de Pod met water en zeep.

Opmerking: Antibacteriële zeep kan de huid irriteren, met name op de infusieplaats. Vraag uw zorgverlener hoe u huidirritatie moet behandelen.

3. Droog de infusieplaats met een schone handdoek.
4. Gebruik een alcoholdoekje om de infusieplaats te ontsmetten. Begin in het midden van de plaats en veeg zachtjes met een draaibeweging vanuit het midden naar buiten.
5. Laat de infusieplaats aan de lucht drogen. Blaas de plaats niet droog.

De naalddop van de Pod verwijderen

Verwijder de naalddop van de Pod (scherm stap 4):

1. Draai de Pod zodat de naalddop omhoog wijst en naar u toe is gericht.
2. Plaats uw duim op de onderkant (vlakke rand) van de naalddop en trek de dop omhoog. De dop klikt los. Gooi de dop weg.

Wanneer u de naalddop verwijdert, kan er aan het einde van de canule of in de well een druppel insuline te zien zijn.

3. Als een van de volgende situaties zich voordoet, tikt u op ANNULEREN, gooit u de Pod weg en begint u opnieuw met een nieuwe Pod:

- De Pod is gevallen waardoor de Pod niet meer steriel is.
- De Pod of de hechtstrip op de Pod is nat, vuil of beschadigd.
- De canule steekt uit de bescherm laag van de pleister wanneer de naalddop is verwijderd.

Waarschuwing: Controleer of de canule niet uit de bescherm laag van de pleister steekt nadat de naalddop van de Pod is verwijderd.



3 Uw Pod vervangen

4. Trek de witte papieren bescherm laag aan de trekklipjes los van de hechtstrip. Let op dat u de hechtstrip niet van de Pod lostrekt. Zorg ervoor dat de hechtstrip niet dubbelvouwt.

De Pod aanbrengen

De Pod controleren en aanbrengen (schermstap 5):


1. Controleer de Pod. Tik op ANNULEREN en gooi de Pod weg als de hechtstrip is gevouwen, gescheurd of beschadigd en begin opnieuw met een nieuwe Pod.
2. Plaats de Pod als volgt:
 - Horizontaal of diagonaal op uw buik, heup, onderrug of bil.

- Omhoog of omlaag gericht of enigszins schuin op uw bovenarm of dij.

3. Breng de Pod aan op de gekozen infusieplaats en druk de Pod stevig aan zodat die goed vastzit op uw huid.

De hechtstrip kan slechts één keer worden gebruikt. U

kunt een aangebrachte Pod niet verplaatsen naar een andere infusieplaats.

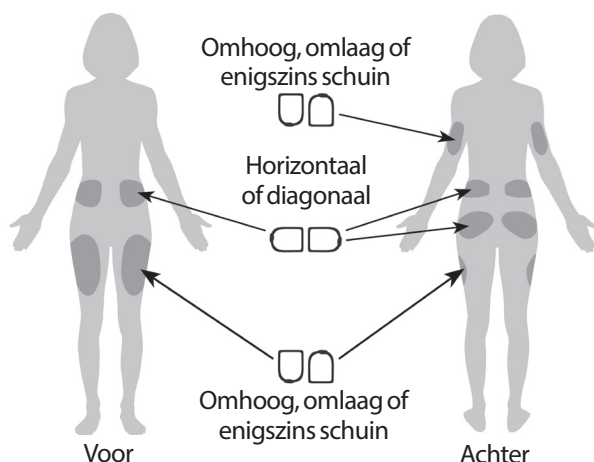

Opmerking: Door de hechtstrip blijft de Pod maximaal drie dagen stevig op zijn plaats zitten. Er zijn diverse producten in de handel die indien nodig kunnen worden gebruikt om de Pod beter vast te plakken. Vraag uw zorgverlener naar deze producten. Gebruik geen bodylotion, crème, sprays of olie in de buurt van de infusieplaats, omdat deze producten ervoor kunnen zorgen dat de Pod loslaat.

Insulinetoediening starten

Met de insulinetoediening beginnen (schermstap 6):

Waarschuwing: Als u een Pod aanbrengt op uw bovenarm waar weinig vetweefsel zit, knijpt u tijdens de volgende stap in uw arm rond de Pod. Er kunnen zich verstoppingen voordoen wanneer u dit niet doet op een plaats met weinig vet.



1. Als u de Pod op een gebied met weinig vetweefsel hebt aangebracht, knijp dan in de huid rond de Pod.
2. Tik op START.
3. Bevestig dat de Pod stevig op uw lichaam is aangebracht en tik vervolgens op BEVESTIGEN.
4. Als u in uw arm knijpt, laat uw arm dan los wanneer er op de PDM wordt gevraagd of de canule op de juiste manier is ingebracht.

Nadat de canule is ingebracht, wordt de canule automatisch door de Pod met insuline gevuld. De Pod begint insuline conform het actieve basaalprogramma op basaalsnelheid toe te dienen.

De canule kan bij elke Pod maar één keer worden ingebracht.


Voorzichtig: Controleer altijd de alarmfunctie na het vervangen van de Pod (zie "Alarmen controleren" op pagina 105).

3 Uw Pod vervangen

De infusieplaats controleren

De Pod en de fusieplaats na het inbrengen van de canule controleren:

1. Kijk door het kijkvenstertje aan de rand van de Pod om te controleren of de canule in de huid is ingebracht. De canule is lichtblauw van kleur.
2. Controleer of het gedeelte (zie de afbeelding) roze van kleur is. Dit is een extra controle om te kijken of de canule is ingebracht.
3. Controleer of de infusieplaats niet vochtig is van de insuline of naar insuline ruikt. De geur van insuline of vochtigheid kan betekenen dat de canule is losgeraakt.

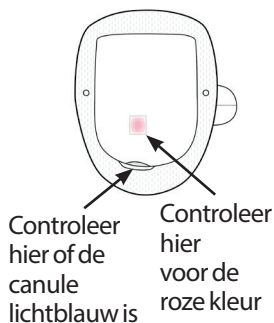

Waarschuwing: Controleer de infusieplaats na inbrengen van de canule om er zeker van te zijn dat de canule correct is ingebracht. Als de canule niet goed is ingebracht, kan er hyperglykemie optreden.

Als er bloed in de canule zit, controleer dan uw glucose vaker om er zeker van te zijn dat er niets mis is met de insulinetoediening. Vervang de Pod als uw bloedglucosespiegel onverwacht hoger blijkt te zijn dan normaal.

4. Tik op NEE als de canule niet correct is ingebracht. Tik vervolgens op POD DEACTIVEREN. Vervolgens begint u helemaal opnieuw met een nieuwe Pod.
5. Tik op JA als de canule goed is ingebracht.
In een groene banner wordt aangegeven dat de Pod is ingesteld. Op het scherm staan verder nog gegevens over de Pod en een lijst met herinneringen.
6. Bekijk de lijst met actieve herinneringen en tik vervolgens op SLUITEN.

Waarschuwing: Injecteer nooit insuline (of iets anders) in de vulpoort als de Pod op uw lichaam is aangebracht. Dit kan resulteren in een onbedoelde of onderbroken insulinetoediening.

Voorkomen dat de infusieplaats ontstoken raakt

Controleer de infusieplaats minstens één keer per dag:

- Let op tekenen van infectie, waaronder pijn, zwellingen, roodheid, afscheiding of een warm gevoel op de infusieplaats. Als u vermoedt dat de infusieplaats is ontstoken, verwijdt u onmiddellijk de Pod en brengt u een nieuwe Pod op een andere plaats aan. Neem vervolgens contact op met uw zorgverlener.
- Vervang bij problemen met de Pod deze door een nieuwe Pod.

Waarschuwing:

Controleer regelmatig om er zeker van te zijn dat de Pod en de zachte canule goed zijn aangebracht en stevig zijn bevestigd. Door een losse of losgeraakte canule wordt de insulinetoeediening onderbroken. Controleer of u insuline voelt of ruikt, wat erop kan wijzen dat de canule is losgeraakt.

Doe het volgende als u merkt dat de infusieplaats ontstoken is:

- Verwijder onmiddellijk de Pod en breng een nieuwe Pod op een andere infusieplaats aan.
- Neem contact op met uw zorgverlener. Behandel de ontsteking volgens de instructies van uw zorgverlener.

Meer informatie over het gebruik van de Pod

Tip: Zorg voor routine zodat u uw Pod op een voor u geschikt moment kunt vervangen. Als u weet dat er zich iets kan gaan voordoen waardoor u uw Pod niet kunt vervangen, vervangt u de Pod eerder om te voorkomen dat de insulinetoediening wordt onderbroken.

Zie de volgende gedeelten voor meer informatie over het zo effectief mogelijk gebruiken van uw Pods:

- Zie "Zorgdragen voor uw Pod en insuline" op pagina 135 voor het goed omgaan met uw Pod.
- Zie "Alarmen, kennisgevingen en communicatiefouten" op pagina 119 voor informatie over de Pod-alarmen.
- Als er op uw Pod een alarmsignaal klinkt, probeert u dat alarm eerst uit te schakelen met uw PDM. Als dat niet lukt, schakelt u het Pod-alarm handmatig uit (zie "Een niet-opgelost alarm uitschakelen" op pagina 133).
- Zie "Lijst met kennisgevingen" op pagina 128 en "Lijst met informatiesignalen" op pagina 129 voor een beschrijving van de pieptonen (informatief en kennisgeving) van de Pod.
- Zie "Communicatiefouten" op pagina 130 voor het afhandelen van situaties waarin de PDM niet kan communiceren met de Pod.
- Doe het volgende als er op het tabblad Pod-info in het Home-scherf wordt gemeld dat er geen communicatie met de Pod is:
 - Ga naar het Menupictogram (≡) > Pod om de laatste keer te vinden dat er communicatie tussen de PDM en de Pod was.
 - Ga naar het Menupictogram (≡) > Pod > POD VERVANGEN als u de communicatie met de Pod niet kunt herstellen en de Pod wilt vervangen.
- Zie "Wisselwerking tussen PDM en Pod" op pagina 145 voor een beschrijving van de manier waarop de PDM communiceert met de Pod.

HOOFDSTUK 4

Bloedglucosewaarden invoeren

Over het testen van uw bloedglucose

Waarschuwing: Volg de richtlijnen van uw zorgverlener voor het op de juiste manier controleren van uw bloedglucose.

U kunt testen of uw bloedglucose niet te laag is wanneer:

- u voelt zich zwak, transpireert, bent nerveus, hebt hoofdpijn of voelt zich lichtgeraakt of verward.
- u te laat hebt gegeten na het toedienen van insuline;
- uw zorgverlener aangeeft dat u moet testen.

Uw bloedglucosewaarde invoeren

Opmerking: Voer alleen uw bloedglucosewaarden in en niet de waarden van de controleoplossing. Van alle waarden die u invoert, wordt het gemiddelde genomen in de historiegegevens van uw bloedglucose.

Uw bloedglucosewaarde invoeren:

1. Controleer uw bloedglucose volgens de gebruiksaanwijzingen van de BG-meter.
2. Ga naar het scherm 'BG invoeren' op uw PDM:
Menupictogram (≡) > BG invoeren
3. Een bloedglucosewaarde handmatig invoeren of bewerken:
 - a. Tik op het vakje in de cirkel.
 - b. Gebruik de numerieke toetsen om uw bloedglucosewaarde in te voeren.



4 Bloedglucosewaarden

c. Tik op het vinkje om het numerieke blok te sluiten.

Opmerking: U kunt een bloedglucosewaarde ook invoeren door het cirkeltje te slepen (zie "Een schuifknop gebruiken" op pagina 6). Wanneer u die schuifknop gebruikt, worden kort de knoppen "+" en "-" weergegeven. U kunt de bloedglucosewaarde zeer nauwkeurig aanpassen door op deze knoppen te tikken.

Opmerking: Wanneer u een bloedglucosewaarde hoger dan 33,3 mmol/L invoert, wordt die waarde door de PDM als "HI" opgeslagen. Wanneer u een bloedglucosewaarde lager dan 1,1 mmol/L invoert, wordt die waarde door de PDM als "LO" opgeslagen.

Zie "Hoe bloedglucosewaarden worden weergegeven" op pagina 56 voor de betekenis van de schermkleuren en -berichten.

4. Optioneel: zie "Labelen van uw bloedglucosewaarde" op pagina 55 voor het toevoegen van een of meer informatielabels aan de bloedglucosewaarden die in de cirkel staan.
5. Doe het volgende nadat u de bloedglucosewaarde en eventuele labels hebt ingevoerd:
 - Tik op **TOEVOEGEN AAN CALCULATOR** om eventuele labels op te slaan en de bloedglucosewaarde in de boluscalculator in te voeren. Ga vervolgens naar "Bolusberekening met de boluscalculator" op pagina 59. Als de boluscalculator is uitgeschakeld of niet beschikbaar is of als de toediening van de insuline is onderbroken, wordt **TOEVOEGEN AAN CALCULATOR** niet weergegeven.
 - Tik op **OPSLAAN** om de bloedglucosewaarde en eventuele labels in de historiegegevens op te slaan. **OPSLAAN** wordt niet weergegeven als u dit scherm vanuit de boluscalculator hebt geopend.
 - Tik achtereenvolgens op **ANNULEREN** en **JA** om het scherm te sluiten zonder de bloedglucose of labels op te slaan.

De huidige tijd wordt door de PDM geregistreerd als de tijd waarop de bloedglucose is gemeten.


Labelen van uw bloedglucosewaarde

U kunt informatielabels aan uw gemeten bloedglucosewaarde toevoegen zodat u die naderhand nog eens kunt bekijken. U kunt uw bloedglucosewaarde bijvoorbeeld labelen als de waarde van uw bloedglucose vóór de maaltijd.

Een label aan uw huidige bloedglucosewaarde toevoegen:

1. Tik op **LABELS TOEVOEGEN**.
2. Tik op een label om dat te selecteren. U kunt maximaal vier labels toevoegen.
3. U verwijdert een label door nogmaals op dat label te tikken om het te deselecteren.

U kunt labels voor lage en hoge bloedglucosewaarden toevoegen en verwijderen, net zoals bij elke andere waarde.

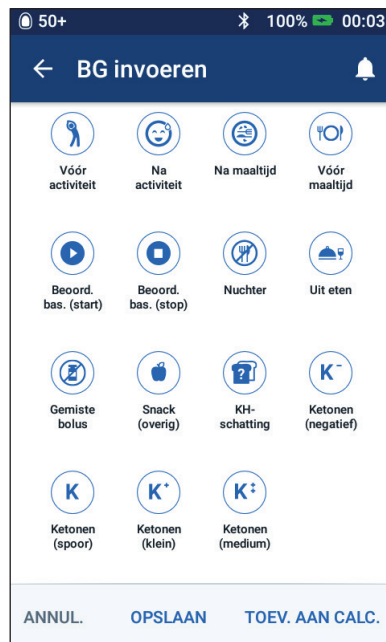


4 Bloedglucosewaarden

Hoe bloedglucosewaarden worden weergegeven

Op de PDM wordt de bloedglucosewaarde in een gekleurde cirkel weergegeven. De cirkel is:

- Geel als uw bloedglucose hoger is dan uw BG-doelbereik.
- Groen als uw bloedglucose binnen uw BG-doelbereik valt.
- Rood als uw bloedglucose lager is dan uw BG-doelbereik.

Zie "Instellingen bloedglucose - Bereik BG-doel" op pagina 113 voor het wijzigen van uw BG-doelbereik.

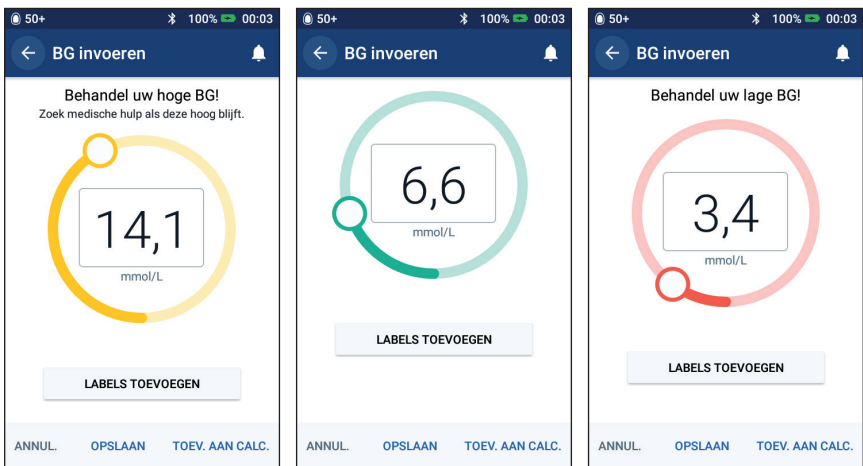

Op de PDM verschijnt een waarschuwing bij een te hoge of te lage bloedglucosewaarde.

Bloedglucosewaarde	Schermsweergave	Waarschuwingsbericht op het scherm
Boven 33,3 mmol/L of HO	HI	Behandel uw hoge BG! Zoek medische hulp als deze hoog blijft.
Tussen 14,0 en 33,3 mmol/L	<BG-meting>	Behandel uw hoge BG! Zoek medische hulp als deze hoog blijft.
Tussen 3,9 en 13,9 mmol/L	<BG-meting>	
Tussen 1,2 en 3,8 mmol/L	<BG-meting>	Behandel uw lage BG!
Tussen 0 en 1,1 mmol/L of LA	LO	Behandel uw lage BG!

Als de bloedglucose HO of hoger dan 33,3 mmol/L is, wordt HI in de historie geregistreerd. Dit betekent een ernstige hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel). Als de bloedglucose LA of lager dan 1,2 mmol/L is, wordt LO in de historie geregistreerd. Dit betekent een ernstige hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel). HOGE en LAGE waarden worden opgeslagen in uw bloedglucosehistorie maar worden niet gebruikt bij het berekenen van gemiddelden.

Waarschuwing:

Bloedglucosewaarden onder 3,9 mmol/L wijzen op een hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel). Bloedglucosewaarden boven 13,9 mmol/L wijzen op een hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel). Volg de behandelingsvoorstellen van uw zorgverlener.

Als na een meting "Behandel uw lage BG!" wordt weergegeven en u zich zwak voelt, transpireert, nerveus bent, hoofdpijn hebt of lichtgeraakt of verward bent, volgt u het advies van uw zorgverlener op om uw hypoglykemie te laten behandelen.

Als na een meting "Behandel uw hoge BG! Zoek medische hulp als deze hoog blijft." wordt weergegeven en u zich moe voelt, dorst hebt, veel moet plassen of wazig ziet, volgt u het advies van uw zorgverlener op om uw hyperglykemie te laten behandelen.

"LAGE" of "HOGE" bloedglucosewaarden kunnen duiden op mogelijk ernstige omstandigheden waarvoor onmiddellijk een arts moet worden geraadpleegd. Als de aandoening niet wordt behandeld, kan dit snel leiden tot diabetische ketoacidose (DKA), shock, coma of de dood.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

HOOFDSTUK 5

Een bolus insuline toedienen

Een bolus insuline is bedoeld om een hoge bloedglucosespiegel te verlagen en de koolhydraten (KH) in een maaltijd op te vangen. Een bolus insuline wordt toegediend als aanvulling op de insuline uit een basaalprogramma of een tijdelijke basaalsnelheid. Zie pagina 155 voor meer informatie over bolussen.

Waarschuwing: Controleer uw bloedglucosespiegel vaker als u de functie voor een verlengde bolus gebruikt; zo voorkomt u hypoglykemie of hyperglykemie.

Voorzichtig: Meet altijd eerst uw bloedglucosespiegel voordat u een bolus toedient.

Ga naar "Handmatig berekende bolus" op pagina 65 als de boluscalculator is uitgeschakeld of tijdelijk niet beschikbaar is.

Bolusberekening met de boluscalculator

De boluscalculator berekent een voorgestelde hoeveelheid bolus insuline om een verhoogde bloedglucosespiegel te corrigeren (een correctiebolus) en/of om koolhydraten in een maaltijd of snack op te vangen (een maaltijdbolus). Zie pagina 156 voor meer informatie over de werking van de boluscalculator.

Als u een bloedglucosewaarde maar geen KH invoert, berekent de boluscalculator alleen een correctiebolus. Als u KH maar geen bloedglucosewaarde invoert, berekent de boluscalculator alleen een maaltijdbolus. Als u zowel een bloedglucosewaarde als KH invoert, maakt de boluscalculator bij het berekenen van een voorgestelde bolus gebruik van beide factoren.

Zie "Instellingen voor de boluscalculator" op pagina 115 voor het wijzigen van uw persoonlijke instellingen die door de boluscalculator worden gebruikt, en voor het in- en uitschakelen van de boluscalculator.

5 Een bolus insuline toedienen

Uw maaltijdinformatie invoeren

De koolhydraten ("KH") voor uw maaltijd invoeren:

1. Tik op het Home-scherf op de knop Bolus (📱).

Tip: Als u de boluscalculator niet wilt gebruiken en u weet al hoeveel bolus u wilt toedienen, tikt u op de knop Totale bolus om het numerieke blok te openen. Voer de hoeveelheid bolus in en tik op het vinkje. Ga vervolgens naar "Een onmiddellijke of verlengde bolus toedienen" op pagina 62.

2. U voert de KH in door te tikken op het veld KH invoeren. Voer het aantal grammen KH in en tik op het vinkje.

Opmerking: Vraag uw zorgverlener om instructies voor het berekenen van het aantal grammen KH.

3. Bekijk de voorgestelde maaltijdbolus, die naast de grammen KH wordt weergegeven.
4. Tik op BEREKENINGEN als u meer wilt weten over het berekenen van bolussen.

Opmerking: Als u uw bloedglucosewaarde hebt ingevoerd, is de maaltijdbolus mogelijk al aangepast voor:

- De insuline 'on board' (IOB) van een vorige correctiebolus.
- De tegenovergestelde correctie als deze functie is ingeschakeld en uw bloedglucosewaarde lager is dan uw streefwaarde voor BG.

Zie "Regels boluscalculator" op pagina 164 voor meer informatie.

Opmerking: Als u uw bloedglucosewaarde niet hebt ingevoerd, is de maaltijdbolus voor IOB nog niet door de boluscalculator aangepast.

The screenshot shows the 'Boluscalculator' app interface. At the top, the status bar displays '50+', '100%', and '04:08'. The app title 'Boluscalculator' is in a dark blue header with a back arrow and a notification icon. The main area has two columns: 'Voer KH in' and 'Maaltijdbolus'. The 'Voer KH in' column has a large input field with '0' and a unit 'g'. Below it are 'BG' and 'Correctiebolus' fields, both showing '0 E'. A blue button 'BG INVOEREN' is at the bottom of this section. The 'Maaltijdbolus' column has a large input field with '0' and a unit 'E'. Below it is a label 'IOB van 0 E'. At the bottom, there are three buttons: 'ANNUL.', 'VERLENG', and 'BEVESTIG'. A 'Totale bolus' section with a 'BEREKENINGEN' button is also visible.

Uw bloedglucosewaarde invoeren

Opmerking: Hoewel de boluscalculator een voorgestelde bolusdosering kan genereren die alleen is gebaseerd op de koolhydraten in een maaltijd, moet u voor extra veiligheid en nauwkeurigheid altijd een recente bloedglucosewaarde invoeren. Zo kan de boluscalculator de voorgestelde bolus aanpassen aan uw huidige bloedglucosespiegel.

Een bloedglucosewaarde invoeren:

1. Tik op BG INVOEREN.

Als u de voorgaande 10 minuten uw bloedglucose hebt gemeten en die waarde is geregistreerd in uw PDM, wordt die waarde automatisch in het veld BG weergegeven. Sla de volgende stap over als u die waarde door de boluscalculator wilt laten gebruiken.

2. Tik op het vakje in de cirkel en voer uw bloedglucosewaarde in. U kunt een bloedglucosewaarde ook invoeren door het kleine cirkeltje te slepen.

Hoewel elke bloedglucosewaarde die u handmatig invoert, door de boluscalculator wordt gebruikt, moet u alleen een bloedglucosewaarde invoeren die u de afgelopen 10 minuten hebt gemeten.

Zie "Hoe bloedglucosewaarden worden weergegeven" op pagina 56 voor de betekenis van de kleuren en berichten die op het scherm BG invoeren worden weergegeven.

3. U kunt eventueel uw bloedglucosewaarden labelen door te tikken op LABELS TOEVOEGEN en vervolgens op een label te tikken. U deselecteert een label door er nogmaals op te tikken. U kunt maximaal vier labels toevoegen.
4. Tik op TOEVOEGEN AAN CALCULATOR. Het scherm Boluscalculator wordt weer geopend.
5. Bekijk de voorgestelde correctiebolus, die naast de bloedglucosewaarde wordt weergegeven. De correctiebolus is aangepast voor eventuele insuline 'on board' (IOB) (zie "Regels boluscalculator" op pagina 164).

5 Een bolus insuline toedienen

Een onmiddellijke of verlengde bolus toedienen

In het veld **Totale bolus** staat de voorgestelde bolus. Onder dit veld **Totale bolus** staat de hoeveelheid aanpassing van de IOB.

De bolus controleren en toedienen:

1. Controleer de voorgestelde bolus. U past die aan door te tikken op het veld **Totale bolus** en de juiste bolushoeveelheid in te voeren.
2. U controleert de berekeningen van de boluscalculator door te tikken op **BEREKENINGEN**. Mogelijk moet u omhoog of omlaag vegen om alle berekeningen te kunnen bekijken. Tik op **SLUITEN** wanneer u daarmee klaar bent (zie "Vergelijkingen boluscalculator" op pagina 162 voor meer informatie).

The screenshot shows the 'Boluscalculator' app interface. At the top, there's a status bar with '50+', '100%', and '04:08'. Below the title bar, there are two input fields: 'Totaal KH' with a value of '60' and 'Maaltijdbolus' with a value of '4 E'. Below these, there are two more input fields: 'BG (04:08)' with a value of '8,3 mmol/L' and 'Correctiebolus' with a value of '0,95 E'. A blue button labeled 'BG INVOEREN' is positioned below the BG input. At the bottom, there's a large box for 'Totale bolus' with the calculated value '4,95 E' and a blue button labeled 'BEREKENINGEN'. Below this box, it says 'Afgestemd op IOB van 0 E'. At the very bottom, there are three buttons: 'ANNUL.', 'VERLENG', and 'BEVESTIG'.

The screenshot shows the 'Bolusberekening' app interface. At the top, there's a status bar with '50+', '100%', and '04:08'. Below the title bar, there's a large box for 'Correctiebolus' with the value '0,95 E'. Below this box, there's a list of calculations: 'BG = 8,3, doel-BG = 5,6', 'Correctiefactor = 2,8', '(8,3-5,6) / 2,8 ≈ 0,96 E', 'Aanpassing maaltijd-IOB', 'Maaltijd-IOB = 0 E', '0,96 E - 0 E = 0,96 E', 'Afstemming correctie-IOB', 'Correctie-IOB = 0 E', '0,96 E - 0 E ≈ 0,96 E'. Below this list, there's a large box for 'Maaltijdbolus' with the value '4 E'. Below this box, there's a list of calculations: 'KH = 60 g, I/KH-verhouding = 15 g/E', '60 / 15 ≈ 4 E', 'Afstemming correctie-IOB'. At the bottom, there's a blue button labeled 'SLUITEN'.

3. U dient de volledige bolus toe door te tikken op BEVESTIGEN en verder te gaan met stap 5.
4. Een maaltijdbolus geheel of gedeeltelijk verlengen:

- a. Tik op VERLENG.

Opmerking: De optie VERLENG is beschikbaar wanneer er een maaltijdbolus is en de instelling voor verlengde bolus is ingeschakeld.

- b. Tik op het veld Nu en voer het percentage van de bolus in dat onmiddellijk moet worden toegediend. U kunt ook op het veld Verlengd tikken en het percentage invoeren dat moet worden verlengd.

Het aantal eenheden dat nu en gedurende de verlengde periode moet worden toegediend, wordt onder het percentage (%) weergegeven.

Opmerking: U kunt alleen het maaltijdgedeelte van de bolus verlengen. Een eventueel correctiegedeelte van de bolus wordt altijd onmiddellijk toegediend.

- c. Tik op het veld Duur om de duur voor het verlengde deel van de bolus in te voeren.
- d. Tik op BEVESTIGEN.

Verlengde bolus	
Nu	Verlengd
40 %	60 %
1,60 E	2,40 E
Duur (0,5 tot 8 u)	0,5 uur
Totale bolus 4,95 E	
Maaltijdbolus	4 E
Correctiebolus	0,95 E
ANNUL.	BEVESTIG

5 Een bolus insuline toedienen

5. Controleer de gegevens over de bolus op het scherm Bevestigen.

Onmiddellijke bolus: Op het scherm voor een onmiddellijke bolus worden de KH en bloedglucosewaarden weergegeven die voor de berekening van de bolus en ook voor de totale bolus zijn gebruikt.

50+

100%

04:43

← Bevestig

KH

60 g

← Gram KH

BG (04:43)

8,3 mmol/L

← Bloedglucosewaarde

Totale bolus

BEREKENINGEN

→ 3,15 E

Afgestemd op IOB van 4,55 E

← Afgestemd op IOB van E betekent dat de IOB bij de berekening is meegenomen (zie pagina 145– pagina 171).

START

BG-HERINNERING MAKEN

ANNUL.

De totale bolus bevat alle IOB-aanpassingen en alle aanpassingen die u in de berekende bolus hebt doorgevoerd.

Verlengde bolus: Behalve de informatie op het scherm voor de onmiddellijke bolus wordt op het scherm voor de verlengde bolus ook aangegeven welk deel van de bolus onmiddellijk zal worden toegediend en hoeveel zal worden verlengd.

50+

100%

04:08

← Bevestig

KH

60 g

BG (04:08)

8,3 mmol/L

Bolus nu

40 %

← % van maaltijdbolus die onmiddellijk wordt toegediend.

Maaltijd: 1,60 E

Correctie: 0,95 E

Bolus verlengd

60 % (0,5 uur)

← % van maaltijdbolus die de verlengde periode wordt toegediend.

Maaltijd: 2,40 E

Totale bolus

BEREKENINGEN

4,95 E

Afgestemd op IOB van 0 E

START

BG-HERINNERING MAKEN

ANNUL.

De volledige correctiebolus wordt onmiddellijk toegediend.

Alleen maaltijdbolussen kunnen worden verlengd.

6. Optioneel: een herinnering voor het controleren van uw bloedglucose instellen:
 - a. Tik op BG-HERINNERING MAKEN.
 - b. Tik op het veld BG controleren na en voer de tijd voor de herinnering in.
 - c. Tik op OPSLAAN.

Opmerking: De knop BG-HERINNERING MAKEN wordt alleen weergegeven als de instelling voor de herinnering "BG controleren na bolus" is ingeschakeld. Zie "Herinneringen voor BG controleren na bolus" op pagina 109 voor het in- of uitschakelen van deze instelling.

7. Tik op START om te beginnen met het toedienen van de bolus.

Op het Home-scherm wordt de toediening van een onmiddellijke of verlengde bolus gevolgd (zie "De voortgang van een bolus volgen" op pagina 67).

Handmatig berekende bolus

Een handmatig berekende bolus is een bolus die u zelf kunt berekenen. Als de boluscalculator is uitgeschakeld of tijdelijk niet beschikbaar is, moet u een handmatig berekende bolus invoeren.

Een bolus mag niet groter zijn dan de instelling voor de maximale bolus (zie "Maximale bolus" op pagina 115).

Een handmatig berekende bolus toedienen:

1. Tik op het Home-scherm op de knop Bolus (📄).

Het scherm Bolus wordt weergegeven.

Opmerking: Er wordt een ander scherm weergegeven als de boluscalculator actief is (zie pagina 60).

2. Voer op een van de volgende manieren de hoeveelheid bolus in:
 - Tik op het veld Totale bolus en voer de hoeveelheid bolus in. Tik vervolgens op het vinkje.

5 Een bolus insuline toedienen

- Tik op KIES UIT VOORINSTELLINGEN en selecteer de gewenste voorinstelling in de lijst. Deze optie is alleen beschikbaar als de boluscalculator is uitgeschakeld. Zie "Voorinstellingen bolussen" op pagina 85 voor het maken of bewerken van een voorinstelling bolus.
3. U dient de volledige bolus onmiddellijk toe door te tikken op BEVESTIGEN. Ga vervolgens verder met stap 5.

4. De bolus verlengen:

- a. Tik op VERLENG.

Opmerking: De optie VERLENG is alleen beschikbaar als verlengde bolussen zijn ingeschakeld (zie pagina 115).

- b. Tik op het veld Nu en voer het percentage van de bolus in dat nu moet worden toegediend. U kunt ook op het veld Verlengd tikken en het percentage invoeren dat moet worden verlengd.

Het aantal eenheden dat nu en gedurende de verlengde periode moet worden toegediend, wordt onder het percentage (%) weergegeven.

Opmerking: U kunt de gehele bolus verlengen.

- c. Tik op het veld Duur om de duur voor het verlengde deel van de bolus in te voeren.
 - d. Tik op BEVESTIGEN.
5. Controleer de gegevens over de bolus op het scherm Bevestigen.
6. Optioneel: een herinnering voor het controleren van uw bloedglucose instellen:
 - a. Tik op BG-HERINNERING MAKEN.
 - b. Tik op het veld BG controleren na en voer de tijd voor de herinnering in.
 - c. Tik op OPSLAAN.

Opmerking: De knop BG-HERINNERING MAKEN wordt alleen weergegeven als de instelling voor de herinnering "BG controleren na bolus" is ingeschakeld. Zie "Herinneringen voor BG controleren na bolus" op pagina 109 voor het in- of uitschakelen van deze instelling.

50+ 100% 04:42

← Verlengde bolus

Nu	Verlengd
40 %	60 %
2,40 E	3,60 E
Duur (0,5 tot 8 u)	0,5 uur
Totale bolus 6 E	
ANNUL.	BEVESTIG

7. Controleer de gegevens over de bolus en tik vervolgens op START om te beginnen met het toedienen van de bolus.

De bolushoeveelheid en de gegevens over de vooringestelde bolus, mits er een voorinstelling is gebruikt, worden opgeslagen in uw historiegegevens. Op het Home-scherm wordt de toediening van een onmiddellijke of verlengde bolus gevolgd (zie "De voortgang van een bolus volgen" op pagina 67).

De voortgang van een bolus volgen

Tijdens het toedienen van een bolus wordt er op het Home-scherm een voortgangsbalk weergegeven.

Voortgang van een onmiddellijke bolus

Tijdens het toedienen van een onmiddellijke bolus worden op het Home-scherm een bericht over de toediening van de bolus, een voortgangsbalk en gegevens weergegeven.

Als de boluscalculator is ingeschakeld, wordt er linksonder op het scherm een schatting van de IOB weergegeven.

Is de boluscalculator uitgeschakeld (niet weergegeven), dan wordt linksonder op het scherm de hoeveelheid van de laatst toegediende bolus weergegeven.

Tijdens een onmiddellijke bolus kunt u de PDM niet gebruiken.

Zie "Toediening bolus wijzigen" op pagina 69 voor het annuleren of vervangen van een bolus.



5 Een bolus insuline toedienen

Voortgang van verlengde bolus

Tijdens het toedienen van een verlengde bolus worden op het tabblad Dashboard van het Home-scherm een bericht over de toediening van de bolus, een voortgangsbalk en andere gegevens weergegeven.

Opmerking: Als de boluscalculator is uitgeschakeld, wordt het tabblad Dashboard alleen weergegeven als er een verlengde bolus wordt toegediend.

Als de boluscalculator is ingeschakeld, wordt de weergegeven IOB bijgewerkt met de geschatte hoeveelheid van de bolus die op dat moment wordt toegediend.

Is de boluscalculator uitgeschakeld (niet weergegeven), dan wordt linksonder op het scherm de hoeveelheid van de laatst toegediende bolus weergegeven.

Tijdens het toedienen van een verlengde bolus kunt u uw PDM voor de meeste handelingen blijven gebruiken.

De Pod dient de gehele bolus toe, ongeacht of die wel of niet binnen het bereik van de PDM valt, tenzij u de bolus annuleert. Zie "Toediening bolus wijzigen" in het volgende gedeelte voor het annuleren of vervangen van een bolus.



Toediening bolus wijzigen

Als u tijdens het toedienen van een onmiddellijke bolus een andere handeling wilt uitvoeren, moet u het toedienen van die bolus eerst annuleren.

Tijdens een verlengde bolus kunt u het volgende doen:

- De bolus annuleren.
- Een nieuwe, onmiddellijke bolus toedienen en verdergaan met toediening van de verlengde bolus.
- De bolus die wordt toegediend, vervangen door een andere bolus.

Zie "Fout bij annuleren van bolus" op pagina 131 als u een bericht over een communicatiefout krijgt terwijl u een bolus annuleert.

Een bolus annuleren

Een onmiddellijke of een verlengde bolus annuleren:

1. Tik op ANNULEREN op het Home-scherf (onmiddellijke bolus) of op het tabblad Dashboard (verlengde bolus) van het Home-scherf.
2. Tik op JA om het annuleren van de bolus te bevestigen. De Pod geeft een pieptoon om te bevestigen dat de bolus is geannuleerd.

Een nieuwe bolus tijdens een verlengde bolus toedienen

Een onmiddellijke bolus toedienen terwijl er een verlengde bolus wordt toegediend:

1. Tik op het Home-scherf op de knop Bolus.
2. Voer de gegevens voor de KH en bloedglucose in. Tik vervolgens op BEVESTIGEN.
3. Tik op START.

De nieuwe bolus wordt toegediend en er wordt verdergegaan met de verlengde bolus.



5 Een bolus insuline toedienen

Een verlengde bolus vervangen

Als u een verlengde bolus die op dat moment wordt toegediend, door een nieuwe verlengde bolus wilt vervangen, moet u eerst de toediening van die verlengde bolus annuleren.

1. Tik op het Home-scherm op de knop Bolus .
2. Voer de hoeveelheid van de nieuwe bolus in (zie "Bolusberekening met de boluscalculator" op pagina 59 of "Handmatig berekende bolus" op pagina 65).
3. Tik op VERLENG. Er verschijnt een melding op het scherm dat er al een verlengde bolus wordt toegediend.
4. Tik op ANNULEREN & NIEUWE MAKEN om die bolus te annuleren. Op de PDM wordt aangegeven hoeveel er van de bolus nog niet is toegediend.
5. Selecteer wat er met de niet-toegediende hoeveelheid bolus moet gebeuren:
 - Als u de niet-toegediende hoeveelheid bolus wilt toevoegen aan de nieuwe, verlengde bolus, tikt u op TOEVOEGEN AAN TOTALE BOLUS. Controleer of de nieuwe, totale bolus correct is. Tik vervolgens op VERLENG.
 - **Opmerking:** Deze toegevoegde bolus wordt door de boluscalculator beschouwd als een aanpassing door de gebruiker van de nieuwe bolus. Deze extra hoeveelheid wordt over dezelfde periode als de nieuwe, verlengde bolus toegediend.
 - Tik op NEE als u de niet-toegediende hoeveelheid bolus niet wilt toevoegen aan de nieuwe, verlengde bolus.
6. Teruggaan naar de stroom met de verlengde bolus:
 - Ga naar stap 4 op pagina 63 als de boluscalculator is ingeschakeld.
 - Ga naar stap 4 op pagina 66 als de boluscalculator is uitgeschakeld.

HOOFDSTUK 6

Toediening basale insuline wijzigen

In dit hoofdstuk leest u hoe u de toediening van uw basale insuline kunt wijzigen met behulp van tijdelijke basaalsnelheden of door over te schakelen op een ander basaalprogramma (zie "Tijdelijke basaalsnelheden" op pagina 151).

Zie pagina 79 voor het maken van een nieuw basaalprogramma. Zie pagina 81 voor het bewerken van een bestaand basaalprogramma.

Tijdelijke basaalsnelheden gebruiken

U kunt een tijdelijke basaalsnelheid gebruiken om een tijdelijke verandering in uw routine door te voeren. Een tijdelijke basaalsnelheid kan bijvoorbeeld worden gebruikt terwijl u sport of wanneer u ziek bent. Na afloop van een tijdelijke basaalsnelheid gaat de PDM automatisch terug naar de toediening van het geplande basaalprogramma.

U kunt een tijdelijke basaalsnelheid niet activeren of annuleren tijdens een onmiddellijke bolus, maar wel tijdens een verlengde bolus.

Zie "Een nieuwe vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid maken" op pagina 83 voor het maken van een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid voor een vaak gebruikte basaalsnelheid.

Zie "Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren" op pagina 74 voor het activeren van een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid.

Tip: Standaard geeft de PDM of Pod een geluidssignaal aan het begin en einde van een tijdelijke basaalsnelheid en elke 60 minuten tijdens een tijdelijke basaalsnelheid. Zie "Lijst met informatiesignalen" op pagina 129 om dit in of uit te schakelen.

6 Toediening basale insuline wijzigen

Een tijdelijke basaalsnelheid activeren

U kunt een tijdelijke basaalsnelheid alleen activeren als de instelling daarvoor is ingeschakeld. Zie "Tijdelijke basaalsnelheid" op pagina 114 voor het in- of uitschakelen van de instelling voor de tijdelijke basaalsnelheid.

Een tijdelijke basaalsnelheid definiëren en activeren:

1. Ga naar het Menupictogram () > Tijdelijke basaalsnelheid instellen.

Op het scherm wordt een grafiek van het actieve basaalprogramma weergegeven.

Opmerking: U activeert een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid door te tikken op KIES UIT VOORINSTELLINGEN en vervolgens naar de stap 2 van "Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren" op pagina 74 te gaan.

2. Tik op het veld Basaalsnelheid en voer de gewenste wijziging in de basaalsnelheid in:

- Als tijdelijke basaalsnelheden zijn geconfigureerd als een procentuele (%) wijziging, bladert u met het wielje omhoog of omlaag om de procentuele wijziging in het actieve basaalprogramma te definiëren. Een pijl-omhoog geeft aan dat de basale hoeveelheid wordt verhoogd tot boven die van het actieve basaalprogramma. Een pijl-omlaag geeft aan dat de basale hoeveelheid wordt verlaagd tot onder die van het actieve basaalprogramma.
- Als tijdelijke basaalsnelheden zijn geconfigureerd als een vaste snelheid (E/u), bladert u met het wielje om de basaalsnelheid voor de gehele duur van de tijdelijke basaalsnelheid te selecteren.



Zie "Tijdelijke basaalsnelheid" op pagina 114 voor het instellen van tijdelijke basaalsnelheden als een percentage (%) of als E/u.

Opmerking: U kunt met het bladerwielje niet hoger dan uw maximale basaalsnelheid gaan. Zie "Maximale basaalsnelheid" op pagina 114 voor het aanpassen van uw maximale basaalsnelheid.

Tip: U kunt de toediening van insuline uitschakelen voor de duur van de tijdelijke basaalsnelheid door een afname van 100% of een tijdelijke basaalsnelheid van 0 E/u in te stellen. Zie "Beperkingen tijdelijke basaalsnelheid" op pagina 153 en "Methoden om tijdelijk de insulinetoediening te stoppen" op pagina 154 voor meer informatie.

3. Tik op het veld Duur en voer de duur (tussen 30 minuten en 12 uur) voor de tijdelijke basaalsnelheid in.

Bekijk de grafiek van de tijdelijke basaalsnelheid boven aan het scherm. De voorgestelde tijdelijke basaalsnelheid wordt boven op het actieve basaalprogramma geplaatst.
 - Het lichtblauw gearceerde gebied geeft de voorgestelde tijdelijke basaalsnelheid voor elk segment aan.
 - Als u een afname instelt, wordt het actieve basaalprogramma als een stippellijn weergegeven.
4. Tik op BEVESTIGEN om door te gaan.
5. Bekijk de gegevens van de tijdelijke basaalsnelheid. Als u iets moet corrigeren, tikt u op de rij die u wilt wijzigen. Voer vervolgens uw correcties in en bevestig die.

Opmerking: Indien nodig wordt door de PDM de basaalsnelheid van een segment beperkt dat anders uw ingestelde, maximale basaalsnelheid zou overschrijden. Dit wordt aangegeven door een rode lijn op de grafiek en het woord "Max".

6. Tik op ACTIVEREN om de tijdelijke basaalsnelheid te activeren. Tik vervolgens nogmaals op ACTIVEREN.

Na de activering wordt op het tabblad Basaal van het Home-scherm aangegeven dat de tijdelijke basaalsnelheid wordt toegediend en hoeveel tijd er nog overblijft. Aan het einde van de duur van de tijdelijke basaalsnelheid gaat de Pod automatisch verder met het actieve basaalprogramma.

6 Toediening basale insuline wijzigen

Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren

Als u een tijdelijke basaalsnelheid vaak gebruikt, kunt u de gegevens hiervan opslaan als een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid. Zie "Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden" op pagina 83 voor het maken of wijzigen van een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid.


Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren:

1. Ga naar:
Menupictogram (☰) > Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden
2. Veeg om omhoog of omlaag te bladeren en tik op de vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid die u wilt activeren.
3. U wijzigt de duur van de tijdelijke basaalsnelheid door te tikken op BEWERKEN.
4. U activeert de tijdelijke basaalsnelheid door te tikken op ACTIVEREN en vervolgens nogmaals te tikken op ACTIVEREN.

Een tijdelijke basaalsnelheid annuleren

Een tijdelijke basaalsnelheid stopt automatisch aan het einde van de ingestelde duur waarna het laatste actieve basaalprogramma wordt hervat. Een tijdelijke basaalsnelheid voortijdig annuleren:

1. Ga naar het tabblad Tijdelijke basaalsnelheid op het Home-scherm.
2. Tik op ANNULEREN.
3. Tik op JA om de annulering te bevestigen. De PDM annuleert de tijdelijke basaalsnelheid en start het actieve basaalprogramma opnieuw op.

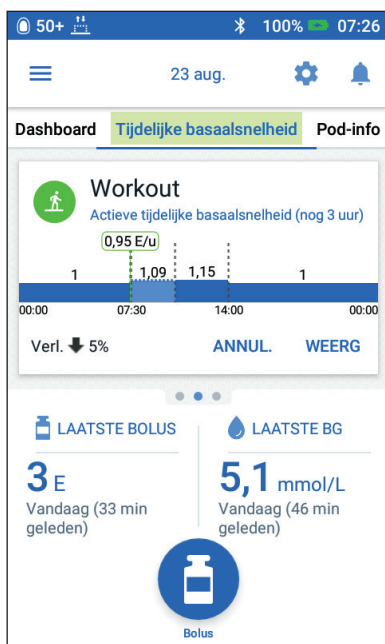

Overschakelen op een ander basaalprogramma

De routine kan per dag verschillen. Met de PDM kunt u verschillende basaalprogramma's voor uw verschillende routines maken. U kunt bijvoorbeeld op weekdays het ene basaalprogramma gebruiken en in het weekend een ander basaalprogramma.

Zie "Basaalprogramma's" op pagina 79 voor het maken, bewerken of wijzigen van een basaalprogramma.

Overschakelen op een ander basaalprogramma:

1. Ga naar het Menupictogram () > Basaalprogramma's.

Er wordt lijst met de basaalprogramma's geopend; het eerste programma in de lijst is het huidige basaalprogramma.

2. Selecteer op een van de volgende manieren een ander basaalprogramma:

- Als u eerst een grafiek wilt bekijken van een inactief basaalprogramma voordat u dat activeert, tikt u op de naam van dat basaalprogramma. Tik vervolgens op ACTIVEREN.

Tip: *Dubbeltik op de grafiek voor een uitgebreide weergave van het basaalprogramma. Veeg horizontaal om de basaalsnelheden voor latere of eerdere tijden te bekijken.*

- Tik op het pictogram Opties () rechts van een inactief basaalprogramma en tik vervolgens op ACTIVEREN.

3. Tik nogmaals op ACTIVEREN om het huidige basaalprogramma te vervangen door het nieuw geselecteerde basaalprogramma.

Opmerking: U moet eerst een lopende tijdelijke basaalsnelheid annuleren voordat u kunt overschakelen naar een ander basaalprogramma (zie "hoofdstuk 6" op pagina 71). U kunt echter een tijdelijke basaalsnelheid starten of annuleren terwijl er een verlengde bolus loopt.

Opmerking: Als een of meer segmenten zijn ingesteld om 0 E/u toe te dienen, wordt er op de PDM gemeld dat er tijdens die segmenten geen insuline zal worden toegediend.

6 Toediening basale insuline wijzigen

Toediening van insuline onderbreken en hervatten

Soms kan het nodig zijn om de toediening van insuline kort te onderbreken, bijvoorbeeld voordat u een actief basaalprogramma bewerkt of de datum of tijd reset. Met het Omnipod DASH®-systeem kunt u de volledige insulinetoediening gedurende maximaal twee uur onderbreken.

Zie "Methoden om tijdelijk de insulinetoediening te stoppen" op pagina 154 voor het verschil tussen het stoppen van de insulinetoediening met de onderbreekfunctie of met de functie voor tijdelijke basaalsnelheden.

Insulinetoediening onderbreken

De insulinetoediening onderbreken:

1. Ga naar het Menupictogram (≡) > Insuline onderbreken.
2. Tik op het veld Insuline onderbreken gedurende. Stel het met bladerwielje de duur voor de onderbreking van de insuline in. U kunt een onderbreking van 30 minuten, 1 uur, 1,5 uur of 2 uur opgeven.
3. Tik op INSULINE ONDERBREKEN.
4. Tik op JA om te bevestigen dat u de toediening van insuline volledig wilt stoppen.

De toediening van basale insuline wordt onderbroken.

Op het Home-scherf wordt een gele banner weergegeven met daarop de mededeling dat de toediening van insuline is onderbroken.

Opmerking: De Pod geeft tijdens de onderbreking elke 15 minuten een pieptoon. De toediening van insuline wordt niet automatisch aan het einde van de onderbrekingsperiode hervat. De Pod en PDM waarschuwen u gedurende 3 minuten elke minuut en herhalen deze waarschuwing om de 15 minuten totdat u de toediening van de insuline hervat.

Opmerking: Wanneer u de toediening van insuline onderbreekt, worden tijdelijke basaalsnelheden of verlengde bolussen automatisch geannuleerd.

50+ 100% 04:05

← Insuline onderbreken

Hoelang wilt u de insulinetoediening onderbreken?

Tijdens een onderbreking van de insulinetoediening wordt alle basale insuline gestopt en kan er geen bolus worden toegediend.

Insuline onderbreken gedurende 0,5 uur


INSULINE ONDERBREKEN

ANNUL.

De toediening van insuline hervatten voordat de onderbreking is afgelopen

1. Ga naar:
Menupictogram (≡) >
Insuline hervatten
of
Tik als de boluscalculator is ingeschakeld, op de grote cirkel met daarin het IOB op het tabblad Dashboard van het Home-scherm.
2. Tik op **INSULINE HERVATTEN** om het opnieuw starten van het basaalprogramma te bevestigen dat voor de huidige tijd gepland staat.

De PDM geeft een pieptoon om te bevestigen dat de insuline weer wordt toegediend.

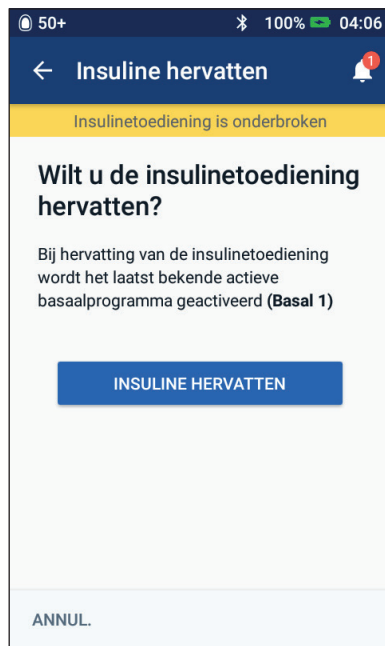

6 Toediening basale insuline wijzigen


De toediening van insuline hervatten nadat de onderbreking is afgelopen

1. Haal indien nodig uw PDM uit de slaapstand.
2. Tik op **INSULINE HERVATTEN** om de toediening van insuline te hervatten.

De PDM activeert het basaalprogramma dat voor de huidige tijd gepland staat, en geeft een pieptoon om u te laten weten dat de toediening van insuline is hervat.

Als u de toediening van insuline niet onmiddellijk hervat, wordt dit scherm opnieuw weergegeven en geven de PDM en Pod elke 15 minuten een pieptoon tot de toediening van insuline is hervat.

Waarschuwing: De toediening van insuline wordt niet automatisch aan het einde van de onderbrekingsperiode hervat. U moet op **INSULINE HERVATTEN** tikken om de toediening van insuline te hervatten. Als u de toediening van insuline niet hervat, kunt u hyperglykemie krijgen.

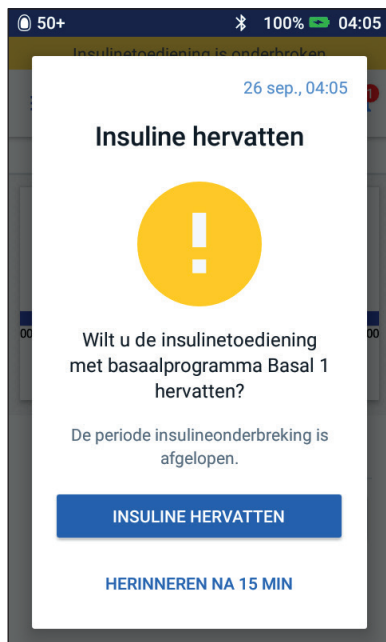

HOOFDSTUK 7

Programma's en voorinstellingen beheren

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u basaalprogramma's, voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden en vooringestelde bolussen kunt maken, bewerken en verwijderen. Eenmaal ingesteld kunt u deze op een later tijdstip snel activeren.

Basaalprogramma's

U kunt maximaal 12 basaalprogramma's maken. Elk basaalprogramma kan tussen de 1 en 24 basaalsnelheden bevatten.

Voorzichtig: Overleg eerst met uw zorgverlener voordat u deze instellingen gaat wijzigen.

Een nieuw basaalprogramma maken

Een nieuw basaalprogramma maken:

1. Ga naar het scherm Basaalprogramma maken:
Menupictogram () > Basaalprogramma's
2. Tik op NIEUW MAKEN.
Opmerking: Als u 12 basaalprogramma's hebt, is de optie NIEUW MAKEN niet meer beschikbaar. Indien nodig kunt u een bestaand basaalprogramma verwijderen.
3. Tik eventueel op Programmanaam en voer een beschrijvende naam voor uw basaalprogramma in. Tik op het vinkje om de naam op te slaan. De standaardnaam voor het basaalprogramma is "Basaal" gevolgd door een getal.
4. Tik eventueel op een label naast de naam van het nieuwe basaalprogramma. Tik nogmaals op het label als u dat wilt deselecteren. Als u geen label selecteert, wordt het standaardlabel gebruikt.
5. Tik op VOLGENDE.

7 Programma's en voorinstellingen beheren

6. Definieer elk basaalsegment afzonderlijk. Doe het volgende voor elk segment:
 - a. Tik op het veld **Eindtijd** en selecteer de eindtijd voor het segment.
 - b. Tik op het veld **Basaalsnelheid** en selecteer de gewenste basaalsnelheid voor het segment.
 - c. Tik op **VOLGENDE**.
 - d. Herhaal deze stappen totdat uw laatste segment om middernacht eindigt.
7. Tik op **DOORGAAN** wanneer uw basaalprogramma staat ingesteld op 24 uur.
8. Er wordt een scherm geopend waarin het volledige basaalprogramma als een grafiek en een lijst wordt weergegeven. Controleer het basaalprogramma om er zeker van te zijn dat alle waarden juist zijn.

Tip: Dubbeltik op de grafiek voor een uitgebreide weergave van het basaalprogramma. Veeg horizontaal om de basaalsnelheden voor latere of eerdere tijden te bekijken.

Zie de stappen 7-9 onder "Een basaalprogramma bewerken of de naam ervan wijzigen" op pagina 81 voor het bewerken van de segmenten van het basaalprogramma.

9. Tik op **OPSLAAN** om het nieuwe basaalprogramma op te slaan.
10. Als u een actieve Pod hebt en u wilt het nieuwe basaalprogramma nu gebruiken, tikt u op **ACTIVEREN** om het nieuwe basaalprogramma te gaan gebruiken. Tik op **NU NIET** als u het nieuwe basaalprogramma nu niet wilt gaan gebruiken.



Alle basaalprogramma's controleren

1. Ga naar de lijst met basaalprogramma's:
Menupictogram (☰) > Basaalprogramma's
2. Boven aan het scherm wordt een grafiek van het huidige basaalprogramma weergegeven (zie "Het tabblad Basaal / Tijdelijke basaalsnelheid" op pagina 13 voor meer informatie over de grafiek).

3. Veeg omhoog of omlaag als de lijst met basaalprogramma's te lang is.
4. Tik op de naam van een inactief basaalprogramma om de grafiek en basaalsnelheden van dat programma te bekijken. Tik buiten de grafiek om die te sluiten.

Een basaalprogramma bewerken of de naam ervan wijzigen

Een basaalprogramma bewerken of de naam ervan wijzigen:

1. Maak een lijst van alle herziene basaalsegmenten om u te begeleiden bij het opnieuw invoeren van de waarden voor elk segment.

Tip: U kunt deze lijst op de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding noteren.


2. Ga naar de lijst met basaalprogramma's:

Menupictogram (☰) >
Basaalprogramma's

3. Veeg indien nodig omhoog of omlaag om het basaalprogramma te selecteren dat u wilt bewerken:

- U bewerkt het actieve basaalprogramma door te tikken op BEWERKEN onder de grafiek van het actieve programma. Tik vervolgens op INSULINE ONDERBREKEN.
- U bewerkt een inactief basaalprogramma door te tikken op het pictogram Opties (⋮) naast het basaalprogramma dat u wilt bewerken. Tik vervolgens op Bewerken.

4. U wijzigt de naam van het basaalprogramma door te tikken op het veld Programma-naam en in dat veld een andere naam in te voeren.
5. U wijzigt het label door op een ander label te tikken. U deselecteert een label door er nogmaals op te tikken.
6. Tik op VOLGENDE.

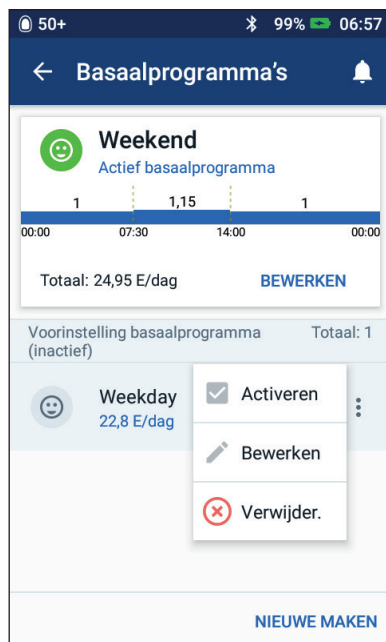

7 Programma's en voorinstellingen beheren

7. Een eindtijd of basaalsnelheid voor een segment wijzigen:
 - a. Tik op de rij met het segment dat u wilt wijzigen.
 - b. Tik op het veld Eindtijd en voer de nieuwe eindtijd voor het segment in.
 - c. Tik op het veld Basaalsnelheid en voer de gewenste basaalsnelheid in.
 - d. Tik op VOLGENDE.
 - e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.
8. Een nieuw segment toevoegen:
 - a. Tik op de rij met de starttijd van het nieuwe segment.
 - b. Tik op het veld Eindtijd en voer de starttijd van het nieuwe segment als de eindtijd voor dit segment in.
 - c. Wijzig indien nodig de basaalsnelheid.
 - d. Tik op VOLGENDE.
 - e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.
9. Een segment verwijderen:
 - a. Let op de eindtijd van het segment dat u wilt verwijderen.
 - b. Tik op het segment dat voorafgaat aan het segment dat u wilt verwijderen.
 - c. Tik op het veld Eindtijd en voer de eindtijd in van het segment dat u wilt verwijderen. Hiermee wordt het segment overschreven dat u wilt verwijderen.
 - d. Tik op VOLGENDE.
 - e. Definieer vervolgens indien nodig de eindtijd en basaalsnelheid voor een of meer van de volgende segmenten.
10. Tik op OPSLAAN als het basaalprogramma correct is.
11. Het zojuist bewerkte basaalprogramma activeren:
 - Tik op INSULINE HERVATTEN als u het huidige basaalprogramma hebt bewerkt.
 - Tik op ACTIVEREN als u een inactief basaalprogramma hebt bewerkt en u hebt een actieve Pod.
12. Tik op NU NIET als u dit basaalprogramma nu niet wilt activeren.

Een basaalprogramma verwijderen

U kunt een basaalprogramma alleen verwijderen als het niet wordt uitgevoerd; een actief of onderbroken basaalprogramma kunt u niet verwijderen.

Een basaalprogramma verwijderen:

1. Ga naar de lijst met basaalprogramma's:
Menupictogram () > Basaalprogramma's
2. Tik op het pictogram Opties () naast het basaalprogramma dat wilt verwijderen.
3. Tik op Verwijderen.
4. Tik op VERWIJDEREN om het verwijderen van het basaalprogramma te bevestigen.

Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden

Als u vaker dezelfde tijdelijke basaalsnelheid gebruikt, kunt u een 'vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid' maken die u daarna snel kunt activeren. Zie pagina 74 voor het activeren van een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid. Zie pagina 114 voor het in- of uitschakelen van de mogelijkheid voor het activeren van tijdelijke basaalsnelheden of voor het opgeven van de tijdelijke basaalsnelheid als een percentage of in E/u. U kunt maximaal 12 voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden maken.

Een nieuwe vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid maken

Een nieuwe vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid maken:


1. Ga naar het scherm Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden:
Menupictogram () > Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden
2. Tik op NIEUW MAKEN.
Opmerking: Als u 12 voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden hebt, is de optie NIEUW MAKEN niet meer beschikbaar. Indien nodig kunt u een bestaande voorinstelling verwijderen.
3. Tik eventueel op het veld Naam voorinstelling en voer een beschrijvende naam voor uw voorinstelling in. De standaardnaam voor de voorinstelling is "Tijdelijke basaalsnelheid" gevolgd door een getal.
4. Tik eventueel op een label naast de naam van de nieuwe voorinstelling. Tik nogmaals op het label als u dat wilt deselecteren. Als u geen label selecteert, wordt het standaardlabel gebruikt.

7 Programma's en voorinstellingen beheren

5. Tik op VOLGENDE.
6. Tik op het veld Basaalsnelheid en blader naar de gewenste waarde.
7. Tik op het veld Duur en voer een duur voor de voorinstelling in. De tijdelijke wijziging voor het basaalprogramma wordt in de grafiek weergegeven.

Opmerking: U kunt de duur wijzigen van een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid als u die activeert.

8. Tik op BEVESTIGEN.
9. Tik op OPSLAAN om dit als een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid op te slaan.
10. Tik op ACTIVEREN als u deze tijdelijke basaalsnelheid nu wilt starten. Tik anders op NU NIET. Deze mogelijkheid wordt niet weergegeven als er al een tijdelijke basaalsnelheid wordt uitgevoerd.

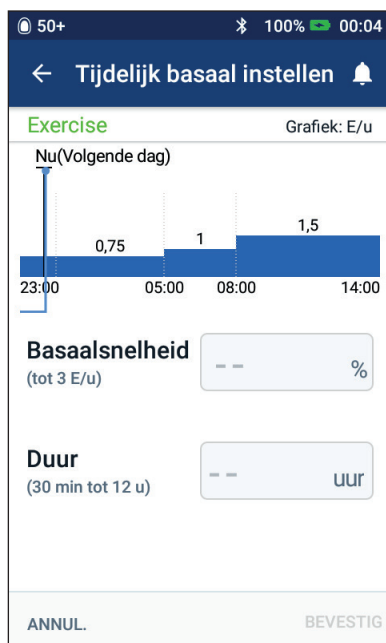

Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid bewerken of de naam ervan wijzigen

Opmerking: U kunt een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid die wordt uitgevoerd, niet bewerken.

1. Ga naar het scherm Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden:
Menupictogram (☰) > Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden
2. Veeg zo nodig omhoog of omlaag om de voorinstelling op te zoeken die u wilt bewerken. Tik vervolgens op het pictogram Opties (⋮) en tik op Bewerken.
3. U wijzigt de naam van de voorinstelling door te tikken op het veld Naam voorinstelling en in dat veld een andere naam in te voeren.
4. U wijzigt het label door op een ander label te tikken. U deselecteert een label door er nogmaals op te tikken.
5. Tik op VOLGENDE.
6. Wijzig desgewenst de basaalsnelheid en de duur ervan.
7. Tik op BEVESTIGEN.

8. Tik op OPSLAAN om uw wijzigingen op te slaan.
9. Tik op ACTIVEREN als u deze tijdelijke basaalsnelheid nu wilt starten. Tik anders op NU NIET. Deze mogelijkheid wordt niet weergegeven als er al een tijdelijke basaalsnelheid wordt uitgevoerd.

Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid verwijderen

Opmerking: U kunt een tijdelijke basaalsnelheid niet verwijderen wanneer die wordt uitgevoerd.

Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid verwijderen:

1. Ga naar het scherm Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden:
Menupictogram () > Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden
2. Tik op het pictogram Opties () naast de voorinstelling die u wilt verwijderen.
3. Tik op Verwijderen.
4. Tik op VERWIJDEREN om het verwijderen van de voorinstelling te bevestigen.

Voringestelde bolussen

Met vooringestelde bolussen kunt u veelgebruikte bolushoeveelheden opslaan zodat u deze naderhand snel kunt terugvinden. Vooringestelde bolussen zijn alleen beschikbaar als de boluscalculator is uitgeschakeld.

Met een vooringestelde bolus slaat u de eenheden insuline in een bolus op. U kunt bij het activeren van een vooringestelde bolus een deel van die bolus of de volledige bolus verlengen.

U kunt maximaal zeven vooringestelde bolussen instellen. Een vooringestelde bolus mag niet groter zijn dan uw maximale bolus.

Een nieuwe vooringestelde bolus maken

Een nieuwe vooringestelde bolus maken:

1. Ga naar het scherm Vooringestelde bolussen:

Tik op het Home-scherf op de knop Bolus (📌)


of

Menupictogram (☰) >
Vooringestelde bolussen

2. Tik op KIES UIT VOORINSTELLINGEN.
3. Tik op NIEUW MAKEN.

Opmerking: Als u zeven vooringestelde bolussen hebt, is de optie NIEUW MAKEN niet beschikbaar. Indien nodig kunt u een bestaande voorinstelling verwijderen.

4. Tik eventueel op het veld Naam voorinstelling en voer een beschrijvende naam voor uw voorinstelling in. De standaardnaam voor de voorinstelling is "Vooringestelde bolus" gevolgd door een getal.
5. Tik eventueel op een label naast de naam van de nieuwe voorinstelling. Tik nogmaals op het label als u dat wilt deselecteren. Als u geen label selecteert, wordt het standaardlabel gebruikt.
6. Tik op VOLGENDE.
7. Tik op het veld Totale bolus en voer de eenheden insuline voor de vooringestelde bolus in.
8. Tik op OPSLAAN om de nieuwe vooringestelde bolus op te slaan.

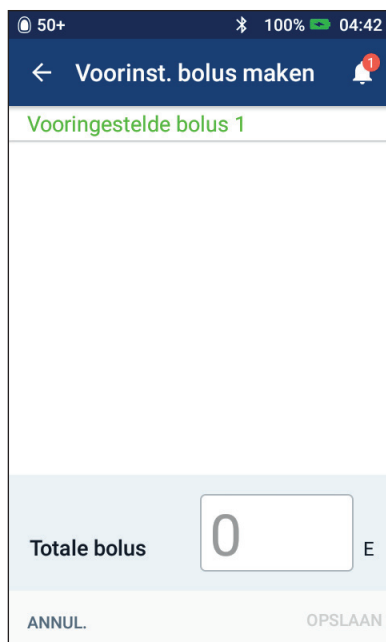

Een vooringestelde bolus bewerken of de ervan naam wijzigen

Een vooringestelde bolus bewerken of de naam ervan wijzigen:

1. Ga naar het scherm Vooringestelde bolussen:
Menupictogram () > Vooringestelde bolussen
2. Tik op het pictogram Opties () naast de naam van de voorinstelling die u wilt bewerken.
3. Tik op Bewerken.
4. U wijzigt de naam van de voorinstelling door te tikken op het veld Naam voorinstelling en in dat veld een andere naam in te voeren.
5. U wijzigt het label door op een ander label te tikken. U deselecteert een label door er nogmaals op te tikken.
6. Tik op VOLGENDE.
7. U wijzigt de bolushoeveelheid door op het veld Totale bolus te tikken en de eenheden insuline in te voeren.
8. Tik op OPSLAAN om uw wijzigingen op te slaan.

Een vooringestelde bolus verwijderen

Een vooringestelde bolus verwijderen:

1. Ga naar het scherm Vooringestelde bolussen:
Menupictogram () > Vooringestelde bolussen
2. Tik op het pictogram Opties () naast de naam van de voorinstelling die u wilt verwijderen.
3. Tik op Verwijderen.
4. Tik op VERWIJDEREN om het verwijderen van de voorinstelling te bevestigen.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

HOOFDSTUK 8

Uw PDM-gegevens doorbladeren

Uw PDM-gegevens worden weergegeven op:

- De schermen Mededelingen en Alarmen
- De insuline- en BG-historieschermen, waarin insuline, bloedglucose, koolhydraten en Pod-gebeurtenissen worden weergegeven

Op de PDM kan 90 dagen aan historiegegevens worden opgeslagen. Als het geheugen vol is, worden de oudste gegevens overschreven door nieuwe gegevens. U kunt de informatie in uw gegevens doorbladeren maar niet bewerken.

Opmerking: De gegevens die op de PDM worden opgeslagen, gaan niet verloren als de batterij van de PDM leeg is. Als de batterij leeg is, moet u alleen de datum en tijd weer instellen. Met de PDM-gegevens gebeurt er niets.

De schermen Mededelingen en Alarmen

Eerdere alarmen en kennisgevingen controleren:

1. Tik op het belpictogram () rechtsboven op veel schermen.
Als u nieuwe kennisgevingen hebt, wordt het aantal nieuwe kennisgevingen weergegeven in een rode cirkel naast het belpictogram ()

Opmerking: U kunt ook naar het Menupictogram () > Historie: Mededelingen & Alarmen gaan.

De berichten van vandaag staan bovenaan, met daaronder de berichten van gisteren en ouder.

2. Veeg om meer berichten te bekijken.
3. U geeft een specifiek datumbereik weer door te tikken op FILTER OP DATUM.



8 Uw PDM-gegevens doorbladeren

- a. Tik op de begindatum op de kalender. Tik op de pijl "<" om een maand terug te gaan.
- b. Tik op EINDE boven aan het scherm.
- c. Tik op de Stop voor het datumbereik.
- d. Tik op OK.

4. Wanneer u klaar bent, tikt u op deze pijl () linksboven op het scherm.

Nieuwe kennisgevingen zijn te herkennen aan een blauw picogram ()

Wanneer er een kennisgeving op dit scherm is weergegeven en u hebt het scherm gesloten door op deze pijl () te tikken, is het pictogram grijs () wanneer u dit scherm weer opent.

Zie pagina 119 voor een beschrijving van de alarmen en kennisgevingen.

Overzicht van de schermen Insuline en BG-historie

Ga voor het openen van uw insuline- en bloedglucosegegevens naar:

Menupictogram () > Historie: Insuline & BG-historie

U kunt de gegevens van één dag of meerdere dagen bekijken.

Eén dag

Meerdere dagen

Datum kiezen

Samenvatting


Rij 1

Rij 2

Rij 3


Gedeelte met de gegevens

Veeg
omhoog
voor het
gedeelte
met de
gegevens

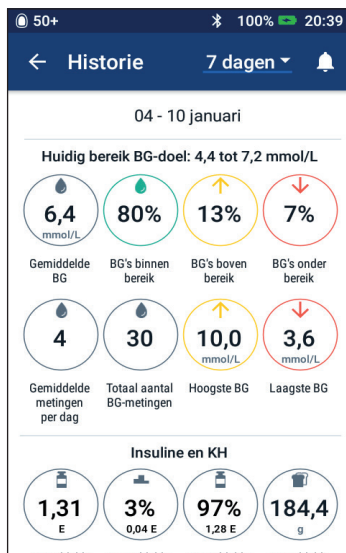

Datum kiezen

Wanneer u voor de eerste keer de historieschermen opent, wordt er informatie van de huidige dag weergegeven. U kunt de gegevens van een andere dag of van verschillende datums (datumgebied) bekijken.

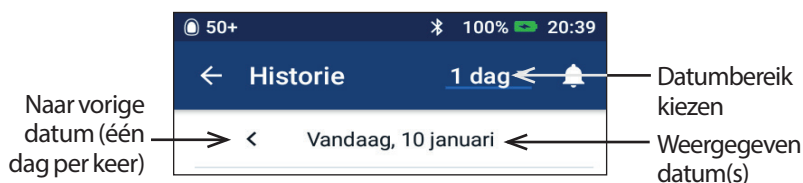

Eén dag

De gegevens van vandaag of van een recente dag bekijken:

1. Ga naar het Menupictogram (☰) > Historie: Insuline & BG-historie.
De historiegegevens van vandaag worden weergegeven.
2. U gaat naar een recente datum door op deze datumpijl (<) te tikken.
3. U gaat vooruit in de tijd door op deze datumpijl (>) te tikken. Deze pijl wordt niet weergegeven wanneer de gegevens van vandaag worden weergegeven.

Aantal dagen

De gegevens van een aantal dagen bekijken of een dag van weken of maanden geleden opzoeken:

1. Ga naar het Menupictogram (☰) > Historie: Insuline & BG-historie.
2. Tik op de selector voor het datumgebied.
3. Kies 1, 7, 14, 30, 60 of 90 dagen om dat aantal dagen weer te geven. Kies een grote getal als u oudere gegevens wilt weergegeven.
Er wordt een scherm met meerdere dagen weergegeven met daarin het geselecteerde datumgebied.
4. De gegevens van één dag uit een datumgebied bekijken:
 - a. Veeg omhoog voor het detailgedeelte van het scherm met meerdere dagen.
 - b. Tik op de gewenste datum om het historiescherm van één dag te bekijken.
Het historiescherm van één dag voor die datum wordt weergegeven.

Samenvattingsgedeelte

In het bovenste gedeelte van de historieschermen wordt een samenvatting gegeven van de gegevens voor die dag of het datumbereik.

Samenvatting	Beschrijving
Rij 1 (zie pagina 91)	
Huidig BG-doelbereik	Ondergrens en bovengrens van uw BG-doelbereik.
Gemiddelde BG	Het gemiddelde van alle bloedglucosewaarden. Lage en hoge bloedglucosewaarden zijn uitgesloten.
BG binnen bereik	Het percentage bloedglucosewaarden dat binnen uw BG-doelbereik valt.
BG's boven	Het percentage bloedglucosewaarden dat boven de bovengrens van uw BG-doelbereik ligt.
BG's onder	Het percentage bloedglucosewaarden dat onder de ondergrens van uw BG-doelbereik ligt.
Rij 2 (zie pagina 91)	
Gemiddelde metingen per dag	Het gemiddelde aantal bloedglucosemetingen per dag. Opmerking: Dat gemiddelde wordt alleen weergegeven in een weergave van meerdere dagen.
Totaal aantal BG-metingen	Het totale aantal bloedglucosemetingen van de dag (of datumbereik).
Hoogste BG	De hoogste bloedglucosemeting van de dag (of datumbereik).
Laagste BG	De laagste bloedglucosemeting van de dag (of datumbereik).

8 Uw PDM-gegevens doorbladeren

Samenvatting	Beschrijving
Rij 3 (zie pagina 91)	
Totale insuline Gemiddelde totale insuline	Totale insuline (basaal + bolus) die gedurende de dag is toegediend of het gemiddelde totale insuline dat gedurende het datumbereik is toegediend.
Basale insuline Gemiddelde basale insuline	De hoeveelheid basale insuline die gedurende de dag is toegediend of de gemiddelde basale insuline die gedurende het datumbereik is toegediend. Dit is ook de insuline die door het basaalprogramma wordt toegediend, aangepast voor tijdelijke basalen, perioden van insulineonderbreking en deactivering van de Pod. Wordt weergegeven als een percentage van het totaal (of gemiddelde totale insuline). Wordt ook in eenheden weergegeven.
Bolus insuline Gemiddelde bolus insuline	De hoeveelheid insuline die gedurende de dag via bolussen is toegediend of het gemiddelde gedurende het datumbereik. Dit zijn ook de bolussen die door de boluscalculator of handmatig zijn berekend. Wordt weergegeven als een percentage van het totaal (of gemiddelde totale insuline). Wordt ook in eenheden weergegeven. Als u een bolus annuleert voordat die helemaal is toegediend, wordt alleen de werkelijk geleverde hoeveelheid toegevoegd.
Totale KH Gemiddelde totale KH	De som van alle maaltijkoolhydraten (in gram) die in de boluscalculator zijn ingevoerd voor de dag, of het gemiddelde voor het datumbereik.

Opmerking: Als de PDM geen bevestiging van de Pod heeft ontvangen dat de basaal, bolus of totale insulinetoeediening is beëindigd, staat in de samenvattingscirkels een grijs of geel uitroepteken dat vergelijkbaar is met de uitroeptekens die worden weergegeven in "Wanneer de toediening van een bolus niet door de Pod is bevestigd" op pagina 98.

Opmerking: De percentages worden niet opgeteld bij 100 omdat het getal wordt afgerond.

Zie pagina 172 voor de samenvattende berekeningen.

Gedeelte met de gegevens

Veeg omhoog op de historieschermen voor het gedeelte met de gegevens.

Weergave van één dag

In het gegevensgedeelte van het historiescherm van één dag staan de gegevens per tijdstip van de dag.

Kolomkoppen BG, Bolus en KH →

Banners geven PDM- of Pod-beurtenissen aan die doorgaan tot er een wijziging op een nieuwe banner wordt aangegeven. →

< Vandaag, 26 september			
	BG mmol/L	Bolus E	KH g
04:43	8,3	2,4	60
04:43	8,3		
04:43	6,6		
04:40	Verlengde bolus toegediend: 2,4 U na 0,5 uur		
04:10	Verlengde bolus gestart: 2,4 U na 0,5 uur		
04:08	8,3	4,95	60
04:08	8,3		

Tik op de pijl-omlaag om meer gegevens weer te geven. Tik nogmaals op die pijl om de gegevens te verbergen.

Veeg voor meer gegevens.

Weergave van meerdere dagen

In het gegevensgedeelte van het historiescherm van meerdere dagen staat elke dag uit het geselecteerde bereik. In de kolommen staat het percentage (%) bloedglucosemetingen binnen het BG-doelbereik, de totale dagelijks toegediende insuline en de totale dagelijkse hoeveelheid KH's.

Tik op een rij om het historiescherm van één dag te bekijken. →

	BG's in bereik %	Totaal insuline E	Totaal KH g
10 jan.	100%	1,40	176
9 jan.	91%	1,40	202
8 jan.	100%	1,40	220

Veeg voor meer gegevens.

Gegevens van de bloedglucose

Het pictogram dat wordt weergegeven bij een vermelding van de bloedglucose, geeft aan of de bloedglucosewaarde binnen de waarden valt.

Verhouding tot BG-doelbereik	Pictogram BG-vermelding
Boven BG-doelbereik	
Binnen BG-doelbereik	
Onder BG-doelbereik	

Als u op een rij met een bloedglucosemeting tikt, wordt de rij geopend en worden de eventueel toegepaste labels weergegeven.

Bolusgegevens

Het pictogram dat wordt weergegeven bij een bolusvermelding, geeft aan of de boluscalculator is gebruikt:

- Het pictogram van een insulineflacon () geeft aan dat de boluscalculator was ingeschakeld.
- Het pictogram van een spuit () geeft aan dat de boluscalculator niet beschikbaar was of was uitgeschakeld.

Onmiddellijke en verlengde bolussen

De bolushoeveelheid naast het boluspictogram is de som van het onmiddellijke deel van de bolus en het verlengde deel van de bolus. Als u een onmiddellijke of verlengde bolus hebt geannuleerd of verlengd, is de vermelde hoeveelheid de hoeveelheid die daadwerkelijk is toegediend.

Als u op een rij met een boluspictogram tikt, worden aanvullende gegevens over de bolus vermeld, waaronder:

- Of de bolus door de boluscalculator of handmatig is berekend.
- De eventuele naam van de vooringestelde bolus.
- De knop **BOLUSBEREKENING** **WEERGEVEN** als de boluscalculator is gebruikt. Als u op deze knop tikt, verschijnt er een scherm met berekeningsdetails en of u de berekende bolus al dan niet handmatig hebt aangepast.

Mogelijk moet u omhoog of omlaag vegen om alle berekeningen te kunnen bekijken. Tik op **SLUITEN** wanneer u daarmee klaar bent (zie "Vergelijkingen boluscalculator" op pagina 162 voor meer informatie).

- Als u een onmiddellijke bolus hebt geannuleerd, wordt de hoeveelheid weergegeven die oorspronkelijk was gepland om te worden toegediend.
- Voor een verlengde bolus de hoeveelheid die nu is toegediend en is verlengd. Tevens ook het percentage (%) maaltijdbolussen dat nu is toegediend en is verlengd.
- Als een bolus wordt toegediend, niet is bevestigd of verloren is gegaan, hoeveel van de bolus er is bevestigd.

Bolusberekening

Correctiebolus 0,95 E

BG = 8,3, doel-BG = 5,6
 Correctiefactor = 2,8
 $(8,3 - 5,6) / 2,8 \approx 0,96 \text{ E}$

Aanpassing maaltijd-IOB

Maaltijd-IOB = 0 E
 $0,96 \text{ E} - 0 \text{ E} = 0,96 \text{ E}$

Afstemming correctie-IOB

Correctie-IOB = 0 E
 $0,96 \text{ E} - 0 \text{ E} \approx 0,96 \text{ E}$

Maaltijdbolus 4 E

KH = 60 g, I/KH-verhouding = 15 g/E
 $60 / 15 \approx 4 \text{ E}$

Afstemming correctie-IOB

SLUITEN

Verlengde bolusgebeurtenissen



Een boluspictogram en een banner geven een verlengde bolusgebeurtenis aan:

- Een banner **Verlengde bolus** gestart geeft het tijdstip aan waarop de onmiddellijke bolus volledig is toegediend en het toedienen van de verlengde bolus wordt gestart. Behalve de begintijd van de bolus vermeldt de banner ook het aantal verlengde eenheden en de duur van de verlenging.

Alleen verlengde hoeveelheid

04:10 Verlengde bolus gestart: 2,4 U na 0,5 uur

04:08 8,3 4,95 60

Onmiddellijke en verlengde hoeveelheid

- Een banner **Verlengde bolus voltooid** geeft het tijdstip van het einde van de verlengde bolus aan.

8 Uw PDM-gegevens doorbladeren

- Een banner Verlengde bolus geannuleerd geeft de annulering van een verlengde bolus aan en de hoeveelheid van de bolus die daadwerkelijk is toegediend.

Wanneer de toediening van een bolus niet door de Pod is bevestigd

Nadat u de hoeveelheid bolus die u wilt laten toedienen, hebt bevestigd, wordt er een bolusinstructie naar uw Pod gestuurd. Wanneer die hoeveelheid door de Pod is toegediend, wordt er een bevestiging van de toediening van de bolus naar de PDM gestuurd.



Voordat door de Pod aan de PDM wordt bevestigd dat de bolus is toegediend, wordt door de PDM de toegediende hoeveelheid geschat. Tegelijk geeft een grijs uitroepteken in de historieschermen aan dat de bolus wordt geschat.



Wanneer de PDM en de Pod weer binnen het bereik zijn, wordt doorgaans door de Pod de toediening van de bolus bevestigd. Heel zelden kan het echter voorkomen dat de Pod die toediening niet kan bevestigen vanwege een communicatiefout. Als u in dat geval op de optie POD WEGGOOIEN tikt, staat er in de historieschermen een geel uitroepteken waarmee wordt aangegeven dat de bolus niet is bevestigd.

Als een Pod met een onbevestigde bolus wordt verwijderd, worden de basale en totale insulinehoeveelheden voor die dag ook met een geel uitroepteken als onbevestigd gemarkeerd. De vermelde bolushoeveelheid is inclusief de hoeveelheid die voor toediening was gepland tot aan het moment waarop de Pod werd verwijderd.

KH-gegevens

Er staat een KH-pictogram () naast de koolhydraatvermeldingen die door de boluscalculator worden gebruikt.

Gegevens van de basaalsnelheid

Basaalprogramma's



Een pictogram en een banner van het basaalprogramma geven de activering van een basaalprogramma en het opnieuw activeren van een basaalprogramma aan het einde van een tijdelijke basaalsnelheid of insulineonderbreking aan.

Tijdelijke basaalsnelheden



Een pictogram en een banner van de tijdelijke basaalsnelheid geven het begin, het einde of de annulering van een tijdelijke basaalsnelheid aan.

Als een tijdelijke basaalsnelheid was gedefinieerd als een percentage (%) van het actieve basaalprogramma, worden in de banner de toe- of afname alsmede de duur van de snelheid vermeld. Als een tijdelijke basaalsnelheid was gedefinieerd als een vlakke basaalsnelheid (E/u), worden in de banner de tijdelijke basaalsnelheid en de duur vermeld.

Als een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid was gebruikt, wordt in de banner de naam van de voorinstelling weergegeven.

Als u op de banner **Start tijdelijke basaalsnelheid** tikt, worden er een grafiek en een lijst weergegeven van de basaalsnelheden die bij elk tijdsegment horen.

Als een tijdelijke basaalsnelheid is geannuleerd, staat in de banner **Start tijdelijke basaalsnelheid** de aanvankelijk geplande duur en in de banner **Tijdelijk basaalsnelheid** geannuleerd de werkelijke duur.

Basaalsnelheid om middernacht

De eerste vermelding voor elke dag is een banner die de status van de basale insulinetoediening om middernacht weergeeft. Als een basaalprogramma of tijdelijke basaalsnelheid van de vorige dag na middernacht nog doorloopt, wordt dit in de banner aangegeven. Als de toediening van de insuline om middernacht was onderbroken, wordt dit ook in die banner aangegeven.

Podgegevens



Een Pod-pictogram en -banner geven het activeren en deactiveren (of verwijderen) van elke Pod aan. Als u op een Pod-banner tikt, worden het partijnummer en het volgnummer van de Pod weergegeven.

Gegevens over het onderbreken en hervatten van de insulinetoediening



Het pictogram en de banner voor Insulinetoediening onderbroken geven het tijdstip aan waarop de insulinetoediening is onderbroken.



Het pictogram en de banner voor Insulinetoediening hervat geven het tijdstip aan waarop de onderbroken insulinetoediening is hervat.

Gegevens over tijdwijziging

De banner Tijdwijziging wordt weergegeven als u de ingestelde tijd wijzigt. De banner Tijdzone gewijzigd wordt weergegeven als u de tijdzone wijzigt.

Onder de banner staat de oude tijd en boven de banner staat de nieuwe tijd.

Gegevens over datumwijziging

De banner DATUM GEWIJZIGD wordt weergegeven als u de ingestelde datum wijzigt.

Wanneer de datum is gewijzigd, worden er twee historieschermen voor de huidige dag gemaakt. In het ene scherm staat de oude datum met de historiegegevens vanaf middernacht tot het tijdstip van de datumwijziging. In het andere scherm staat de nieuwe datum met de historiegegevens vanaf het tijdstip van de datumwijziging tot aan de volgende middernacht.

HOOFDSTUK 9

Instellingen aanpassen

Wanneer uw behoeften veranderen, kan het zijn dat u verschillende instellingen op uw PDM wilt aanpassen.

Veel instellingen hebben een wisselknop waarmee u instellingen kunt in- en uitschakelen. Wanneer de wisselknop blauw is en rechts staat, is de instelling ingeschakeld. Wanneer de wisselknop grijs is en links staat, is de instelling uitgeschakeld. Door op die knop te tikken, gaat de knop naar links of rechts.



Als u op de naam van een instelling tikt, wordt er op het scherm een beschrijving van die instelling weergegeven. Als er een beschrijving beschikbaar is, wordt het scherm verbreed om de informatie weer te geven. U verbergt de beschrijving door nogmaals op de naam van de instelling te tikken.

Opmerking: Sommige instellingen hebben een standaardwaarde, maar gebruikersinstellingen kunnen worden gewijzigd.

Instellingen voor het PDM-apparaat

Met de instellingen van het PDM-apparaat kunt u de netwerkverbinding, uw persoonlijke identificatie-instellingen, datum en tijd en andere algemene apparaatinstellingen opgeven.

Netwerkverbinding

De Bluetooth®-verbinding is altijd ingeschakeld, ongeacht of de PDM is geactiveerd of in de slaapstand staat. Bluetooth® is ook ingeschakeld in de vliegtuigmodus.

Vliegtuigmodus

Het in- of uitschakelen van de vliegtuigmodus heeft geen invloed op de Bluetooth®-instelling, die in beide gevallen ingeschakeld blijft.

De vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

1. Houd de knop Aan/Uit ingedrukt totdat er een scherm met de optie Vliegtuigmodus verschijnt.
2. Tik op Vliegtuigmodus om die modus in of uit te schakelen.

9 Instellingen aanpassen

Schermwweergave

Met de instellingen voor de schermwweergave kunt u de time-out en de helderheid van het scherm aanpassen.

Time-out scherm

Om te voorkomen dat de batterij snel leegraakt, wordt het PDM-scherf zwart als u het scherm gedurende de opgegeven tijd niet hebt gebruikt. Het tijdsinterval wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Time-out scherm.
2. Tik op een interval voor de time-out van het scherm om het interval te selecteren.

Tip: Een kortere time-out spaart de batterij.

3. Tik op OPSLAAN.

Helderheid van het scherm

De helderheid van uw PDM-scherf aanpassen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Helderheid.
2. Plaats uw vinger op het blauwe punt van de schuifknop. Veeg met uw vinger naar rechts om het scherm helderder te maken. Veeg met uw vinger naar links om het scherm donkerder te maken.

Tip: Een minder helder scherm spaart de batterij.

Vergrendelscherf

U kunt het bericht, de achtergrondaafbeelding en uw PIN van het vergrendelscherf bewerken. Met het bericht, de achtergrondaafbeelding en de PIN van het vergrendelscherf kunt u controleren of u de juiste PDM gebruikt.

Bericht van het vergrendelscherf

Het bericht voor uw vergrendelscherf wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Bericht.
2. Tik op het berichtveld van het vergrendelscherf en voer het bericht in dat u op de PDM wilt laten weergeven wanneer u de PDM inschakelt.
3. Tik op OPSLAAN.

Achtergrond van het vergrendelscherf

De achtergrondaafbeelding voor uw vergrendelscherf wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Achtergrond.

2. Tik op de achtergrondafbeelding die u wilt gebruiken.
3. Tik op OPSLAAN.

PIN

Uw persoonlijke identificatienummer of PIN wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > PIN.
2. Voer uw huidige PIN-code in.
3. Voer de nieuwe 4-cijferige PIN-code in.

Tip: Tik op het oogpictogram om de PIN-nummers weer te geven of te verbergen.

4. Tik op het vinkje om de PIN-code te accepteren.
5. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in en tik op het vinkje.

Datum en tijd, en taal

Mogelijk moet u de datum en tijd resetten als de klok wordt verzet of als u naar een andere tijdzone gaat. De tijd, datum en tijdzone worden niet automatisch op de PDM verzet. Zie "Plannen voor andere tijdzones" op pagina 179 als u naar een andere tijdzone gaat.

Als u de datum en/of de tijd wijzigt, wordt die wijziging aangegeven op het Home-scherm en het historiescherm. De vervaltijd van de Pod op het tabblad Info wordt aangepast aan de nieuwe datum en tijd.

U kunt ook een andere taal voor de PDM-schermen kiezen.

Datum- en tijdnnotatie

De datum wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Datum.
2. U wijzigt de datumnotatie door op het bovenste vakje met de datumnotatie te tikken en vervolgens de gewenste datumnotatie te selecteren.
3. De datum wijzigen:
 - a. Als u een actieve Pod hebt, tikt u op INSULINE ONDERBREKEN en vervolgens op OK.
 - b. Blader naar de gewenste waarden voor de velden Dag, Maand of Jaar.
4. Tik op OPSLAAN en vervolgens op BEVESTIGEN.
5. Als u het toedienen van insuline hebt onderbroken, tikt u op JA om de toediening van insuline te hervatten.

9 Instellingen aanpassen

Tijdzone

De tijdzone wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Tijdzone.
2. Als u een actieve Pod hebt, tikt u op INSULINE ONDERBREKEN en vervolgens op OK.
3. Tik op het veld Tijdzone en selecteer de gewenste tijdzone in de vervolgkeuzelijst.
4. Tik op OPSLAAN en vervolgens op BEVESTIGEN.

De tijd op de PDM wordt aangepast aan de nieuwe tijdzone.

5. Als u het toedienen van insuline hebt onderbroken, tikt u op JA om de toediening van insuline te hervatten.

Tijd en tijdnotatie

Voorzichtig: Zorg dat u de tijd juist instelt. De ingesteld tijd is belangrijk voor diverse functies van het Omnipod DASH®-systeem.

De tijd wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Tijd.
2. U wijzigt de tijdnotatie door te tikken op de wisselknop voor de 24-uursnotatie/12-uursnotatie (AM/PM).
3. De tijd wijzigen:
 - a. Als u een actieve Pod hebt, tikt u op INSULINE ONDERBREKEN en vervolgens op OK.
 - b. Blader naar de gewenste waarden in de velden Uur en Minuut. Selecteer voor de 12-uursnotatie tussen AM en PM.
4. Tik op OPSLAAN en vervolgens op BEVESTIGEN.
5. Als u het toedienen van insuline hebt onderbroken, tikt u op JA om de toediening van insuline te hervatten.

Land

De landinstelling voor de PDM wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Land.
2. Tik op een land in de lijst met landen.
3. Selecteer het gewenste land.
4. Tik op OPSLAAN.

Taal

Een andere taal voor de PDM-schermen kiezen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Taal.
2. Tik op de huidige taal en selecteer de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst.
3. Tik op OPSLAAN.
4. Tik op HERSTART PDM.

Opmerking: De Pod wordt niet gedeactiveerd wanneer u de PDM opnieuw opstart. De Pod blijft insuline toedienen volgens het schema van het actieve basaalprogramma en zal elke verlengde bolus toedienen.

Diagnostiek

Alarmen controleren

Als u wilt controleren of de alarm- en trilfuncties van uw PDM en Pod goed werken, kunt u deze als volgt testen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > Alarmen controleren.
2. Als u een actieve Pod hebt, tikt u op INSULINE ONDERBREKEN en vervolgens op OK.
3. Tik op ALARMEN CONTROLEREN om de controle van de alarmen te starten.
4. Luister en voel: de PDM piept en trilt drie keer. Als u een Pod draagt, piept deze enkele keren en laat gedurende enkele seconden de alarmtoon horen.
5. Tik op Nee als de Pod-alarmen niet goed werken. Tik vervolgens op OPNIEUW CONTROLEREN om de alarmen opnieuw te controleren of tik op KLAAR en activeer een nieuwe Pod.
6. Tik op NEE als de PDM-alarmen niet goed werken. Tik vervolgens op OPNIEUW CONTROLEREN om de alarmen opnieuw te controleren of bel de klantenservice.
7. Tik op JA als de PDM piept en trilt. Als u het toedienen van insuline hebt onderbroken om de alarmen te testen, tikt u op JA om de toediening van insuline te hervatten.

Waarschuwing: Als de PDM geen pieptoon geeft, moet u onmiddellijk de klantenservice bellen. Als een geactiveerde Pod geen pieptoon geeft, moet u deze onmiddellijk vervangen. Als u het Omnipod DASH®-systeem in deze situatie blijft gebruiken, kan dit een risico opleveren voor uw gezondheid en veiligheid.

9 Instellingen aanpassen

De PDM resetten

De functie PDM resetten zult u zelden hoeven te gebruiken, omdat deze functie veel van uw persoonlijke instellingen wist.

Voorzichtig: Als u de PDM reset, worden al uw basaalprogramma's, uw voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden, uw voorinstellingen voor bolussen en alle boluscalculatorinstellingen verwijderd. Neem voordat u deze functie gaat gebruiken, contact op met uw zorgverlener en zorg ervoor dat uw al uw huidige gegevens bij de hand hebt zodat u zonder probleem uw PDM opnieuw kunt programmeren. Nadat u uw PDM hebt gereset, moet u ook een nieuwe Pod activeren.

Voorzichtig: Het resetten van de PDM zet uw IOB op nul. De boluscalculator wordt niet uitgeschakeld.

Opmerking: De historiegegevens worden niet gewist wanneer u uw PDM reset.

Uw PDM resetten:

1. Maak een lijst van uw persoonlijke instellingen, zodat u deze na de reset van uw PDM opnieuw kunt invoeren. Overleg met uw zorgverlener om zeker te weten dat deze instellingen de juiste zijn voor u.
Tip: Noteer uw huidige instellingen op de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding.
2. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > PDM-apparaat > PDM resetten.
3. Als u een actieve Pod hebt, tikt u op Deactiveer Pod en vervolgens nogmaals op Deactiveer Pod.
4. Tik op PDM RESETTEN en vervolgens nogmaals op PDM RESETTEN.
Hiermee worden uw huidige gebruikersinstellingen verwijderd.
5. Volg de instructies voor het instellen van de PDM in "PDM voor de eerste keer instellen" op pagina 21 om uw persoonlijke gegevens opnieuw in te voeren of bel de klantenservice als u hulp nodig hebt bij het invoeren van uw gegevens.

De instelling Pod-plaatsen

De instelling Pod-plaatsen bepaalt of er een diagram van het lichaam beschikbaar is wanneer u een nieuwe Pod activeert. U kunt dit lichaamsdiagram tijdens het activeren van de Pod gebruiken om te bekijken waar u uw recente Pods hebt geplaatst en om aan te geven waar u de nieuwe Pod gaat plaatsen.

De instelling Pod-plaatsen in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Pod-plaatsen.
2. Tik op de wisselknop om de instelling Pod-plaatsen in of uit te schakelen. Als u uw Pod-plaats in het diagram wilt kunnen opnemen, moet u Pod-plaatsen inschakelen. Schakel Pod-plaatsen uit als u dit diagram niet wilt gebruiken.
3. Tik op OPSLAAN.

Instellingen voor herinneringen

Herinneringen en kennisgevingen zijn bedoeld om u te wijzen op informatie over het functioneren van de PDM en de Pod (zie "Lijst met kennisgevingen" op pagina 128 en "Lijst met informatiesignalen" op pagina 129).

Uiterste gebruiksdatum Pod

De kennisgeving over de uiterste gebruiksdatum van de Pod geeft aan wanneer uw Pod de uiterste gebruiksdatum nadert, zodat u deze op een voor u geschikt moment kunt vervangen. U kunt deze kennisgeving 1 tot 24 uur vóór het alarm Uiterste gebruiksdatum Pod instellen. Op de geselecteerde tijd gaan de Pod en PDM trillen of piepen en wordt er op de PDM een bericht weergegeven.

De timing voor de kennisgeving over de uiterste gebruiksdatum van de Pod instellen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Vervaldatum Pod.
2. Tik op het veld Vervaldatum Pod en selecteer hoelang u voor de uiterste gebruiksdatum van de Pod een kennisgeving wilt ontvangen.
3. Tik op OPSLAAN.

Reservoir bijna leeg

De Pod en PDM geven een waarschuwingsalarm als het insulineniveau in uw Pod de ingestelde waarde voor Reservoir bijna leeg bereikt. Deze waarde kan liggen tussen 10 en 50 eenheden.

Het insulineniveau voor het waarschuwingsalarm voor een bijna leeg reservoir instellen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Reservoir bijna leeg.
2. Tik op het veld Reservoir bijna leeg en selecteer bij hoeveel insuline in de Pod u wilt worden gewaarschuwd.
3. Tik op OPSLAAN.

Pod automatisch uitschakelen

Overleg met uw zorgverlener voordat u de instelling Auto-uit wijzigt. Bij deze functie speelt u een actieve rol. Zie "Auto-uit" op pagina 148 voor een beschrijving van de werking van deze functie.

Auto-uit in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Auto-uit Pod.
2. Tik op de wisselknop Auto-uit om te wisselen tussen het in- en uitschakelen van de functie Auto-uit.
3. Als Auto-uit is ingeschakeld, tikt u op het veld Inactiviteitstimer en selecteert u hoelang er moet worden afgeteld voordat er automatisch wordt uitgeschakeld. U kunt een tijdsduur kiezen tussen 1 en 24 uur.

Als u bijvoorbeeld tien uur kiest, moet u uw PDM minstens elke tien uur activeren, zowel overdag als 's nachts, om te voorkomen dat het alarm voor automatische uitschakeling afgaat.

4. Tik op OPSLAAN.

Waarschuwing: U moet de PDM gebruiken binnen 15 minuten nadat u het waarschuwingsalarm voor automatische uitschakeling hebt gehoord. Als u dat niet doet, geven de PDM en Pod een gevarenalarm af en stopt de Pod met het toedienen van insuline.

Herinneringen voor BG controleren na bolus

Schakel de herinneringen voor 'BG controleren na bolus' in als u eraan wilt worden herinnerd dat u na het toedienen van een bolus uw bloedglucose moet controleren. Als BG-herinneringen zijn ingeschakeld, kunt u het tijdstip van de BG-herinnering instellen op het tijdstip waarop u zichzelf een bolus geeft.

BG-herinnering inschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen.
2. Tik op de wisselknop BG controleren na bolus om de herinneringen voor 'BG controleren na bolus' in of uit te schakelen.

Herinneringen voor gemiste bolus

Als het Omnipod DASH®-systeem geen maaltijdbolus of een handmatig berekende bolus tijdens de gemiste bolusperiode toedient, trilt of piept de PDM en geeft een herinnering weer. Hiervoor kunt u een interval van 30 minuten tot 4 uur instellen. U kunt per dag maximaal zes herinneringen voor gemiste bolus instellen.

Opmerking: U kunt alleen herinneringen voor een gemiste bolus toevoegen, bewerken of verwijderen als de wisselknop voor deze herinneringen is ingeschakeld.

Herinneringen voor gemiste bolus in- of uitschakelen

De mogelijkheid voor het gebruiken van herinneringen voor gemiste bolus in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen.
2. Tik op de wisselknop Gemiste bolus om alle herinneringen voor gemiste bolus in of uit te schakelen.

Als u deze herinneringen uitschakelt, worden reeds eerder ingestelde bolusherinneringen voor later gebruik opgeslagen.

Eén herinnering voor gemiste bolus in- of uitschakelen

Een enkele herinnering voor gemiste bolus in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Gemiste bolus.
2. Tik op de wisselknop naast de herinnering voor gemiste bolus om die in of uit te schakelen.

9 Instellingen aanpassen

Een nieuwe herinnering voor gemiste bolus toevoegen

Een nieuwe herinnering voor gemiste bolus toevoegen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Gemiste bolus.
2. Tik op Herinnering toevoegen.

De knop Herinnering toevoegen wordt niet weergegeven als herinneringen voor gemiste bolus zijn uitgeschakeld.

3. Tik op de wisselknop om Enkele herinnering of Herhalende herinnering te selecteren.
 - Tik voor een enkele herinnering op het veld Datum herinnering en selecteer de datum voor de herinnering.
 - Geef voor herhalende herinneringen de dagen van de week voor de herinnering op door op de vakjes naast de gewenste dagen te tikken. In een geselecteerd vakje staat een vinkje.
4. Tik op het veld Geen bolus tussen en selecteer het begin van het interval voor de gemiste bolus.
5. Tik op het volgende veld en selecteer de eindtijd van het tijdsinterval.
6. Tik op OPSLAAN.

Een herinnering voor gemiste bolus bewerken

Een herinnering voor gemiste bolus bewerken:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Gemiste bolus.
2. Tik op de naam van de herinnering die u wilt bewerken.
3. Wijzig de frequentie, de dag of dagen of de begin- en eindtijd van het interval.
4. Tik op OPSLAAN.

Een herinnering voor gemiste bolus verwijderen

Een herinnering voor gemiste bolus verwijderen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Gemiste bolus.
2. Tik op de naam van de herinnering die u wilt verwijderen.
3. Tik op VERWIJDEREN.
4. Tik op JA om het verwijderen te bevestigen.

Bevestigingsherinneringen

Wanneer bevestigingsherinneringen zijn ingeschakeld, hoort u een pieptoon aan het begin en einde van een bolus, een verlengde bolus of een tijdelijke basaalsnelheid:

- De PDM piept aan het begin.
- De PDM piept aan het eind.

Bevestigingsherinneringen zijn vooral handig als u nog moet wennen aan uw PDM en Pod. Bevestigingsherinneringen in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen.
2. Tik op de wisselknop Bevestigingsherinneringen om bevestigingsherinneringen in of uit te schakelen.

Opmerking: U kunt geen pieptonen uitzetten die klinken aan het begin van een tijdelijke basaalsnelheid die is ingesteld op toediening van geen (nul) insuline.

Programmaherinneringen

Wanneer programmaherinneringen zijn ingeschakeld, geeft de Pod tijdens een tijdelijke basaalsnelheid of verlengde bolus elke 60 minuten een pieptoon. Programmaherinneringen in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen.
2. Blader omlaag en tik op de wisselknop Programmaherinneringen om programmaherinneringen in of uit te schakelen.

Opmerking: U kunt geen pieptonen uitzetten die optreden tijdens een tijdelijke basaalsnelheid die is ingesteld op geen (nul) insuline.

Aangepaste herinneringen

Een aangepaste herinnering bestaat uit een naam en een tijd van de dag. U kunt een eenmalige aangepaste herinnering instellen of de herinnering elke dag laten terugkomen. Aangepaste herinneringen worden elke 15 minuten herhaald tot u de herinnering bevestigt. U kunt maximaal vier aangepaste herinneringen instellen.

Alle aangepaste herinneringen in- of uitschakelen

De mogelijkheid voor het weergeven van aangepaste herinneringen in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen.
2. Blader omlaag en tik op de wisselknop Aangepaste herinneringen om alle aangepaste herinneringen in of uit te schakelen.

9 Instellingen aanpassen

Als u deze herinneringen uitschakelt, worden reeds eerder ingestelde bolusherinneringen voor later gebruik opgeslagen.

Opmerking: U kunt alleen aangepaste herinneringen toevoegen, bewerken of verwijderen als de wisselknop voor deze herinneringen is ingeschakeld.

Eén aangepaste herinnering bewerken of inschakelen

Als aangepaste herinneringen zijn ingeschakeld, kunt u een enkele aangepaste herinnering bewerken of in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Aangepaste herinneringen.
2. Tik op de naam van een aangepaste herinnering.
3. Tik op de wisselknop naast Aangepaste herinnering om deze herinnering in of uit te schakelen.
4. Wijzig de frequentie, de dag of dagen, de tijd, de naam en de tekst van de herinnering.
5. Tik op OPSLAAN.

Een nieuwe aangepaste herinnering toevoegen

Een nieuwe aangepaste herinnering toevoegen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Aangepaste herinneringen.
2. Tik op Herinnering toevoegen.
3. Tik op de wisselknop om Enkele herinnering of Herhalende herinnering te selecteren.
 - Tik voor een enkele herinnering op het veld Datum herinnering en selecteer de datum voor de herinnering.
 - Geef voor herhalende herinneringen de dagen van de week voor de herinnering op door op de vakjes naast de gewenste dagen te tikken. In een geselecteerd vakje staat een vinkje.
4. Tik op het veld Tijd herinnering en selecteer de tijd voor de herinnering. De PDM trilt of piept één minuut na deze tijd voor de herinnering.
5. Tik op het veld Naam herinnering en voer een beschrijvende naam voor de herinnering in. U kunt voor de naam maximaal 32 tekens invoeren.
6. Tik op het veld Tekst herinnering en voer een bericht in dat u op het scherm wilt laten weergeven wanneer de herinnering wordt gegeven. U kunt voor het bericht maximaal 64 tekens invoeren.
7. Tik op OPSLAAN.

Een aangepaste herinnering verwijderen

Een aangepaste herinnering verwijderen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Herinneringen > Aangepaste herinneringen.
2. Tik op de naam van de aangepaste herinnering die u wilt verwijderen.
3. Tik op VERWIJDEREN.
4. Tik op JA om het verwijderen te bevestigen.

Instellingen bloedglucose - Bereik BG-doel

Met de instellingen voor bloedglucose kunt u het bereik van het BG-doel wijzigen.

Het Omnipod DASH®-systeem is bedoeld om uw bloedglucose binnen een bepaald bereik te houden. Dit wordt het BG-doelbereik genoemd. U definieert dit bereik door de boven- en ondergrens voor uw BG-doelbereik op te geven. Het bereik voor uw BG-doel wordt in de historiegrafieken en in de schermen voor het invoeren van uw bloedglucose gebruikt om te bepalen of uw bloedglucosewaarden zich binnen uw doelbereik bevinden en welke bloedglucosewaarden te hoog of te laag voor u zijn.

Opmerking: De waarden van het BG-doelbereik worden niet door de boluscalculator gebruikt voor het berekenen van een bolus.

Voorzichtig: Overleg eerst met uw zorgverlener voordat u deze instellingen gaat wijzigen.

De boven- en ondergrens voor uw BG-doelbereik instellen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Bloedglucose > BG-doelbereik.
2. De grenzen van het BG-doelbereik instellen:
 - a. Tik op het veld Bovengrens en voer de gewenste waarde in.
U kunt de bovengrens ook instellen door de bovenste (gele) cirkel te slepen.
 - b. Tik op het veld Ondergrens en voer de gewenste waarde in.
U kunt de ondergrens ook instellen door de onderste (rode) cirkel te slepen.
3. Tik op OPSLAAN.

Instellingen basaalprogramma en tijdelijke basaalsnelheden

In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u de instellingen kunt wijzigen die de toediening van basale insuline reguleren: de maximale basaalsnelheid en de instelling voor de tijdelijke basaalsnelheid.

Maximale basaalsnelheid

De maximale basaalsnelheid geeft de bovengrens aan voor de basaalsnelheid die in uw basaalprogramma's en tijdelijke basaalsnelheden wordt gebruikt. Overleg met uw zorgverlener voordat u deze instelling wijzigt.

Uw maximale basaalsnelheid wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram () > Basaal & Tijdelijke basaalsnelheid > Max. basaalsnelheid.
2. Tik op het veld Max. basaalsnelheid en voer een andere waarde voor uw maximale basaalsnelheid in.
3. Tik op OPSLAAN.

Opmerking: U kunt geen maximale basaalsnelheid instellen die lager is dan de hoogste basaalsnelheid in een bestaand basaalprogramma, een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid of een lopende tijdelijke basaalsnelheid.

Tijdelijke basaalsnelheid

De mogelijkheid voor het instellen van een tijdelijke basaalsnelheid in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram () > Basaal & Tijdelijke basaalsnelheid.
2. Tik op de wisselknop om de mogelijkheid voor het instellen van tijdelijke basaalsnelheden (tijdelijke basalen) in of uit te schakelen.
3. Tijdelijke basaalsnelheden instellen als een percentage (%) of als een vaste snelheid (E/u):
 - a. Tik op Tijdelijke basaalsnelheid.
 - b. Selecteer de gewenste methode voor het instellen van een tijdelijke basaalsnelheid:
 - Tik op Percentage (%) om het actieve basaalprogramma een ingesteld percentage te verhogen of te verlagen.
 - Tik op Vaste snelheid (E/u) om het actieve basaalprogramma te vervangen door een vaste basaalsnelheid voor de opgegeven duur.
 - c. Tik op OPSLAAN.

Instellingen bolustoediening

Met deze instellingen kunt u de instellingen voor de maximale bolus, de verlengde bolus en de boluscalculator wijzigen.

Maximale bolus

De maximale bolus geeft de bovengrens voor een bolus aan. De boluscalculator stelt u op de hoogte als deze een bolus berekent die groter is dan deze hoeveelheid. De hoogste toegestane waarde van de maximale bolus is 30 eenheden.

Voorzichtig: Overleg met uw zorgverlener voordat u deze instelling wijzigt.

Uw maximale bolus wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Bolus > Maximale bolus.
2. Tik op het veld Max. bolus en voer de maximale waarde voor de bolus in.
3. Tik op OPSLAAN.

Verlengde bolus

Een verlengde bolus wordt over langere tijd toegediend. Alleen het maaltijdgedeelte van een bolus kan worden verlengd. Een correctiebolus kan niet worden verlengd. De functie voor verlengde bolus uitschakelen of de configuratie ervan wijzigen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Bolus.
2. Tik op de wisselknop naast Verlengde bolus om de mogelijkheid voor het verlengen van een bolus in of uit te schakelen.

Instellingen voor de boluscalculator

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen kunt aanpassen die door de boluscalculator worden gebruikt om de maaltijd- en correctiebolussen te berekenen.

Waarschuwing: De boluscalculator geeft een voorgestelde bolusdosis weer op basis van de persoonlijke instellingen die u in de PDM hebt geprogrammeerd. Overleg met uw zorgverlener voordat u de instellingen voor uw boluscalculator wijzigt. Te veel insuline kan hypoglykemie veroorzaken.

9 Instellingen aanpassen

De boluscalculator in- of uitschakelen

De boluscalculator in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram () > Bolus.
2. Tik op de wisselknop in de rij Boluscalculator om de boluscalculator in of uit te schakelen.
3. Volg de instructies op het scherm of zie "Streefwaarde voor BG en waarden voor Corrigeren boven" op pagina 32 als u de boluscalculator voor de eerste keer hebt ingeschakeld. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u deze instellingen kunt bewerken.

Streefwaarde voor BG en Corrigeren boven

Bij het berekenen van een correctiebolus is het doel van de boluscalculator om uw bloedglucose op uw streefwaarde voor BG te krijgen. De boluscalculator berekent echter alleen een correctiebolus als uw bloedglucosewaarde hoger is dan uw instelling voor Corrigeren boven. De doel-BG of de waarde voor Corrigeren boven bewerken:

1. Maak een lijst met alle gewenste segmenten voor doel-BG of Corrigeren boven om u te begeleiden bij het opnieuw invoeren van de waarden voor elk segment.
***Tip:** U kunt deze lijst op de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding noteren.*
2. Ga naar het Instellingenpictogram () > Bolus > doel-BG & Corrigeren boven.
3. Tik op VOLGENDE.
4. U bewerkt een segment door te tikken op de rij met het segment dat u wilt bewerken.
 - a. Tik op het veld Eindtijd en voer de nieuwe eindtijd in.
 - b. Tik op het veld Doel-BG en voer een nieuwe waarde voor Doel-BG in.
 - c. Tik op het veld Corrigeren boven en voer een nieuwe waarde voor Corrigeren boven in.
 - d. Tik op VOLGENDE.
5. Herhaal zo nodig voor de resterende segmenten de vorige stappen.
6. Tik op OPSLAAN nadat u hebt gecontroleerd of alle segmenten juist zijn.

Opmerking: U kunt segmenten toevoegen en verwijderen door de bestaande segmenten te bewerken.

Minimale BG voor berekeningen

De Minimale BG voor berekeningen is een drempel die u instelt. Als uw bloedglucosewaarde lager is dan uw minimale BG voor berekeningen, wordt de boluscalculator uitgeschakeld en kunt u geen bolus berekenen. U bewerkt deze waarde als volgt:

1. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Bolus > Minimale BG voor berekeningen.
2. Tik op het veld Minimale BG voor berekeningen en voer de gewenste waarde in. U kunt ook de blauwe cirkel aanraken en met uw vinger deze schuifknop omhoog of omlaag vegen om de waarde voor de minimale BG voor berekeningen te selecteren.
3. Tik op OPSLAAN.

Verhouding insuline/KH (I/KH)

De I/KH-verhouding (insuline-tot-koolhydraatverhouding) bepaalt hoeveel gram koolhydraten door één eenheid insuline kan worden verwerkt. De boluscalculator gebruikt uw I/KH-verhouding om een maaltijdbolus te berekenen als u gaat eten. U bewerkt deze waarde als volgt:

1. Maak een lijst met alle gewenste segmenten voor de I/KH-verhouding om u te begeleiden bij het opnieuw invoeren van de waarden voor elk segment.

Tip: U kunt deze lijst op de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding noteren.

2. Ga naar het Instellingenpictogram (⚙️) > Bolus > Insuline-KH-verhouding.
3. Tik op VOLGENDE.
4. U bewerkt een segment door te tikken op de rij met het segment dat u wilt bewerken.
 - a. Tik op het veld Eindtijd en voer de nieuwe eindtijd in.
 - b. Tik op het veld 1 insuline-eenheid voor en voer een nieuwe I/KH-verhouding in.
 - c. Tik op VOLGENDE.
5. Herhaal zo nodig voor de resterende segmenten de vorige stappen.
6. Tik op OPSLAAN nadat u hebt gecontroleerd of alle segmenten juist zijn.

Opmerking: U kunt segmenten toevoegen en verwijderen door de bestaande segmenten te bewerken.

Correctiefactor

Wanneer uw bloedglucosewaarde hoger is dan uw instelling voor Corrigeren boven, berekent de boluscalculator met behulp van uw correctiefactor een

9 Instellingen aanpassen

correctiebolus (zie "De boluscalculator" op pagina 156). U bewerkt deze waarde als volgt:

1. Maak een lijst met alle gewenste segmenten voor de correctiefactor om u te begeleiden bij het opnieuw invoeren van de waarden voor elk segment.

Tip: U kunt deze lijst op de pagina's aan het einde van deze technische gebruikershandleiding noteren.

2. Ga naar het Instellingenpictogram () > Bolus > Correctiefactor.
3. Tik op VOLGENDE.
4. U bewerkt een segment door te tikken op de rij met het segment dat u wilt bewerken.
 - a. Tik op het veld Eindtijd en voer de nieuwe eindtijd in.
 - b. Tik op het veld 1 insuline-eenheid doet BG dalen met en voer een nieuwe correctiefactor in.
 - c. Tik op VOLGENDE.
5. Herhaal zo nodig voor de resterende segmenten de vorige stappen.
6. Tik op OPSLAAN nadat u hebt gecontroleerd of alle segmenten juist zijn.

Opmerking: U kunt segmenten toevoegen en verwijderen door de bestaande segmenten te bewerken.

Tegenovergestelde correctie

De instelling voor tegenovergestelde correctie bepaalt hoe de boluscalculator omgaat met maaltijdbolussen wanneer uw bloedglucosewaarde lager is dan uw doel-BG (zie "Tegenovergestelde correctie" op pagina 159 voor verdere gegevens).

Tegenovergestelde correctie in- of uitschakelen:

1. Ga naar het Instellingenpictogram () > Bolus.
2. Tik op de wisselknop op de regel Tegenovergestelde correctie om deze correctie in of uit te schakelen.

Duur van de insulineactie

De boluscalculator berekent op basis van de instelling Duur van de insulineactie de hoeveelheid insuline 'on board' (IOB) van een vorige bolus. U bewerkt deze waarde als volgt:

1. Ga naar het Instellingenpictogram () > Bolus > Duur van de insulineactie.
2. Tik op het veld Duur van de insulineactie en voer de nieuwe waarde in.
3. Tik op OPSLAAN.

HOOFDSTUK 10

Alarmen, kennisgevingen en communicatiefouten

Overzicht

Waarschuwing:

Reageer zo snel mogelijk op gevarenalarmen. Als de Pod een gevarenalarm geeft, betekent dit dat de insulinetoediening is gestopt. Als u niet op een gevarenalarm reageert, kan dit leiden tot hyperglykemie.

Als u de PDM moet laten vervangen, neem dan contact op met uw zorgverlener voor instructies voor het toedienen van injecties zodat u de juiste hoeveelheid insuline krijgt toegediend.

Het Omnipod DASH®-systeem genereert de volgende soorten alarmen en berichten:

-  **Gevarenalarmen** zijn alarmen met een hoge prioriteit die aangeven dat er een ernstig probleem is opgetreden en dat de Pod moet worden verwijderd.
-  **Waarschuwingssignalen** zijn alarmen met een lage prioriteit die aangeven dat u moet controleren wat er aan de hand is.
-  **Kennisgevingen**, ook wel herinneringen genoemd, herinneren u aan handelingen die u mogelijk wilt uitvoeren.
- **Informatiesignalen** geven aan dat de Pod de instructies voor het toedienen van insuline opvolgt. U hoeft niets te doen.
- Berichten over **communicatiefouten** worden weergegeven als de PDM niet met de Pod kan communiceren.

Zie pagina 89 voor het bekijken van de alarm- en kennisgevingshistorie.

Reageren op alarmen

Reageren op een gevarenalarm of een waarschuwingsalarm:

1. Haal uw PDM uit de slaapstand. In het vergrendelscherm wordt een alarmbericht weergegeven, samen met een pictogram van het gevarenalarm () en een pictogram van het waarschuwingsalarm ()
2. Ontgrendel uw PDM. Nadat u uw PIN-code hebt ingevoerd, verschijnt er een schermgroot alarmbericht.

Opmerking: Als u uw PDM gebruikt op het moment dat er een alarm afgaat, wordt het alarmbericht schermgroot weergegeven.

3. Volg de instructies op het scherm of bekijk de afzonderlijke alarmgegevens vanaf pagina 124.

Opmerking: U kunt uw PDM blijven gebruiken, zelfs als u de oorzaak van een waarschuwingsalarm niet onmiddellijk gaat bekijken. Een gevarenalarm zult u echter eerst moeten opvolgen om uw PDM voor iets anders te kunnen gebruiken.

Tip: Zie "Een niet-opgelost alarm uitschakelen" op pagina 133 als u de instructies van de PDM hebt opgevolgd maar het gevarenalarm nog steeds niet hebt kunnen uitschakelen.

Opmerking: Als er een tijdelijke basaalsnelheid of verlengde bolus bezig was toen er zich een gevarenalarm op de Pod voordeed, wordt op de PDM aangegeven dat die snelheid of bolus is geannuleerd.

Reageren op kennisgevingen

Kennisgevingen herinneren u aan handelingen die u mogelijk wilt uitvoeren.

Meer informatie over kennisgevingen

Om u attent te maken op een kennisgeving klinkt er op de Pod en op de PDM een geluidssignaal maar de PDM kan ook gaan trillen (zie "Geluiden en trillingen" op pagina 122). Als u een geluid hoort of een trilling voelt, controleer dan of er op uw PDM een bericht wordt weergegeven.

Opmerking: Bij programmaherinneringen, vertrouwensherinneringen en sommige informatiesignalen wordt geen bericht weergegeven.

Als uw PDM zich in de slaapstand bevindt wanneer u een kennisgeving hoort of voelt, haalt u de PDM uit de slaapstand. In het vergrendelscherm staan het kennisgevingspictogram () en het kennisgevingsbericht.

- Als er meerdere berichten zijn, staat het meest recente bericht boven in de lijst.

- Als er meer berichten zijn dan er in het vergrendelscherm kunnen worden weergegeven, staat er onder de berichten een banner met het aantal aanvullende berichten.

Als u uw PDM gebruikt op het moment dat er een kennisgeving wordt geactiveerd, verschijnt boven aan het scherm het kennisgevingsbericht. Het bericht van het scherm verwijderen:

- Doe niets. Dat bericht verdwijnt vanzelf na enkele seconden en wordt als een nieuw bericht opgeslagen.
- Veeg omhoog als u niet wilt wachten en het bericht gelijk als een nieuw bericht wilt opslaan.
- Veeg naar rechts als u niet wilt wachten en het bericht gelijk als een bevestigd bericht wilt opslaan.

Kennisgevingen bevestigen

Opmerking: Het uit de slaapstand halen en gebruiken van uw PDM bevestigt of schakelt niet automatisch kennisgevingen uit.

Alle nieuwe kennisgevingen worden opgeteld bij het aantal kennisgevingen en alarmen () in de rode cirkel rechtsboven op de meeste schermen.

Kennisgevingen bevestigen:

1. Haal uw PDM uit de slaapstand.
2. Tik op het belpictogram () om het scherm Mededelingen & Alarmen te openen.
3. Lees de berichten met de blauwe kennisgevingspictogrammen ().
Schuif indien nodig omlaag op het scherm om nog meer kennisgevingen met een blauwe pictogram () te bekijken.
4. Tik op de pijl-terug () linksboven op het scherm om kennisgevingen als bevestigd te markeren.

Opmerking: Als u de PDM in de slaapstand zet door op de knop Aan/Uit te drukken, worden de kennisgevingen niet als bevestigd gemarkeerd. U moet op de pijl-terug () tikken om de kennisgeving te bevestigen.

Prioriteit en voorspelbaarheid van alarmen en kennisgevingen

Gevarenalarmen hebben voorrang op waarschuwingsalarmen. Normaal gesproken kan er maar één gevaranalarms tegelijk afgaan. In het onwaarschijnlijke geval dat er zowel op de Pod als op de PDM een gevaranalarms afgaat, wordt eerst het PDM-gevaranalarms weergegeven.

Waarschuwingsalarmen zijn belangrijker dan kennisgevingen. Als er meerdere waarschuwingsalarmen afgaan, wordt op de PDM eerst het meest recente bericht weergegeven.

De volgende waarschuwingsalarmen gaan altijd vooraf aan een gevaranalarms:

Waarschuwingsalarms		Gevarenalarms
 Uiterste gebruiksdatum Pod verlopen	→	 Uiterste gebruiksdatum Pod verlopen
 Bijna leeg reservoir	→	 Leeg reservoir
 Signaal voor Auto-uit	→	 Auto-uit

U kunt deze gevaranalarms voorkomen door tijdig te reageren op hun waarschuwingsalarms.

Opmerking: Als extra waarschuwing gaat er een kennisgeving dat de Pod moet worden vervangen () , vooraf aan een waarschuwingsalarms dat de Pod moet worden vervangen.

Geluiden en trillingen

Het Omnipod DASH®-systeem maakt gebruik van geluiden en trillingen om uw aandacht te vestigen op een alarms of kennisgeving.

Tip: Zie "Alarmen controleren" op pagina 105 voor het testen van de geluiden en trillingen.

Pod-alarmen

De Pod laat een alarmtoon horen bij een probleem dat van invloed kan zijn op de insulinetoediening.

- Alarmtonen bij een Pod-gevaranalarms zijn continue tonen die regelmatig worden onderbroken door een reeks piepjes.
- De geluidssignalen bij waarschuwingsalarmen en kennisgevingen die de Pod laat horen, zijn piepjes die met tussenpozen worden herhaald totdat u ze bevestigt.

PDM-alarmen

Op de PDM klinkt een alarmtoon als reactie op een intern probleem of wanneer wordt gedetecteerd dat er zich een Pod-alarm voordoet.

- Gevarenalarmen op de PDM beginnen met een continue trilling met na ongeveer 1,5 minuut een continue geluidssignaal.
- Uit veiligheidsoverwegingen gaan PDM-alarmen altijd over naar een akoestisch alarm, zelfs als de modus Geluid/trillen staat ingesteld op trillen.
- PDM-waarschuwingalarmen zijn geluidssignalen die met tussenpozen worden herhaald totdat u ze bevestigt.
- Bij PDM-kennisgevingen trilt de PDM met tussenpozen of laat de PDM met tussenpozen een geluidssignaal horen totdat u die bevestigt.

Zie "Timing van alarmen afkomstig van de Pod" op pagina 146 voor meer informatie.

De knop voor geluid/trillen

Met de geluids-/trilknop helemaal rechtsboven op de PDM wordt bepaald of bij de volgende herinneringen het apparaat trilt of een geluidssignaal laat horen: BG controleren na bolus, Gemiste bolussen, Geen Pod en Aangepaste herinneringen.

- U schakelt het trillen in door de onderkant van de geluids-/trilknop ingedrukt te houden totdat het trilpictogram  op de indicator wordt weergegeven.
- U schakelt het geluid in door de bovenkant van de geluids-/trilknop ingedrukt te houden totdat het belpictogram  op de indicator wordt weergegeven.
- U stelt het volume hoger of lager in door op de boven- of onderkant van de geluids-/trilknop te drukken en de ronde indicator te verschuiven. U verlaagt het volume door met de ronde indicator naar links te gaan. U verhoogt het volume door met de ronde indicator naar rechts te gaan.

Lijst met gevarenalarmen

Gevarenalarmen gaan af bij ernstige situaties. Reageer altijd direct op een gevaaralarm. Bij sommige alarmberichten wordt een uniek nummer (referentienummer) gegeven. Geef dit nummer aan de klantenservice wanneer u over dat alarm belt.

Hieronder staan beschrijvingen van alle gevarenalarmen.

 **Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken** — De Pod is aan het einde van zijn levensduur gekomen en de insulinetoediening is gestopt. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Bericht: Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken. Insulinetoediening gestopt. Vervang nu de Pod.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU. Vervang uw Pod. Controleer uw bloedglucose.

 **Leeg reservoir** — Het insulinereservoir van de Pod is leeg en de insulinetoediening is gestopt. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Bericht: Leeg reservoir. Insulinetoediening gestopt. Vervang de Pod nu meteen.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU. Vervang uw Pod. Controleer uw bloedglucose.

 **Auto-uit** — De Pod is gestopt met het toedienen van insuline omdat u niet reageerde op het waarschuwingsalarm voor automatische uitschakeling. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af. Zie "Pod automatisch uitschakelen" op pagina 108 voor het wijzigen van de instelling Auto-uit. Zie "Auto-uit" op pagina 148 voor meer informatie over de werking van Auto-uit.

Bericht: Auto-uit. Insulinetoediening gestopt. De afgelopen <tijdsduur> was er geen communicatie tussen uw PDM en Pod. Vervang uw Pod om de insulinetoediening te hervatten.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU. Vervang uw Pod. Controleer uw bloedglucose.

 **Verstopping** — De canule van de Pod is geblokkeerd, waardoor er geen insuline meer kon worden toegediend. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Bericht: Verstopping gevonden. Insulinetoediening gestopt. Vervang nu de Pod. Controleer uw BG.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU. Vervang uw Pod. Controleer uw bloedglucose.

 **Podfout**— De Pod heeft een onverwachte fout gevonden. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Bericht: Podfout. Insulinetoediening gestopt. Vervang nu de Pod.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU. Vervang uw Pod.
Controleer uw bloedglucose.

 **Bel de klantenservice** — Er is een onverwachte fout gevonden in de Pod of PDM. De Pod, de PDM of beide kunnen een alarm geven.

Bericht: Bel de klantenservice. Verwijder nu de Pod. Bel de klantenservice.
Ref: <referentienummer>.

Wat u moet doen: tik op OK om het alarm uit te schakelen. Verwijder uw Pod.
Bel onmiddellijk de klantenservice. Controleer uw bloedglucose.

 **Systeemfout**— Er is een onverwachte fout gevonden in de Pod of PDM. De Pod, de PDM of beide kunnen een alarm geven.

Bericht: Systeemfout. Verwijder nu de Pod. Bel de klantenservice.
Ref: <referentienummer>.

Wat u moet doen: tik op OK om het alarm uit te schakelen. Verwijder uw Pod.
Bel onmiddellijk de klantenservice. Controleer uw bloedglucose.

 **PDM-fout** — Er is een onverwachte fout gevonden in de PDM. De PDM geeft het alarm.

Bericht: PDM-fout. Verwijder nu de Pod. Bel de klantenservice.
Ref: <referentienummer>.

Wat u moet doen: tik op OK om het alarm uit te schakelen. Verwijder uw Pod.
Bel onmiddellijk de klantenservice. Controleer uw bloedglucose.

 **PDM-fout**

Bericht: PDM-fout. Tik op 'OK' om de klok te resetten.

Wat u moet doen: tik op OK. Stel de klok opnieuw in. Vervang uw Pod.
Controleer uw bloedglucose.

 **Pod moet worden gedeactiveerd**

Bericht: Pod moet worden gedeactiveerd. Tik op 'OK' om te deactiveren.

Wat u moet doen: tik op OK, DEACTIVEER POD NU om uw Pod te deactiveren. Verwijder uw Pod.

PDM-geheugen beschadigd

Bericht: PDM-geheugen beschadigd. Verwijder nu de Pod. Bel de klantenservice. Tik op 'OK' om de PDM te resetten en alle gebruikersinstellingen te verwijderen.

Wat u moet doen: tik op OK om de PDM te resetten. Hiermee worden wel al uw gebruikersinstellingen maar niet uw historiegegevens verwijderd. De PDM begeleidt u indien nodig bij het opnieuw invoeren van uw gebruikersinstellingen en de datum en tijd. Overleg met uw zorgverlener als u uw gebruikersinstellingen bent vergeten

Lijst met waarschuwingsalarmen

Waarschuwingsalarmen zijn alarmen die u wijzen op een situatie waar u op korte termijn iets aan moet doen.

Waarschuwing:

Er zijn drie waarschuwingsalarmen (Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken, Reservoir bijna leeg en Auto-uit) die gevarenalarmen worden als u er niet op reageert, waardoor de insulinetoediening wordt gestopt. Reageer dus op alle waarschuwingsalarmen wanneer deze worden gegeven.

Hieronder staan beschrijvingen van alle waarschuwingsalarmen.

 **Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken** — De Pod stopt binnenkort met het toedienen van insuline. Dit alarm wordt een gevarenalarm wanneer u er niet op reageert. De Pod en PDM kunnen een alarm geven.

Trillen/geluid: regelmatig totdat bevestigd.

Bericht: Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken. Vervang nu de Pod.

Wat u moet doen: tik op OK. Vervang uw Pod.

 **Leeg reservoir** — Het insulinevolume in het reservoir van de Pod is lager dan de door u opgegeven waarde. Dit alarm wordt het gevarenalarm voor een leeg reservoir wanneer u er niet op reageert. Zie "Reservoir bijna leeg" op pagina 108 voor het wijzigen van deze waarde. De Pod en PDM kunnen een alarm geven.

Trillen/geluid: één keer per minuut gedurende 3 minuten. Dit wordt elke 60 minuten herhaald totdat u bevestigt.

Bericht: Leeg reservoir. <x> eenheden insuline of minder in de Pod. Vervang de Pod binnenkort.

Wat u moet doen: tik op OK. Vervang uw Pod.

! Auto-uit — U hebt uw PDM niet gebruikt in de door u opgegeven tijdsduur voor het automatisch uitschakelen van de PDM. Als u niet op dit alarm reageert, stopt de Pod na enige tijd met het toedienen van insuline. Zie "Pod automatisch uitschakelen" op pagina 108 voor het in- of uitschakelen van de functie Auto-uit of het wijzigen van de aftelperiode. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Trillen/geluid: één keer per minuut gedurende 15 minuten.

Bericht: Signaal voor Auto-uit. In de afgelopen, door u opgegeven <tijdsduur> was er geen communicatie tussen uw PDM en Pod. Tik op OK voor communicatie tussen uw PDM en Pod.

Wat u moet doen: tik op OK om de tijdsduur tot het automatisch uitschakelen in te stellen op het begin van de aftelperiode.

! Insuline hervatten — De tijd die u hebt ingesteld voor het opschorten van de insulinetoediening, is verstreken. Als u de toediening van insuline niet hervat, kunt u hyperglykemie krijgen. Op zowel de Pod als de PDM gaat er een alarm af.

Trillen/geluid: één keer per minuut gedurende 3 minuten. Dit wordt elke 15 minuten herhaald totdat u de insulinetoediening hervat.

Bericht op vergrendeld scherm: Insuline hervatten. Periode insulineonderbreking verstreken.

Schermgroot bericht: Wilt u de insulinetoediening met het basaalprogramma <name> hervatten? Periode insulineonderbreking verstreken.

Wat u moet doen: tik op INSULINE HERVATTEN om het geplande basaalprogramma opnieuw op te starten of tik op HERINNEREN NA 15 MIN om de insulineonderbreking nog niet te hervatten. Dit alarm wordt elke 15 minuten herhaald totdat u de insulinetoediening hervat.

! Lege PDM-batterij — De PDM-batterij is nog maar voor 15% of minder opgeladen.

Trillen/geluid: geen. Het geluid op de PDM is uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Bericht: Lege PDM-batterij. De PDM-batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Wat u moet doen: tik op OK. Laad de batterij in de PDM zo snel mogelijk op.

Voorzichtig: Er gaat geen gevarenalarm af wanneer de batterij helemaal leeg is. Steek de oplader in een stopcontact wanneer wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is.

Opmerking: Het batterijpictogram in de statusbalk van de meeste schermen geeft aan hoever de batterij nog is opgeladen. Wanneer de batterij helemaal leeg is, gaat de PDM uit. U moet de batterij in de PDM eerst opladen om de PDM weer te kunnen gebruiken. U kunt uw PDM tijdens het opladen gewoon blijven gebruiken.

Lijst met kennisgevingen

Kennisgevingen, ook wel herinneringen genoemd, herinneren u aan diverse handelingen die u mogelijk wilt uitvoeren. Sommige kennisgevingen worden automatisch gegenereerd en voor andere kennisgevingen zijn er instellingen die u kunt opgeven (zie "Instellingen aanpassen" op pagina 101).

Tip: *Gebruik de knop Geluid/trillen aan de rechterkant van de PDM om in te stellen of bij een kennisgeving de PDM moet piepen of trillen (zie "De knop voor geluid/trillen" op pagina 123).*

Dit zijn de kennisgevingen:

 **Waarschuwing voor uiterste gebruiksdatum Pod** — Geeft aan u wanneer het waarschuwingsalarm voor uiterste gebruiksdatum wordt gegeven. Zie "Uiterste gebruiksdatum Pod" op pagina 107 voor het wijzigen van de timing van deze kennisgeving. De kennisgeving wordt zowel op de Pod als op de PDM gegeven.

Trilling/geluid: een serie van drie piepjes. Klinken regelmatig totdat u bevestigt.

Bericht: Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken. Pod bruikbaar tot <tijd, datum>.

Wat u moet doen: bevestig het bericht (zie "Kennisgevingen bevestigen" op pagina 121). Vervang uw Pod.

 **Geen actieve Pod** — De PDM herinnert u eraan dat u een nieuwe Pod moet activeren om te beginnen met het toedienen van basale insuline.

Trillen/geluid: elke 15 minuten.

Bericht: Geen actieve Pod. Activeer een Pod om insuline te gaan toedienen.

Wat u moet doen: ontgrendel de PDM. Activeer een nieuwe Pod.

 **BG controleren na bolus** — U wordt er door de PDM aan herinnerd dat u uw bloedglucose na een bolus moet controleren. Zie "Herinneringen voor BG controleren na bolus" op pagina 109 voor het bewerken van deze herinneringen.

Trilling/geluid: elke 5 minuten totdat u bevestigt.

Bericht: Herinnering: BG controleren. Er zijn <x> uur verstreken na uw bolus.

Wat u moet doen: bevestig het bericht (zie "Kennisgevingen bevestigen" op pagina 121). Controleer uw bloedglucose.

 **Gemiste bolus** — De PDM herinnert u eraan dat u binnen de door u opgegeven tijd geen bolus hebt toegediend. Zie "Herinneringen voor gemiste bolus" op pagina 109 voor het bewerken van deze herinneringen.

Trilling/geluid: elke 15 minuten totdat u bevestigt.

Bericht: Gemiste bolus. Maaltijdbolus niet toegediend tussen <begintijd> - <eindtijd>.

Wat u moet doen: bevestig het bericht (zie "Kennisgevingen bevestigen" op pagina 121). Bekijk uw maaltijdschema.

 **Aangepaste herinnering** — Op de PDM wordt een herinnering weergegeven die u hebt opgegeven. Zie "Aangepaste herinneringen" op pagina 111 voor het maken of bewerken van deze herinneringen.

Trilling/geluid: elke 15 minuten totdat u bevestigt.

Bericht: <Uw herinnering>.

Wat u moet doen: bevestig het bericht (zie "Kennisgevingen bevestigen" op pagina 121).

Lijst met informatiesignalen

De Pod en PDM kunnen aan de hand van informatieve geluidssignalen of trillingen laten weten dat normale PDM- en Pod-voorvallen naar verwachting verlopen. U hoeft niet op deze signalen te reageren. Op de PDM wordt geen uitleg gegeven.

Tip: *Gebruik de knop Geluid/trillen aan de rechterkant van de PDM om in te stellen of een PDM-sigitaal met een geluidssigitaal of met een trilling moet worden gemeld (zie "De knop voor geluid/trillen" op pagina 123).*

Bevestigingsherinneringen — Deze geluidssignalen of trillingen laten weten dat uw tijdelijke basaalsnelheden en bolussen werken zoals verwacht. Standaard staan deze herinneringen ingeschakeld. Zie "Bevestigingsherinneringen" op pagina 111 voor het in- en uitschakelen van deze herinneringen.

De PDM piept/trilt aan het begin van een tijdelijke basaalsnelheid, bolus of verlengde bolus.

De Pod piept één keer aan het einde van een tijdelijke basaalsnelheid, bolus of verlengde bolus.

Programmaherinneringen — Deze pieptonen herinneren u eraan dat er een tijdelijke basaalsnelheid of een verlengde bolus wordt uitgevoerd. Standaard staan deze herinneringen ingeschakeld. Zie "Programmaherinneringen" op pagina 111 voor het in- en uitschakelen van deze herinneringen.

10 Alarmen, kennisgevingen, communicatiefouten

De Pod piept elke 60 minuten tijdens een tijdelijke basaalsnelheid of verlengde bolus.

Activering Pod — Geluidsignalen of trillingen op verschillende tijdstippen tijdens het activeren van de Pod om de voortgang daarvan aan te geven. U kunt dat niet uitschakelen.

De Pod piept twee keer wanneer de Pod is gevuld met de minimale hoeveelheid insuline die nodig is om de Pod te kunnen activeren (zie pagina 41).

De PDM piept/trilt wanneer de Pod en PDM zijn gekoppeld.

De Pod piept 10 minuten na het vullen van de Pod en vervolgens om de vijf minuten totdat er insuline wordt toegediend.

Deactivering Pod — De PDM piept of trilt twee keer wanneer de Pod is gedeactiveerd.

Wijzigingen basaalprogramma — Deze geluidssignalen of trillingen doen zich voor wanneer uw basaalprogramma is gewijzigd. U kunt dat niet uitschakelen.

De PDM piept/trilt wanneer een basaalprogramma is geactiveerd, bewerkt, onderbroken of hervat.

De Pod piept één keer om de 15 minuten als de insulinetoediening is onderbroken.

Tijdelijke basaalsnelheden en bolussen annuleren — Geeft aan dat de tijdelijke basaalsnelheid of de bolus is geannuleerd.

De Pod piept één keer bij het annuleren van een tijdelijke basaalsnelheid, bolus of verlengde bolus. U kunt dat niet uitschakelen.

Communicatiefouten

Wanneer er door uw PDM een instructie naar uw Pod wordt gestuurd, wordt de communicatie doorgaans snel tot stand gebracht. Bij een communicatiefout wordt op de statusbalk van de PDM het pictogram Geen communicatie Pod weergegeven (zie "De statusbalk" op pagina 9).

Er kan niet worden gecommuniceerd als:

- De afstand tussen de PDM en de Pod te groot is of tijdelijk te groot was. Voor een goede communicatie moeten de PDM en de Pod tijdens de activering naast elkaar liggen en mag na de activering de onderlinge afstand niet groter zijn dan 1,5 meter. Elke insulineopdracht brengt een verbinding tussen de PDM en de Pod tot stand.

- De communicatie is onderbroken door een storing van buitenaf (zie "Kennisgeving over storing door het Omnipod DASH®-systeem" op pagina 200).

Waarschuwing:

Als u een Pod niet kunt deactiveren, blijft deze insuline toedienen. Verwijder eerst de oude Pod voordat u een nieuwe Pod activeert. Te veel insuline kan hypoglykemie veroorzaken.

Bel de klantenservice als uw PDM beschadigd is of niet meer naar behoren werkt. Vergeet niet om in dat geval uw bloedglucose regelmatig te controleren. Verwijder uw Pod en neem contact op met uw zorgverlener voor de behandelrichtlijnen.

Fout bij annuleren van bolus

Als u tijdens een communicatiefout probeert een bolus te annuleren, kunt u het volgende op de PDM doen:

- **ANNULEREN:** Selecteer deze optie om te stoppen met het annuleren van de bolus. De bolus wordt gewoon verder toegediend door de Pod.

Opmerking: Als de instructie voor het annuleren van de bolus reeds is verzonden, is de optie ANNULEREN niet beschikbaar.

- **PROBEER OPNIEUW:** Ga naar een nieuwe plaats en selecteer deze optie om aan de PDM door te geven te blijven proberen te communiceren met de Pod.
- **POD DEACTIVEREN:** Selecteer deze optie om uw Pod aan de hand van de instructies op de PDM te vervangen.

Fout bij verzenden van insuline-instructies naar de Pod

Er kan zich een communicatiefout voordoen wanneer de PDM probeert de volgende instructies voor het toedienen van de insuline naar de Pod te sturen. Door het onderbreken of hervatten van de insuline wordt er een nieuw basaalprogramma geactiveerd, een tijdelijke basaalsnelheid gestart of geannuleerd of een bolus gestart.

Als er zich een communicatiefout voordoet wanneer de PDM probeert de volgende instructie voor het toedienen van de insuline te verzenden, kunt u het volgende op de PDM doen. De geboden opties zijn afhankelijk van het feit of de PDM de instructie naar de Pod heeft verzonden en geen bevestiging heeft ontvangen dat de instructie is verzonden, of dat de instructie niet door de PDM is verzonden.

Als de PDM de instructie naar Pod heeft verzonden en daarvan geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u het volgende op de PDM doen:

- **PROBEER OPNIEUW:** Ga naar een nieuwe plaats en selecteer vervolgens deze optie om opnieuw te controleren of de instructie daadwerkelijk is uitgevoerd.
- **POD DEACTIVEREN:** Selecteer deze optie om uw Pod aan de hand van de instructies op de PDM te vervangen.

Als de instructie *niet* door de PDM naar de Pod is verzonden, wordt op de PDM aangegeven dat u naar een nieuwe plaats moet gaan en op **PROBEER OPNIEUW** moet tikken om opnieuw te proberen de communicatie tot stand te brengen. Nadat u op **PROBEER OPNIEUW** tikt en er kan weer niet worden gecommuniceerd, kunt u het volgende op de PDM doen:

- **ANNULEREN:** Selecteer deze optie om het verzenden van de instructie te annuleren. In dat geval gaat de Pod verder met de vorige modus voor het toedienen van de insuline. U kunt naderhand opnieuw proberen de instructie te verzenden.
- **PROBEER OPNIEUW:** Ga naar een nieuwe plaats en selecteer deze optie om aan de PDM door te geven de instructie opnieuw naar de Pod te verzenden.
- **POD DEACTIVEREN:** Selecteer deze optie om uw Pod aan de hand van de instructies op de PDM te vervangen.

Opmerking: Nadat op de PDM is bevestigd dat de Pod de instructie heeft ontvangen, verschijnt er op een gegeven moment een groene banner waarin wordt gemeld dat de instructie is uitgevoerd.

Fout bij activeren van een Pod

Als er tijdens het activeren van een Pod een communicatiefout wordt weergegeven, kunt u het volgende op de PDM doen:

- **POD WEGGOOIEN:** Selecteer deze optie om niet verder te proberen deze Pod te gebruiken.
- **OPNIEUW PROBEREN:** Selecteer deze optie om opnieuw te proberen een communicatie tot stand te brengen.

Fout bij deactiveren van een Pod

Als er tijdens het deactiveren van een Pod een communicatiefout wordt weergegeven, kunt u het volgende op de PDM doen:

- **POD WEGGOOIEN:** Selecteer deze optie als u de PDM wilt laten ontkoppelen van die Pod. Op de PDM wordt aangegeven dat u de Pod moet verwijderen en op **DOORGAAN** moet tikken.

- **OPNIEUW PROBEREN:** Selecteer deze optie om opnieuw te proberen een communicatie tot stand te brengen.

Opmerking: Nadat u de optie om weg te gooien, hebt geselecteerd, kunt u aan de hand van de instructies in "Een niet-opgelost alarm uitschakelen" op pagina 133 voorkomen dat de weggegooide Pod naderhand nog een alarm geeft.

Opmerking: Wanneer u een Pod weggooit en er is een bolus die niet is bevestigd, weet de PDM niet hoeveel er van de bolus is toegediend. Daarom schakelt de PDM de boluscalculator tijdelijk uit. Als u op de bolusknop tikt terwijl de boluscalculator is uitgeschakeld, wordt op de PDM het bericht "Boluscalculator tijdelijk uitgeschakeld" weergegeven. U kunt wel een handmatig berekende bolus toedienen wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld.


Een niet-opgelost alarm uitschakelen

U kunt doorgaans Pod- en PDM-alarmen uitschakelen door op een knop in het alarmscherm te tikken. Als het alarm blijft aanhouden, volg dan de aanwijzingen in dit gedeelte.

Pod-alarm

Een Pod-alarm voorgoed uitschakelen:

1. Verwijder de Pod als die nog op uw lichaam is bevestigd.
2. Maak aan de onderkant van de Pod bij het rechte uiteinde een stukje van het kleefband los (zie afbeelding).
3. Kijk waar de uitschakelpoort van het alarm zich bevindt, rechts van de goudkleurige cirkel. U kunt de uitschakelpoort voor het alarm met een vingernagel of paperclip voelen als een stukje zacht plastic.
4. Druk een paperclip of vergelijkbaar voorwerp recht in de uitschakelpoort van het alarm. Als er een alarm klinkt, stopt het alarm. U moet hard genoeg duwen om door een dun laagje plastic te breken.

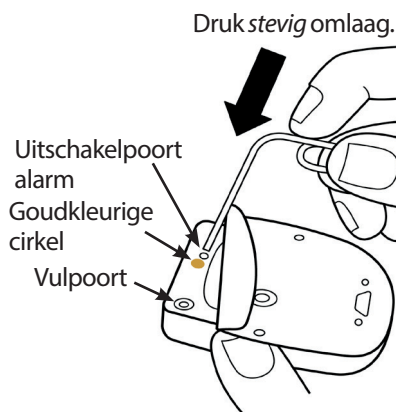

PDM-alarm

Doe het volgende als een PDM-alarm niet wordt uitgeschakeld wanneer u op de knop in het alarmscherm tikt:

1. Druk op de knop Aan/Uit, houd die ingedrukt en tik vervolgens op Uitschakelen.
2. Druk op de knop Aan/Uit en houd die ingedrukt om de PDM weer in te schakelen.

Door deze handeling wordt het alarm van de PDM uitgeschakeld. Uw geschiedenisgegevens en persoonlijke instellingen blijven bewaard. Het kan zijn dat u de tijd en datum opnieuw moet instellen en uw Pod moet vervangen. Nadat u de tijd opnieuw hebt ingesteld, is de boluscalculator tijdelijk uitgeschakeld. Op de PDM wordt aangegeven wanneer u de boluscalculator weer kunt gebruiken. U kunt wel een handmatig berekende bolus toedienen wanneer de boluscalculator is uitgeschakeld.

HOOFDSTUK 11

Zorgdragen voor uw PDM en Pod

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Bel de klantenservice als u hulp nodig hebt bij het bedienen of onderhouden van het Omnipod DASH®-systeem.

Waarschuwing:

Bewaar alle producten en benodigdheden van het Omnipod DASH®-systeem, waaronder ongeopende Pods, op een koele en droge plaats.

Producten of benodigdheden die zijn blootgesteld aan extreme temperaturen, werken wellicht niet goed meer.

Voorzichtig: Bewaar onderdelen en benodigdheden voor het Omnipod DASH-systeem buiten het bereik van kinderen, huisdieren of insecten. Onbedoelde toegang kan leiden tot schade aan systeemonderdelen of invloed hebben op de steriliteit.

Zorgdragen voor uw Pod en insuline

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u met uw Pod moet omgaan. Bel de klantenservice voor het bestellen van alle producten en benodigdheden van het Omnipod DASH®-systeem.

Pod en insuline bewaren

Als Pods worden blootgesteld aan extreme temperaturen, moeten ze voor gebruik zorgvuldig worden geïnspecteerd.

Het is uitermate belangrijk om uw insuline in een goed gecontroleerde omgeving te bewaren. Controleer de insuline voordat u die gaat gebruiken. Gebruik nooit insuline die er troebel uitziet of verkleurd is. Insuline die er troebel uitziet of verkleurd is, kan te oud of verontreinigd zijn of niet meer werken. Zie de gebruiksinstructies van de fabrikant van de insuline en controleer de uiterste gebruiksdatum van de insuline.

11 Zorgdragen voor uw PDM en Pod

Pods en de omgeving

Vermijd extreme temperaturen

De bedrijfstemperatuur van de Pod is getest en er is vastgesteld dat deze veilig werkt tussen 5 °C en 40 °C (tussen 41 °F en 104 °F). Onder normale omstandigheden houdt uw lichaamstemperatuur de Pod tussen de 23 °C en 37 °C (73 °F en 98,6 °F).

Voorzichtig: Blaas de Pod nooit droog met een föhn of hete lucht. Door hete lucht kan de elektronica beschadigd raken.

Waarschuwing: Laat de Pod niet langdurig in direct zonlicht liggen. Verwijder uw Pod als u een warm bad gaat nemen, in een whirlpool gaat zitten of naar een sauna gaat. In die gevallen is de temperatuur te hoog voor de Pod wat nadelig is voor de insuline in de Pod.

Als u uw Pod vanwege een extreme temperatuur verwijdt, moet u niet vergeten uw bloedglucose regelmatig te controleren. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen wanneer u de Pod langere tijd niet gaat gebruiken.

Water en uw Pod

De Pod is gedurende 60 minuten waterdicht tot een diepte van 7,6 meter (IP28). Wanneer u hebt gezwommen of op een andere manier met water in aanraking bent gekomen, moet u de Pod afspoelen en voorzichtig afdrogen met een handdoek.

Waarschuwing: Ga niet met uw Pod dieper dan 7,6 meter onder water en stel de Pod niet langer dan 60 minuten bloot aan water.

Uw Pod schoonmaken

Pods zijn waterdicht. Als u een Pod wilt schoonmaken, veegt u die af met een schone, vochtige doek of gebruikt u water en zachte zeep.

Voorzichtig: Gebruik GEEN sprays, sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen op of in de buurt van uw Pod. Het gebruik van zonnebrandspray, insectenspray die DEET bevat, sprays voor persoonlijke verzorging en andere aerosolen, reinigingsmiddelen en sterke chemicaliën op de Pod kan de infusieplaats irriteren of de Pod beschadigen. Hierdoor wordt het risico op scheuren in de behuizing van de Pod verhoogd. Schade aan de Pod kan leiden tot het binnendringen van externe vloeistoffen, wat het juist functioneren van de Pod negatief kan beïnvloeden. Dit kan een te hoge of te lage insulinetoediening tot gevolg hebben, wat kan leiden tot hypoglykemie of hyperglykemie.

Voorzichtig: Houd de Pod bij het schoonmaken goed vast en ga zorgvuldig te werk om de canule niet te knikken en ervoor te zorgen dat de Pod niet losraakt van uw huid.

Zorgdragen voor de PDM

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u met uw PDM moet omgaan.

Waarschuwing: Bel de klantenservice als uw PDM is beschadigd of niet meer naar behoren werkt. Vergeet niet om in dat geval uw bloedglucose regelmatig te controleren. Verwijder uw Pod en neem contact op met uw zorgverlener voor de behandelrichtlijnen die u in dat geval moet volgen.

PDM bewaren

Wanneer u de PDM niet gebruikt, bewaart u die op een koele en droge plaats waar u er makkelijk bij kunt.

Deel de PIN van uw PDM niet met anderen voor het geval een kind of iemand anders per ongeluk op de knoppen van de PDM kan drukken. Bewaar de PDM bovendien op een veilige plaats.

Langdurig bewaren van de PDM

Als u uw PDM langere tijd niet gaat gebruiken, zorg er dan voor dat de batterij tot ongeveer 50% is opgeladen. Houd vervolgens de knop Aan/Uit ingedrukt om de PDM uit te schakelen.

Voorzichtig: Schakel uw PDM niet langer dan zes maanden achter elkaar uit.

PDM en de omgeving

Vermijd extreme temperaturen

Extreme bedrijfstemperaturen kunnen schadelijk zijn voor de batterij van de PDM en kunnen de werking van het Omnipod DASH®-systeem verstoren. Gebruik de PDM niet bij temperaturen lager dan 5 °C en hoger dan 40 °C. Laad de PDM niet op bij temperaturen lager dan 5 °C (41 °F) en hoger dan 40 °C (104 °F).

Voorzichtig: Laat de PDM niet liggen of laad deze niet op waar deze kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen, bijvoorbeeld in een auto. Extreme hitte of kou kan de PDM beschadigen waardoor deze niet goed meer werkt. Zie de PDM-specificaties voor de juiste temperatuurbereiken voor gebruik, opladen en opslag. Zie voor specifieke bedrijfstemperaturen de PDM-specificaties in deze gebruikershandleiding.

11 Zorgdragen voor uw PDM en Pod

Water en uw PDM

De PDM is niet waterbestendig. Leg de PDM niet in water of in de buurt van water om te voorkomen dat het apparaat er per ongeluk kan invallen. Vraag het Klantenserviceteam om een vervangende PDM als de huidige PDM nat wordt.

Voorzichtig: Blaas de PDM nooit droog met een föhn of hete lucht. Door hete lucht kan de elektronica beschadigd raken.

Voorzichtig: De PDM is niet waterdicht. Leg de PDM niet in of in de buurt van water.

Elektrische storing

De PDM is bestand tegen normale radio-interferentie en elektromagnetische velden, waaronder detectiepoortjes op vliegvelden en mobiele telefoons. Maar net als bij alle technologie voor draadloze communicatie kan de communicatie in bepaalde gebruiksomstandigheden worden onderbroken. Elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld magnetrons en elektrische machines in productieomgevingen, kunnen storing veroorzaken. In de meeste gevallen kan deze storing eenvoudig worden verholpen door ergens anders te gaan staan of zitten.

USB-kabel

Als u een USB-kabel gebruikt om uw PDM-gegevens te uploaden naar een ander apparaat of om uw PDM op te laden, moet u de USB-kabel loskoppelen zodra u daarmee klaar bent.

Voorzichtig: Sluit alleen een USB-kabel op uw PDM aan om de batterij op te laden of gegevens over te brengen naar een computer of een ander apparaat. Sluit nooit een USB-kabel om een andere reden op uw PDM aan.

Opmerking: U kunt de PDM tijdens het opladen of het overbrengen van gegevens gewoon blijven gebruiken.

Voorzichtig: Sluit geen USB-kabel op uw PDM aan die langer is dan 1,2 m.

Voorzichtig: Houd de kabels uit de buurt van jonge kinderen en huisdieren om het risico op verwurging te vermijden.

Uw PDM schoonmaken

Houd de USB-poort van uw PDM altijd schoon en droog. Vuil, stof en vloeistoffen kunnen de werking van de PDM verminderen of de PDM beschadigen.

Voorzichtig: Gebruik geen oplosmiddelen om uw PDM schoon te maken. Dompel uw PDM niet onder in water.

Uw PDM schoonmaken:

1. Druk de knop Aan/Uit kort in om uw PDM in de slaapstand te zetten.
2. Neem de buitenkant van de PDM af met een vochtige, pluisvrije doek.
3. Droog de buitenkant af met een droge, pluisvrije doek.

Voorzichtig: Zorg ervoor dat er bij het schoonmaken geen vuil of vocht in de USB-poort, de luidspreker, de aansluiting voor de oortelefoon, de knop voor geluid/trillen of de knop Aan/Uit komt.

Steeds wanneer u uw PDM schoonmaakt, moet u deze volledig controleren op verkleuring, barstjes of onvolkomenheden. Controleer tevens of de prestaties van het apparaat minder worden, zoals onleesbare berichten, knoppen die niet goed meer werken, of steeds terugkerende communicatiefouten. Gebruik de PDM niet langer als deze tekenen van beschadiging of slijtage vertoont. Bel de klantenservice als u vragen hebt of informatie wilt over het vervangen van uw PDM.

Als u de PDM laat vallen

Uw PDM kan beschadigd raken door een schok of harde klap. Als u de PDM hebt laten vallen of ergens hard tegenaan hebt gestoten, doet u het volgende:

1. Controleer de buitenkant van de PDM op zichtbare beschadigingen.
2. Houd de knop Aan/Uit ingedrukt om te controleren of de PDM wordt ingeschakeld en het vergrendelscherm wordt geopend.

Voorzichtig: Gebruik de PDM niet als die is beschadigd of niet naar behoren werkt. Gebruik de PDM niet als het scherm beschadigd is.

Gebruik van de PDM-batterij

De PDM is voorzien van een oplaadbare lithium-ion-batterij. Neem contact op met de klantenservice als u een probleem hebt met de batterij of oplader. Zij kunnen u meer informatie geven over de vervanging ervan.

Veilig gebruik van de PDM-batterij

Waarschuwing:

Stel uw batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Doorboor of beschadig uw batterij of de achterkant van de PDM niet en oefen er geen druk op uit. Als u ziet dat de achterkant van de PDM krom is of niet op zijn plaats blijft zitten, neem dan contact op met het Klantenserviceteam. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een explosie, brand, elektrische schok, schade aan de PDM of batterij of lekkage van de batterij.

Verbrand een batterij niet. Verwijder een oude batterij volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

Verwijder de batterij niet uit de PDM nadat deze net voor de eerste keer is geplaatst. Neem contact op met het Klantenserviceteam als de batterij niet goed werkt.

De oplaadbare batterij veilig gebruiken:

- Om de batterij zolang mogelijk te kunnen gebruiken, moet u deze op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht bewaren en opladen. Laat de batterij niet achter of laad de batterij niet op waar extreme temperaturen de batterij permanent kunnen beschadigen, bijvoorbeeld in een auto.
- Uw PDM kan warm worden als u deze langdurig gebruikt of wanneer deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Als uw PDM of batterij heet aanvoelt, verwijdert u de USB-kabel als deze is aangesloten en vermijdt u langdurig contact met de huid. Plaats uw PDM op een metalen oppervlak en neem contact op met het Klantenserviceteam.
- Maak geen contact tussen de batterijpolen en metalen voorwerpen, zoals sleutels of sieraden. Als u dit wel doet, kan dit kortsluiting van de batterij of letsel of brandwonden veroorzaken.
- Stel de batterij en de oplader niet bloot aan vloeistoffen, bijvoorbeeld water, regen of sneeuw, om schade te voorkomen. Neem contact op met het Klantenserviceteam als de batterij of oplader nat zijn geworden.
- Let erop dat niemand, met name kinderen, en ook geen huisdieren de batterij in de mond kunnen stoppen. Als een kind of een huisdier dat wel doet, kan dit leiden tot letsel of een explosie.

- Leg de PDM of batterij niet op of in apparaten die warmte afgeven, zoals een magnetron, kookplaat of radiator. Als de batterij oververhit raakt, kan deze ontploffen.
- Laat de batterij niet vallen. Neem contact op met het Klantenserviceteam als de batterij is gevallen.
- Gebruik alleen een door Insulet goedgekeurde batterij, oplader en kabel om uw PDM op te laden. Het gebruik van niet-goedgekeurde batterijen, opladers of kabels kan leiden tot schade aan of het ontploffen van de PDM en kan de garantie ongeldig maken.
- Gebruik de batterij niet in uw PDM als de batterij vervormd is of heet aanvoelt voordat u deze voor de eerste keer in de PDM plaatst. Gebruik van deze batterij kan dit leiden tot lekkage of ontploffing van de batterij of brand. Plaats de batterij op een metalen oppervlak en laat deze indien mogelijk buiten liggen. Neem contact op met het Klantenserviceteam voor een nieuwe batterij.
- Als de batterij vervormd raakt, van kleur verandert of oververhit raakt tijdens het opladen, gebruik of terwijl deze opgeslagen is, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen. Als u de batterij blijft gebruiken, kan dit leiden tot lekkage of ontploffing van de batterij of brand.
- Raak de batterij niet aan en zet het gebruik niet voort als de batterij vervormd raakt, van kleur verandert of oververhit raakt tijdens het opladen, gebruik of terwijl deze opgeslagen is. Als u de batterij blijft gebruiken, kan dit leiden tot lekkage of ontploffing van de batterij of brand. Plaats de PDM op een metalen oppervlak en laat deze indien mogelijk buiten liggen. Neem contact op met het Klantenserviceteam voor verdere instructies.
- Inspecteer de oplader voor uw PDM-batterij altijd voordat u deze gebruikt. Als de adapter voor de oplader in water valt of er een barst in zit, mag u deze niet gebruiken.

Neem contact op met het Klantenserviceteam als u het volgende opmerkt:

- Opladen duurt te lang
- Batterij loopt te snel leeg
- PDM is te heet om aan te raken
- PDM en/of batterij is/zijn opgezwollen
- Geur van gas afkomstig van PDM en/of batterij
- Wandoplader wordt te heet

Meldingen van de PDM-batterij die u mogelijk ziet

Batterijmelding	Wat u moet doen
Incompatibele oplader	Ontkoppel de oplader. Verbind de meegeleverde PDM-kabel en -oplader.
Batterij te warm	Ontkoppel de oplader als deze verbonden is. Laat de PDM afkoelen.
Batterij te koud	De PDM is te koud om te worden opgeladen. Laat de PDM op kamertemperatuur komen.
Fout bij opladen	Ontkoppel de oplader. Laat de PDM op kamertemperatuur komen.

De PDM-batterij opladen

Voorzichtig: Gebruik ALLEEN de door Insulet geleverde micro-USB-oplader om uw PDM op te laden. Het gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels kan leiden tot schade aan of het ontploffen van de PDM en kan de garantie ongeldig maken.

Wanneer de batterij volledig is opladen, heeft deze bij normaal gebruik genoeg stroom voor een ononderbroken werking.

U wordt met een PDM-bericht gewaarschuwd als de batterij bijna leeg is. Het batterijpictogram in de statusbalk geeft aan in hoeverre de batterij nog is opgeladen (zie "De statusbalk" op pagina 9). Zie "De batterij opladen" op pagina 22 voor informatie over het opladen van de batterij.

U kunt de batterij vaak opnieuw opladen, maar zoals alle batterijen heeft deze een beperkte levensduur. Neem contact op met de klantenservice als u merkt dat de batterij van de PDM aanzienlijk sneller leegloopt dan gewoonlijk.

Opmerking: Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het oplaadniveau van de batterij kan de oplaadtijd variëren.

Tip: *Wen uzelf eraan om de PDM-batterij elke dag om dezelfde tijd op te laden. Wacht niet tot de PDM aangeeft dat de batterij bijna leeg is.*

Waarschuwing: Als de batterij nagenoeg leeg is, schakelt de PDM zichzelf uit om de gegevens in het geheugen te bewaren. In dat geval kunt u de PDM pas weer gebruiken nadat u de oplader hebt aangesloten.

Opmerking: Als de PDM-batterij nagenoeg leeg is en de PDM is uitgeschakeld, blijft uw Pod basale insuline toedienen volgens het actieve basaalprogramma of de tijdelijke basaalsnelheid. Als u uw PDM-batterij niet oplaadt, gaat de insulinetoevoering door tot de uiterste gebruiksdatum van de Pod.

Opmerking: De geschiedenisgegevens blijven 60 dagen in het geheugen bewaard, zelfs als de batterij bijna leeg is.


De PDM-batterij plaatsen:

Voorzichtig: Gebruik ALLEEN de oplaadbare batterij die bij uw PDM is geleverd. Neem bij vragen contact op met het Klantenserviceteam.

Voorzichtig: Plaats de batterij van de PDM niet terwijl de PDM aangesloten is op een externe stroomvoorziening (zoals een stopcontact via de USB-kabel en lader).

De PDM-batterij plaatsen:

1. Zorg dat de USB-kabel niet aangesloten is op de PDM.
2. Schakel uw PDM uit door op de knop Aan/Uit te drukken of op Uitschakelen gevolgd door OK te tikken.
3. Als het witte lipje nog op de PDM zit, verwijdert u de achterzijde als volgt met het lipje:
 - a. Houd de PDM vast met de achterzijde naar u toe.
 - b. Plaats twee of meer vingers van één hand tussen het lipje en de PDM.
 - c. Druk met de duim van die hand stevig tegen de achterzijde van de PDM.
 - d. Trek aan het lipje en verwijder het klepje.
 - e. Ga verder met stap 4.
4. Als het witte lipje niet meer op de PDM zit, verwijdert u de achterzijde als volgt:
 - a. Houd de PDM op zijn kant en zoek de inkeping in de behuizing. Deze bevindt zich in de hoek onder de knop Aan/Uit.
 - b. Houd de PDM stevig vast, plaats een nagel in de inkeping en trek de voorzijde weg van de achterzijde.
 - c. Schuif uw vinger tussen de voor- en achterzijde om deze volledig los te maken.
 - d. Til de achterzijde eraf.

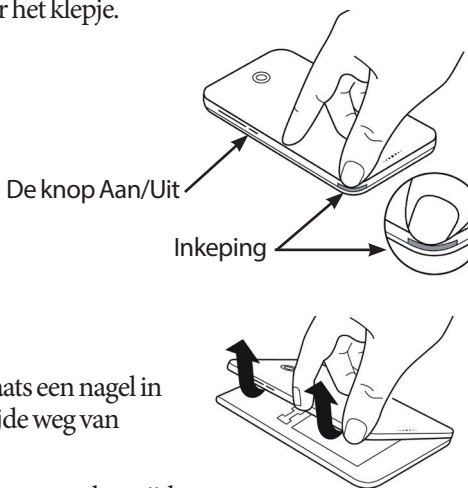


11 Zorgdragen voor uw PDM en Pod

5. Draai de batterij zo dat de drie goudkleurige lipjes op de batterij zijn uitgelijnd met de drie goudkleurige pennen in het batterijvak. De + en - op het etiket van de batterij moeten naar u toe gericht zijn.

Voorzichtig: Verwijder het etiket niet van de batterij.

Voorzichtig: Pas op dat u de kleine metalen onderdelen in het batterijvak niet beschadigt.

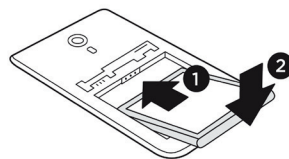

6. Schuif de batterij op zijn plaats. Duw voorzichtig op de onderkant van de batterij zodat deze op zijn plaats klikt.
7. De achterzijde van de PDM terugplaatsen:
 - a. Lijn de rand van de behuizing uit langs de kant met de knoppen voor geluid/vibreren en Aan/Uit. Duw deze zijde eerst omlaag.
 - b. Duw de achterzijde rondom aan tot de behuizing is vastgeklikt.

De PDM kan worden gebruikt. Zie bij het gebruik van een nieuwe PDM "knop Aan/Uit" op pagina 132 voor instructies over het invoeren van uw instellingen.

Opmerking: Probeer de batterij niet te vervangen nadat u deze voor het eerst hebt geplaatst. Neem contact op met het Klantenserviceteam als de batterij niet goed werkt of oplaadt.

HOOFDSTUK 12

Uitleg werking PDM en Pod

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de wisselwerking tussen de PDM en Pod, functies zoals de toediening van basale insuline en bolus insuline en hoe de boluscalculator werkt.

Wisselwerking tussen PDM en Pod

In dit gedeelte leest u hoe de PDM de Pod aanstuurt en wat de Pod kan doen zonder informatie van de PDM.

Pod-acties die door de PDM worden aangestuurd

De Pod heeft informatie van de PDM nodig om:

- geactiveerd of gedeactiveerd te worden;
- over te schakelen op een ander basaalprogramma;
- een bolus of tijdelijke basaalsnelheid te starten;
- een bolus of tijdelijke basaalsnelheid te annuleren;
- de insulinetoediening te onderbreken of te hervatten.

Pod activeren

Pods staan in slaapstand tot ze door een PDM worden geactiveerd. Nadat een Pod is geactiveerd door een PDM, zijn deze aan elkaar gekoppeld. Dit houdt in dat ze alleen met elkaar kunnen communiceren, ook als er andere Pods of PDM's binnen hun bereik zijn. Tijdens het activeren van de Pod draagt de PDM de gegevens over het actieve basaalprogramma over naar de Pod.

Tijdens het activeren wordt het communicatiebereik van de PDM automatisch beperkt. Daarom moet de PDM de Pod (in of buiten het bakje) aanraken tijdens het activeren van de Pod. Als extra voorzorgsmaatregel moet u uw Pod niet activeren in de buurt van iemand anders die een Pod aan het activeren is.

Hoe dicht bij elkaar moeten de PDM en de Pod zijn nadat de Pod is geactiveerd?

Na het activeren zou de PDM altijd in staat moeten zijn om te communiceren met een Pod die zich op maximaal 1,5 m afstand bevindt. Afhankelijk van de omgeving kan de PDM soms over een afstand van wel 15 meter met een Pod

12 Uitleg werking PDM en Pod

communiceren. Zorg ervoor dat de PDM zich op maximaal 1,5 m afstand van de Pod bevindt om zeker te weten dat u een bolus kunt toedienen, de basaalsnelheid kunt aanpassen of statusupdates van de Pod kunt ontvangen.

Wanneer u de PDM niet gebruikt, bewaart u deze binnen handbereik, bijvoorbeeld in het zakje van uw overhemd of in een la, aktetas of handtas.

Statuscontroles: zo controleert de PDM de werking van de Pod

De PDM vraagt periodiek de status van de Pod op. Dit heet een 'statuscontrole'. De PDM voert een statuscontrole uit:

- wanneer u de PDM uit de slaapstand haalt;
- wanneer u naar het tabblad Pod-info gaat;
- periodiek, ongeacht of de PDM in de slaapstand staat of niet. Deze 'statuscontroles in slaapstand' vinden elke vijf minuten plaats.

Opmerking: Na een statuscontrole in slaapstand komt de PDM alleen uit de slaapstand en geeft een geluidsalarm als de Pod een gevarenalarm aangeeft. Als de Pod een waarschuwingssalarm of kennisgeving aangeeft, blijft de PDM in slaapstand en doet niets.

Tijdens een statuscontrole verzamelt de PDM informatie van de Pod over bolustoedieningen, de resterende hoeveelheid insuline en eventuele alarmsituaties. Deze informatie geeft de PDM als volgt weer:

- In het Home-scherm wordt informatie weergegeven over de meest recente bolus.
- Het Pod-pictogram in de statusbalk laat zien hoeveel insuline er nog in het reservoir van de Pod zit (zie "De statusbalk" op pagina 9).
- Op het vergrendelde scherm en in een bericht op het gehele scherm wordt informatie over Pod-alarmen weergegeven.

Timing van alarmen afkomstig van de Pod

Als de Pod een gevarenalarm geeft, stuurt deze een signaal naar de PDM.

- Als de PDM binnen bereik is en niet in de slaapstand staat, geeft ook deze een alarm en toont het alarmbericht binnen 25 seconden na de eerste alarmmelding van de Pod.
- Als de PDM binnen bereik is maar in de slaapstand staat, kan de Pod deze niet uit de slaapstand halen. De PDM wordt dan op de hoogte gesteld van het Pod-alarm bij een 'statuscontrole in slaapstand'. In dit geval kan er een vertraging van maximaal vijf minuten en 25 seconden optreden tussen het moment dat de Pod een alarm geeft en het moment dat de PDM het alarm overneemt.

- Als de PDM buiten het bereik van de Pod is, kan de PDM geen communicatie vanaf de Pod ontvangen. Breng daarom de PDM binnen het bereik van de Pod als u hoort dat de Pod een alarm of melding geeft en haal de PDM dan uit de slaapstand. Binnen 25 seconden neemt de PDM het alarm over en geeft deze het alarmbericht weer.

Wanneer de PDM niet met de Pod kan communiceren

Wanneer de PDM probeert te communiceren met een actieve Pod die binnen het bereik is, wordt gewoonlijk snel contact gemaakt.

De PDM kan niet met de Pod communiceren wanneer:

- de afstand tussen de PDM en Pod te groot is of is geweest, bijvoorbeeld wanneer u in een vergadering zit en uw PDM op uw bureau hebt laten liggen;
- de batterij van de PDM leeg is;
- er te veel storing is van buitenaf (zie "Kennisgeving over storing door het Omnipod DASH®-systeem" op pagina 200).

Zie "Communicatiefouten" op pagina 130 voor informatie over het oplossen van communicatieproblemen tussen de PDM en de Pod.

Pod deactiveren

Door te deactiveren worden een PDM en Pod van elkaar losgekoppeld. Deactivering:

- beëindigt de huidige insulinetoediening door de Pod;
- schakelt alarmen van die Pod definitief uit;
- stelt de PDM in staat om een nieuwe Pod te activeren.

Opmerking: De Pod wordt niet automatisch gedeactiveerd als de uiterste gebruiksdatum is bereikt of de insuline op is. In deze situaties moet u de huidige Pod nog altijd deactiveren met de PDM voordat deze een nieuwe Pod kan activeren.

Een Pod afvoeren

Wanneer de PDM een communicatiefout niet kan oplossen, kan deze de Pod niet deactiveren. In dat geval vraagt de PDM of u de Pod wilt 'afvoeren'. 'Afvoeren' koppelt de PDM los van die Pod, maar beëindigt de insulinetoediening door de Pod niet. Als u op de PDM aangeeft dat een Pod moet worden 'afgevoerd', moet u dus niet vergeten om de oude Pod te verwijderen en weg te gooien voordat u een nieuwe Pod activeert. Volg de instructies voor het uitschakelen van een Pod-alarm op pagina 133 om te voorkomen dat de 'afgevoerde' Pod later een alarm geeft. Als een 'afgevoerde' Pod toch een alarm geeft, stopt dit na 15 uur.

Wat de Pod kan doen tussen twee PDM-instructies in

Nadat de Pod is geactiveerd, kan deze de volgende handelingen uitvoeren zonder informatie van de PDM:

- Insuline toedienen volgens het schema van het actieve basaalprogramma. De Pod heeft een ingebouwde klok waarmee deze de timing van de segmenten van het basaalprogramma kan bijhouden.
- De toediening van een tijdelijke basaalsnelheid op de geplande tijd stoppen en de toediening van het actieve basaalprogramma hervatten.
- De toediening van de bolus voltooiën nadat een bolus of verlengde bolus is gestart.
- De resterende hoeveelheid insuline in de Pod bijhouden.
- De tijd tot de uiterste gebruiksdatum van de Pod bijhouden. De insulinetoediening beëindigen als de uiterste gebruiksdatum van de Pod is verstreken.
- Zelfcontroles uitvoeren om te controleren of de insulinetoediening verloopt zoals verwacht. Een alarm geven als dat niet het geval is.
- Alarm- en kennisgevingsberichten naar de PDM sturen als deze binnen het bereik is.
- De insulinetoediening stoppen als de functie Auto-uit is ingeschakeld en u de PDM niet binnen de aangegeven tijdsperiode hebt gebruikt.

Auto-uit

De optionele functie Auto-uit is handig als u vaak niet opmerkt dat u hypoglykemie hebt (hypoglycemia unawareness). Wanneer u de Auto-uit-functie inschakelt, geeft u een tijdsduur op voor een afteltimer voor Auto-uit. De Pod en PDM geven een alarm af als u uw PDM niet binnen die tijd gebruikt. Zie "Pod automatisch uitschakelen" op pagina 108 voor het wijzigen van de instelling Auto-uit.

De afteltimer voor Auto-uit resetten

Als u iets doet waardoor de PDM met de Pod communiceert, wordt de afteltimer voor Auto-uit weer op het begin ingesteld. Zorg er als Auto-uit is ingeschakeld, dus voor dat de PDM binnen het bereik van de Pod is en haal uw PDM vervolgens uit de slaapstand. De timer wordt dan teruggezet en het alarm gaat niet af.

Alarmen voor Auto-uit

Als u uw PDM niet hebt gebruikt binnen de voor de afteltimer voor Auto-uit opgegeven tijd, geven de Pod en PDM 15 minuten lang elke minuut een waarschuwingsalarm. Ook wordt er een schermbericht weergegeven op de PDM.

Als u uw PDM niet binnen 15 minuten na de start van het waarschuwingsalarm voor Auto-uit van de Pod gebruikt, stopt de Pod de toediening van insuline en geven de PDM en Pod beide een gevarenalarm. Tik op OK om het alarm uit te schakelen en uw Pod te deactiveren.

Toediening basale insuline

Zelfs als we niet eten, heeft ons lichaam constant een kleine hoeveelheid insuline nodig om te functioneren. Dit wordt 'basale' insuline genoemd. Bij mensen zonder diabetes geeft de alvleesklier deze basale insuline constant af. Bij mensen die het Omnipod DASH®-systeem gebruiken, bootst de Pod de werking van de alvleesklier na van een persoon zonder diabetes, door basale insuline toe te dienen met de door u op de PDM ingeprogrammeerde snelheid.

Gewoonlijk is ongeveer 50% van de totale dagelijkse insulinedosis afkomstig van basale insuline. De andere 50% is gewoonlijk afkomstig van bolusdoses.


In dit gedeelte worden de twee modi van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem voor het continu toedienen van basale insuline beschreven: basaalprogramma's en tijdelijke basaalsnelheden.

Basaalprogramma's

Een basaalsnelheid is het aantal eenheden insuline dat per uur wordt toegediend.

Een basaalsegment geeft aan tijdens welke tijd van de dag een bepaalde basaalsnelheid wordt toegediend.

Een combinatie van basaalsegmenten die een periode van middernacht tot middernacht bestrijken, wordt een 'basaalprogramma' genoemd. Met andere woorden, een basaalprogramma beschrijft de snelheid van de insulinetoediening voor een periode van 24 uur.

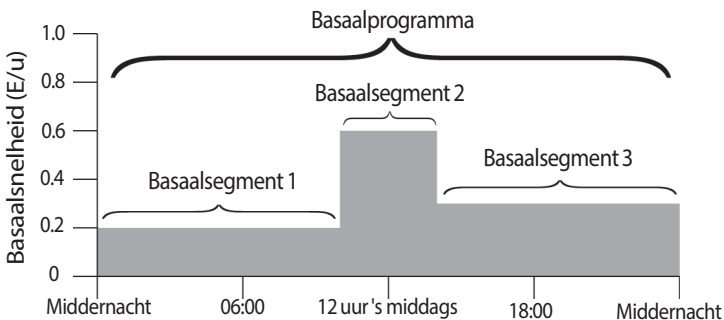


12 Uitleg werking PDM en Pod

In de loop van de dag schommelt uw insulinebehoefte. De meeste mensen stellen hun basaalsnelheid daarom zo in, dat er op bepaalde tijden van de dag meer insuline wordt toegediend en op andere tijden minder. U kunt bijvoorbeeld 's nachts op een lagere snelheid insuline laten toedienen en overdag op een hogere snelheid. In deze afbeelding ziet u een basaalprogramma met drie basaalsegmenten.

Om het basaalprogramma in de voorgaande afbeelding aan te maken, worden de volgende basaalsegmenten ingeprogrammeerd op de PDM:

Segment	Basaalsnelheid	
1: Middernacht–10:00 uur	0,20 E/u	Tussen middernacht en 10:00 uur dient de Pod 0,20 eenheden insuline per uur toe.
2: 10:00 –14:00	0,60 E/u	Tussen 10:00 en 14:00 uur dient de Pod 0,60 eenheden insuline per uur toe.
3: 14:00 uur tot middernacht	0,30 E/u	Tussen 14:00 uur en middernacht dient de Pod 0,30 eenheden insuline per uur toe.

U kunt verschillende dagindelingen hebben voor verschillende dagen van de week; u kunt bijvoorbeeld voor doordeweeks een andere dagindeling hebben dan voor het weekend. Om met deze voorspelbare veranderingen in uw dagindeling om te gaan, kunt u maximaal 12 verschillende basaalprogramma's aanmaken (zie "Basaalprogramma's" op pagina 79). In deze afbeelding ziet u twee mogelijke basaalprogramma's, namelijk één voor doordeweeks en één voor de weekends.

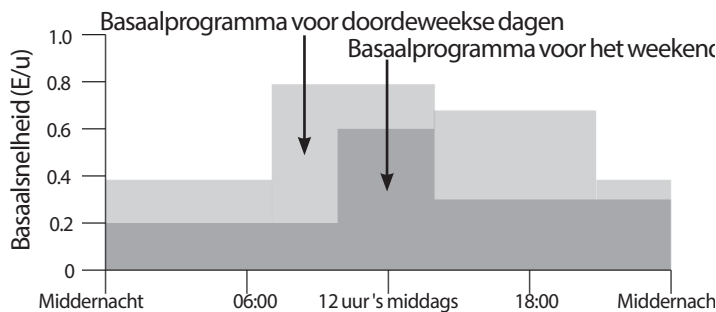

Tijdelijke basaalsnelheden

De mogelijkheid om tijdelijke basaalsnelheden in te stellen, is een belangrijke functie van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem. Met een tijdelijke basaalsnelheid kunt u het lopende basaalprogramma tijdelijk opheffen door een andere basaalsnelheid in te stellen voor een vooraf aangegeven tijdsperiode.

Als u bijvoorbeeld meerdere uren cross-country gaat skiën, kunt u een tijdelijke basaalsnelheid instellen om uw basaalsnelheid tijdens en na het sporten te verlagen (zie "Tijdelijke basaalsnelheden gebruiken" op pagina 71).


Tijdelijke basaalsnelheden kunnen 30 minuten tot 12 uur duren. Aan het einde van de aangegeven tijd gaat de Pod automatisch terug naar het actieve basaalprogramma.

Instellingen tijdelijke basaalsnelheid: eenheden per uur (E/u) of percentage (%)

Tijdelijke basaalsnelheden kunnen worden ingesteld op basis van een percentage (%) of het aantal eenheden per uur (E/u).

Als u een tijdelijke basaalsnelheid instelt op basis van het aantal eenheden per uur (E/u), dient de Pod met een vaste snelheid insuline toe zolang de tijdelijke basaalsnelheid duurt. Met andere woorden, de instellingen van het huidige geplande basaalprogramma worden tijdens deze tijdelijke basaalsnelheid genegeerd.

Als u een tijdelijke basaalsnelheid instelt op basis van een percentage (%), volgt de insulinetoediening het patroon van het huidige geplande basaalprogramma, maar de insulinetoediening wordt met het aangegeven percentage verhoogd of verlaagd. Een verhoging met 50% betekent bijvoorbeeld dat de insulinetoediening door het basaalprogramma met 50% toeneemt. Bij een verlaging met 50% neemt de insulinetoediening met 50% af.

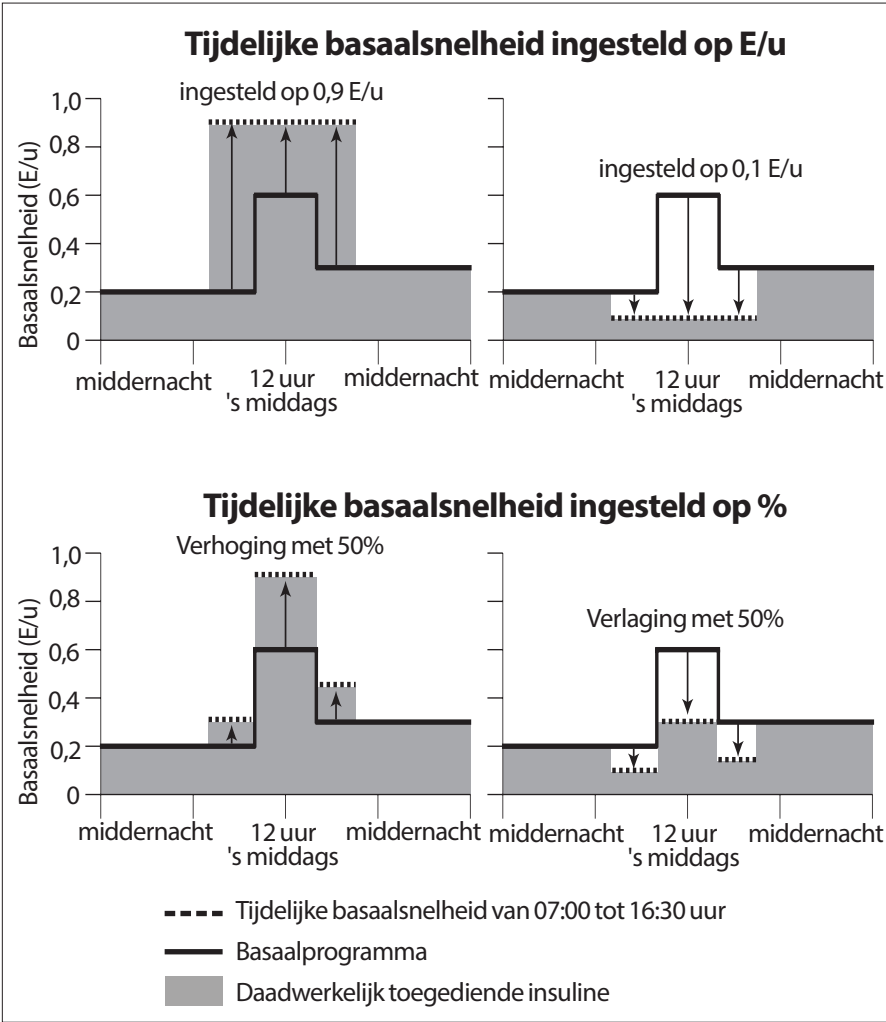

De berekeningen voor de verhoging met 50% van de tijdelijke basaalsnelheid in de voorgaande afbeelding zijn als volgt:

Grenzen tijdsegment*	Basaalsnelheid van basaalprogramma (E/u)	Verhoging met 50% (E/u)	Ontstane tijdelijke basaalsnelheid: (E/u)
Middernacht tot 07:00 uur	0,20		
7:00–10:00	0,20	$0,20 \times 50\% = 0,10$	$0,20 + 0,10 = 0,30$
10:00–14:00	0,60	$0,60 \times 50\% = 0,30$	$0,60 + 0,30 = 0,90$
14:00–16:30	0,30	$0,30 \times 50\% = 0,15$	$0,30 + 0,15 = 0,45$
16:30 uur tot middernacht	0,30		

* Segmenten worden gedefinieerd door het huidige geplande basaalprogramma.

Beperkingen tijdelijke basaalsnelheid

Verboden tijdelijke basaalsnelheden: u kunt geen tijdelijke basaalsnelheid van 0% instellen, want die zou gelijk zijn aan het actieve basaalprogramma.

Maximale tijdelijke basaalsnelheid:

- Als u een percentage (%) gebruikt, kunt u de tijdelijke basaalsnelheid tot 95% hoger instellen dan de snelheid van uw actieve basaalprogramma. Er is echter een uitzondering: u kunt geen hogere tijdelijke basaalsnelheid instellen die in één van de segmenten hoger is dan uw maximale basaalsnelheid.
- Bij een vaste snelheid (E/u) kunt u geen tijdelijke basaalsnelheid instellen die hoger is dan uw maximale basaalsnelheid.

Tijdelijke basaalsnelheden die de toediening van basale insuline uitschakelen:

als u een percentage gebruikt (%) en u stelt een afname in die leidt tot de toediening van minder dan 0,05 E/u voor een segment, wijst de PDM u erop dat u gedurende een of meer segmenten 0 eenheden insuline per uur ontvangt.

Als de tijdelijke basaalsnelheid lang genoeg is, wordt er uiteindelijk een beetje insuline toegediend. Dit is omdat de Pod insuline toedient in stappen van 0,05 E. Als de basaalsnelheid voor een basaalsegment bijvoorbeeld 0,10 E/u is, en u een tijdelijke basaalsnelheid aanmaakt van 60% lager gedurende:

- Eén uur; de daaruit voortkomende basaalsnelheid van 0,04 E/u leidt dan tot geen insulinetoediening gedurende de duur van de tijdelijke basaalsnelheid van één uur.
- Twee uur; de daaruit voortkomende basaalsnelheid van 0,04 E/u leidt dan tot een toediening van 0 E insuline in het eerste uur en 0,05 E insuline in het tweede uur.

Tip: Het is handig om de toediening van basale insuline uit te schakelen met behulp van een tijdelijke basaalsnelheid als u wilt dat uw basaalprogramma automatisch wordt hervat aan het einde van de tijdelijke basaalsnelheid (zie "Methoden om tijdelijk de insulinetoediening te stoppen" op pagina 154).

Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden

Sommige tijdelijke veranderingen in uw dagindeling zijn eenvoudig voorspelbaar, en waarschijnlijk weet u uit ervaring welke invloed deze hebben op uw insulinebehoefte. Bijvoorbeeld als u meedoet aan een voetbaltoernooi in de zomer of gaat sporten. Bij vrouwen kunnen maandelijkse hormonale veranderingen een voorspelbare invloed hebben op de bloedglucosespiegel.

Om met voorspelbare, kortdurende veranderingen om te gaan, kunt u vooringestelde tijdelijke basaalsnelheden aanmaken (zie "Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden" op pagina 83). Nadat een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid is opgeslagen, kunt u deze later snel activeren (zie "Een vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid activeren" op pagina 74).

Methoden om tijdelijk de insulinetoediening te stoppen

Mogelijk wilt u soms de toediening van alle insuline, of ten minste alle basale insuline, voor een bepaalde tijd stopzetten. Als u uw huidige Pod niet wilt deactiveren, kunt u de insulinetoediening als volgt tijdelijk stilleggen:

- Insulinetoediening onderbreken:
Menupictogram (≡) > Insuline onderbreken.
- Een tijdelijke basaalsnelheid instellen om de insulinetoediening uit te schakelen:
Menupictogram (≡) > Tijdelijke basaalsnelheid instellen. Selecteer vervolgens een afname van 100% of 0 E/u.

In de volgende tabel worden deze opties voor het pauzeren van de insulinetoediening vergeleken.


	Insuline onderbreken	Tijdelijke basaalsnelheid van 0 E/u
Effect op toediening basale insuline en bolus insuline	Geen basale toediening Geen bolustoediening	Geen basale toediening Bolussen toegestaan
Minimale duur voor stopzetten insuline	30 min.	30 min.
Maximale duur voor stopzetten insuline	2 uur	12 uur
Insulinetoediening wordt automatisch hervat	Nee	Ja
Schermschermweergave aan einde opgegeven duur	'Insuline hervatten. Periode insulineonderbreking verstreken.'	Middelste tabblad van Home-schermscherm genaamd 'Basaal' (niet 'Tijdelijke basaalsnelheid').
Piept terwijl de insuline is gestopt	Elke 15 min.	Aan het begin en elke 60 min.
Piept aan einde opgegeven duur	Elke 15 minuten tot u op Hervatten drukt	Eén pieptoon, daarna wordt insuline automatisch hervat

	Insuline onderbreken	Tijdelijke basaalsnelheid van 0 E/u
Moet worden gebruikt wanneer u	Een actief basaalprogramma bewerkt De tijd of datum wijzigt De alarm- en trilfunctie test	Gebruik is nooit verplicht
Hoe annuleert u	Menupictogram (≡) > Insuline hervatten	Home: tabblad Tijd.bas.snelh > ANNULEREN

Onmiddellijke en verlengde bolussen

Een bolus is een extra dosis insuline die als aanvulling op de continue insulinetoediening met de basaalsnelheid wordt toegediend. Gebruik bolussen om een hoge bloedglucosespiegel te verlagen en de koolhydraten (KH) in een maaltijd op te vangen.

U hebt de optie om de hele bolus in één keer toe te dienen. Dit wordt een 'onmiddellijke bolus' of gewoon een 'bolus' genoemd. U kunt de toediening van de hele of een deel van een maaltijdbolus ook spreiden zodat deze over een bepaalde tijdsperiode geleidelijk wordt toegediend. Dit wordt een 'verlengde bolus' genoemd.

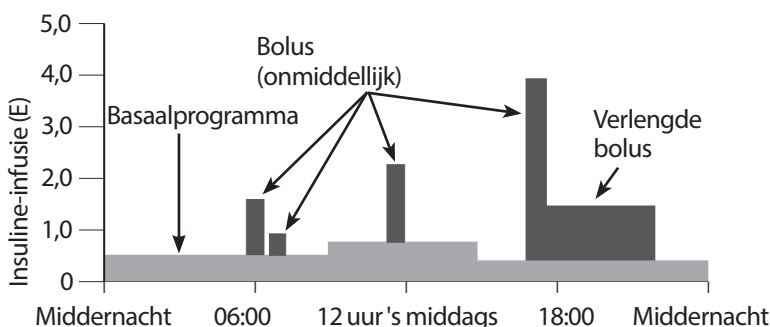

Het kan verstandig zijn om een bolus te verlengen als uw maaltijd voedingsmiddelen met veel vet of eiwitten bevat. Deze voedingsmiddelen vertragen de spijsvertering, en daardoor ook de toename van uw bloedglucose na een maaltijd.

Over handmatig berekende bolussen

Een handmatig berekende bolus is een bolus die u hebt berekend zonder de boluscalculator te gebruiken. U kunt handmatig berekende bolussen gebruiken als de boluscalculator uitstaat of niet beschikbaar is (zie "Maximale bolus" op pagina 157). Vraag uw zorgverlener om instructies voor het berekenen van een bolus.

U kunt een handmatig berekende bolus geheel of gedeeltelijk verlengen.

Als u regelmatig dezelfde bolushoeveelheid toedient, kunt u een vooringestelde bolus aanmaken (zie "Vooringestelde bolussen" op pagina 85) die u naderhand snel kunt activeren.

Opmerking: U kunt alleen vooringestelde bolussen gebruiken als de boluscalculator is uitgeschakeld.

De boluscalculator

De boluscalculator van de PDM kan u de bolusberekeningen grotendeels uit handen nemen. De boluscalculator gebruikt uw persoonlijke instellingen en houdt daarnaast rekening met insuline die nog over is van recente bolussen (dit wordt insuline 'on board' of IOB genoemd).

Bolussen door boluscalculator

Bij het berekenen van een bolus gaat de boluscalculator ervan uit dat een bolus uit twee componenten bestaat:

- **Correctiebolus:** wordt gebruikt om de bloedglucose te verlagen als deze te hoog wordt.
- **Maaltijdbolus:** wordt gebruikt voor het opvangen van koolhydraten in een maaltijd.

Verlengde bolussen

Als u de boluscalculator gebruikt, kunt u een maaltijdbolus geheel of gedeeltelijk verlengen. Een correctiebolus kan niet worden verlengd. Een correctiebolus wordt altijd als eerste toegediend. In het volgende voorbeeld worden er drie eenheden insuline verlengd:

Totale bolus = 5 eenheden (1 eenheid correctiebolus + 4 eenheden maaltijdbolus)

- Nu toedienen = 2 eenheden (1 eenheid correctiebolus + 1 eenheid maaltijdbolus)
- Verlengen = 3 eenheden (3 eenheden maaltijdbolus)

Maximale bolus

De PDM staat niet toe dat u een bolus invoert die hoger is dan uw maximale bolusinstelling. Als de boluscalculator een bolushoeveelheid berekent die hoger is dan uw maximale bolusinstelling, kunt u alleen de hoeveelheid tot de maximale bolushoeveelheid toedienen. U past die aan door te tikken op het veld Totale bolus en de juiste bolushoeveelheid in te voeren.

De bolushoeveelheid reguleren

De boluscalculator is een handig hulpmiddel, maar uiteindelijk bent u degene die bepaalt hoe groot de bolus is die u toedient. Nadat de boluscalculator een bolushoeveelheid heeft voorgesteld, kunt u de voorgestelde bolus bevestigen of verhogen/verlagen.

Wanneer de boluscalculator niet werkt

De boluscalculator werkt niet wanneer deze niet beschikbaar is of is uitgeschakeld. U stelt in of de boluscalculator in- of uitgeschakeld is, maar de PDM bepaalt of deze beschikbaar is of niet.

Als de boluscalculator is uitgeschakeld, houdt de PDM de IOB niet bij en stelt geen bolus voor.

Als de boluscalculator is ingeschakeld, kan de PDM die in een aantal situaties niet beschikbaar maken. Als de boluscalculator niet beschikbaar is, kan deze tijdelijk geen voorgestelde bolus berekenen.

Omstandigheden waarbij de boluscalculator niet beschikbaar is:	De boluscalculator is niet beschikbaar tot:	Terwijl de boluscalculator niet beschikbaar is:
Uw bloedglucosemeting is lager dan uw instelling voor de minimale BG voor berekeningen.	Er tien minuten voorbij zijn. of Een nieuwe bloedglucosemeting hoger is dan uw instelling voor de minimale BG voor berekeningen.	Wordt de IOB weergegeven op het scherm Home.
Uw bloedglucosewaarde is 'HOOG'.	Er tien minuten voorbij zijn. of Een nieuwe bloedglucosewaarde lager is dan 'HOOG'.	Wordt de IOB weergegeven op het scherm Home.

Er is een onbevestigde bolus wanneer u een Pod afvoert.	Er een complete duur van de insulineactie voorbij is gegaan.	Wordt de IOB niet weergegeven op het scherm Home.
De interne klok is gereset.	Er 8,5 uur zijn verstreken.	Wordt de IOB niet weergegeven op het scherm Home.

Gebruikte factoren bij berekeningen door de boluscalculator

De boluscalculator houdt bij de berekening van een bolus rekening met het volgende:

- Uw huidige bloedglucosespiegel, Doel-BG, drempel voor Corrigeren boven en correctiefactor
- De KH die u op het punt staat te eten, en uw I/KH-verhouding
- De duur van de insulineactie en insuline 'on board' (IOB)
- Uw Minimale BG voor berekeningen
- De Tegenovergestelde correctie, indien ingeschakeld

Streefwaarde voor BG

Bij het berekenen van een correctiebolus is het doel van de boluscalculator om uw bloedglucose op uw doel-BG te krijgen.

Drempel Corrigeren boven

De boluscalculator stelt alleen een correctiebolus voor als uw bloedglucosewaarde hoger is dan uw instelling voor Corrigeren boven. Deze functie voorkomt correcties van bloedglucosewaarden die maar iets hoger zijn dan uw streefwaarde voor BG.

Insuline 'on board'

Insuline 'on board' (IOB) is de hoeveelheid insuline die nog actief is in uw lichaam van eerdere bolussen. IOB van eerdere correctiebolussen wordt correctie-IOB genoemd. IOB van eerdere maaltijdbolussen wordt maaltijd-IOB genoemd.

Bij het berekenen van een nieuwe bolus kan de boluscalculator de voorgestelde bolus verlagen op basis van de IOB.

De instelling Duur van de insulineactie geeft aan hoelang insuline 'on board' of 'actief' blijft in uw lichaam.

Opmerking: De boluscalculator trekt alleen de IOB van een voorgestelde bolus af als uw huidige bloedglucosespiegel bekend is. U moet altijd eerst uw bloedglucose meten voordat u een bolus toedient.

Duur van de insulineactie

De boluscalculator gebruikt uw instelling voor de duur van de insulineactie om de insuline 'on board' van eerdere bolussen te berekenen.

Minimale BG voor berekeningen

De boluscalculator stelt geen bolus voor als uw bloedglucosemeting lager is dan uw minimale BG voor berekeningen.

Tegenovergestelde correctie


Als de instelling voor tegenovergestelde correctie is ingeschakeld en uw bloedglucosespiegel lager is dan uw doel-BG, gebruikt de boluscalculator de berekende negatieve correctiebolus om de maaltijdbolus te verlagen. Hierdoor kan een deel van de maaltijd worden gebruikt voor het verhogen van de lage bloedglucosespiegel richting de doel-BG.

Als de instelling voor tegenovergestelde correctie is uitgeschakeld, stelt de boluscalculator de volledige maaltijdbolus voor, zelfs als uw bloedglucosespiegel lager is dan uw doel-BG.

12 Uitleg werking PDM en Pod

Grenzen van de voorstellen door de boluscalculator


In de volgende afbeelding ziet u de grenzen tussen de soorten berekeningen die de boluscalculator kan uitvoeren. De boluscalculator stelt bijvoorbeeld een maaltijdbolus voor, maar geen correctiebolus, als uw bloedglucosemeting tussen uw instellingen voor uw Doel-BG en Corrigeren boven valt. Als uw bloedglucose hoger is dan het bereik van uw BG-meter of dan 33,3 mmol/L, wordt de meting als 'HOOG' geregistreerd en kan de boluscalculator geen bolus berekenen.

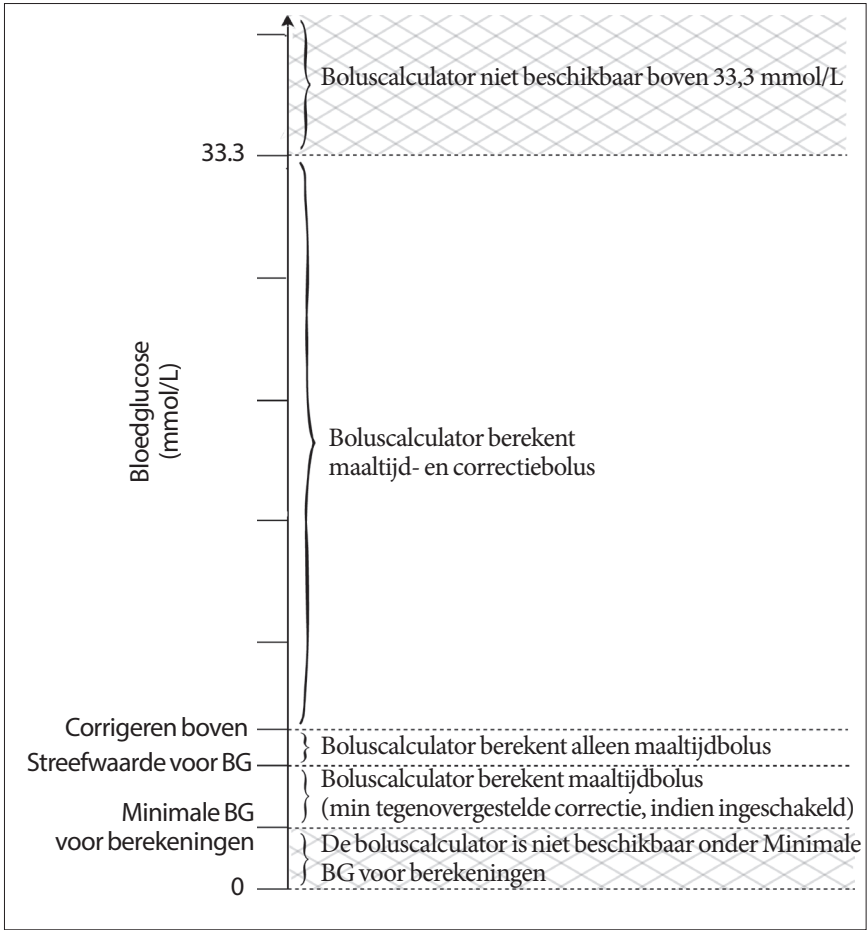

Insuline 'on board' (IOB)

Nadat een bolus is toegediend, neemt de hoeveelheid insuline die actief in is het lichaam, in de loop van meerdere uren af. De boluscalculator schat deze afname van de hoeveelheid insuline in door een waarde voor insuline 'on board' (IOB) te berekenen. De berekende IOB-waarde neemt in de loop van de tijd af en bereikt nul op het moment dat is ingesteld met de waarde voor de duur van de

insulineactie. Als uw duur van de insulineactie bijvoorbeeld 4 uur is, en er is om 18:00 uur een bolus van 8 eenheden toegediend, neemt de hoeveelheid IOB in de loop van de tijd geleidelijk af, zoals aangegeven in deze grafiek.

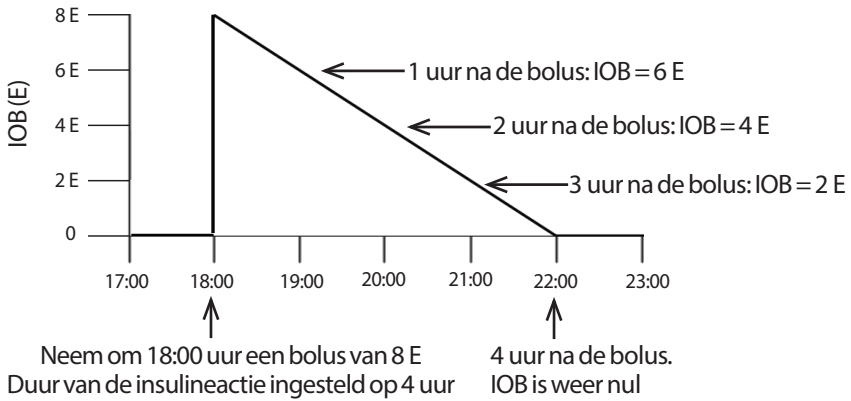


Soorten IOB: maaltijd-IOB, correctie-IOB of beide

Een bolus, en de daarbij behorende IOB, kunnen volledig voor een maaltijd, voor een correctie of voor beide bedoeld zijn. In de volgende grafieken ziet u hoe de IOB van een totale bolus van 4 E in de loop van de tijd afneemt bij een duur van de insulineactie van 4 uur.


Volledig maaltijd

Er wordt een maaltijdbolus berekend als u een maaltijd eet en uw bloedglucose lager is dan uw waarde voor Corrigeren boven. De IOB van deze bolus bestaat volledig uit maaltijd-IOB.

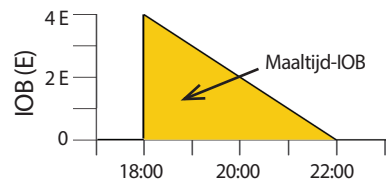


Volledig correctie

Er wordt een correctiebolus berekend als u niet eet en uw bloedglucose hoger is dan uw waarde voor Corrigeren boven. De IOB van deze bolus bestaat volledig uit correctie-IOB.

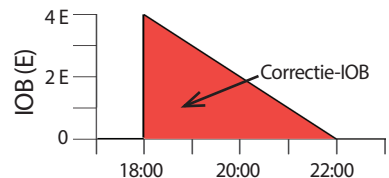

Zowel maaltijd als correctie

Wanneer u eet en uw bloedglucose hoger is dan uw waarde voor Corrigeren boven, omvat de totale bolus een maaltijdbolus- en een correctiebolusdeel. Ook de IOB van deze bolus bestaat uit een maaltijd-IOB- en een correctie-IOB-deel.

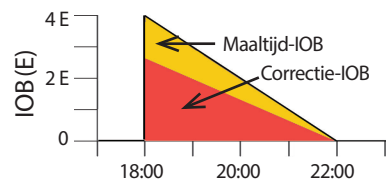

12 Uitleg werking PDM en Pod

Berekeningen insuline 'on board' (IOB)

$$\frac{\text{Duur van de insulineactie} - \text{tijd sinds vorige bolus}}{\text{Duur van de insulineactie}} \times \text{vorige bolus}$$

IOB van een eerdere correctiebolus wordt 'correctie-IOB' genoemd.

IOB van een eerdere maaltijdbolus wordt 'maaltijd-IOB' genoemd.

Voorbeeld correctie-IOB

Duur van de insulineactie: 3 uur

Tijd sinds vorige correctiebolus: 1 uur

Vorige correctiebolus: 3 E

$$\frac{3 \text{ uur} - 1 \text{ uur}}{3 \text{ uur}} \times 3 \text{ E} = 2 \text{ E correctie-IOB}$$

Met andere woorden, een uur na uw eerdere correctiebolus heeft uw lichaam slechts 1 eenheid van de correctiebolus verbruikt. De resterende 2 eenheden insuline zijn nog in uw lichaam aanwezig om uw bloedglucosespiegel te corrigeren. Door bij bolusberekeningen rekening te houden met correctie-IOB, wordt voorkomen dat er te veel insuline wordt toegediend bij het corrigeren van een hoge BG of het eten van een maaltijd.

Voorbeeld maaltijd-IOB

Duur van de insulineactie: 3 uur

Tijd sinds vorige maaltijdbolus: 2 uur

Vorige maaltijdbolus: 4,5 E

$$\frac{3 \text{ uur} - 2 \text{ uur}}{3 \text{ uur}} \times 4,5 \text{ E} = 1,5 \text{ E maaltijd-IOB}$$

Met andere woorden, twee uur na uw eerdere maaltijdbolus heeft uw lichaam 3 eenheden insuline van de maaltijdbolus verbruikt. De resterende 1,5 eenheden insuline zijn nog in uw lichaam aanwezig om uw maaltijd te verwerken.

De maaltijd-IOB wordt alleen gebruikt om een correctiebolus te verlagen; het verlaagt niet een nieuwe maaltijdbolus. De correctiebolus wordt alleen verlaagd tot 0 eenheden.

Vergelijkingen boluscalculator

De boluscalculator berekent eerst een voorlopige correctie- en maaltijdbolus. Vervolgens past de calculator indien van toepassing deze voorlopige waarden aan op basis van de IOB. De definitieve voorgestelde bolus is gelijk aan de som van de berekende correctiebolus en de maaltijdbolus.

$$\text{Voorlopige correctiebolus} = \frac{\text{Huidige BG} - \text{Doel-BG}}{\text{Correctiefactor}}$$

Voorbeeld: Huidige BG: 11,2 mmol/L, Doel-BG: 5,6 mmol/L
Correctiefactor (CF): 2,8

$$\frac{11,2 \text{ mmol/L} - 5,6 \text{ mmol/L}}{2,8} = 2 \text{ E voorl. correctiebolus}$$

$$\text{Voorlopige maaltijdbolus} = \frac{\text{Koolhydraatinname}}{\text{Insuline-KH-verhouding}}$$

Voorbeeld: koolhydraatinname: 45 gram koolhydraten,
I/KH-verhouding: 15

$$\frac{45}{15} = 3 \text{ E voorl. maaltijdbolus}$$

Definitieve correctiebolus = (voorlopige correctiebolus - maaltijd-IOB) - correctie-IOB

De maaltijd-IOB wordt eerst afgetrokken. Als de voorlopige correctiebolus daarna nog hoger is dan nul, wordt de correctie-IOB afgetrokken.

Opmerking: Een correctiebolus komt nooit lager uit dan 0 E.

Definitieve maaltijdbolus = voorlopige maaltijdbolus - resterende correctie-IOB

Maaltijd-IOB wordt nooit afgetrokken van een maaltijdbolus. Alleen een resterende correctie-IOB wordt van een maaltijdbolus afgetrokken (zie "Resterende correctie-IOB" op pagina 165).

Opmerking: Een maaltijdbolus komt nooit lager uit dan 0 E.

Berekende bolus = definitieve correctiebolus + definitieve maaltijdbolus

Bolusberekening met tegenovergestelde correctie: als de functie Tegenovergestelde correctie is ingeschakeld en uw huidige bloedglucose lager is dan uw doel-BG, maar hoger dan uw minimale BG voor berekeningen, trekt de boluscalculator een correctiehoeveelheid af van de voorlopige maaltijdbolus.

Maaltijdbolus met Tegenovergestelde correctie = tegenovergestelde correctie + voorlopige maaltijdbolus

Voorbeeld: Huidige BG: 4,2 mmol/L, Doel-BG: 5,6 mmol/L
Correctiefactor: 2,8, Voorlopige maaltijdbolus: 1,5 E

$$\frac{4,2 \text{ mmol/L} - 5,6 \text{ mmol/L}}{2,8} = -0,5 \text{ E tegenovergestelde correctie}$$

$$-0,5 \text{ E (tegenovergestelde correctie)} + 1,5 \text{ E (voorlopige maaltijdbolus)} = 1,0 \text{ E maaltijdbolus}$$

Een tegenovergestelde correctie wordt alleen toegepast op de maaltijdbolus. In dit voorbeeld wordt de maaltijdbolus met een halve eenheid verlaagd.

Regels boluscalculator

De boluscalculator gebruikt de volgende regels om de doses voor voorgestelde bolussen te berekenen:


- Voorgestelde bolusdoses worden afgerond op de dichtstbijzijnde 0,05 E.
- Als het totaal van de berekening van de voorgestelde bolus (correctiebolus plus maaltijdbolus) minder is dan 0, is de voorgestelde bolusdosis 0,00 E.
- De boluscalculator stelt geen bolusdosis voor als uw huidige bloedglucosemeting lager is dan uw minimale BG voor berekeningen.
- De boluscalculator stelt alleen een correctiebolus voor als uw bloedglucosewaarde hoger is dan uw drempel voor Corrigeren boven.
- Eventuele maaltijd-IOB, insuline 'on board' van een eerdere maaltijdbolus, wordt als eerste van de huidige correctiebolus afgetrokken tot de correctiebolus nul is. Resterende maaltijd-IOB wordt echter *nooit* van de huidige maaltijdbolus afgetrokken.
- Vervolgens wordt eventuele resterende correctie-IOB, insuline 'on board' van een eerdere correctiebolus, van de huidige correctiebolus afgetrokken tot de correctiebolus nul is. Op dat punt wordt eventuele resterende correctie-IOB van de huidige maaltijdbolus afgetrokken.
- De berekende insuline 'on board' wordt naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde 0,05 E.
- Een tegenovergestelde correctie treedt alleen op als de maaltijdbolus groter is dan 0,00 E.
- Als uw bloedglucosewaarde lager is dan uw doel-BG en Tegenovergestelde correctie is ingeschakeld, wordt de tegenovergestelde correctiebolus van de voorgestelde maaltijdbolus afgetrokken. Als Tegenovergestelde correctie is uitgeschakeld, trekt de boluscalculator geen insuline van de voorgestelde dosis van de maaltijdbolus af.

U kunt de voorgestelde bolus handmatig aanpassen aan de hand van de volgende regels:

- Als u een voorgestelde bolus verhoogt, wordt deze toename toegepast op de maaltijdbolus, tenzij er geen maaltijdbolus is. In dit laatste geval wordt de toename toegepast op de correctiebolus.
- Als u een voorgestelde bolus verlaagt, wordt deze afname toegepast op de maaltijdbolus tot deze nul is. Daarna wordt de afname toegepast op de correctiebolus. Als er geen maaltijdbolus is, wordt de afname toegepast op de correctiebolus.

Overzicht van het scherm BEREKENINGEN van de boluscalculator

U opent het scherm van de boluscalculator door in het scherm Insuline- en BG-historie op BOLUSBEREKENING WEERGEVEN te tikken of door in het scherm van de boluscalculator op BEREKENINGEN te tikken.

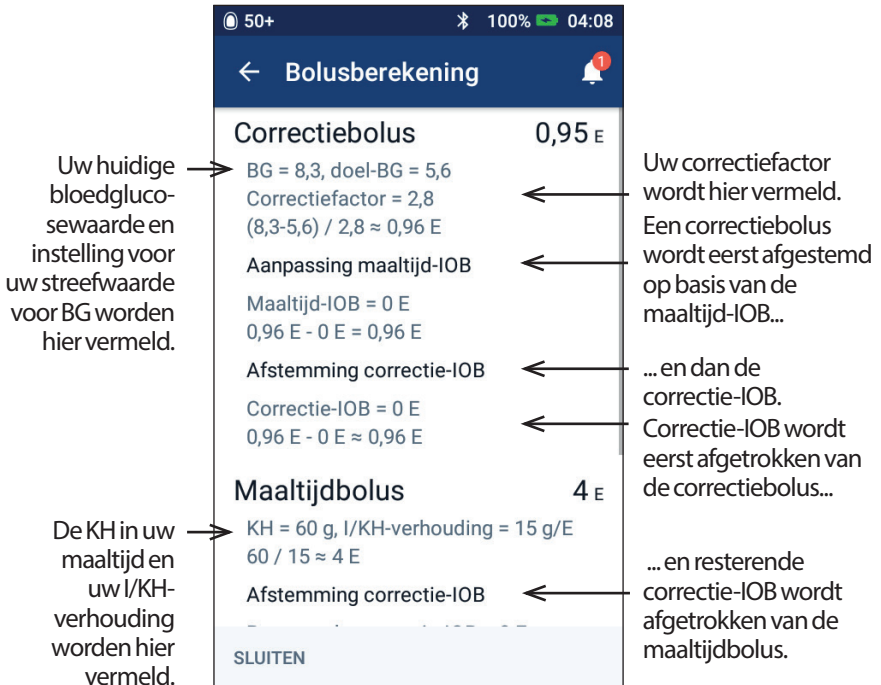

U moet omlaag scrollen om de totale bolus en alle aanpassingen die u in de berekende bolus hebt doorgevoerd, te kunnen bekijken.

De eenheid voor de bloedglucose in het scherm Berekeningen is mmol/L.

Opmerking: Er worden alleen aanpassingen van de IOB gedaan als u een bloedglucosemeting hebt ingevoerd.

Resterende correctie-IOB

Een berekende bolushoeveelheid mag nooit lager zijn dan nul. Als een correctie-IOB groter is dan de voorlopige correctiebolus, komt de correctiebolus uit op nul als er slechts een deel van de correctie-IOB van de voorlopige bolus wordt afgetrokken.

De 'resterende' correctie-IOB is het deel van de correctie-IOB dat niet nodig was om de voorlopige correctiebolus op nul te laten uitkomen. Deze resterende hoeveelheid wordt vervolgens gebruikt om de maaltijdbolus te verlagen, als er een maaltijdbolus wordt toegediend.

12 Uitleg werking PDM en Pod

De voorlopige en definitieve bolussen in het scherm BEREKENINGEN

Het scherm Bolusberekening toont eerst de berekeningen voor een voorlopige bolus (correctie- en maaltijdbolus) en vervolgens de IOB-aanpassingen die leiden tot de definitieve correctie- en maaltijdbolus. Zie "Vergelijkingen boluscalculator" op pagina 162 voor een stapsgewijze beschrijving van deze berekeningen.

Hier ziet u de berekeningen voor de voorlopige correctiebolus en waar de voorlopige correctiebolussen worden weergegeven op het scherm Berekeningen, en daarnaast welke cijfers de definitieve correctiebolussen aangeven.

50+100%04:08

←

Bolusberekening

Correctiebolus

0,95 E

BG = 8,3, doel-BG = 5,6
Correctiefactor = 2,8
(8,3-5,6) / 2,8 ≈ 0,96 E

Aanpassing maaltijd-IOB

Maaltijd-IOB = 0 E
→ 0,96 E - 0 E = 0,96 E

Afstemming correctie-IOB

Correctie-IOB = 0 E
→ 0,96 E - 0 E ≈ 0,96 E

Maaltijdbolus

4 E

KH = 60 g, I/KH-verhouding = 15 g/E
60 / 15 ≈ 4 E

Afstemming correctie-IOB

Resterende correctie-IOB = 0 E
→ 4 E - 0 E ≈ 4 E

Berekende bolus

4,95 E

Totale bolus

=

4,95 E

Corrigeren boven: 6,1 mmol/L

SLUITEN

Definitieve
correctiebolus
(naar beneden
afgerond op de
dichtstbijzijnde 0,05 E)

Definitieve
maaltijdbolus

Op de volgende pagina's ziet u voorbeelden van het scherm Berekeningen met verschillende scenario's met betrekking tot de bloedglucose, maaltijden en IOB.

Voorbeelden boluscalculator

Zie pagina 160 voor een uitleg over IOB. Zie pagina 162 voor een uitleg over de vergelijkingen voor correctie- en maaltijdbolussen.

Voorbeeld 1: eten van 45 g KH, BG van 8,4 mmol/L is hoger dan streefwaarde, geen IOB

Duur van de insulineactie = 4 uur. U hebt in de afgelopen 4 uur geen bolus toegediend, dus er is geen IOB (geen maaltijd-IOB, geen correctie-IOB).

Correctiebolus	1 E	Uw bloedglucose is 2,8 mmol/L hoger dan uw streefwaarde. Met uw correctiefactor van 2,8 en geen aanpassing voor IOB hebt u een correctiebolus van 1 E nodig.
$BG = 8,4$, Doel-BG = 5,6 Correctiefactor = 2,8 $(8,4 - 5,6) / 2,8 = 1 E$		
Aanpassing maaltijd-IOB		
Maaltijd-IOB = 0 E $1 E - 0 E = 1 E$		Geen IOB, dus geen aanpassing voor IOB.
Aanpassing correctie-IOB		
Correctie-IOB = 0 E $1 E - 0 E = 1 E$		Geen IOB, dus geen aanpassing voor IOB.
Maaltijdbolus	3 E	U eet 45 g KH. Met uw I/KH-verhouding van 15 en geen aanpassing voor IOB hebt u een maaltijdbolus van 3 E nodig.
$KH = 45 g$, I/KH-verhouding = 15 g/E $45 / 15 = 3 E$		
Aanpassing correctie-IOB		
Resterende correctie-IOB = 0 E $3 E - 0 E = 3 E$		Geen IOB, dus geen aanpassing voor IOB.
Berekende bolus	4 E	De berekende bolus bestaat uit de som van uw correctiebolus en maaltijdbolus.
Uw aanpassing	0 E	Eventuele aanpassingen die u doet aan de berekende bolus, worden hier weergegeven. Er zijn geen aanpassingen gedaan.
Totale bolus	4 E	De totale bolus is de som van de berekende bolus en eventuele aanpassingen door u.

12 Uitleg werking PDM en Pod

Voorbeeld 2: zonder eten, BG van 8,4 mmol/L is boven streefwaarde, 1 E maaltijd-IOB, 1 E correctie-IOB

Duur van de insulineactie = 4 uur.

Drie uur geleden hebt u een bolus van 8 E (4 E maaltijdbolus, 4 E correctiebolus) toegediend omdat u aan het eten was en een hoge bloedglucosewaarde had.

Nu, drie uur na de bolus van 8 E, zijn er nog 2 E IOB over (1 E maaltijd-IOB, 1 E correctie-IOB).

Correctiebolus	0 E	
BG = 8,4, Doel-BG = 5,6		
Correctiefactor = 2,8		
$(8,4 - 5,6) / 2,8 = 1 \text{ E}$		Uw bloedglucose is 2,8 mmol/L hoger dan uw streefwaarde. Een correctiefactor van 2,8 leidt tot een voorlopige correctiebolus van 1 E.
Aanpassing maaltijd-IOB		
Maaltijd-IOB = 1 E		
$1 \text{ E} - 1 \text{ E} = 0 \text{ E}$		Deze voorlopige correctiebolus wordt verlaagd tot nul door de aanpassing van de maaltijd-IOB van 1 E.
Aanpassing correctie-IOB		
Correctie-IOB = 1 E		
N.v.t.: Correctiebolus is $\leq 0 \text{ E}$		Omdat de voorlopige correctiebolus is verlaagd tot nul, wordt de correctie-IOB er niet van afgetrokken.
Maaltijdbolus	0 E	U bent niet aan het eten, dus uw maaltijdbolus is 0 E.
KH = 0 g,		
I/KH-verhouding = 15 g/E		
$0 / 15 = 0 \text{ E}$		
Aanpassing correctie-IOB		
Resterende correctie-IOB = 1 E		
$0 \text{ E} - 1 \text{ E} = 0 \text{ E}$		Geen van de correctie-IOB is afgetrokken van de correctiebolus, dus de resterende correctie-IOB is 1 E. De maaltijdbolus was echter al nul.
Berekende bolus	0 E	Hoewel uw bloedglucose hoger is dan de streefwaarde, verlaagt de maaltijd-IOB de totale bolus tot 0 E.
Uw aanpassing	0 E	
Totale bolus	0 E	

Voorbeeld 3: eten van 45 g KH, BG van 5,6 mmol/L is op streefwaarde, 1 E maaltijd-IOB

Duur van de insulineactie = 4 uur.

Drie uur geleden hebt u een bolus van 4 E (4 E maaltijdbolus) toegediend omdat u aan het eten was. Er was geen sprake van een correctiebolus omdat uw bloedglucose op uw streefwaarde was.

Nu, drie uur later en net voor uw volgende maaltijd, is er nog 1 E IOB van uw vorige maaltijd, oftewel een maaltijd-IOB van 1 E. Er is geen sprake van correctie-IOB omdat de eerdere bolus geen correctiedeel had.

Correctiebolus	0 E	← Bloedglucose is op de streefwaarde, dus de correctiebolus is nul.
$BG = 5,6$, Doel-BG = 5,6 Correctiefactor = 2,8 $(5,6 - 5,6) / 2,8 = 0 \text{ E}$		
Aanpassing maaltijd-IOB		
Maaltijd-IOB = 1 E		
N.v.t.: Correctiebolus is $\leq 0 \text{ E}$		← De correctiebolus is nul, dus de maaltijd-IOB wordt niet afgetrokken.
Aanpassing correctie-IOB		
Correctie-IOB = 0 E		
N.v.t.: Correctiebolus is $\leq 0 \text{ E}$		← Geen aanpassing IOB.
Maaltijdbolus	3 E	
$KH = 45 \text{ g}$, $I/KH\text{-verhouding} = 15 \text{ g/E}$ $45 / 15 = 3 \text{ E}$		← U eet 45 g KH. Met uw I/KH-verhouding van 15 en geen aanpassing van de correctie-IOB is de maaltijdbolus 3 E.
Aanpassing correctie-IOB		
Resterende correctie-IOB = 0 E $3 \text{ E} - 0 \text{ E} = 3 \text{ E}$		← Er is geen aanpassing van de IOB. Er is geen correctie-IOB en de maaltijd-IOB wordt nooit afgetrokken van een maaltijdbolus.
Berekende bolus	3 E	← Hoewel er 1 E maaltijd-IOB was, werd de berekende bolus niet verlaagd.
Uw aanpassing	0 E	
Totale bolus	3 E	

12 Uitleg werking PDM en Pod

Voorbeeld 4: eten van 60 g KH, BG van 8,4 mmol/L is hoger dan streefwaarde, 1 E correctie-IOB

Duur van de insulineactie = 2 uur.

Een uur geleden hebt u een bolus van 2 E toegediend om een hoge bloedglucosespiegel te corrigeren. Omdat u op dat moment niet aan het eten was en geen waarde voor koolhydraten had ingevoerd in de boluscalculator, bedroeg de correctiebolus 2 E.

Nu, een uur later, wilt u gaan eten. Er is nog 1 E correctie-IOB over van de eerdere bolus, en geen maaltijd-IOB omdat u op het moment van uw laatste bolus niet aan het eten was.

Correctiebolus	0 E	
BG = 8,4, doel-BG = 5,6		
Correctiefactor = 2,8		
$(8,4 - 5,6) / 2,8 = 1 \text{ E}$	←	Uw bloedglucose is 2,8 mmol/L hoger dan uw streefwaarde. Een correctiefactor van 2,8 leidt tot een voorlopige correctiebolus van 1 E.
Aanpassing maaltijd-IOB		
Maaltijd-IOB = 0 E		
$1 \text{ E} - 0 \text{ E} = 1 \text{ E}$	←	Geen maaltijd-IOB, dus geen aanpassing voor maaltijd-IOB.
Aanpassing correctie-IOB		
Correctie-IOB = 1 E		
$1 \text{ E} - 1 \text{ E} = 0 \text{ E}$	←	De correctie-IOB van 1 E verlaagt de correctiebolus tot nul.
Maaltijdbolus	4 E	
KH = 60 g,		
I/KH-verhouding = 15 g/E		
$60 / 15 = 4 \text{ E}$	←	U eet 60 g KH. Een I/KH-verhouding van 15 leidt tot een voorlopige maaltijdbolus van 4 E.
Aanpassing correctie-IOB		
Resterende correctie-IOB = 0 E		
$4 \text{ E} - 0 \text{ E} = 4 \text{ E}$	←	De volledige correctie-IOB werd gebruikt om de correctiebolus op nul te laten uitkomen. Er is dus geen correctie-IOB over. De maaltijdbolus blijft 4 E.
Berekende bolus	4 E	←
Uw aanpassing	0 E	
Totale bolus	4 E	
		De berekende bolus bestaat volledig uit een maaltijdbolus. Hoewel uw bloedglucose hoger is dan de streefwaarde, verlaagde de correctie-IOB de correctiebolus tot nul.

Voorbeeld 5: tegenovergestelde correctie ingeschakeld, eten van 45 g KH, BG van 4,2 mmol/L is lager dan streefwaarde, geen IOB

Duur van de insulineactie = 2 uur. U hebt uzelf in de afgelopen 2 uur geen bolus toegediend, dus er is geen IOB (geen maaltijd-IOB, geen correctie-IOB).

Correctiebolus	-0,5E	← Uw bloedglucosespiegel is lager dan de streefwaarde, dus er wordt een tegenovergestelde correctie berekend.
BG = 4,2, doel-BG = 5,6		
Correctiefactor = 2,8		
(4,2-5,6) / 2,8 = -0,5 U		
(Tegenovergestelde correctie AAN)		
Aanpassing maaltijd-IOB		Geen wijziging van de bolus met tegenovergestelde correctie om twee redenen: IOB is nul, en IOB wordt nooit afgetrokken van een tegenovergestelde correctie.
Maaltijd-IOB = 0 E		
N.v.t.: Correctiebolus is ≤ 0 E		
Aanpassing correctie-IOB		Geen wijziging van de bolus met tegenovergestelde correctie om twee redenen: IOB is nul, en IOB wordt nooit afgetrokken van een tegenovergestelde correctie.
Correctie-IOB = 0 E		
N.v.t.: Correctiebolus is ≤ 0 E		
Maaltijdbolus	3 E	← U eet 45 g KH. Met uw I/KH-verhouding van 15 en geen aanpassing van de correctie-IOB is de maaltijdbolus 3 E.
KH = 45 g,		
I/KH-verhouding = 15 g/E		
45 / 15 = 3 E		
Aanpassing correctie-IOB		← Geen IOB, dus geen aanpassing voor IOB.
Resterende correctie-IOB = 0 E		
3 E - 0 E = 3 E		
Berekende bolus	2,50E	← De negatieve tegenovergestelde correctiebolus verlaagt de maaltijdbolus.
Uw aanpassing	0 E	Als Tegenovergestelde correctie is ingeschakeld en uw bloedglucosespiegel lager is dan uw streefwaarde, wordt de maaltijdbolus verlaagd zodat uw bloedspiegel dichterbij uw streefwaarde komt door de koolhydraten in de maaltijd.
Totale bolus	2,50E	

Berekeningen voor overzichten van de historie

In dit gedeelte worden de berekeningen uitgelegd voor de overzichtgegevens die te zien zijn in de schermen met de historie van één dag en meerdere dagen.

Overzichten bloedglucose

De overzichten van de bloedglucose worden berekend aan de hand van alle ingevoerde metingen, waaronder eventuele HOOG- en LAAG-metingen, tenzij anders aangegeven. De berekeningen over meerdere dagen omvatten alle dagen in de tijdsperiode.

Samenvatting	Berekening
Rij 1 (zie pagina 91)	
Gemiddelde BG	$\frac{\text{Som van alle BG-metingen}}{\text{Totaal aantal BG-metingen}}$ Opmerking: Voor de som en het totaal worden HOOG- of LAAG-bloedglucosemetingen niet meegeteld.
BG binnen bereik	$\frac{\text{Aantal BG-metingen binnen bereik BG-doel}}{\text{Totaal aantal BG-metingen}} \times 100$
BG's boven	$\frac{\text{Aantal BG-metingen hoger dan bovengrens van bereik BG-doel}}{\text{Totaal aantal BG-metingen}} \times 100$
BG's onder	$\frac{\text{Aantal BG-metingen lager dan ondergrens van bereik BG-doel}}{\text{Totaal aantal BG-metingen}} \times 100$
Rij 2 (zie pagina 91)	
Gemiddelde metingen per dag	$\frac{\text{Aantal BG-metingen}}{\text{Aantal dagen}}$ Opmerking: Dit wordt alleen getoond in de weergave van meerdere dagen.
Aantal BG-metingen	Het totale aantal BG-metingen van de dag (of het datumbereik)
Hoogste BG	De hoogste BG-meting van de dag (of het datumbereik)
Laagste BG	De laagste BG-meting van de dag (of het datumbereik)

Overzichten insulinetoediening

Berekeningen voor bolus insuline omvatten bolussen door de boluscalculator en handmatig berekende bolussen. Als u een onmiddellijke of verlengde bolus annuleert voordat die helemaal is toegediend, wordt alleen de werkelijk toegediende hoeveelheid opgenomen in de berekening.

Berekeningen voor basale insuline omvatten de insuline die is toegediend op basis van het actieve basaalprogramma, aangepast voor perioden waarin een tijdelijke basaalsnelheid actief was, de insuline was onderbroken of er geen actieve Pod was.

Wanneer de PDM geen bevestiging van de Pod heeft ontvangen over de daadwerkelijke insulinetoediening, zijn de berekeningen van de insulinetoediening schattingen op basis van de geplande insulinetoediening (zie pagina 98).

Voor berekeningen van de insulinetoediening gedurende meerdere dagen worden dagen waarop geen insuline (basaal of bolus) werd toegediend, niet meegeteld voor het aantal dagen in de tijdsperiode.

Voor berekeningen van het totale aantal koolhydraten gedurende meerdere dagen worden dagen waarop er geen koolhydraten zijn ingevoerd in de boluscalculator, niet meegeteld voor het aantal dagen in de tijdsperiode.

Samenvatting	Berekening
Rij 3 (zie pagina 91)	
Totale insuline	= Som van toegediende basale insuline en bolus insuline
Gemiddelde totale insuline	= $\frac{\text{Som van toegediende basale insuline en bolus insuline}}{\text{Aantal dagen}}$
Basale insuline	= Hoeveelheid toegediende basale insuline
Gemiddelde basale insuline	= $\frac{\text{Hoeveelheid toegediende basale insuline}}{\text{Aantal dagen}}$
Bolus insuline	= Hoeveelheid toegediende bolus insuline
Gemiddelde bolus insuline	= $\frac{\text{Hoeveelheid toegediende bolus insuline}}{\text{Aantal dagen}}$
Totale KH	= Totaal aantal gram koolhydraten ingevoerd in de boluscalculator
Gemiddelde totale KH	= $\frac{\text{Totaal aantal gram koolhydraten ingevoerd in de boluscalculator}}{\text{Aantal dagen}}$

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

HOOFDSTUK 13

Leven met diabetes

Waarschuwing: Als u het Omnipod DASH®-systeem niet volgens de instructies kunt gebruiken, kan dit een risico opleveren voor uw gezondheid en veiligheid. Overleg met uw zorgverlener als u vragen hebt of zich zorgen maakt over het juiste gebruik van het Omnipod DASH®-systeem.

Voordat u het Omnipod DASH®-systeem gaat gebruiken, moeten u en uw zorgverlener de voordelen van dit systeem en de verantwoordelijkheden die de behandeling met een insulinepomp met zich meebrengt, met elkaar bespreken. Denk er wel aan dat het veilig gebruik van dit systeem geheel en al bij u ligt. Als u vragen hebt over het gebruik van het Omnipod DASH®-systeem of niet zeker weet of u het systeem op een veilige manier kunt gebruiken, neemt u direct contact op met uw zorgverlener.

Dagelijkse activiteiten

Controleer regelmatig de infusieplaats, de berichten die op uw PDM worden weergegeven, en uw bloedglucose om zeker te weten dat uw Omnipod DASH®-systeem naar behoren werkt en uw gezondheid onder controle is.

Infusieplaats controles

Controleer minimaal één keer per dag de infusieplaats door het kijkvenster van de Pod. Controleer de infusieplaats op het volgende:

- Of u insuline voelt of ruikt, wat erop kan wijzen dat de canule is losgeraakt
- Tekenen van infectie, zoals pijn, zwelling, roodheid, afscheiding of een warm aanvoelende huid

Waarschuwing:

Doe het volgende als u merkt dat de infusieplaats ontstoken is:

- Verwijder onmiddellijk de Pod en breng een nieuwe Pod op een andere infusieplaats aan.
- Neem contact op met uw zorgverlener. Behandel de ontsteking volgens de instructies van uw zorgverlener.

Als er bloed in de canule zit, controleert u uw bloedglucose vaker om er zeker van te zijn dat er niets mis is met de insulineafgifte. Vervang de Pod als uw bloedglucosespiegel onverwacht hoger blijkt te zijn dan normaal.

Tip: *Maak het controleren van infusieplaats een onderdeel van uw vaste dagelijkse routine, zoals douchen of tandenpoetsen.*

Controleer uw bloedglucose regelmatig

Wanneer u uw bloedglucose regelmatig controleert, kunt u direct ingrijpen als uw bloedglucosespiegel te hoog of te laag is voordat het problematisch wordt.

Controleer uw bloedglucose:

- Minstens 4 tot 6 keer per dag: wanneer u wakker wordt, vóór elke maaltijd en voordat u naar bed gaat
- Wanneer u zich misselijk of niet lekker voelt
- Voordat u gaat autorijden
- Wanneer uw bloedglucose hoger of lager is dan normaal of als u vermoedt dat uw bloedglucose te hoog of te laag is
- Voor, tijdens en na lichaamsbeweging
- Op aangeven van uw zorgverlener

Voorbereiding op noodgevallen

Tip: *Vraag uw zorgverlener om u te helpen een plan op te stellen voor noodsituaties, waarin onder andere staat wat u moet doen als u uw zorgverlener niet kunt bereiken.*

Waarschuwing: Houd ALTIJD een noodset bij de hand om snel te kunnen reageren op een noodsituatie in verband met uw diabetes of in het geval dat uw Omnipod DASH-systeem stopt met werken. Neem altijd benodigdheden mee om een Pod te kunnen vervangen, indien u uw Pod op enig moment moet vervangen.

Stel een noodset samen die u altijd met u meeneemt. Deze set moet het volgende bevatten:

- Enkele nieuwe, verzegelde Pods
- Een flacon met snelwerkende U-100-insuline (zie "Algemene waarschuwingen" op pagina xiii voor insulines die zijn goedgekeurd voor gebruik in het Omnipod DASH®-systeem)
- Naalden of pennen voor het injecteren van insuline
- Strips voor het testen van bloedglucose
- Bloedglucosemeter
- Ketonenteststrips
- Prikpen en naalden
- Glucosetabletten of iets anders wat snelwerkende koolhydraten bevat
- Alcoholdoekjes
- Instructies van uw zorgverlener voor de hoeveelheid te injecteren insuline wanneer de toediening door de Pod is onderbroken
- Een ondertekende brief van uw zorgverlener waarin staat dat u insuline en het Omnipod DASH®-systeem nodig hebt
- Telefoonnummers van uw zorgverlener en/of arts in geval voor noodgevallen
- Glucagonset en schriftelijke instructies voor het geven van een injectie wanneer u bewusteloos bent (zie "Te lage en te hoge bloedglucose en DKA voorkomen" op pagina 180)

Reizen en vakanties

Het is belangrijk dat u uw bloedglucose vaker controleert als u op reis bent. Veranderingen van de tijdzone, uw activiteitsniveau en uw maaltijden kunnen invloed hebben op uw bloedglucosespiegel.

Het is belangrijk dat u goed voorbereid op reis gaat. De volgende gedeelten helpen u daarbij.

Houd benodigdheden bij de hand

Check de volgende items niet in maar houd deze bij u in een vliegtuig, trein of bus:

- De Personal Diabetes Manager (PDM, Persoonlijke Diabetesmanager)
- Extra Pods
- Een noodset
- Flacons met insuline (de temperatuur in het vrachtruim kan van invloed zijn op de insuline)
- Een ondertekende brief van uw zorgverlener waarin staat dat u insuline en het Omnipod DASH®-systeem nodig hebt
- Recepten voor al uw geneesmiddelen
- Geneesmiddelen en benodigdheden met het originele etiket van het recept
- **Opmerking:** In het buitenland is het soms gemakkelijker om aan generieke medicijnen te komen dan aan medicijnen van een bepaald merk.
- Snacks en een behandeling van hypoglykemie voor het geval er geen voedsel verkrijgbaar is
- Flessen water (vooral in het vliegtuig) om uitdroging te voorkomen
- De naam en het telefoonnummer van uw eigen arts en een arts op uw plaats van bestemming

Opmerking: Zorg dat u uw noodset altijd bij u hebt tijdens trips of op vakanties (zie "Vorbereiding op noodgevallen" op pagina 177). Omdat het lastig of zelfs onmogelijk kan zijn om aan insuline of benodigdheden te komen als u op reis bent, is het belangrijk dat u meer benodigdheden meeneemt dan u nodig denkt te hebben.

Tip: *Neem dus extra Pods mee wanneer u naar het buitenland gaat of voor langere tijd weg bent. Bel voordat u vertrekt, met de klantenservice voor informatie over de extra benodigdheden voor uw Omnipod DASH®-systeem die u moet meenemen.*

Plannen voor andere tijdzones

Als u voor een vakantie of zakenreis naar een andere tijdzone gaat, kan het nodig zijn om uw basaalprogramma's aan te passen. Als het tijdverschil slechts een paar uur is, hoeft de basaalsnelheid maar minimaal te worden gewijzigd en is die gemakkelijk te berekenen. Voor een reis of vakantie ver weg kan het bepalen van het juiste basaalprogramma lastiger zijn. Uw zorgverlener kan u daarbij helpen.

Luchthavens en vliegen

Wanneer u gaat vliegen, moet u zich van tevoren op de hoogte stellen van de veiligheidsprocedures van de luchthaven en ervoor zorgen dat de benodigdheden voor uw diabetes zonder problemen door de controle komen en mee kunnen op de vlucht.

Veiligheidscontroles op luchthavens

Vorbereiding voor uw reis:

- De veiligheids- en screeningprocedures van luchthavens kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg daarom de website van de luchthaven voor de actuele informatie voordat u op reis gaat.
- Zorg dat u 2 tot 3 uur vóór vertrek van uw vlucht op de luchthaven bent.
- Zorg ervoor dat u uw benodigdheden voor insulinetoediening bij de hand hebt zodat de veiligheidscontroles op het vliegveld zo snel mogelijk kunnen worden afgehandeld.

Mogelijk kunt u op de luchthaven vragen om een visuele inspectie van uw medische benodigdheden in plaats van uw handbagage met uw medische benodigdheden door een röntgenscanapparaat te laten gaan. Hier moet u om vragen voordat de controle begint. Uw medische benodigdheden moeten apart zijn verpakt wanneer u de beveiligingsmedewerker aanspreekt.

Om verontreiniging of beschadiging van uw benodigdheden te voorkomen, moet u tijdens de visuele inspectie zelf uw benodigdheden uit de verpakking halen, laten zien, vasthouden en weer inpakken. Alle medicijnen en/of bijbehorende benodigdheden die niet visueel kunnen worden gecontroleerd, moeten door het röntgenscanapparaat.

Als u zich zorgen maakt over de metaaldetector, kunt u de beveiligingsmedewerker laten weten dat u een insulinepomp draagt. U moet bij de beveiligingsmedewerker aangeven dat de insulinepomp niet kan worden verwijderd omdat er een katheter (slangetje) onder de huid is ingebracht.

Raadpleeg de website van de luchthaven als u nog meer vragen of zorgen hebt.

Opmerking: Pods en PDM's kunnen veilig door de röntgenscanapparaten op luchthavens (zie de "Kennisgeving over storing door het Omnipod DASH®-systeem" op pagina 200).

Vliegen en vliegtuigmodus

Waarschuwing: Tijdens de vlucht kan de atmosferische druk in de cabine van een vliegtuig schommelen. Dit kan gevolgen hebben voor de insulinetoediening door de Pod. Controleer uw bloedglucose regelmatig tijdens de vlucht. Volg de behandelinstructies van uw zorgverlener als dat nodig is.

De PDM stuurt de Pod aan door middel van draadloze Bluetooth®-technologie. Controleer vóór uw vlucht wat het beleid van de luchtvaartmaatschappij is met betrekking tot het gebruik van persoonlijke medische elektronische apparatuur die communiceert door middel van Bluetooth®-technologie.

Als het gebruik van een persoonlijk elektronisch apparaat met Bluetooth®-technologie toegestaan is, schakelt u in het vliegtuig de vliegtuigmodus van de PDM in (zie "Vliegtuigmodus" op pagina 101). De Bluetooth®-instelling blijft ingeschakeld in de vliegtuigmodus van de PDM zodat deze met uw Pod kan communiceren.

Opmerking: Het Omnipod DASH®-systeem kan tijdens een vlucht veilig worden gebruikt bij de gebruikelijke atmosferische druk in vliegtuigcabines. Het Omnipod DASH®-systeem kan worden gebruikt bij een atmosferische druk van slechts 700 hPa; dit is lager dan de gebruikelijke druk in een vliegtuigcabine.

Te lage en te hoge bloedglucose en DKA voorkomen

Onderneem actie zodra u het eerste teken van hypoglykemie, hyperglykemie of diabetische ketoacidose opmerkt. De gemakkelijkste en betrouwbaarste manier om deze situaties te voorkomen, is door uw bloedglucose vaak te controleren.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Houd uw gegevens nauwkeurig bij en bespreek veranderingen en aanpassingen met uw zorgverlener.
- Laat het uw zorgverlener weten als u extreem hoge of lage bloedglucosewaarden hebt of wanneer u vaker dan normaal een extreem hoge of lage bloedglucosespiegel hebt.
- Bel onmiddellijk de klantenservice als u technische problemen met uw Omnipod DASH®-systeem hebt die u niet zelf kunt oplossen.

Hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel)

Hypoglykemie kan zich zelfs voordoen als een Pod goed werkt. Negeer nooit de tekenen van een lage bloedglucose, ook al hebt u er weinig last van. Als er niets aan wordt gedaan, kan er ernstige hypoglykemie optreden die kan leiden tot toevallen of bewusteloosheid. Wanneer u vermoedt dat uw bloedglucosespiegel te laag is, controleert u voor alle zekerheid uw bloedglucose.

Symptomen van hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel)

Negeer de volgende symptomen nooit, aangezien deze kunnen wijzen op mogelijke hypoglykemie:

- Beverigheid
- Vermoeidheid
- Onverklaarbaar transpireren
- Koude, klam aanvoelende huid
- Zwakheid
- Wazig zien of hoofdpijn
- Plotseling hongergevoel
- Versnelde hartslag
- Verwarring
- Tinteling in de lippen of tong
- Angstig
- Lichtgeraaktheid

Tip: Het niet opmerken van hypoglykemie is een aandoening waarbij u zich niet realiseert dat uw bloedglucosespiegel te laag is. Als u vaker niet opmerkt dat u hypoglykemie hebt, kunt u de herinneringsfunctie van uw PDM gebruiken en uw bloedglucosespiegel vaker controleren (zie "Herinneringen voor BG controleren na bolus" op pagina 109).

Tip: Uw bloedglucose moet minimaal 5,6 mmol/L zijn om veilig te kunnen autorijden en veilig gevaarlijke machines en apparatuur te kunnen bedienen. Bij hypoglykemie kunt u de controle over uw auto of gevaarlijke apparatuur verliezen. Ook kunnen de symptomen van hypoglykemie u ontgaan wanneer u te geconcentreerd met iets bezig bent.

Tip: Ook als u uw bloedglucose niet kunt controleren, moet u symptomen van hypoglykemie meteen behandelen, vooral als u alleen bent. Als u wacht met het behandelen van de symptomen, kan dit leiden tot ernstige hypoglykemie met een shock, coma of de dood tot gevolg.

13 Leven met diabetes

Tip: *Leer personen die u vertrouwt, zoals gezinsleden of goede vrienden, hoe zij u een injectie met glucagon moeten geven. U bent van hen afhankelijk wanneer u bewusteloos raakt door ernstige hypoglykemie. Doe een kopie van de glucagon-instructies in uw noodset en neem regelmatig de procedure met uw gezin en vrienden door.*

Hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel) voorkomen

- Stel samen met uw zorgverlener uw doelen voor uw bloedglucose en richtlijnen vast.
- Zorg dat u altijd snelwerkende koolhydraten bij u hebt voor het geval dat u snel moet reageren op een te lage bloedglucosespiegel. Voorbeelden van snelwerkende koolhydraten zijn druivensuiker, snoepjes of sap.
- Vertel uw gezinsleden, vrienden en collega's hoe zij tekenen van hypoglykemie kunnen herkennen, zodat zij u kunnen helpen wanneer u niet merkt dat u hypoglykemie hebt of wanneer u een ernstige reactie krijgt.
- Zorg dat er in uw noodset een injectiespuit met glucagon zit. Leer vrienden en familieleden hoe zij u een injectie met glucagon moeten geven wanneer u ernstige hypoglykemie hebt en bewusteloos raakt.

Controleer regelmatig de uiterste gebruiksdatum van uw glucagonset zodat u deze tijdig kunt vervangen.

Opmerking: Doe altijd een geplastificeerde kaart met uw medische gegevens in uw portemonnee en draag een ketting of armband met uw medische gegevens, zoals de MedicAlert-tag.

Nogmaals, het **regelmatisch controleren van uw bloedglucose is de sleutel tot het voorkomen van mogelijke problemen**. Het vroegtijdig detecteren van een te lage bloedglucosespiegel geeft u de tijd adequaat te handelen voordat deze een probleem wordt.

Overleg met uw zorgverlener voor richtlijnen over wat te doen bij tekenen van hypoglykemie.

Hypoglykemie (lage bloedglucosespiegel) behandelen

Wanneer uw bloedglucose te laag is, behandelt u die onmiddellijk volgens de aanwijzingen van uw zorgverlener. Controleer uw bloedglucose elke 15 minuten wanneer u hypoglykemie behandelt, om ervoor te zorgen dat u niet iets doet waardoor uw bloedglucosespiegel te hoog kan worden. Neem indien nodig contact op met uw zorgverlener als u hierbij hulp nodig hebt.

Mogelijke oorzaken van hypoglykemie	Voorgestelde handeling
Onjuist basaalprogramma	Controleer of het juiste basaalprogramma actief is. Controleer of de PDM-tijd goed is ingesteld. Neem contact op met uw zorgverlener over het aanpassen van uw basaalprogramma's of het gebruik van een tijdelijke basaalsnelheid.
Onjuiste timing van de bolus of bolus te groot	Neem de bolus bij het eten. Controleer uw bloedglucose voordat u zichzelf een maaltijdbolus geeft. Pas indien nodig de bolus aan. Controleer de grootte en de timing van de bolus. Corrigeer de bloedglucosespiegel na een maaltijd niet te veel. Controleer de koolhydraatintake. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.
Onjuiste Doel-BG of onjuiste correctiefactor of onjuiste I/KH-verhouding	Overleg met uw zorgverlener over het zo nodig verder aanpassen van deze instellingen.
Gevoelig voor ernstige hypoglykemie of niet opmerken van hypoglykemie	Neem contact op met uw zorgverlener over het niet opmerken van hypoglykemie en over het verhogen van de Doel-BG.
Niet-geplande lichamelijke activiteit	Neem contact op met uw zorgverlener over het gebruik van een tijdelijke basaalsnelheid.

13 Leven met diabetes

Mogelijke oorzaken van hypoglykemie	Voorgestelde handeling
Langdurige of intensieve lichaamsbeweging	Pas de insulinetoediening volgens de instructies van uw zorgverlener. Controleer de bloedglucose vóór, tijdens en na de activiteit en behandel indien nodig. Opmerking: De effecten van lichaamsbeweging kunnen diverse uren, zelfs een hele dag, merkbaar zijn na het beëindigen van de activiteit. Neem contact op met uw zorgverlener over het aanpassen van uw basaalprogramma's of het gebruik van een tijdelijke basaalsnelheid.
Lage koolhydraatinname voorafgaand aan de activiteit	Controleer uw bloedglucose voorafgaand aan de activiteit. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.
Alcoholgebruik	Controleer uw bloedglucose regelmatig, vooral voordat u naar bed gaat. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.

Hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel)

Pods dienen snelwerkende insuline toe. In uw lichaam zit dus geen langwerkende insuline. Als er zich een verstopping (onderbreking tijdens het toedienen van insuline vanuit de Pod) voordoet, kan de bloedglucosespiegel snel hoog worden.

Waarschuwing: Een verstopping kan worden veroorzaakt door een blokkade, een storing in de Pod of door het gebruik van oude of niet meer werkende insuline (zie "Verstopplingsdetectie" op pagina 196). Als de toediening van insuline wordt onderbroken door een verstopping, controleert u uw bloedglucosespiegel en volgt u de richtlijnen van uw zorgverlener voor het behandelen van uw verhoogde bloedglucosespiegel. Er kan hyperglykemie optreden als er niet adequaat wordt gereageerd.

Tip: De symptomen van hyperglykemie kunnen verwarrend zijn. Controleer altijd uw bloedglucose voordat u hyperglykemie gaat behandelen.

Symptomen van hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel)

Negeer de volgende symptomen nooit, aangezien deze kunnen wijzen op mogelijke hyperglykemie:

- Vermoeidheid
- Vaak plassen, vooral 's nachts
- Ongewoon dorstig of hongerig
- Onverklaarbaar gewichtsverlies
- Wazig zien
- Langzaam genezen van snijwondjes of zweren

Hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel) voorkomen

Controleer uw bloedglucose:

- Minstens 4 tot 6 keer per dag (wanneer u wakker wordt, vóór elke maaltijd en voordat u naar bed gaat)
- Wanneer u zich misselijk of niet lekker voelt
- Voordat u gaat autorijden
- Wanneer uw bloedglucose hoger of lager is dan normaal
- Wanneer u vermoedt dat uw bloedglucosespiegel hoog is
- Voor, tijdens en na lichaamsbeweging
- Op aangeven van uw zorgverlener

Hyperglykemie (hoge bloedglucosespiegel) behandelen

Controleer uw bloedglucosespiegel altijd regelmatig tijdens het behandelen van hyperglykemie. Het is niet de bedoeling dat u de aandoening te veel corrigeert, waardoor uw bloedglucosespiegel te laag kan worden.

1. Controleer uw bloedglucosespiegel. Aan de hand van de gemeten waarde kunt u bepalen hoeveel insuline er nodig is om uw bloedglucose weer op de streefwaarde te krijgen.
2. Als uw bloedglucose 13,9 mmol/L of hoger is, controleert u op ketonen. Als er ketonen aanwezig zijn, volgt u de richtlijnen van uw zorgverlener.
3. Als er geen ketonen aanwezig zijn, neemt u een correctiebolus zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
4. Controleer na 2 uur uw bloedglucose opnieuw.
5. Als de bloedglucosespiegels niet zijn gedaald, doe dan het volgende:
 - Injecteer een tweede bolus met een steriele spuit. Vraag uw zorgverlener of u dezelfde hoeveelheid insuline moet spuiten als in stap 3.

13 Leven met diabetes

- Vervang de Pod. Vul de nieuwe Pod met een nieuwe flacon insuline. Neem daarna contact op met uw zorgverlener voor advies.
- 6. Als u zich op enig moment misselijk voelt, controleert u op ketonen en neemt u direct contact op met uw zorgverlener (zie "Diabetische ketoacidose (DKA)" op pagina 188).

Waarschuwing: Als u direct hulp nodig hebt, vraagt u een vriend of familielid om u naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te brengen of belt u een ambulance. Ga NIET zelf rijden.

- 7. Bekijk de mogelijke oorzaken van hyperglykemie om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen (zie de volgende tabel).

Mogelijke oorzaken van hyperglykemie	Voorgestelde handeling
Uiterste gebruiksdatum van insuline verlopen of insuline blootgesteld aan extreme temperaturen	Deactiveer en verwijder de gebruikte Pod. Breng een nieuwe Pod gevuld met een nieuwe flacon insuline aan.
Infusieplaats in de buurt van een moedervlek of litteken	Deactiveer en verwijder de gebruikte Pod. Breng een nieuwe Pod op een andere plaats aan.
Ontstoken infusieplaats	Deactiveer en verwijder de gebruikte Pod. Breng een nieuwe Pod op een andere infusieplaats aan en overleg met uw zorgverlener.
Losgeraakte canule	Deactiveer en verwijder de gebruikte Pod. Breng een nieuwe Pod op een andere plaats aan. Breng de Pod niet aan waar die in contact kan komen met een broekband, riem of ergens waar door wrijving de canule kan losraken.
Lege Pod	Deactiveer en verwijder de gebruikte Pod. Breng een nieuwe Pod op een andere plaats aan.
Onjuist basaalprogramma	Controleer of het juiste basaalprogramma actief is. Controleer of de PDM-tijd goed is ingesteld. Neem contact op met uw zorgverlener over het aanpassen van uw basaalprogramma's of het gebruik van een tijdelijke basaalsnelheid.

Mogelijke oorzaken van hyperglykemie	Voorgestelde handeling
Onjuiste timing van de bolus of bolus te klein	Controleer de koolhydraatname. Neem de bolus bij het eten. Controleer uw bloedglucose voordat u zichzelf een maaltijdbolus geeft. Pas indien nodig de bolus aan. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.
Eiwit- of vetrijke maaltijd	Bereken de inname van eiwitten/vetten en houd daar rekening mee bij de timing van de bolus en het type bolus. Overleg met uw zorgverlener over het gebruik van de optie voor verlengde bolus.
Minder activiteit dan normaal	Neem contact op met uw zorgverlener over het aanpassen van uw basaalprogramma's of het gebruik van een tijdelijke basaalsnelheid.
Een bloedglucose die hoger is dan 13,9 mmol/L (met aanwezige ketonen) vóór de lichaamsbeweging.	Ga niet sporten als er ketonen aanwezig zijn. In dat geval stijgt de bloedglucosespiegel tijdens het sporten wanneer er ketonen aanwezig zijn. Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.
Infectie of ziekte of verandering van medicatie	Zie "Ziekte" op pagina 189. Neem contact op met uw zorgverlener over de richtlijnen voor dagen waarop u ziek bent en het veranderen van medicatie.
Gewichtsverlies of -toename of menstruatiecyclus of zwangerschap	Neem contact op met uw zorgverlener voor richtlijnen.

Diabetische ketoacidose (DKA)

Pods dienen snelwerkende insuline toe. In uw lichaam zit dus geen langwerkende insuline. Als de insulineafgifte van de Pod wordt onderbroken (een verstopping), kan uw bloedglucosespiegel snel hoger worden en kan dit leiden tot diabetische ketoacidose (DKA). DKA is een ernstige maar te voorkomen complicatie van diabetes die zich kan voordoen wanneer u een hoge bloedglucosespiegel niet behandelt.

Waarschuwing:

Onbehandelde DKA kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden, shock en coma en in het ergste geval overlijden.

Als u direct hulp nodig hebt, vraagt u een vriend of familielid om u naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te brengen of belt u een ambulance. Ga niet zelf rijden.

Symptomen van DKA

- Misselijkheid en overgeven
- Buikpijn
- Uitdroging
- Fruitig geurende adem
- Droge huid of tong
- Slaperigheid
- Snelle hartslag
- Moeizame ademhaling

De symptomen van DKA lijken op die van griep. Ga er bij deze symptomen niet meteen vanuit dat u griep hebt; controleer uw bloedglucosespiegel en controleer ook op ketonen om DKA te kunnen uitsluiten.

DKA voorkomen

De gemakkelijkste en betrouwbaarste manier om DKA te voorkomen is door minimaal 4 tot 6 keer per dag uw bloedglucose te controleren. Routinecontroles zijn een zekere manier om een hoge bloedglucosespiegel vast te stellen en te behandelen voordat DKA zich kan ontwikkelen.

DKA behandelen

- Wanneer u bent begonnen met het behandelen van een hoge bloedglucosespiegel, moet u ook controleren op ketonen. Controleer altijd op ketonen als uw bloedglucose 13,9 mmol/L of hoger is.

- Als u geen of slechts heel weinig ketonen aantreft, gaat u verder met de behandeling voor hoge bloedglucose.
- Als u wel ketonen aantreft en u zich misselijk of ziek voelt, neemt u direct contact op met uw zorgverlener om te vragen wat u moet doen.
- Als u wel ketonen aantreft maar u zich niet misselijk of ziek voelt, vervangt u de Pod en vult u die met een nieuwe flacon insuline.
- Controleer na 2 uur uw bloedglucose opnieuw. Als de bloedglucosespiegel niet is gedaald, neemt u direct contact op met uw zorgverlener om te vragen wat u moet doen.

Omgaan met bijzondere situaties

Ziektedagen

Door fysieke belasting kan uw bloedglucosespiegel stijgen; ziekte is een fysieke belasting. Uw zorgverlener kan u helpen bij het maken van een planning voor ziektedagen. De volgende richtlijnen zijn alleen algemene richtlijnen.

Controleer uw bloedglucose vaker wanneer u ziek bent om DKA te voorkomen. De symptomen van DKA lijken op die van griep. Ga er bij deze symptomen niet meteen vanuit dat u griep hebt; controleer uw bloedglucosespiegel om DKA te kunnen uitsluiten (zie "Diabetische ketoacidose (DKA)" op pagina 188).

U gaat als volgt om met ziektedagen:

- Behandel de onderliggende ziekte om sneller te herstellen.
- Eet als u kunt zo normaal mogelijk.
- Pas indien nodig de bolusdoses aan om wijzigingen in maaltijden en snacks op te vangen.
- Blijf altijd uw basaalinsuline toedienen, ook als u niet kunt eten. Neem contact op met uw zorgverlener voor aanbevolen aanpassingen in de basaalnelheid tijdens ziektedagen.
- Controleer elke twee uur uw bloedglucose en houd de gemeten waarden nauwkeurig bij.
- Controleer op ketonen als uw bloedglucose 13,9 mmol/L of hoger is.
- Volg de richtlijnen van uw zorgverlener voor het toedienen van extra insuline op ziektedagen.
- Drink veel om uitdroging te voorkomen.
- Neem contact op met uw zorgverlener als de symptomen niet verdwijnen.

Lichaamsbeweging, sporten of zwaar werk

Controleer uw bloedglucosespiegel voor, tijdens en na lichaamsbeweging, sport of zware lichamelijke arbeid.

Door de hechtstrip blijft de Pod maximaal 3 dagen stevig op zijn plaats zitten. Er zijn diverse producten in de handel die indien nodig kunnen worden gebruikt om de Pod beter vast te plakken. Vraag uw zorgverlener naar deze producten.

Gebruik geen bodylotion, crème of olie in de buurt van de infusieplaats, omdat deze producten ervoor kunnen zorgen dat de Pod loslaat.

Als u de Pod ergens hebt bevestigd waar deze los kan raken, bijvoorbeeld bij contactsporten, kunt u overwegen de Pod te verwijderen en een nieuwe aan te brengen op een meer beschermde plaats.

Controleer eerst uw bloedglucosespiegels voordat u de Pod verwijderd en een nieuwe aanbrengt. Pods zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Breng een Pod die u hebt verwijderd, niet opnieuw aan.

Tip: *Plan de momenten voor het verwijderen van de Pod indien mogelijk op een moment waarop de Pod vervangen moet worden.*

Als u de Pod langer dan één uur moet verwijderen, vraagt u uw zorgverlener wat daarvoor de aanbevolen richtlijnen zijn.

Röntgenonderzoek, MRI-scans en CT-scans

De Pod en PDM zijn bestand tegen algemene elektromagnetische en elektrostatische velden, waaronder de beveiligingspoorten op luchthavens en mobiele telefoons.

Waarschuwing: De Pod en PDM kunnen worden beïnvloed door sterke straling of magnetische velden. Verwijder uw Pod, gooi deze weg en laat uw PDM buiten de behandelruimte liggen wanneer u een röntgenfoto laat maken of een MRI- of CT-scan (of vergelijkbare test of procedure) moet ondergaan. Raadpleeg uw zorgverlener voor richtlijnen voor het verwijderen van de Pod.

Chirurgie of ziekenhuisopname

Bij geplande operaties of ziekenhuisopname moet u de chirurg, de arts of het verplegend personeel vertellen dat u een Pod gebruikt. De Pod moet bij bepaalde procedures of behandelingen worden verwijderd. Vergeet niet de basaalinsuline te vervangen die niet kon worden toegediend omdat de Pod was verwijderd. Uw zorgverlener kan u helpen bij de voorbereiding op deze situaties.

Bijlage

Probleemoplossing opstarten PDM

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit bij normaal gebruik zal gebeuren, kunnen bepaalde toetscombinaties tijdens het opstarten van PDM ervoor zorgen dat de Boot-modus of de Veilige modus op het PDM-scherm wordt weergegeven.

Zelfs wanneer de PDM zich in de Boot-modus bevindt, blijft de Pod insuline toedienen volgens de instructies die de Pod heeft ontvangen. De Veilige modus heeft geen gevolgen voor de functionaliteit van de PDM of de Pod.

Ga op de volgende manier terug naar een normale PDM-werking:

Boot-modus

Als op uw PDM-scherm "Boot-modus selecteren" wordt weergegeven, doe dan het volgende:

1. Druk zo vaak als nodig op de knop Geluid/trillen OMHOOG (VOLUME_OMHOOG) om de pijl (<=>) te verplaatsen tot die naar **[Herstelmodus]** wijst. Druk vervolgens op de knop Geluid/trillen OMLAAG (VOLUME_OMLAAG) om **[Herstelmodus]** te selecteren.

Voorzichtig: Selecteer niet de [Fastboot-modus] aangezien de PDM hierdoor niet meer zal reageren. Neem contact op met het Klantenserviceteam als de PDM niet meer reageert.

2. Druk in het Android-herstelscherm op de knop Geluid/trillen (VOLUME_OMHOOG/VOLUME_OMLAAG) om **Systeem nu opnieuw opstarten** te markeren. Druk vervolgens op de knop Aan/Uit om die optie te selecteren.

De PDM start opnieuw op.

Veilige modus

Als op uw PDM-scherm in de linkerbenedenhoek "Veilige modus" wordt weergegeven, start de PDM dan opnieuw op en verwijder de tekst "Veilige modus" als volgt van het scherm:

1. Druk op de knop Aan/Uit, houd die ingedrukt en tik vervolgens op Uitschakelen.
2. Tik op OK om te bevestigen
3. Druk op de knop Aan/Uit en houd die ingedrukt om de PDM weer in te schakelen.

Overzicht van de instellingen en opties

Hieronder staan de opties voor de verschillende instellingen van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem:

Tijd	12-uursnotatie of 24-uursnotatie.
Tijdzones	GMT - 11:00 uur tot GMT + 13:00 uur.
Datum	MM.DD.JJJJ DD/MM/JJJJ DD.MM.JJJJ JJJJ-MM-DD
Time-out scherm	30, 60, 120 seconden. Standaard is 30 seconden.
PIN	4 cijfers van 0 tot 9.
Maximale basaalsnelheid	0,05-30 E/u. Standaard is 3,00 E/u.
Basaalsnelheid	Eenheden/uur Bereik: 0 E/u tot de maximale basaalsnelheid in stappen van 0,05 E/u.
Basaalprogramma's	Maximaal 12.
Basaalsnelheidssegmenten	24 per basaalprogramma.
Tijdelijke basaalsnelheid	%, eenheden/u of Uit. Standaard is Uit. Duur: 30 min tot 12 uur in stappen van 30 minuten.
Tijdelijke basaalsnelheid (ingesteld op %)	Bereik: verlaging van 100% (0 E/u) tot verhoging van 95% van de huidige basaalsnelheid, in stappen van 5%. Kan niet hoger zijn dan de maximale basaalsnelheid.
Tijdelijke basaalsnelheid (ingesteld op E/u)	Bereik: 0 E/u tot de maximale basaalsnelheid in stappen van 0,05 E/u.
Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden	Maximaal 12.
Bereik doel-BG voor historie bloedglucose	Onder- en bovengrens: 3,9 tot 11,1 mmol/L in stappen van 0,1 mmol/L.
BG-herinnering	Aan of Uit. Standaard is Uit. Maximaal 4 tegelijk actief. De herinnering kan worden gegeven tussen 30 min en 4 uur na het starten van de bolus. In te stellen in stappen van 30 minuten.
Aangepaste herinnering	Maximaal 4. In te stellen op Dagelijks, Eenmalig of Uit.
Boluscalculator	Aan of Uit. Standaard is Aan.
Doel-BG	Maximaal 8 segmenten; 3,9 tot 11,1 mmol/L in stappen van 0,1 mmol/L.

Drempel Corrigeren boven	Maximaal 8 segmenten; doel-BG tot 11,1 mmol/L in stappen van 0,1 mmol/L.
Minimale BG voor berekeningen	2,8 tot 3,9 mmol/L in stappen van 0,1 mmol/L. Standaard is 3,9 mmol/L.
Verhouding insuline/KH (I/KH)	Maximaal 8 segmenten; 1 tot 150 g KH/E in stappen van 0,1 g KH/E.
Correctiefactor (gevoeligheidsfactor)	Maximaal 8 segmenten; 0,1 tot 22,2 mmol/L in stappen van 0,1 mmol/L. Standaard is 2,8 mmol/L.
Tegenovergestelde correctie	Aan of Uit. Standaard is Aan.
Duur van de insulineactie	2 tot 6 uur in stappen van 30 minuten. Standaard is 4 uur.
Maximale bolusgrootte	0,05-30 E.
Verlengde bolus	%, eenheden of Uit. Standaard is Uit. 30 minuten tot 8 uur in stappen van 30 minuten.
Vooringsgestelde bolus	Maximaal 7. Kan niet meer zijn dan de maximale bolus.
Onderbreken	30 minuten tot 2 uur.
Waarschuwing voor laag reservoirvolume	10 tot 50 eenheden in stappen van 1 eenheid. Standaard is 10,0 E.
Kennisgeving over de uiterste gebruiksdatum van de Pod	1 tot 24 uur in stappen van 1 uur. Standaard is 4 uur.
Timer Auto-uit	Uit of 1 tot 24 uur in stappen van 1 uur. Standaard is Uit.
Weergave historiescherm	Doorlopende periode van 90 dagen.
Taal	Meerdere talen. Standaard is Engels.

Specificaties van de Pod

Afmetingen: 3,9 cm breed x 5,2 cm lang x 1,45 cm hoog

Gewicht (zonder insuline): 26 gram

Bereik bedrijfstemperatuur: gebruiksomgeving van de Pod van 5 °C tot 41 °C.

Opmerking: De temperatuur van de Pod ligt tussen 23 °C en 37 °C wanneer de Pod op het lichaam wordt gedragen.

Temperatuur bij opstarten: boven 10 °C

Bereik voor opslagtemperatuur: 0 °C tot 30 °C

Opwarmtijd (0 °C tot 20 °C): 7 minuten

Afkoeltijd: er is geen tijd nodig voor het afkoelen van de maximale opslagtemperatuur (30 °C) naar de bedrijfstemperatuur.

Reservoirvolume (toedienbaar): 200 eenheden

Inbrengdiepte canule: 4-7 mm

Diepte van insuline-infusie: ≥ 4 mm

Waterdichtheid: IP28 (7,6 meter gedurende maximaal 60 minuten)

Insulineconcentratie: U-100

Alarmtype: hoorbaar. Uitgangssignaal: ≥ 45 db(A) op 1 meter

Sterilisatiemiddel: gesteriliseerd met ethyleenoxide

Bereik relatieve vochtigheid tijdens in bedrijf: 20% tot 85%, niet-condenserend

Bereik relatieve vochtigheid tijdens opslag: 20% tot 85%, niet-condenserend

Atmosferische druk tijdens in bedrijf: 700 hPA tot 1060 hPA

Atmosferische druk tijdens opslag: 700 hPA tot 1060 hPA

Niet-pyrogeen: alleen vloeistoftraject

Toegepast onderdeel van type BF: beveiliging tegen elektrische schok

Maximale infusiedruk: 35 psi

Maximaal geïnfundeerd volume bij één fout: 0,5 E

Stroomcapaciteit:

Voorvulsnelheid: 0,05 eenheden per seconde

Basaal: door de gebruiker programmeerbaar in stappen van 0,05 E tot maximaal 30,0 E per uur

Bolussnelheid: 1,5 eenheden per minuut. Dosisbereik van 0,05 E tot 30,0 eenheden


Nauwkeurigheid toediening (getest per IEC 60601-2-24):

Basaal: $\pm 5\%$ bij een snelheid van $\geq 0,05$ E/u

Bolus: $\pm 5\%$ voor hoeveelheden $\geq 1,0$ eenheid

$\pm 0,05$ eenheden voor hoeveelheden $< 1,0$ eenheid

Nauwkeurigheid van testresultaten: De volgende grafiek laat de stroomnauwkeurigheid van de Pod ten opzichte van gegeven tijdsperioden zien. De metingen werden uitgevoerd met behulp van een Pod met een basaalsnelheid van $0,5 \mu\text{l/u}$ (waarbij $0,05$ eenheden U-100-insuline per uur worden toegediend) bij een hoge bedrijfstemperatuur. Het algehele gemiddelde foutpercentage van de stroom was $1,40\%$.

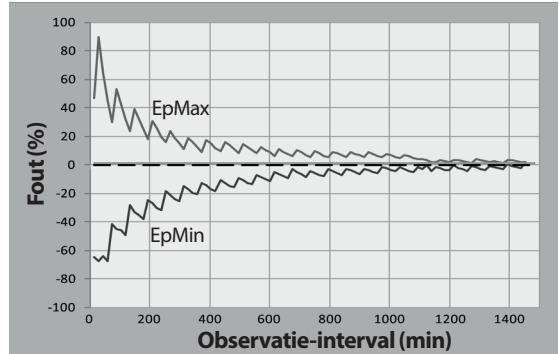

Specificaties van de PDM

Afmetingen: 6,4 cm breed x 12,2 cm lang x 1,0 cm hoog
(2,52 inch x 4,79 inch x 0,39 inch)

Gewicht: 106 gram

Actief schermgebied: 10,2 cm diagonaal $\pm 5\%$

Bereik bedrijfstemperatuur: 5°C tot 40°C

Bereik oplaadtemperatuur: 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)

Bereik voor opslagtemperatuur: 0°C tot 30°C

Bereik relatieve vochtigheid tijdens in bedrijf: 20% tot 90%, niet-condenserend

Bereik relatieve vochtigheid tijdens opslag: 20% tot 90%, niet-condenserend

Atmosferische druk tijdens in bedrijf: 700 hPa tot 1060 hPa

Atmosferische druk tijdens opslag: 700 hPa tot 1060 hPa

Communicatieafstand tussen PDM en Pod:

- Bij het opstarten: elkaar aanrakend, in of buiten het bakje, om ervoor te zorgen dat de apparaten tijdens het aanvullen kunnen communiceren.
- Tijdens normaal gebruik: niet verder dan 1,5 meter van elkaar. Afhankelijk van de locatie kan er soms communicatie plaatsvinden over een afstand van maximaal 15 meter.

Waterdichtheid: IP22 indien gebruikt zonder hoes (vermijd vloeistoffen)

Opmerking: de IP22-certificering is ALLEEN van toepassing als uw PDM wordt gebruikt met de meegeleverde hoes (een 'gel skin'). Het risico op binnendringen van water in de PDM is groter zonder de hoes. Neem indien nodig contact op met het Klantenserviceteam voor de aanschaf van aanvullende hoezen.

Alarmpype: hoorbaar. Uitgangssignaal: ≥ 45 db(A) op 1 meter

Type kennisgeving: hoorbaar en trillend

Levensduur PDM: 5 jaar

Batterijduur: Een volledig opgeladen batterij gaat bij normaal gebruik ongeveer 1,5 dagen mee en een batterij gaat bij normaal gebruik ongeveer 2 jaar mee.

Netvoeding oplader: 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz

Gebruik alleen de door Insulet geleverde oplader om uw PDM op te laden. Het gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels kan leiden tot schade aan of het ontploffen van de PDM en kan de garantie ongeldig maken.

Levensduur batterijoplader: 10.000 laaduren

Bescherming tegen te veel insuline of te weinig insuline

De infusiesnelheid wordt gecontroleerd door de Pod-software. Als er zich een fout voordoet waardoor er te veel of te weinig insuline wordt toegediend en die fout kan niet worden verholpen, wordt het toedienen van de insuline gestopt en klinkt er een alarmsignaal.

Verstopplingsdetectie

Een verstopping is een blokkade of onderbreking van de insulinetoediening door de Pod. Als het Omnipod DASH®-systeem een verstopping detecteert, klinkt er een gevarenalarm en wordt er aangegeven dat u de Pod moet deactiveren en vervangen.

Er klinkt een verstoppingsgevarnalarm als er gemiddeld 3 tot 5 eenheden insuline zijn overgeslagen. Zie de volgende tabel met detectie van een verstopping in drie verschillende situaties bij gebruik van U-100-insuline. Als de canule van de Pod bijvoorbeeld verstopt raakt bij het toedienen van een bolus van 5 eenheden, kunnen er 35 minuten verstrijken voordat het gevarenalarm klinkt.

	Tijd tussen verstopping en Pod-alarm	
	Standaardtijd	Maximale tijd
5,00 eenheden bolus	33 minuten	35 minuten
1,00 E/u basaal	3,0 uur	5,5 uur
0,05 E/u basaal	51 uur	80 uur (uiterste gebruiksdatum Pod)

Als een verstopping spontaan verdwijnt, kan er een volume insuline worden afgegeven. Dat volume is niet hoger dan het volume van de geprogrammeerde insuline die moet worden toegediend.

Als er zich tijdens een onmiddellijke bolus een verstopping voordoet, klinkt er een gevarenalarm bij de voltooiing van de onmiddellijke bolus.

Waarschuwing: Als u bij zeer lage basaalsnelheden uw bloedglucose regelmatig controleert, merkt u waarschijnlijk al in een vroeg stadium dat er een verstopping is. Verstoppingen kunnen leiden tot hyperglykemie.

Labelsymbolen van het Omnipod DASH®-systeem

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Uitsluitend voor eenmalig gebruik		Niet veilig voor MRI
	Raadpleeg de meegeleverde documenten		Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide		Toegepast onderdeel van type BF
	Fabricagedatum		Fabrikant
	Batchcode		Droog bewaren
	Gebruiken vóór		Opslagtemperatuur, bedrijfstemperatuur
	Referentienummer		Serienummer
	Relatieve vochtigheid tijdens opslag, relatieve vochtigheid tijdens in bedrijf		Atmosferische druk tijdens opslag, atmosferische druk tijdens in bedrijf
	Waterdicht: tot 7,6 meter gedurende maximaal 60 minuten		Niet-pyrogeen vloeistoftraject
	Pas op met vloeistof		Wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

	Niet weggooien met huishoudelijk afval	RoHS	Voldoet aan de RoHS-richtlijnen
	DASH® PDM		Conformiteitsmarkering
	Omnipod®-draagtas		PDM-hoes
	Gebruikershandleiding/ technische gebruikershandleiding		Pod
	Oplaadkabel		Oplader
	PDM-batterij		Importeur
	Medisch hulpmiddel		Geautoriseerde vertegenwoordiger Zwitserland
	VK Conformiteit beoordeeld		Eén patiënt, meervoudig gebruik
	Australisch keurmerk		Enkelvoudig steriel barrièresysteem
	(Frankrijk) Product is bedoeld voor recycling en mag niet bij het normale huishoudelijk afval		(Frankrijk) Product bevat scherpe voorwerpen
	Elektronische gebruiksinstructies		Alleen compatibel met U-100-insuline
	(Frankrijk) Afval moet in de naaldencontainer worden gedaan		(Frankrijk) Product bevat scherpe elektronische voorwerpen



(Frankrijk) Afval moet in de paarse container voor scherpe elektronische voorwerpen worden gedaan



(Frankrijk) Inzameling bij apotheek beschikbaar



(Frankrijk) Verpakking bedoeld voor recylen

Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen

Dit hulpmiddel voldoet aan Europese richtlijn 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Insulet voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679.

Klachten over Apparaten

Indien zich tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg daarvan een ernstig incident heeft voorgedaan, dient u dit te melden aan de fabrikant en/of diens gemachtigde en aan uw nationale autoriteit.

De contactgegevens van de fabrikant staan op de achterkant van dit document. De contacten van de nationale bevoegde autoriteiten (Vigilance Contact Points) en verdere informatie zijn te vinden op de volgende website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

Als u een probleem hebt met uw systeem, neem dan contact op met het Klantenserviceteam via de informatie op de verstrekte contactkaart.

Gegevens wettelijke vertegenwoordiger in de EU



Contactpersoon: Klachtenfunctionaris

Adres: Insulet Netherlands B.V., WTC Utrecht Stadsplateau 7, Suite 7.06, 3521 AZ Utrecht, Nederland

TEL: +31 308 990 670

E-mail: ECRep@insulet.com

Kennisgeving over storing door het Omnipod DASH®-systeem

Het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem (zowel de Pod als de PDM) voldoet aan artikel 15 van het FCC-reglement (Federal Communications Commission). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Deze instrumenten mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Deze instrumenten moeten alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die nadelig kunnen zijn voor de werking ervan.

Voorzichtig: Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Insulet Corporation, kunnen het recht van de gebruiker tot het bedienen van de instrumenten ongeldig maken.

Zowel de Pod als de PDM genereert en gebruikt radiofrequente energie, kan radiofrequente energie uitstralen en kan schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatieapparatuur en andere apparaten. Er is geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing optreedt.

Als het Omnipod DASH®-systeem onverhoopt toch schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- en televisieontvangst, kan deze interferentie op een van de volgende manieren worden verholpen:

- Verplaats het Omnipod DASH®-systeem.
- Plaats het Omnipod DASH®-systeem en het andere apparaat dat interferentie uitstraalt of ontvangt, verder uit elkaar.

Insulet Corporation verklaart hierbij dat het Omnipod DASH®-systeem voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU). De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://omnipod.com/Red_Doc. Dit ISM-apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003 en IC-RSS-210.

Elektromagnetische compatibiliteit

De informatie in dit gedeelte (zoals scheidingsafstanden) is over het algemeen speciaal bedoeld en geschreven voor het Omnipod DASH®-systeem. De gegeven getallen zijn geen garantie voor een foutloze werking maar geven een redelijke mate van zekerheid. Deze informatie is niet altijd van toepassing op andere medische elektrische apparatuur. Oudere apparatuur kan met name gevoelig zijn voor storingen.

Algemene opmerkingen

Voor medische elektrische apparatuur zijn specifieke voorzorgsmaatregelen nodig ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Deze apparatuur moet conform de EMC-informatie in dit document en de gebruiksaanwijzingen worden geïnstalleerd en in gebruik genomen. Als het Omnipod DASH®-systeem uitvalt door elektromagnetische storingen, kan het nodig zijn het systeem te vervangen.

Draagbare en mobiele apparatuur voor RF (radiofrequentie)-communicatie kan de werking van medische elektrische apparatuur verstoren.

Voorzichtig: Kabels en accessoires die niet in de gebruiksaanwijzingen worden vermeld, mogen niet bij het systeem worden gebruikt. Het gebruik van andere kabels en accessoires kan een nadelig effect hebben op de veiligheid, prestaties en elektromagnetische compatibiliteit (verhoogde emissie en verminderde immuniteit).

Voorzichtigheid is geboden als het Omnipod DASH®-systeem in de buurt van andere elektrische apparatuur wordt gebruikt. Als het niet mogelijk is om de afstand tussen het systeem en de apparatuur te vergroten, zoals in een werkomgeving, moet worden gecontroleerd of het Omnipod DASH®-systeem goed werkt in deze opstelling.

Het Omnipod DASH®-systeem communiceert door middel van lage RF-energie. Net zoals bij alle RF-ontvangers bestaat er een kans op storing, zelfs bij apparatuur die voldoet aan de FCC- en CISPR-emissie-eisen.

De communicatie van het Omnipod DASH®-systeem heeft de volgende eigenschappen:

Frequentie: 2400-2480 GHz, digitaal gemoduleerd met een effectief uitgestraald vermogen van 1,14 mW

Het Omnipod DASH®-systeem voldoet aan de immuniteitseisen van de algemene standaard voor elektromagnetische compatibiliteit, IEC 60601-1-2.

Het Omnipod DASH®-systeem is immuun gebleken voor zowel RFID-systemen (identificatie met radiogolven) als systemen voor elektronische artikelbewaking. Er zijn tests uitgevoerd volgens AIM 7351731 om deze immuniteit aan te tonen.

Voorzichtig: Draagbare RF-communicatieapparatuur, waaronder randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes, moet niet binnen 30 cm van enig onderdeel van het Omnipod DASH®-systeem worden gebruikt. Een kleinere afstand kan de prestaties van het systeem nadelig beïnvloeden.

Elektromagnetische emissies

Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving (zie de volgende tabel). De gebruiker van deze apparatuur moet ervoor zorgen dat de apparatuur in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissies	Overeenkomstig	Elektromagnetische omgeving
RF-emissies (CISPR 11)	Groep 2	De Pod en de PDM communiceren middels lage elektromagnetische energie (RF). Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan dit van invloed zijn op elektronische apparatuur in de buurt van de Pod en de PDM.
Classificatie CISPR B-emissies	Klasse B	Het systeem kan overal worden gebruikt, met inbegrip van thuisomgevingen.

Elektromagnetische immuniteit

Het systeem is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving (zie de volgende tabel). U dient zich bij het gebruik van het systeem aan deze vereisten te houden.

Immuniteit tegen	IEC 60601-1-2 testniveau	Conformiteitsniveau (van dit hulpmiddel)	Elektromagnetische omgeving
Elektrostatische ontleding, ESD (IEC 61000-4-2)	Contactontlading: ± 8 kV Luchtontlading: ± 15 kV	± 8 kV ± 15 kV	Probeer elektrostatisch ontladen te voorkomen bij vloeren met synthetische vloerbedekking.
Stroomfrequentie magnetische velden 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)	30 A/m	400 A/m	Geschikt voor de meeste omgevingen. Magnetische veldsterkten van meer dan 400 A/m zijn heel onwaarschijnlijk, uitgezonderd in de buurt van industriële magnetische apparatuur.
Uitgestraalde RF (IEC 61000-4-3)	10 V/m bij 80 MHz tot 2,7 GHz	10 V/m	Geschikt voor de meeste omgevingen. Houd draagbare apparatuur voor RF-communicatie op een afstand van ten minste 30 cm van het Omnipod DASH®-systeem.

Opmerking: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie door en weerkaatsingen van structuren, objecten en personen.

Elektromagnetische immuniteit

^a De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/ draadloos) en portofoons, zendamateurs, AM- en FM-uitzendingen en tv-uitzendingen, kan theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving zoals die door vaste RF-zenders ontstaat, te beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de apparatuur wordt gebruikt, het bovenstaande RF-conformiteitsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of de apparatuur normaal werkt. Als de apparatuur anders werkt dan normaal, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals het anders richten of verplaatsen van de apparatuur.

Garantie voor het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem Persoonlijke Diabetesmanager and Pods (alle landen behalve Canada en de Verenigde Staten)

GARANTIEDEKKING

Garantiedekking voor de Personal Diabetes Manager (Persoonlijke Diabetesmanager) van het Omnipod DASH®-systeem

Onder de hieronder vermelde algemene voorwaarden garandeert Insulet Netherlands BV ("Insulet") u, de oorspronkelijke ontvanger van het Omnipod DASH®-insulinetoedieningssysteem ("Omnipod®-systeem") voor gebruik in het land waar u de Persoonlijke Diabetesmanager ("PDM") hebt aangeschaft of ontvangen, dat indien Insulet vaststelt dat uw PDM bij gebruik onder normale omstandigheden een defect in het materiaal of vakmanschap vertoont, Insulet gedurende een periode van vier (4) jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop (of ontvangst indien namens u aangeschaft), als zijn enige optie de PDM zal repareren of vervangen.

Deze garantieperiode van vier (4) jaar geldt alleen voor nieuwe PDM's en wordt niet verlengd of opnieuw gestart als de PDM wordt gerepareerd of vervangen.

Garantiedekking voor de Pods van het Omnipod®-systeem

Onder de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Insulet u, de oorspronkelijke ontvanger van het Omnipod®-systeem, dat indien Insulet vaststelt dat een door u ontvangen Pod ("Pod") van het Omnipod®-systeem bij gebruik onder normale omstandigheden een defect in het materiaal of vakmanschap vertoont gedurende de periode van vierentwintig (24) maanden gerekend vanaf de productiedatum of tweeënzeventig (72) uur gerekend vanaf de tijd van activering, Insulet naar eigen keuze die Pod zal repareren of vervangen. De Pod wordt bij een defect alleen vervangen als de activering van de Pod binnen beide tijdsperiodes valt (d.w.z. plaatsvinden op of vóór de uiterste gebruiksdatum op het etiket met een productiedatum niet meer dan vierentwintig (24) maanden ervoor en op of vóór een tijdstip niet meer dan tweeënzeventig (72) uur voordat u Insulet van de vordering op de hoogte hebt gesteld).

Deze garantieperiode van vierentwintig (24) maanden en tweeënzeventig (72) uur geldt alleen voor nieuwe Pods en wordt niet verlengd of gaat niet opnieuw in als een Pod wordt gerepareerd of vervangen.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Deze garantie geldt alleen voor PDM's en Pods die oorspronkelijk zijn verkocht voor gebruik in het land waar u het toepasselijke product hebt aangeschaft of ontvangen (het "Grondgebied"). Insulet verzendt alleen gerepareerde of vervangen PDM's en Pods en biedt alleen garantieservices binnen het grondgebied.

Navorderingsprocedure

U komt onder deze garantie alleen voor een claim in aanmerking als u Insulet binnen de van toepassing zijnde garantieperiode op de hoogte stelt van het beweerde defect van de PDM of de Pod door telefonisch contact op het nemen met het Klantenserviceteam van Insulet. U vindt het telefoonnummer op onze website of in de technische gebruikershandleiding van het product. Als u een claim over de PDM indient, moet u het serienummer van de PDM vermelden en een beschrijving van het beweerde defect meesturen. Als u een claim over een Pod indient, moet u het partijnummer van de Pod vermelden en een beschrijving van het beweerde defect meesturen. Men kan u ook vragen om de datum van aanschaf (of ontvangst indien namens u aangeschaft) van de PDM en/of de Pod en de tijd waarop u de Pod hebt geactiveerd.

Als u zich niet aan bovenstaande stappen houdt, kan uw aanspraak op garantie worden afgewezen.

Wanneer Insulet besluit de Pod of de PDM te repareren (inclusief maar niet beperkt tot een reparatieset of een of meer vervangende onderdelen van Insulet) of u doorverwijst naar een door Insulet gemachtigde reparateur, moet Insulet u toestemming verlenen om de Pod of de PDM naar Insulet terug te sturen. De Pod of PDM moet goed worden verpakt en worden opgestuurd naar Insulet conform de instructies uit de RMA-set (Return Merchandise Authorization), die door Insulet naar u zal worden verzonden. Alleen met voorafgaande toestemming zal Insulet alle redelijke verpakkings- en verzendkosten van de Pod of de PDM naar Insulet onder de voorwaarden van deze garantie voor zijn rekening nemen. Om elke twijfel weg te nemen, zal Insulet geen reparaties en vervangingen door een persoon of entiteit anders dan Insulet vergoeden, uitgezonderd voor reparaties en vervangingen door een derde die u door Insulet expliciet is aangewezen.

Bewijs van aankoop, ontvangst of activering

Om de datum van aanschaf (of ontvangst indien namens u aangeschaft) of in het geval van een Pod de tijd van activeren te kunnen controleren en te kunnen vaststellen of de claim onder deze garantie binnen de geldende garantieperiode valt, kan Insulet eisen dat u een geldig bewijs van aanschaf, ontvangst of activering overlegt. Als u geen geldig bewijs van aanschaf, ontvangst of activering zoals geëist door Insulet kunt overleggen, kan uw aanspraak op garantie worden afgewezen.

Uitsluitingen

De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke ontvanger van het product en kan bij verkoop, huur of andere overdracht van de PDM of Pod aan een andere persoon of entiteit niet worden overgedragen of toegewezen.

Deze garantie geldt uitsluitend als de PDM of de Pod in kwestie is gebruikt conform de technische gebruikershandleiding van het Omnipod®-systeem en/of andere schriftelijke instructies die door Insulet zijn geleverd. Deze garantie geldt niet voor de PDM of de Pods als deze zijn:

- Aangepast, veranderd of gewijzigd door een persoon of entiteit anders dan Insulet of een door Insulet gemachtigde derde;
- Geopend, onderhouden of gerepareerd door een persoon of entiteit anders dan Insulet of een door Insulet gemachtigde derde;

- Beschadigd door overmacht of door een ander soortgelijk voorval;
- Beschadigd door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongeluk of onredelijk gebruik, of onzorgvuldige behandeling, zorg of opslag;
- Beschadigd als gevolg van gewone slijtage, oorzaken door tekortkomingen in materialen of vakmanschap (waaronder maar niet beperkt tot verkeerde of slechte batterijen) of andere omstandigheden die buiten redelijke controle van Insulet liggen.

Deze garantie geldt niet voor teststrips, batterijen, andere accessoires of verwante producten die door derden worden geleverd, zoals programma's voor gegevensbeheer en CGM's.

Deze garantie dekt geen ontwerpfouten, d.w.z. claims dat de PDM of de Pods op een andere manier zouden moeten zijn ontworpen.

Disclaimer van impliciete garanties en beperking van rechtsmiddelen

Voor zover toegestaan door de wet in het Grondgebied:

- **Deze garantie en de daarin uiteengezette rechtsmiddelen zijn de enige garanties en rechtsmiddelen die Insulet aan u verleent met betrekking tot de PDM en de Pods. Alle andere statutaire en impliciete garanties zijn voor zover maximaal toegestaan, uitdrukkelijk uitgesloten.**
- **Insulet, zijn leveranciers, distributeurs en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, speciale of bijkomende schade of gevolgschade die is veroorzaakt door een defect in de PDM of een Pod of door een inbreuk op deze garantie, ongeacht of een dergelijke claim is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins.**

Niets in deze garantie is bedoeld om ons te ontslaan van onze verantwoordelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude, bedrieglijke onjuiste weergave of inbreuk op uw statutaire rechten met betrekking tot de PDM of Pods.

Belangrijke aanvullende bepalingen

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere statutaire rechten hebben die per rechtsgebied kunnen verschillen.

Uw statutaire rechten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Insulet garandeert niet de geschiktheid van de PDM of de Pods of het Omnipod®-systeem voor enige specifieke persoon, aangezien gezondheidszorg en behandelingen complexe onderwerpen zijn waarvoor gekwalificeerde zorgverleners nodig zijn.

Deze garantie is een overeenkomst tussen u en Insulet. Geen enkele andere partij is gerechtigd om de voorwaarden van deze garantie ten uitvoer te brengen. Insulet mag zijn rechten en verplichtingen onder deze garantie zonder uw toestemming overdragen aan een andere partij.

Als een bepaling van deze garantie door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, wordt die bepaling geacht te worden verwijderd uit deze garantie. De geldigheid van de overige bepalingen is daarbij niet in het geding.

Geen andere garantie of overeenkomst

Tenzij schriftelijk gewijzigd en ondertekend door zowel Insulet als u, zijn de voorwaarden die in deze garantie worden uiteengezet, de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Insulet en u en vervangen deze voorwaarden alle eerdere mondelinge en schriftelijke garanties en overeenkomsten en alle andere communicatie over een defect, fout of storing in een PDM, een Pod of een Omnipod®-systeem. Geen werknemer, agent of vertegenwoordiger van Insulet of een andere partij is gemachtigd om een garantie of overeenkomst voor een PDM, een Pod of Omnipod®-systeem met u af te sluiten als aanvulling op de voorwaarden en bepalingen uit het voorafgaande.

Instemming met de disclaimer van impliciete garanties en de beperking van rechtsmiddelen

Als u niet instemt met de disclaimer van impliciete garanties en de beperking van rechtsmiddelen die bij het Omnipod®-systeem wordt geleverd, maar deze disclaimer afwijst, moet u alle producten van het Omnipod®-systeem (inclusief elke PDM en Pod) terugsturen naar Insulet waarna het volledige aankoopbedrag aan u wordt terugbetaald. Het niet terugsturen van deze producten impliceert de erkenning van en instemming met de disclaimer van impliciete garanties en de beperking van rechtsmiddelen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze garantie (en elke niet-contractuele verplichting voortkomend uit of in verband met de garantie) valt onder de wetten van het land waar u de PDM of de Pods hebt aangeschaft of ontvangen. Iedere bevoegde rechtbank in een dergelijk land is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van elk geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze Garantie.

Verklarende woordenlijst

A1c (zie Hemoglobine A1c)

Activering: het proces waarbij een Pod uit de slaapstand wordt gehaald en wordt gekoppeld aan een PDM zodat de Pod alleen reageert op opdrachten van die PDM.

Aseptische techniek: een methode om de steriliteit te behouden en besmetting te voorkomen.

Basaalprogramma: een schema voor continue toediening van insuline gedurende de dag. Het bestaat uit één of meerdere segmenten die elk een basaalsnelheid aangeven. De verschillende tijdsegmenten bestrijken samen de periode van 24 uur tussen middernacht en middernacht.

Basaalsegment: de tijdsperiode waarin een specifieke basaalsnelheid wordt toegediend.

Basaalsnelheid: een kleine hoeveelheid insuline die gedurende een bepaalde tijdsperiode continu wordt toegediend. De basaalsnelheid wordt gespecificeerd in eenheden per uur (E/u).

Bereik BG-doel: een door de gebruiker gedefinieerd bereik van gewenste bloedglucosewaarden. Dit bereik wordt in de historiegegevens gebruikt om weer te geven welke bloedglucosewaarden binnen het bereik vallen.

Bloedglucose / Bloedglucosespiegel: de hoeveelheid glucose of suiker in het bloed.

Bloedglucosemeter: een apparaat dat wordt gebruikt om de bloedglucosespiegel te controleren.

Bluetooth® (zie draadloze communicatie)

Boluscalculator: een functie die maaltijd- en correctiebolusdoses voorstelt op basis van uw huidige bloedglucose, de hoeveelheid koolhydraten die u gaat eten, de insuline 'on board' en verschillende andere gebruikersspecifieke instellingen.

Bolusdosis: een dosis insuline die wordt toegediend om een verhoogde bloedglucosespiegel te corrigeren (een correctiebolus) of om koolhydraten in een maaltijd of snack op te vangen (een maaltijdbolus).

Calorie: een meeteenheid om de energiewaarde van voedingsmiddelen uit te drukken. Calorieën zijn afkomstig van de koolhydraten, eiwitten en vetten in voedsel en dranken.

Canule: een klein, dun buisje dat onder de huid wordt ingebracht en waardoor vloeibare medicatie in het lichaam kan worden gebracht.

Correctiebolus: een hoeveelheid insuline die wordt toegediend om een hoge bloedglucosespiegel te corrigeren.

Correctiefactor (ook wel gevoeligheidsfactor genoemd): een waarde die aangeeft hoeveel uw bloedglucosespiegel daalt na toediening van één eenheid insuline. Als uw correctiefactor bijvoorbeeld 2,8 is, verlaagt één eenheid insuline uw bloedglucosespiegel met 2,8 mmol/L.

Deactiveren: voorkeursmethode voor het ontkoppelen van de PDM en de actieve Pod. Door deactivering wordt de insulinetoediening in de Pod uitgeschakeld. Vervolgens wordt de PDM ontkoppeld van die Pod.

Diabetes, diabetes mellitus: een aandoening die wordt gekenmerkt door hyperglykemie (een verhoogde bloedglucosespiegel) die komt doordat het lichaam de bloedglucose niet kan gebruiken voor energie. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer. Hierdoor kan de bloedglucose niet in de vele typen cellen komen om te worden omgezet in energie. Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier niet voldoende insuline of het lichaam kan de insuline niet op de juiste manier gebruiken.

Diabetische ketoacidose (DKA): een ernstige aandoening waarbij het lichaam vetten en eiwitten afbreekt voor energie als gevolg van een extreem hoge bloedglucosespiegel en een ernstig tekort aan insuline. Door de afbraak van vetten of eiwitten komen er ketonen in het bloed en de urine terecht. DKA kan zich in uren of dagen ontwikkelen. De symptomen zijn onder andere buikpijn, misselijkheid, braken, een naar fruit ruikende adem en een snelle ademhaling.

Draadloze communicatie: overdracht van informatie zonder dat er een fysieke verbinding tussen de twee apparaten aanwezig is. De PDM en Pod communiceren over korte afstanden met elkaar met behulp van radiogolven. Dit wordt draadloze communicatie genoemd.

Drempel Corrigeren boven: de bloedglucosewaarde waarboven u insuline zou moeten innemen om de verhoogde bloedglucosespiegel te verlagen.

Duur van de insulineactie: de tijd waarin insuline actief en beschikbaar blijft in het lichaam na een bolus. Deze duur kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van het type insuline dat u gebruikt.

Eiwit: een van de drie belangrijkste energiebronnen in voedsel. (De andere twee zijn koolhydraten en vetten.) Eén gram eiwit bevat 4 calorieën. Voedingsmiddelen met veel eiwitten zijn onder andere vlees, gevogelte, vis, peulvruchten en zuivelproducten.

Geschatte bolus: nadat u de toe te dienen hoeveelheid bolus hebt bevestigd, wordt er een bolusinstructie naar de Pod gestuurd. Als de Pod geen bevestiging kan terugsturen van de daadwerkelijk toegediende hoeveelheid bolus, maakt de PDM een schatting van de toegediende hoeveelheid. Deze schatting wordt gebaseerd

op het verwachte toedieningsschema. Meteen na de ontvangst van de bevestiging van de Pod geeft de PDM de daadwerkelijke (niet geschatte) hoeveelheid bolus weer.

Gevenaalarm: een continu geluid en een schermbericht van de PDM of de Pod die aangeven dat er een fout is opgetreden of de insulinetoediening is gestopt. Bij een alarm moet u onmiddellijk actie ondernemen.

Gevoeligheidsfactor (zie Correctiefactor)

Glucose: een eenvoudige vorm van suiker (ook wel dextrose genoemd) die door het lichaam wordt gebruikt voor energie. Zonder insuline kunnen veel cellen in het lichaam glucose niet gebruiken voor energie.

Handmatig berekende bolus: een door u gekozen bolushoeveelheid insuline (niet berekend door de boluscalculator).

Hemoglobine A1c (HbA1c): een test die de gemiddelde bloedglucosespiegel van een persoon over de voorgaande twee tot drie maanden meet. Deze test, die ook wel geglyceerd hemoglobine wordt genoemd, meet de hoeveelheid glucose die zich in rode bloedcellen aan hemoglobine heeft gehecht. Deze hoeveelheid hangt samen met de gemiddelde hoeveelheid glucose in het bloed over langere tijd.

Hyperglykemie (hoge bloedglucose): een hogere bloedglucosespiegel dan normaal, gewoonlijk meer dan 13,9 mmol/L.

Hypoglycemia unawareness (niet opmerken van hypoglykemie): een aandoening waarbij een persoon de symptomen van hypoglykemie niet opmerkt of herkent.

Hypoglykemie (lage bloedglucose): een lagere bloedglucosespiegel dan normaal, gewoonlijk minder dan 3,9 mmol/L.

I/KH-verhouding (insuline-tot-koolhydraatverhouding): aantal gram koolhydraten dat wordt opgevangen door één eenheid insuline. Als uw I/KH-verhouding bijvoorbeeld 1:15 is, moet u één eenheid insuline toedienen voor elke vijftien gram koolhydraten die u eet.

Infusie: een vloeibare stof onder de huid in het lichaam brengen.

Infusieplaats: de plaats op het lichaam waar de canule van een Pod is ingebracht.

Insuline 'on board' (IOB) (actieve insuline): de hoeveelheid insuline in het lichaam die nog 'actief' is van eerdere bolusdosissen. De boluscalculator houdt de IOB voor u bij. Hoelang de insuline 'on board' of 'actief' blijft, is afhankelijk van uw instelling voor de duur van de insulineactie.

Insuline: een hormoon dat het lichaam helpt glucose te gebruiken voor energie. Insuline wordt aangemaakt door cellen in de alvleesklier die bètacellen worden genoemd.

Kennisgeving: een herinnering of informatiebericht op het scherm.

Ketoacidose (zie diabetische ketoacidose)

Ketonen: zure bijproducten afkomstig van de afbraak van vet voor energie. Als er ketonen aanwezig zijn, geeft dit aan dat het lichaam opgeslagen vet en spieren in plaats van glucose gebruikt voor energie.

Koolhydraat (KH): een van de drie belangrijkste energiebronnen in voedsel. (De andere twee zijn eiwitten en vetten.) Voedingsmiddelen die koolhydraten bevatten zijn onder andere zetmeel, suikers, groenten, fruit en zuivelproducten.

Koolhydraatbolus (zie maaltijdbolus)

Koppelen: verbinding maken tussen twee apparaten zodat deze draadloos met elkaar kunnen communiceren. Zie ook *sync*.

Maaltijdbolus (ook koolhydraatbolus genoemd): een hoeveelheid insuline die vóór een maaltijd of snack wordt toegediend om ervoor te zorgen dat de bloedglucosespiegel na de maaltijd binnen het gewenste BG-doelbereik blijft.

Maximale basaalsnelheid: de bovengrens voor basaalsnelheden in een basaalprogramma of een tijdelijke basaalsnelheid.

Maximale bolus: de grootste bolus die u bij de PDM kunt opvragen. De boluscalculator stelt u op de hoogte als deze een bolus berekent die groter is dan deze hoeveelheid.

Minimale BG voor berekeningen: de minimale bloedglucosemeting waarbij de boluscalculator een maaltijdbolus berekent. Bij een lagere waarde is de boluscalculator niet beschikbaar. 'Voor berekeningen' betekent 'voor gebruik bij de berekeningen door de boluscalculator'.

Omnipodgebruiker : (verzorgers van) mensen met diabetes die het Omnipod®-systeem gebruiken om in hun dagelijkse insulinebehoefte te voorzien.

Onbevestigde bolus: treedt op wanneer u tijdens een bolus de optie POD WEGGOOIEN selecteert na een communicatiefout. In dit geval kan de Pod geen bevestiging naar de PDM sturen om aan te geven hoeveel van een bolus daadwerkelijk is toegediend.

Pod weggooien: de optie POD WEGGOOIEN wordt geboden als de PDM de communicatie met de Pod niet kan herstellen na een communicatiefout. Door deze optie kan de PDM deze Pod opgeven en een nieuwe Pod activeren. Opmerking: een 'weggegooid' Pod kan nog steeds insuline toedienen. Verwijder een 'weggegooid' Pod altijd van uw lichaam.

Segment: een vastgestelde tijdsperiode binnen een dag van 24 uur. Segmenten worden gebruikt om basaalsegmenten in te voeren in een basaalprogramma en ook om streefwaarde voor BG-segmenten, I/KH-verhoudingssegmenten en correctiefactorsegmenten te definiëren.

Streefwaarde voor BG: de bloedglucosespiegel die de boluscalculator probeert te bereiken. U kunt verschillende streefwaarden voor BG voor verschillende tijdsperiodes aangeven. U kunt bijvoorbeeld een streefwaarde voor BG hebben voor vóór maaltijden, een andere voor na maaltijden en weer een andere voor 's avonds.

Sync: het overdragen van informatie tussen twee gekoppelde apparaten.

Tegenovergestelde correctie (negatieve correctie): als uw bloedglucosespiegel lager is dan uw streefwaarde voor BG, gebruikt de boluscalculator uw correctiefactor om een maaltijdbolusdosis met een deel te verminderen. Dit is een optionele functie die op advies van uw zorgverlener in- of uitgeschakeld moet worden.

Tijdelijke basaalsnelheid: een tijdelijke basaalsnelheid die wordt gebruikt om voorspelbare, kortdurende veranderingen in de behoefte aan basale insuline op te vangen. Tijdelijke basaalsnelheden worden vaak gebruikt tijdens lichaamsbeweging of voor insulineaanpassingen tijdens ziekte.

Tijdsegment (zie segment)

Verlengde bolus: de geleidelijke toediening van een bolus over langere tijd.

Verstopping: een blokkade of onderbreking van de insulinetoediening.

Vet: een van de drie belangrijkste energiebronnen in voedsel. (De andere twee zijn koolhydraten en eiwitten.) Eén gram vet bevat 9 calorieën. Voedingsmiddelen met veel vetten zijn onder andere oliën, margarine, sladressings, rood vlees en volle zuivelproducten.

Vezels: het niet-verteerbare deel van plantaardig voedsel. Voedingsmiddelen die veel vezels bevatten, zijn onder andere broccoli, bonen, frambozen, pompoen, volkorenbrood en vezelrijke ontbijtgranen. Vezels zijn een vorm van koolhydraten, maar verhogen de bloedglucosespiegel niet zo sterk als andere koolhydraten.

Vooringestelde bolus: een bolusdosis insuline die onder een herkenbare naam in de PDM is opgeslagen voor later gebruik.

Vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid: een aanpassing van een basaalsnelheid, in % of E/u, die onder een herkenbare naam kan worden opgeslagen in de PDM voor later gebruik.

Voorinstelling: met een voorinstelling kunt u snel een waarde invoeren die u vaak gebruikt.

Waarschuwingssalarm: een reeks tril- of piepsignalen in combinatie met een schermbericht die aangeven dat u mogelijk actie wilt ondernemen om een ernstig probleem te voorkomen.

Zorgverlener: een professional die de geneeskunde beoefent of mensen leert hoe ze hun gezondheid kunnen beïnvloeden.

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.

Index

A

- aangepaste herinnering
 - instelling 111
 - kennisgeving 129
- actieve insuline. *See* insuline 'on board'
- activeren
 - Basaalprogramma 75
 - Pod 37–52
 - tijdelijke basaalsnelheid 72
 - vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid 74
- activeren PDM 10
- afstand tussen Pod en PDM 42
- alarm Auto-uit 124, 127
 - beschrijving 148–149
 - instelling 108
- alarmen
 - Auto-uit 124, 127
 - geluids- en trilpatroon 122
 - gevaar 124–126
 - historiegegevens 89
 - insuline hervatten. 127
 - leeg reservoir 124
 - overzicht 119
 - PDM-fout. 125
 - Podfout 125
 - reageren op 120
 - reservoir bijna leeg 126
 - systeemfout 125
 - testen 105
 - timing van 146
 - Uiterste gebruiksdatum Pod is verstreken 124, 126
 - verstopping 124
 - waarschuwing 126–127
- alarmfunctie controleren 105
- alarm leeg reservoir 124

- alarm PDM-fout 125
- alarm Podfout 125
- alarm systeemfout 125
- alarm uiterste gebruiksdatum Pod verstreken 124, 126
- allergisch voor acrylpleister 37
- annuleren
 - bolus 69
 - tijdelijke basaalsnelheid 74
- aseptische techniek 40

B

- basaalhistoriegegevens 93–100
- Basaalprogramma
 - activeren 75
 - bekijken 80
 - bewerken 81
 - maken 79
 - naam wijzigen 81
 - negeren. *See* tijdelijke basaalsnelheid
 - onderbreken of hervatten 76
 - over 149
 - overschakelen 75
 - verwijderen 83
- basaalsegment 149
- basaalsnelheid 149
 - maximum, instelling 114
 - stroomnauwkeurigheid 194
 - tijdelijk. *See* tijdelijke basaalsnelheid
- Basaal (tabblad) 12
- batterij, PDM
 - alarm leeg 127
 - opladen 22, 142
 - plaatsen 143
 - sparen 102
 - type 140
 - vervangen 143
- bedrijfstemperatuur 137, 194, 195
- benodigdheden

- PDM instellen 22
- Pod instellen 40
- reizen 178
- verkrijgen xv
- bereik, BG-doel 113
- Bereik BG-doel 113
- beschadigde PDM 139
- bevestigingsberichten 20
- bevestigingsherinneringen
 - instelling 111
 - pieptonen 129
- BG controleren na bolus, instelling 109
- bijna lege batterij
 - alarm 127
 - indicator 9
 - opnieuw opladen 142
- BLE. *See* Bluetooth
- bloedglucose
 - Bereik BG-doel 113
 - historiegegevens 91–100
 - Hoge en lage waarden 56
 - Streefwaarde voor BG 116, 158–174
- bloedglucosewaarde
 - handmatige invoer 53
 - labels 55
 - schermweergave begrijpen 56
- blokkade. *See* verstopping
- Boluscalculator
 - begrijpen 156–174
 - bolusberekening met 59
 - instellingen 115–117
 - niet beschikbaar 65, 157
 - voorbeeldberekeningen 162
- bolus, gemist. *See* kennisgeving over gemiste bolus
- bolushistoriegegevens 91–100
- bolus, onmiddellijk
 - annuleren 69
 - basaalsnelheid 194
 - begrijpen 155
 - boluscalculator gebruiken 59–65
 - handmatig berekend 65–67
 - historiegegevens 91–100
 - invoeren, eenheden insuline 65–67

- op basis van bloedglucose 59
- op basis van KH 59–65
- voortgang 67
- bolus, verlengd
 - annuleren 69
 - begrijpen 155
- boluscalculator gebruiken 59–65
- handmatig berekend 65–67
- instelling 115
- invoeren, eenheden insuline 65–67
- op basis van bloedglucose 59
- op basis van KH 59–65
- vervangen 70
- voortgang 68
- Boot-modus 191
- Boot-modus selecteren 191
- bovengrens, BG-doelbereik 113

C

- calculator voor voorgestelde bolus.
 - See* Boluscalculator
- canule 2, 50, 194
- chirurgie 190
- communicatie
 - bereik 42, 145–147
 - mislukt 130
- controleoplossing
 - in historiegegevens 172
- correctiebolus. *See* Boluscalculator
- Correctiefactor 117, 158
- correctie-IOB 158, 162
- CT-scans 190

D

- Dashboard (tabblad) 12
- datum en tijd 103–105
- diabetische ketoacidose 37, 188
- diagnostische functies
 - alarmen controleren 105
 - PDM resetten 106
- DKA. *See* diabetische ketoacidose
- door gebruiker berekende bolus.
 - See* handmatig berekende bolus
- Drempel Corrigeren boven 116, 158

Duur van de insulineactie
instelling 118
voorbeeldberekeningen 162–163

E

E100-insuline xiii
eerste keer PDM instellen 21
eerste PDM-instelling 21–36
elektrische storing 138
elektrische veiligheid 201
elektromagnetische compatibiliteit
201

G

gebruikers-ID. *See* PIN
gegevens. *See* historiegegevens
gegevensinvoer, hoe te 5
geluid of trillen 122
gemiste bolus.
instelling 109
kennisgeving 129
geschatte bolus 98
getallen invoeren 5
getallen, invoeren 5
geur van insuline 51
gevallen PDM 139
gevarenalarmen 124–126
gevoeligheidsfactor. *See* Correctiefac-
tor
glucagonset 177, 182

H

handmatig berekende bolus 65–67
handmatige invoer BG-waarde 53
helderheid, scherm 102
herinneringen. *See also* kennisgevin-
gen
Aangepast 111
Bevestiging 111
Programma 111, 129
historiegegevens
alarmen 89
bloedglucose 93–100
en datumwijziging 100
en tijdwijziging 100

insuline, basaal en bolus 93–100
kennisgevingen 89
KH 93–100

Home-scherf 11
hyperglykemie 184–187
behandelen 185
symptomen 185
voorkomen 185
hypoglykemie 181–185
behandelen 182
niet merken van 148
symptomen 181
voorkomen 182

I

I/KH-verhouding 117, 158
Indicaties voor gebruik xii
infusieplaats
infecties voorkomen 51
inspectie 50
richtlijnen voor selecteren 44
voorbereiden 47
instellingen
aangepaste herinneringen 111
afbeelding vergrendelscherf 102
alle PDM 101–118
Basaalprogramma 79
Bereik BG-doel 113
bericht vergrendelscherf 102
bevestigingsherinneringen 111
BG controleren na bolus 109
Boluscalculator 115–118
configuratie verlengde bolus 115
Correctiefactor 117
Corrigeren boven 116
datum 103
Duur van de insulineactie 118
helderheid scherm 102
I/KH-verhouding 117
kennisgeving over gemiste bolus
109
Maximale basaalsnelheid 114
Maximale bolus 115
Minimale BG voor berekeningen
117, 159

PDM resetten 106
PIN 103
plaatsoverzicht voor Pod 107
programmaherinneringen 111
reservoir bijna leeg 108
samenvatting 192
Streefwaarde voor BG 116
Tegenovergestelde correctie 118
tijd 104–105
tijdelijke basaalsnelheid 114
time-out scherm 102
Uiterste gebruiksdatum Pod 107
vliegtuigmodus 101
vooringestelde bolus 85
vooringestelde tijdelijke basaalsnelheid 83
instelling Maximale basaalsnelheid 114
instelling percentage
instelling wijzigen 115
tijdelijke basaalsnelheid 151
instelling vaste snelheid (E/u)
instelling wijzigen 114
tijdelijke basaalsnelheid 151
insuline
bewaren 135
historiegegevens 93–100
onderbreken en hervatten 76
restant in Pod 9
schema. *See* Basaalprogramma
snelwerkend versus langwerkend 188
vrijgeven voor gebruik xiii
vulsput 41
insulineactie. *See* Duur van de insulineactie
insuline 'on board' 158, 162–165
insulinetoediening hervatten 76, 127
insulinetoediening onderbreken 76, 154
Interactie, PDM en Pod 145–149
IOB. *See* insuline 'on board'

K

kaart met Pod-plaatsen
gebruiken 45
instelling 107
kennisgevingen 128–129
aangepaste herinnering 129
BG 128
Geen Pod 128
gemiste bolus. 129
historiegegevens 89
overzicht 119
reageren op 120
Uiterste gebruiksdatum Pod 128
ketoacidose. *See* diabetische ketoacidose
ketonen 188
KH-insuline-verhouding. *See* I/KH-verhouding
kiezen van plaats, Pod 44
kleefstrip 2, 37, 48
klok, 12- of 24-uursnotatie 26, 103
koolhydraatbolus. *See* Boluscalculator
kort overzicht van navigatie 8

L

labels, BG 55
lichaamsbeweging 190
lichamelijke inspanning 190
lopende bolus, wijzigen 69
luchtbelletjes 42

M

maaltijdbolus. *See* Boluscalculator
maaltijd-IOB 156, 162
magnetrons 138
Maximale bolus
begrijpen 157
instelling 115
maximale hoeveelheid insuline 41
Menu 17–19
Minimale BG voor berekeningen 117, 159
minimale hoeveelheid insuline 41
mobiele telefoons 190

modelnummer, PDM xi
MRI's 190

N

nauwkeurigheid basaalsnelheid 195
navigatie in het kort 8
niet-bevestigde bolus 98
nieuw
 Basaalprogramma 79
 vooringestelde bolus 86
 vooringestelde tijdelijke basaalsnel-
 heid 83
noodset 178

O

ondergrens, BG-doelbereik 113
onmiddellijke bolus. *See* bolus, on-
 middellijk
ontgrendelen PDM 10
ontsteking, infusieplaats 51, 175
opstarten PDM
 probleemoplossing 191
overschakelen op ander basaalpro-
 gramma 75

P

PDM

bewaren 137
diagram 3
elektrische storing 138
en water 138
gevallen of beschadigd 139
instellen 21–36
instellingen 101–116, 101–118
modelnummer xi
ontgrendelen 10
resetten 106
serienummer 19
specificaties 195
time-out scherm 102
vervanging 139
zorgdragen 137
PDM-batterij
 alarm 127
 bijna leeg 127

hoe opladen 142
opladen 22
plaatsen 143
vervangen 143

PDM-batterij opladen 22, 140, 142

PDM bewaren
 locatie 137
 specificaties 195

PIN

invoer 10
resetten 103
vergeten 11

plaatsoverzicht voor Pod 45, 107

Pod

activering 37–52, 145
afvoeren 147
Auto-uit 108, 148
basaalsnelheid 194
bewaren 135
deactivering 38
diagram 2
instellen 37–52
juiste Pod aangeven 40
kennisgeving over uiterste gebruiks-
 datum 128
kiezen van plaats 44, 48
reservoir bijna leeg, instelling 108
richting 48
schoonmaken 136
specificaties 194
status controleren 146
stroomnauwkeurigheid 195
uiterste gebruiksdatum, instelling
 107
veiligheidscontroles xv
vervangen 37–52
vullen met insuline 42
wijzigen 37–52
zorgdragen 135

Pod bewaren

locatie 135
specificaties 194

Pod deactiveren 38

Pod-info (tabblad) 12

Pod weggooien 132, 147

Probleemoplossing, opstarten PDM 191
Productondersteuning. *See* Klanten-service
programmaherinnering, instelling 111

R

reizen 179–180
reservoir bijna leeg
 waarschuwingssalarm 126
reservoir bijna leeg, instelling 108
reservoir, Pod
 vullen 42
 waarschuwingssalarm voor bijna leeg, instelling 108
richting, Pod 48
röntgenstralen 179, 190

S

scherm
 bescherming 4
 gevoeligheid 4
 helderheid 102
 Home-scherm 11
 time-out 102
schoonmaken
 PDM 139
 Pod 136
serienummer, PDM 19
snelwerkende insuline xiii, 188
specificaties, technisch
 PDM 195
 Pod 194
sport 190
sporten 190
spuit, vullen 41
standaardinstellingen 192
statusbalk 9
statuscontrole, Pod 146
Streefwaarde voor BG 116, 158–174
symbolen op labels 197

symptomen
 DKA 188
 hyperglykemie 185
 hypoglykemie 181

T

Tegenovergestelde correctie 118, 159, 163
tekst invoeren 5
tekst, invoeren 5
temperatuur
 insuline 41, 135
 PDM bewaren 137, 195
 Pod 41, 194
tijdelijke basaalsnelheid
 activeren 72
 annuleren 74
 begrijpen 151–155
 instellen op nul 73, 154
 instelling 114
 maken 71
Tijdelijke basaalsnelheid (tabblad) 13
tijd- en datuminstellingen 103–105
time-out, PDM-scherm 102
touchscreen 4
 gevoeligheid 4
 helderheid 102
 time-out 102
trillen of geluid
 gevaaralarmeren 122
 kennisgevingen 123
 waarschuwingssalarmen 122

U

uiterste gebruiksdatum, Pod 107, 128
USB-kabel 138

V

vakantie 179
Veilige modus 191
veiligheid
 automatische controles xv, 43
 elektrisch 201
veiligheidscontroles op luchthavens 179

vergeten PIN 11
 Vergrendelscherm
 achtergrond 102
 bericht 10, 102
 ontgrendelen 10
 verhouding insuline/KH. *See* I/
 KH-verhouding
 verlengde bolus
 annuleren 69
 begrijpen 155
 handmatig berekend 66
 instelling 114, 115
 met boluscalculator 63
 vervangen 70
 voortgang 68
 verstopping
 alarm 124
 detectie 196
 voorkomen 49
 vervangende PDM
 bestellen 139
 instellen 21
 vliegtuigmodus, instelling 101
 voedselbolus. *See* Boluscalculator
 voorbereiden van infusieplaats 47
 vooringestelde bolus
 bewerken 87
 gebruiken 66
 naam wijzigen 87
 nieuw maken 86
 verwijderen 87
 vooringestelde tijdelijke basaalsnel-
 heid
 activeren 74
 bewerken 84
 maken 83
 naam wijzigen 84
 verwijderen 85
 voorinstelling, bolus
 bewerken 87
 gebruiken 66
 maken 86
 naam wijzigen 87
 verwijderen 87
 voorinstelling, tijdelijke basaalsnel-
 heid

bewerken 84
 gebruiken 74
 maken 83
 naam wijzigen 84
 verwijderen 85
 vulspuit, insuline 41

W

waarschuwingsalarmen 126–127
 water
 en de PDM 138
 en de Pod 136
 wijzigen
 Basaalprogramma 75
 Pod 37–52

Z

ziekenhuisopname 190
 ziekte 189
 ziektedagen 189
 zorgdragen
 infusieplaats 51
 PDM 137
 Pod 135
 zwemmen 136

Mijn PDM-instellingen

Gebruik deze pagina's om uw belangrijke PDM-instellingen bij te houden. Vergeet niet uw informatie bij te werken als u PDM-instellingen wijzigt of toevoegt.

Basaalprogramma 1

[illegible]

Basaalprogramma 2

[illegible]

Basaalprogramma 3

[illegible]

Basaalprogramma 4

[illegible]

Streefwaarde voor BG

[illegible]

[illegible]

Duur van de insulineactie

Tijd dat insuline 'actief' blijft in het lichaam na een bolus uur

Voorinstellingen voor tijdelijke basaalsnelheden

[illegible]

Vooringestelde bolussen

[illegible]

Favoriete voedingsmiddelen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Insulet Corporation

100 Nagog Park
Acton, MA 01720

1-800-591-3455 | 1-978-600-7850

Insulet Netherlands B.V.

Schiphol Boulevard 359 D Tower, 11t
Schiphol, 1118BJ NETHERLANDS

omnipod.com



Pod getoond zonder de benodigde lijm.

**UK
CA
0086**



CE
2797



PT-000002-NLD-NLD-MM